

Mesa

CHAMELEON



**Manual
de usuario**

WEX

Advertencias y precauciones

ATENCIÓN!
LEER MANUAL
ANTES DE USAR

Uso general y supervisión

- Antes de usar el producto, lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras referencias.
- El uso incorrecto de este producto puede causar lesiones graves al usuario.
- El producto no debe ser utilizado sin supervisión.
- La persona acompañante o cuidador debe estar debidamente entrenada para su correcto manejo.
- No utilice el producto para fines distintos a los especificados en este manual.
- No use el producto si se encuentra dañado, incompleto o presenta fallas; deje de usarlo de inmediato y contacte con su distribuidor local.

Seguridad del usuario y estabilidad

- Asegúrese de la estabilidad del producto y correcto funcionamiento antes de colocar al usuario o de integrarlo a otro equipo.
- Ajuste el producto según las medidas y necesidades del paciente.
- Si el usuario presenta movimientos involuntarios verifique y ajuste con mayor frecuencia las sujeciones.

- No realice ajustes mientras la persona esté apoyada o en bipedestación.
- Evite que las piezas móviles puedan apresar partes del cuerpo durante los ajustes.
- No usar el producto como punto de apoyo para levantarse, sentarse o transferirse, ya que puede provocar desplazamientos o vuelcos.
- Luego de cada ajuste, asegúrese de reapretar firmemente tornillos, perillas y fijaciones.
- No cuelgue ni apoye objetos pesados o contundentes sobre el producto.
- No golpear, flexar, rayar ni dejar caer el producto.
- El producto debe estar correctamente posicionado y sujeto mediante sus anclajes antes de cada uso.

Compatibilidad e instalación

- Antes de instalar, confirme que la geometría y resistencia del apoyabrazos o estructura del equipo ortopédico sean compatibles.
- No instale ni use en apoyabrazos rotos, agrietados, no diseñados para accesorios o en equipos no certificados.



Advertencias y precauciones

ATENCIÓN!
LEER MANUAL
ANTES DE USAR

- Verifique que el producto no interfiera con frenos, ruedas, palancas o mecanismos de seguridad.
- No está diseñada para levantar, transferir o contener a personas ni para soportar cargas dinámicas.
- No instale ni utilice el producto como elemento de retención o seguridad durante el transporte en vehículos.
- Solo utilice accesorios y partes originales provistos por WEX para garantizar la seguridad del usuario.
- No utilice limpiadores abrasivos ni agentes químicos.
- Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de usarlo nuevamente.
- Realice una inspección visual antes de cada uso para detectar piezas dañadas, faltantes o con mal funcionamiento.
- Inspeccione y ajuste periódicamente las fijaciones, perillas y tornillos.
- Se recomienda una revisión completa al menos una vez por año, o después de largos periodos de almacenamiento (más de 4 meses).

Condiciones ambientales

- No exponer el producto al sol directo, fuentes de calor, llamas, cigarrillos o calentadores.
- Evite la exposición a la intemperie, humedad extrema o temperaturas muy altas.
- No almacenar al aire libre ni en ambientes húmedos.

Limpieza y mantenimiento

- Mantenga la limpieza del producto para conservar su funcionamiento óptimo.
- Limpie regularmente con un paño húmedo y jabón o detergente, sin cloro ni vinagre concentrado.

Modificaciones y responsabilidades

- No realice cambios, alteraciones o modificaciones en la estructura o componentes del producto.
- Las modificaciones no autorizadas anulan la garantía y pueden comprometer la seguridad.
- El fabricante no se responsabiliza por daños derivados de:



Advertencias y precauciones

ATENCIÓN!
LEER MANUAL
ANTES DE USAR

- Uso indebido o fuera de las especificaciones del manual.
- Instalación en equipos no compatibles o no certificados.
- Falta de mantenimiento o inspección periódica.
- Modificaciones no autorizadas.
- Exposición a condiciones extremas.
- Utilización del producto como elemento de apoyo corporal o de seguridad.

Es responsabilidad del usuario verificar la compatibilidad con la silla de ruedas o bipedestador y realizar pruebas de carga y estabilidad antes del uso asistido.

Materiales del producto:

Policarbonato, Poliamida, Aluminio, Acero.



Especificaciones



Largo de equipo

59,2 cm



Ancho del equipo

56,8 cm



Ancho mínimo entre apoyabrazos

24,4 cm



Ancho máximo entre apoyabrazos

51,1 cm



Altura del equipo armado

13 cm




Peso del equipo


2,38 kg



¿Cómo colocar tu Chameleon?

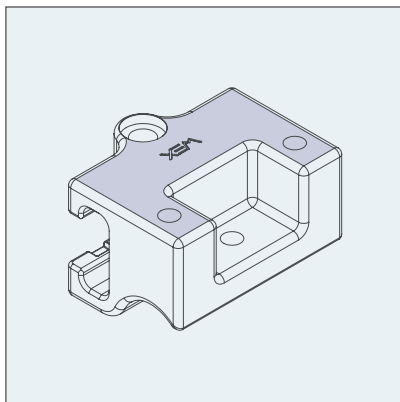

Utilizar el **lado plano** para equipos con una superficie llana.

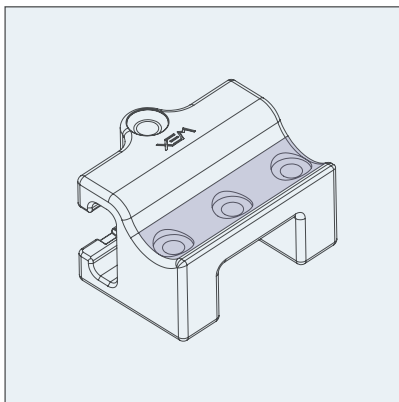


Utilizar la **pieza rotada** si el equipo cuenta con un soporte tubular.

ATENCIÓN!


El producto incluye variedad de tornillos. Utilice los necesarios para ajustarlo a su equipo.

Si el equipo no cuenta con perforaciones, y es un material apto, debe generarlas o utilizar los tornillos autoperforantes que incluye la bolsa de tornillería.

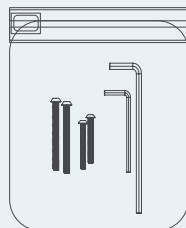


¿Cómo regular tu Chameleon?


- ① Posicionar y ajustar la pieza vínculo al apoyabrazos o estructura utilizada para sostener la mesa.

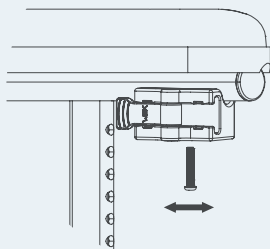


- ② Desajustar la perilla y colocar los brazos por dentro de la pieza estriada. Ajustar nuevamente la perilla en el ángulo deseado.

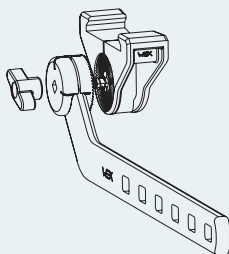

- ③ Colocar el conjunto en la guía de la mesa. Ubicarlo al mismo ancho que las piezas puestas en el equipo ortopédico.

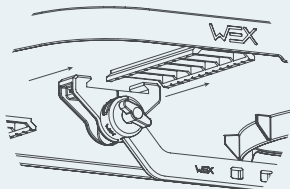

- ④ Ajustar el tornillo con la llave Allen.

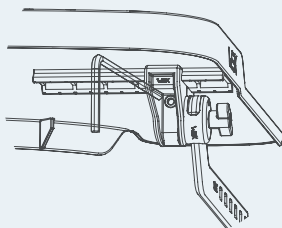


Accesorio opcional Tope humeral

¿Cómo colocarlo?



- ① Ubicar las correas y piezas triangulares en la posición adecuada para el paciente.

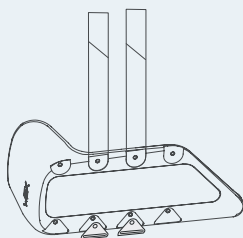


- ② Colocar y acomodar el tope humeral según necesidad.



Accesorio opcional

Tope humeral

- ③ Ajustar las correas con abrojo por debajo de la mesa. De ser necesario, ajustar una de las correas por encima.

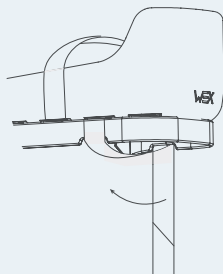

CHAMELEON | WEX