

FREELI

Silla de ruedas eléctrica pediátrica

Instrucciones de uso



Referencia del documento: FRE-002 Versión 3.0

ELI INNOVACIÓN
CE | Hecho en Francia

Contenido

Contenido.....	2
1. Identificación del producto.....	3
2. Cómo leer este manual.....	3
3. Bienvenidos e información importante sobre seguridad.....	4
4. Descubra FREELI.....	5
5. Presupuesto.....	7
6. Recopilación.....	8
7. Usar FREELI todos los días.....	9
8. Ajuste del asiento, reposacabezas, reposabrazos y reposapiés.....	10
9. Ruedas y frenos.....	13
10. Batería y carga.....	14
11. Joystick.....	15
12. Uso de FREELI cerca de otros dispositivos.....	16
13. Transporte.....	17
14. Limpieza y mantenimiento.....	18
15. En caso de problemas.....	20
16. Garantía y contacto.....	21

Nombre del producto	FREELI
Tipo/modelo	MOLINO
Productor	ELI INNOVACIÓN
DIRECCIÓN	73 route de Corbas, 69200 VENISSIEUX FRANCIA
Página principal	www.eliinnovation.com
Etiquetado	CE – Dispositivo médico

1. Identificación del producto

Uso previsto

FREELI es una silla de ruedas eléctrica diseñada para niños a partir de 18 meses, con un peso máximo de usuario de 26 kg. Está pensada para su uso en interiores sobre superficies planas y estables, y proporciona movilidad independiente a niños con dificultades para caminar.

Acerca de este manual

Este manual está dirigido a padres, cuidadores y profesionales de la salud que atienden al niño. Léalo atentamente antes del primer uso y guárdelo para futuras consultas.

La versión digital de este manual está disponible en www.eliinnovation.com. Se incluye una copia impresa en el idioma local con cada silla de ruedas nueva.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios técnicos sin previo aviso. Para obtener la versión más reciente, consulte el sitio web del fabricante.

Normas y cumplimiento

FREELI cumple con la norma EN 12184:2022 (uso en interiores) y con las normas aplicables de compatibilidad electromagnética. La declaración de conformidad completa está disponible a través de su distribuidor o en www.eliinnovation.com.

2. Cómo leer este manual

A lo largo de este manual, los siguientes recuadros resaltados se utilizan para alertarle sobre información importante.

ADVERTENCIA: Situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones personales graves.

PRECAUCIÓN Situación que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o daños al producto.

NOTA: Información útil para ayudarte a sacar el máximo provecho de tu FREELI.

CONSEJOS Consejos prácticos para el uso diario, el ajuste o el mantenimiento.

FREELI y su embalaje también incluyen símbolos. Los más importantes significan: consulte las instrucciones antes de usar y peso máximo del usuario: 26 kg.

3. Bienvenida e información importante sobre seguridad.

Bienvenido/a y gracias por elegir FREELI.

FREELI es más que una silla de ruedas. Está diseñada para que tu hijo/a tenga la libertad de explorar el mundo a su manera, desde muy temprana edad. La movilidad independiente es fundamental para el desarrollo infantil, y nos enorgullece acompañarte en este camino.

Lea atentamente esta sección antes de empezar a usar FREELI. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor o profesional sanitario.

advertencias de seguridad

ADVERTENCIA: Se requiere la supervisión de un adulto.

FREELI debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un adulto que esté preparado para intervenir en caso de peligro. Esto se aplica en todo momento, independientemente de la familiaridad del niño con la silla de ruedas.

ADVERTENCIA: Asesoramiento profesional

Antes del primer uso, pida a un profesional de la salud o a un vendedor capacitado que le muestre cómo usarlo de forma segura. Le ayudarán a elegir la posición óptima del asiento, la ubicación del joystick y los ajustes necesarios para su hijo.

ADVERTENCIA: No modifique el producto.

No modifique FREELI de ninguna manera sin la autorización previa por escrito del fabricante.

Las modificaciones no autorizadas pueden tener graves consecuencias para la seguridad y anularán la garantía.

ADVERTENCIA: Contiene piezas pequeñas.

Algunas piezas se pueden desmontar sin herramientas. Estas piezas pequeñas representan un peligro de asfixia. Manténgalas fuera del alcance de los niños pequeños cuando no estén montadas en la silla de ruedas.

No utilice FREELI si...

Deje de usar FREELI y póngase en contacto con su distribuidor si observa alguno de los siguientes problemas:

- Partes de la silla de ruedas parecen deformadas, agrietadas o rotas.
- Ruidos, vibraciones u olores inusuales, especialmente provenientes de la batería o del área del motor.
- La silla de ruedas no responde al joystick como se esperaba.
- La batería está dañada, hinchada, tiene fugas o presenta alguna anomalía.
- Usted cree que el uso supone un riesgo para el usuario o para las personas cercanas.

Ten cuidado con FREELI

FREELI es una silla de ruedas de perfil bajo. Esto es intencional, ya que coloca a su hijo a la misma altura que sus compañeros, pero implica que debe estar al tanto de ciertos riesgos:

- Esquinas, puntos de pellizco y zonas de aplastamiento: revise el entorno con regularidad.
- Distancia de altura: el niño se sienta a una altura baja; tenga cuidado con los objetos bajos, como los bordes de las mesas y estantes
- Otros niños: mantenga a los bebés que gatean, a los niños pequeños y a los compañeros de juego alejados de las ruedas y el reposapiés
- Mascotas: tome precauciones adicionales cuando haya animales presentes.

Notificación de incidentes

Cualquier incidente grave relacionado con FREELI debe ser comunicado a su distribuidor y a la autoridad competente de su país.

4. Experimenta FREELI

FREELI es una silla de ruedas eléctrica especialmente diseñada para niños pequeños con dificultades para caminar. Proporciona una movilidad segura e independiente desde una edad temprana y favorece el desarrollo, la autoconfianza y la inclusión social del niño.

FREELI está diseñado para niños a partir de 18 meses de edad con un peso máximo de usuario de 26 kg. Estas cifras son valores orientativos; la idoneidad depende de la estatura, el peso y la postura del niño. Recomendamos consultar con un profesional sanitario para confirmar que FREELI es adecuado para su hijo.

FREELI está diseñado para uso en interiores sobre superficies estables y planas, así como en pendientes suaves: en casa, en la guardería, en la escuela y en entornos cotidianos similares. Está diseñado para transportar a un niño a la vez.

NOTA: Crece con su hijo.

FREELI está diseñada para adaptarse al crecimiento de su hijo. El asiento, el respaldo, el reposacabezas, los reposabrazos y el reposapiés son ajustables, por lo que la silla de ruedas se puede usar durante varios años.

Descripción general



1	Reposacabezas
2	Respaldo
3	Joystick (unidad de control)
4	Reposapiés
5	Control del asistente (opcional)
6	Brazo
7	Batería
8	Rueda motriz

Personalización

FREELI se puede personalizar mediante una variedad de opciones y accesorios, que se enumeran en el formulario de pedido y en el catálogo de accesorios disponible en su distribuidor.

ADVERTENCIA: Accesorios de terceros

Si se utilizan accesorios de otros fabricantes con FREELI, deben cumplirse todas las instrucciones de seguridad y los requisitos legales aplicables. ELI INNOVATION no se hace responsable.

por las consecuencias derivadas de dispositivos o accesorios que no forman parte de su sistema modular.

NOTA: Inspecciones periódicas

Recomendamos revisar la configuración y el estado de la silla de ruedas al menos una vez cada 6 meses para garantizar un ajuste óptimo y seguro a medida que su hijo crece.

5. Especificaciones

Edad esperada del usuario	A partir de los 18 meses
Peso máximo del usuario	26 kg
Longitud total	650 mm
Ancho total	580 mm
Peso total (con batería)	40 kg
Peso total (sin batería)	30 kg
Velocidad máxima	6 km/h
Autonomía (por carga completa)	Hasta 25 km
Tipo de vehículo	Tracción delantera
Ancho del asiento	Hasta 300 mm
Profundidad del asiento	160–350 mm
Altura del asiento	350 mm / 450 mm
Reposapiés para el asiento	180–400 mm
Ángulo de inclinación del respaldo:	90–100°
Inclinación del asiento	0–15°
Cubierta	Neumáticos macizos antipinchazos
Batería	Batería recargable de LiFePO ₄ , 25,6 V / 20 Ah / 512 Wh
Temperatura de funcionamiento	+5°C a +40°C
Temperatura de almacenamiento	De 10 °C a +45 °C

6. Colección

FREELI se entrega parcialmente desmontado para su transporte. Siga los pasos que se indican a continuación para montarlo antes del primer uso.

NOTA


En www.eliinnovation.com encontrará un vídeo que muestra todo el proceso de montaje.

Antes de empezar

Desembala FREELI y todos sus componentes. Comprueba con el albarán de entrega que no falte nada ni haya daños. Si falta algo o hay algún daño, ponte en contacto con tu distribuidor antes del montaje.

Pasos de recolección

1. Levantar el asiento: Levante el asiento tirando de las asas situadas a cada lado.
2. Reposacabezas: Instale el reposacabezas en el respaldo y apriete los tornillos de mano.
3. Cúñas de la carrocería: instale las cúñas de soporte de la carrocería deslizándolas sobre el tornillo manual en la parte posterior del respaldo.
4. Reposabrazos: Instale los reposabrazos sobre las cúñas de soporte del cuerpo y apriete los tornillos de mano.
5. Joystick: Monte el joystick debajo del reposabrazos (lado derecho o izquierdo, según sea necesario) utilizando el tornillo de mariposa suministrado. Es importante asegurarse de que los cables estén correctamente insertados y sujetos.
6. Batería: Deslice con cuidado la batería en el soporte, presiónela para conectar el conector del cable y asegúralo con la correa de sujeción.
7. Control de seguimiento (opcional): si se incluye un control de seguimiento, conéctelo como se describe en sus propias instrucciones.

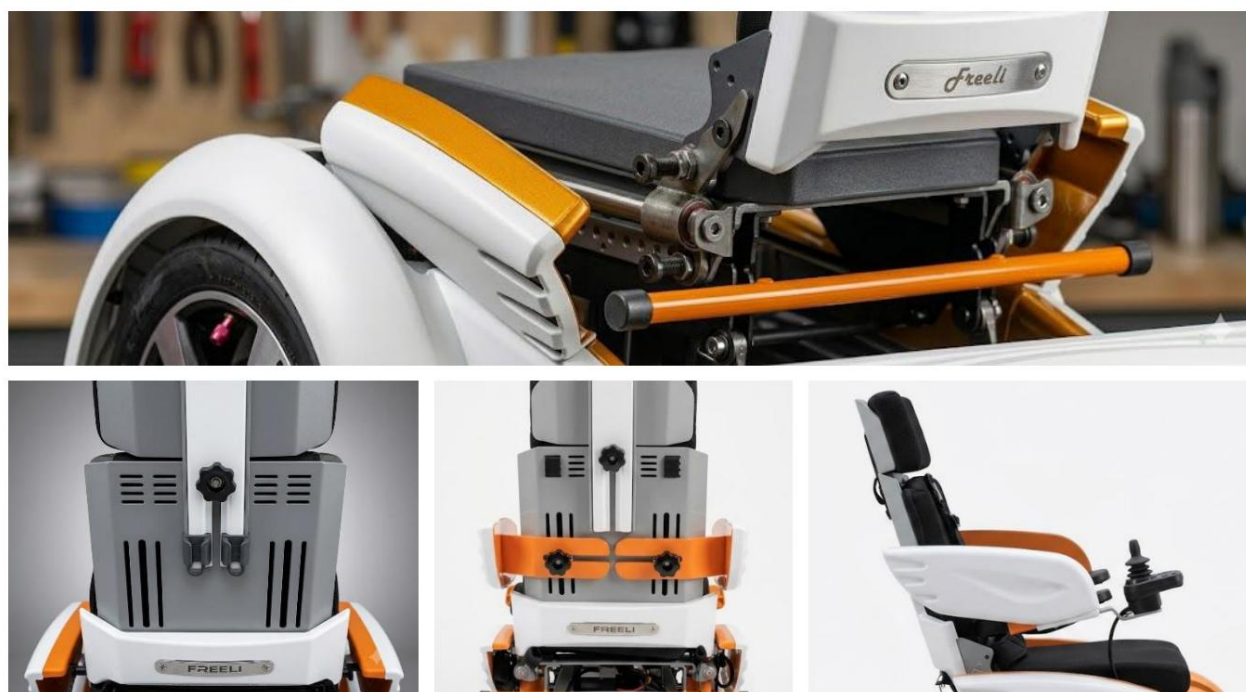

ADVERTENCIA: Después del montaje y antes del primer uso por parte de un niño, compruebe que todos los tornillos de mano y los tornillos de mariposa estén bien apretados y que todos los componentes estén firmemente colocados.

ADVERTENCIA: No coloque a un niño en FREELI hasta que el montaje esté completamente terminado y comprobado.

7. Usar FREELI todos los días

Esta sección explica cómo usar FREELI de forma segura en entornos cotidianos. Léala junto con la información de seguridad de la sección 3.

Entorno operativo

FREELI está diseñado para uso en interiores sobre superficies firmes, estables y niveladas: en el hogar, guarderías, escuelas y entornos similares. Úselo únicamente sobre terreno firme y con ligeras pendientes.

ADVERTENCIA – Pendientes

No conduzca por pendientes superiores a 5°. En una pendiente demasiado pronunciada, el FREELI podría resbalar o volcar. En cualquier pendiente, reduzca la velocidad; la distancia de frenado es considerablemente mayor que en terreno llano.

ADVERTENCIA: Bordillos y escaleras

No conduzca sobre bordillos ni por escaleras. Utilice siempre las rampas disponibles.

El acompañante debe tomar el control en cualquier situación que suponga un peligro evidente, como senderos estrechos, el borde de la carretera, el agua o las escaleras.

Velocidad

Elige la velocidad según la habilidad de tu hijo y el entorno. Si usas el Freeli en interiores o en espacios reducidos, puedes utilizarlo a velocidad baja para que le resulte más fácil sortear obstáculos. Si el entorno lo permite, puedes usar una velocidad mayor.

FREELI se detiene en cuanto se suelta el joystick.

CONSEJOS – Parada de emergencia

Para desactivar FREELI de inmediato, la forma más rápida es simplemente retirar la mano del niño del joystick. La silla de ruedas también se puede apagar mediante el botón de encendido/apagado del joystick.

Clima y superficies

FREELI está diseñado para uso en interiores y debe protegerse del agua y de temperaturas extremas.

PRECAUCIÓN

No utilice FREELI bajo la lluvia ni lo deje al aire libre en días lluviosos.

No conduzca a través de charcos.

Las partes que entran en contacto con el niño pueden calentarse o enfriarse cerca de fuentes de calor o frío, o bajo la luz solar directa. Compruébelo antes de sentar al niño en la silla.

Cruzar una carretera

Al cruzar una calle, el acompañante debe tener el control total de la silla de ruedas, ya sea utilizando los controles del acompañante o cambiando al modo de rueda libre para empujar la silla de ruedas manualmente (véase la sección 9).

Otros niños y mascotas

- Vigila a los demás niños cerca de FREELI para evitar colisiones o que se pillen las manos o los pies. Ten especial cuidado con los bebés que gatean y los niños pequeños.
- No permita que otros niños gateen o trepen en el FREELI.
- Tome precauciones adicionales cuando haya mascotas presentes.

Antes y durante su uso, revise el área alrededor de FREELI para detectar posibles peligros: esquinas, puntos de atrapamiento, caídas y riesgo de aplastamiento. Dado que FREELI es de baja altura, preste especial atención al espacio libre por encima de la cabeza del niño.

8. Ajuste del asiento, el reposacabezas, el reposabrazos y el reposapiés.

FREELI está diseñado para adaptarse al tamaño y la postura de su hijo, y para crecer con él a lo largo de varios años.

ADVERTENCIA: Nunca realice ajustes con el niño sentado.

Nunca ajuste la posición del asiento mientras el niño esté sentado en la silla de ruedas, ya que existe riesgo de que quede atrapado y se lesione. Las únicas excepciones son los reposabrazos y los soportes para el cuerpo, que pueden ajustarse con precaución mientras el niño está sentado.

CONSEJO

Recomendamos consultar con un profesional de la salud para determinar la postura óptima para sentarse. La postura correcta ayuda al niño a sentirse seguro, protegido y con control.

El asiento

Para la seguridad de su hijo, utilice siempre el cinturón y el arnés proporcionados. Ajuste las correas para que queden bien sujetas. Si tiene alguna duda, consulte con su médico o con el vendedor.

Profundidad del asiento: tire de las manijas a cada lado del asiento, abra las alas laterales, deslice el asiento hasta la posición deseada y suelte las manijas en los orificios correspondientes.



Inclinación del asiento: utilice las manijas ubicadas en la parte posterior, en cada extremo de la silla. Para bajar la inclinación, tire del asiento hacia arriba. Para subirla, sujete el asiento y tire de una de las manijas hacia atrás, luego suéltela.

Ángulo del respaldo: tire de las asas a cada lado del asiento, incline el respaldo a la posición deseada y suelte las asas en los orificios correspondientes. El respaldo también se puede abatir utilizando el orificio frontal.



CONSEJO

Controla cuánto tiempo usa el niño la silla FREELI y ajusta el asiento regularmente para su comodidad y postura.


El reposacabezas

Ajusta la altura del reposacabezas aflojando el tornillo negro (gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj). Ajusta la altura deseada y vuelve a apretar el tornillo.



Los reposabrazos y los soportes corporales

Los reposabrazos y las cuñas de soporte corporal se fijan con tornillos de mariposa y se deslizan a lo largo de los rieles. Ajuste su altura y anchura aflojando ligeramente los tornillos de mariposa, deslizándolos hasta la muesca deseada y volviéndolos a apretar.

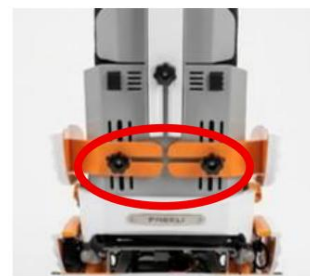

PRECAUCIÓN: Si ajusta los reposabrazos o los soportes corporales mientras el niño está sentado en el asiento, hágalo con mucho cuidado para evitar pellizcarlo o golpearlo.

El reposapiés

Asegúrese de que los pies del niño estén bien colocados en el reposapiés. Si los pies están hacia adelante o hacia los lados, pueden lesionarse. El reposapiés puede incluir correas para sujetar los pies del niño. Se puede colocar antes o después de que el niño se siente en la silla.

Altura del reposapiés: colóquese frente a la silla, tire del reposapiés hacia usted, muévelo hacia arriba o hacia abajo y empújelo hasta la muesca correspondiente a la altura deseada.



ADVERTENCIA: Tenga en cuenta el riesgo de lesiones si un niño intenta subirse al reposapiés.

9. Ruedas y frenos

FREELI está equipado con neumáticos macizos a prueba de pinchazos, que nunca necesitan inflarse.

FREELI tiene tracción delantera.

Modo de frenado y desconexión

Cada rueda motriz tiene un mecanismo de bloqueo que actúa como freno. El mecanismo del motor tiene dos posiciones:

- Modo vehículo: la manivela está activada. FREELI se frena cuando está parado y puede conducirse. Este es el modo de funcionamiento normal.
- Modo de liberación: el mango está desacoplado. FREELI no tiene frenado activo y puede empujado manualmente.

Las palancas de liberación mecánica están ubicadas entre el reposapiés y las ruedas.

Utilizando el modo de liberación

El modo de liberación se utiliza para mover FREELI manualmente: para transportarlo, cruzar una calle o si la batería está descargada. Para activar el modo de liberación, suelte ambas palancas de liberación. Para volver al modo vehículo, active ambas palancas.

ADVERTENCIA: No hay frenado en modo desactivado.

En modo desactivado, FREELI no dispone de frenado activo. Mantenga siempre el control de la silla de ruedas cuando los manillares estén desactivados, especialmente si el niño está sentado en el asiento.

ADVERTENCIA: Vuelva a aplicar los frenos.

Asegúrese siempre de que ambos mandos estén activados (modo vehículo) cuando FREELI esté parado o desatendido. Nunca deje FREELI desactivado en una pendiente.

ADVERTENCIA: Nunca utilice el modo de rueda libre para dejar que el FREELI ruede cuesta abajo. Esto es extremadamente peligroso.

PRECAUCIÓN: No tire ni empuje de FREELI mientras esté en modo vehículo. Cambie siempre primero al modo de rueda libre.

10. Batería y carga

FREELI funciona con una batería recargable de LiFePO4. Solo el personal autorizado por el fabricante puede modificar o reemplazar la batería.

Antes de cada uso

Compruebe que el nivel de carga de la batería, que se muestra en el indicador del joystick, sea suficiente para el uso previsto.

Extracción y reinstalación de la batería

La batería se puede extraer, por ejemplo, para transportarla. Para extraerla, afloje la correa de sujeción y empuje la batería hacia usted con la ayuda del asa; tenga cuidado de no dejarla caer. Para volver a colocarla, insértela suavemente en el soporte, presiónela para activar el conector del cable y sujétela con la correa.

Carga FREELI

1. Asegúrese de que el interruptor principal esté apagado.
2. Inserte el conector del cable del cargador en el puerto de carga situado en la parte frontal del joystick.
3. Enchufe el cargador a la toma de corriente y enciéndalo.
4. Durante la carga, el indicador luminoso del joystick parpadeará secuencialmente. FREELI no se puede operar durante cargando.
5. Cuando la carga esté completa, apague y desenchufe el cargador de la toma de corriente, y luego desconecte el cable del joystick.

CONSEJO – Rutina de carga

Una carga completa tarda aproximadamente [X] horas.

Si FREELI se usa a diario, deberá cargarlo diariamente.

No deje la batería cargando durante períodos prolongados una vez que esté completamente cargada.

Si FREELI no se utiliza durante un período prolongado, la batería debe recargarse con regularidad. Evite guardarla completamente descargada o completamente cargada durante largos períodos.

Utilizar el cargador de forma segura

- Utilice únicamente el cargador proporcionado por el fabricante.
- Compruebe que la tensión indicada en la placa de características se corresponde con la tensión de la red eléctrica de su país.
- Mantenga el cargador seco y límpielo únicamente con un paño seco. Evite el sobrecalentamiento de él.

ADVERTENCIA: Seguridad de la batería y el cargador

Nunca utilice una batería dañada, hinchada o con fugas. Deje de usarla inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor.

Nunca utilice un cargador que crea que está dañado.

Apague siempre el interruptor principal antes de conectar o desconectar el cargador.

Nunca conduzcas el FREELI mientras se está cargando.

Cargue la batería únicamente a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +40 °C. Cargarla a temperaturas inferiores a 0 °C puede dañarla permanentemente.

ADVERTENCIA – Eliminación

La batería no debe desecharse con la basura doméstica. Debe recogerse por separado para su reciclaje. Póngase en contacto con su distribuidor.

11. Joystick

El joystick es el control del niño. Proporciona un control proporcional: la velocidad es proporcional a la distancia que se empuja el joystick, dentro de los límites de velocidad definidos.

El joystick se puede montar en el reposabrazos derecho o izquierdo mediante el tornillo situado debajo del mismo. Asegúrese de que todos los cables estén correctamente insertados y sujetos.



Encendido

Enciende FREELI usando el interruptor del joystick.

Ajustando la velocidad

La velocidad se ajusta con los dos botones inferiores. Las luces en el centro del joystick indican la velocidad actual: cuantas más luces estén encendidas, mayor será la velocidad. Use el botón inferior izquierdo para disminuir la velocidad y el botón inferior derecho para aumentarla.

Conduciendo

FREELI se mueve en la dirección en que se empuja el joystick, a una velocidad proporcional a la distancia que se empuja. Se detiene en cuanto se suelta el joystick.

NOTA

Seleccione la velocidad adecuada según la habilidad del niño y el entorno. Comience con una velocidad baja para quienes se inician en la bicicleta.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el joystick esté al alcance del niño y que este pueda soltarlo fácilmente. La forma más rápida de detener FREELI en caso de emergencia es quitarle la mano al niño del joystick.

CONSEJO

Un profesional sanitario puede aconsejarle sobre la posición y la configuración del joystick más adecuadas para su hijo.

12. Uso de FREELI cerca de otros dispositivos

FREELI cumple con las normas internacionales aplicables en materia de interferencia electromagnética (EMI).

Sin embargo, los campos electromagnéticos —como los generados por transmisores de radio y televisión y teléfonos móviles— pueden afectar el funcionamiento de FREELI. Los componentes electrónicos de FREELI también pueden generar un bajo nivel de interferencia electromagnética, dentro de los límites permitidos por la ley.

Por estos motivos, le rogamos que tome las siguientes precauciones:

- Si FREELI comienza a moverse inesperadamente, apáguelo inmediatamente.
- No encienda ni utilice transceptores portátiles ni dispositivos de comunicación (como radios de comunicación bidireccional) mientras FREELI esté activado.
- Evite acercarse a potentes transmisores de radio y televisión.
- Agregar accesorios eléctricos u otros componentes, o modificar el FREELI de cualquier manera, puede tener efectos electromagnéticos desconocidos en sus partes electrónicas.
- Tenga especial cuidado cuando FREELI esté cerca de otras sillas de ruedas eléctricas.

ADVERTENCIA

Si FREELI se mueve o frena inesperadamente, apáguelo inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor.

13. Transporte

Esta sección explica cómo transportar FREELI de forma segura, por ejemplo, en un coche.

Preparando FREELI para el transporte

- Joystick Sluk.
- Asegúrese de que las ruedas estén en la posición de conducción (palancas de liberación activadas) y no en modo de rueda libre.
- La batería se puede extraer para que FREELI sea más ligero y fácil de manejar (véase la sección 10).

Doblando el FREELI

FREELI se pliega sin herramientas para facilitar su transporte y almacenamiento. El respaldo se pliega sobre el asiento. Apague el joystick antes de plegarlo.

1. Abra las aletas laterales a ambos lados del asiento para acceder a los pistones.
2. Tire del émbolo de cada lado para liberar el respaldo. Un émbolo tiene un Bloqueo de un cuarto de vuelta: gírelo para que quede desbloqueado por sí solo, dejándole una mano libre para el siguiente paso.
3. Pliegue el respaldo hacia abajo sobre el asiento.
4. Suelte los pistones para mantener el respaldo plegado.

Para desplegar la silla, siga el procedimiento en orden inverso: tire de los pistones (y desbloquee), levante el respaldo hasta que se bloquee, suelte los pistones y cierre las alas laterales.



ADVERTENCIA

Antes de volver a usar FREELI, compruebe que el respaldo esté completamente bloqueado en posición vertical a ambos lados. Asegúrese de que los pistones estén activados y de que el respaldo no se mueva.

PRECAUCIÓN Mantenga los dedos alejados de la zona de la bisagra del respaldo durante el plegado y desplegado para evitar pillarlos.

Cómo asegurar FREELI en un vehículo

Si su vehículo dispone de un sistema de sujeción, utilícelo para fijar el FREELI en su lugar. Siga siempre las instrucciones del fabricante para el sistema de sujeción.

ADVERTENCIA – Sistemas de fijación

ELI INNOVATION no se responsabiliza de los sistemas de fijación utilizados ni de su uso. Utilice únicamente sistemas de fijación que cumplan con la normativa vigente y que estén diseñados para soportar el peso total del FREELI.

ADVERTENCIA: No transporte a un niño en el FREELI

FREELI no está diseñado ni aprobado para su uso como asiento en un vehículo. Nunca se debe transportar a un niño sentado en FREELI. El niño debe ser transportado en un asiento homologado para vehículos y FREELI debe ir sujeto por separado.

Vuelo

Si tiene previsto viajar en avión con FREELI, debe ponerse en contacto con la aerolínea con antelación.

La batería FREELI es una batería de LiFePO4 que ha superado la prueba UN 38.3 y está homologada para su transporte en aviones de pasajeros según la normativa de mercancías peligrosas de la IATA; sin embargo, las aerolíneas tienen sus propias normas, por lo que siempre conviene consultarlas antes de viajar.

14. Limpieza y mantenimiento

La limpieza y el mantenimiento regulares mantienen a FREELI seguro, cómodo y en buen estado, y prolongan su vida útil.

ADVERTENCIA: Apague siempre FREELI antes de limpiarlo o realizar cualquier tarea de mantenimiento.

Limpieza

Estructura y piezas de plástico	Limpiar con un paño húmedo y detergente suave. Evitar el uso de grandes cantidades de agua.
Fundas para asientos y respaldos	Las fundas extraíbles se pueden lavar a máquina a una temperatura mínima de 60 °C.
Arnés y correas	Lavable en la lavadora.
Cargador	Limpiar únicamente con un paño seco. No utilizar nunca agua.

PRECAUCIÓN: No utilice agua a alta presión, limpiadores a vapor, disolventes ni productos abrasivos. No sumerja ninguna parte de FREELI en agua.

chequeo regular

Le recomendamos que realice una rápida comprobación visual antes de cada uso:

- El nivel de carga de la batería es suficiente.
 - Las ruedas y los neumáticos están en buen estado.
- El joystick responde correctamente
- Sin daños visibles, piezas sueltas ni ruidos inusuales.
- El cinturón, el arnés y las correas están en buen estado y correctamente ajustados.

Además, compruebe al menos cada 6 meses que todos los tornillos manuales estén bien apretados, que los ajustes sean seguros, que los frenos y el mecanismo de rueda libre funcionen en ambos modos y que las etiquetas estén colocadas y sean legibles.

NOTA

A medida que su hijo crezca, debe aprovechar la revisión de los 6 meses para revisar y ajustar la silla de forma que se adapte perfectamente.

Almacenamiento

Guarde FREELI en interiores, en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y frío. Si no va a utilizar FREELI durante un período prolongado, cuide la batería como se describe en la sección 10.

Servicio, reparaciones y repuestos

Algunas piezas de la FREELI están diseñadas para ser reemplazadas cuando se desgastan o se dañan; por ejemplo, los neumáticos, las cubiertas y los carenados.

ADVERTENCIA

El mantenimiento, las reparaciones y la sustitución de piezas (excepto la limpieza y los ajustes rutinarios descritos en este manual) deben ser realizados por el fabricante o personal autorizado. No modifique el FREELI.

Para servicio técnico, reparaciones o para solicitar repuestos, póngase en contacto con su distribuidor.

15. En caso de un problema

Esta sección le ayudará a resolver problemas sencillos. Si el problema no se menciona aquí o persiste después de las comprobaciones sugeridas, desactive FREELI y póngase en contacto con su distribuidor.

ADVERTENCIA: No intente realizar las reparaciones usted mismo. Salvo las comprobaciones que se indican a continuación, todas las reparaciones deben ser realizadas por el fabricante o personal autorizado.

Problema	Posible causa	Qué comprobar
FREELI no se enciende	Joystick apagado / batería descargada / batería no conectada	Presione el interruptor eléctrico; cargue la batería; compruebe que la batería esté completamente activada.
FREELI no se mueve	Ruedas desconectadas / cargando / batería descargada	Active ambas palancas de liberación; retire el cargador; cargue la batería.
FREELI funciona lentamente Ajuste de	baja velocidad / batería baja	Aumenta la velocidad con el botón inferior derecho; compruebe y carga la batería.
Corto alcance	Batería no completamente cargada / envejecimiento de la batería	Cárguela completamente antes de usarla; póngase en contacto con su distribuidor para comprobar la batería.
La batería no carga	Cargador no conectado / temperatura demasiado baja	Compruebe las conexiones; cargue entre +5°C y +40°C.
El joystick no responde	FREELI se está cargando / cable suelto	Desconecte el cargador, apáguelo y póngase en contacto con su distribuidor.
Ruido u olor inusual. Posible fallo mecánico o de la batería.		Deje de usar FREELI inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor.
Batería hinchada o con fugas	Error de batería	Deténgase inmediatamente, manténgase alejado del calor, contacte a su distribuidor.

NOTA: Luz indicadora del joystick

FREELI utiliza un sistema de control nVR2. Si se produce un error, el indicador de batería del joystick parpadeará varias veces para indicar el tipo de error.

[Insertar la tabla oficial de códigos de error de nVR2; debe obtenerse del proveedor del sistema de control.]

NOTA

Cuando se ponga en contacto con su distribuidor, tenga a mano el número de serie FREELI (formato FRESXXX, que aparece en la etiqueta del producto).

16. Garantía y contacto

Garantía

Para obtener información sobre las condiciones de garantía de su FREELI, póngase en contacto con su distribuidor.

ADVERTENCIA: La modificación de FREELI sin la autorización por escrito del fabricante anulará la garantía y puede tener graves consecuencias para la seguridad.

La garantía no cubre los daños resultantes de negligencia, abuso, mal uso o incumplimiento de las instrucciones de este manual.

Responsabilidad por el uso seguro

FREELI es un dispositivo médico. Su uso seguro requiere seguir las instrucciones de este manual, utilizar FREELI únicamente para el fin previsto y garantizar la supervisión constante de un adulto en todo momento. El adulto que supervisa al niño es responsable de controlar el entorno y prevenir accidentes.

Contacto

Para consultas, servicio, reparaciones, repuestos o documentación adicional, póngase en contacto con su distribuidor. Su distribuidor también ofrece asistencia técnica telefónica de lunes a viernes.

Si no sabe quién es su distribuidor, puede encontrar su información de contacto en www.eliinnovation.com.

NOTA

La versión digital de este manual y otra documentación del producto está disponible en www.eliinnovation.com.

Productor

Productor	ELI INNOVACIÓN
DIRECCIÓN	73 route de Corbas, 69200 VENISSIEUX FRANCIA
Página principal	www.eliinnovation.com