

Grid Pad 10s

Tu guía



Soporte de Smartbox

Reino Unido: 01684 578868

EE. UU.: (844) 341-7386

thinksmartbox.com/support



Seguridad

Para obtener información sobre el uso seguro de su Grid Pad 10s, lea la Guía de seguridad y cumplimiento proporcionada con su dispositivo.

Grid **Pad** 10s

Grid **3**

Creado por

Smartbox

thinksmartbox.com

Documento: Grid Pad 10s - Guía - Reino Unido - B

Idioma: Inglés

Fecha de emisión: julio de 2021

Derechos de autor © 2021 Smartbox Tecnología de asistencia

Información útil

Su cuenta Smartbox es...

Un recordatorio de la contraseña de su cuenta
Smartbox ...

El número de modelo de su Grid Pad es...

El número de serie de su Grid Pad es...

¿Quién es responsable de su Grid Pad?

¿A quién llamar para pedir ayuda y apoyo?


¿Qué es Grid Pad 10s?

Su Grid Pad 10s es un dispositivo de acceso múltiple que ha sido diseñado específicamente para la comunicación.

Interactúa con la pantalla tocándola con los dedos.



Puede comunicarse mediante la pantalla táctil o configurando otros métodos de acceso, como interruptores o dispositivos señaladores que pueden mover un cursor en pantalla.

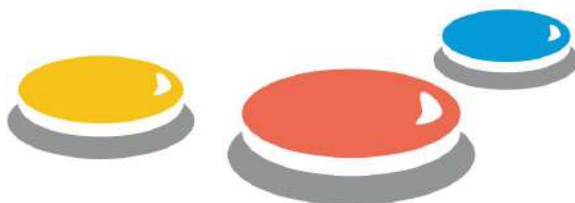



Su Grid Pad funciona con Grid 3, una aplicación AAC completa que incluye acceso instantáneo a una enorme biblioteca de conjuntos de cuadrículas.

Hay contenido para todos: desde potentes herramientas de comunicación para usuarios de texto hasta conjuntos de cuadrículas para comunicarse con símbolos y desarrollar la alfabetización.

Todo en Grid está diseñado para facilitar la construcción de oraciones, el aprendizaje del idioma y el habla.

Presentando su dispositivo



Almohadilla de cuadrícula

Su ayuda de comunicación Grid Pad tiene numerosas funciones que le ayudarán a hablar.

Conecte su método de acceso a su Grid Pad o utilice la pantalla táctil.



Ventanas

Windows es el sistema operativo de su ayuda de comunicación.

Controla configuraciones básicas como volumen, Wi-Fi y brillo de la pantalla.

Windows puede ejecutar muchas aplicaciones, incluidas Grid, navegadores web, procesadores de texto y herramientas creativas.



Red

¡Grid es tu
aplicación de comunicación que
te permite hacer muchísimo!

Crea un usuario único,
conéctalo a tu correo
electrónico, teléfono inteligente,
personaliza tu método de acceso
y elige conjuntos de cuadrículas
que se ajusten a tus necesidades.



Conjunto de cuadrícula

Los conjuntos de cuadrícula
son recursos prediseñados
para Grid que están diseñados
para satisfacer sus necesidades.

Pueden ser un vocabulario de
símbolos completo como
Super Core o una aplicación
accesible como Facebook
o Spotify.

¿Para quién está destinado Grid Pad 10s?

Un usuario de CAA



- Comunicación
- Aplicaciones accesibles
- Acceso alternativo a otro software
- Controlar a otros dispositivos en tu hogar

Apoyando a un usuario de CAA

- Cambiar la configuración
- Creación de perfiles de usuario de Grid
- Agregar conjuntos de cuadrículas
- Edición o creación de conjuntos de cuadrículas
- Edición remota



¿Qué incluye?



Su ayuda de
comunicación Grid Pad 10s



Documentación

Guía de cuidados, Grid 3 Primeros pasos y Seguridad y cumplimiento

Accesorios

Botón de encendido remoto 2

Cable de alimentación

Correa

Etiquetas de puerto

Placa de montaje doble y tornillos


Destornillador

Configuración rápida

1

Enciende tu Grid Pad

Puede utilizar el botón en el lateral del dispositivo o el Botón de encendido remoto

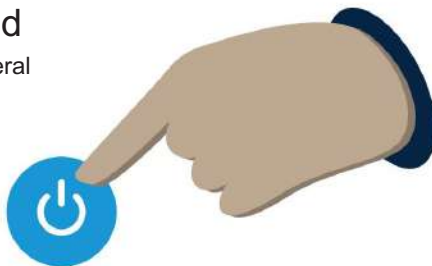

2



Se iniciará Windows y luego Grid se abrirá automáticamente.

3

Conectarse a Internet

Esto significa que puedes acceder a más conjuntos de cuadrículas, más voces, aplicaciones y obtener actualizaciones.



4



Crea tu usuario Grid e inicia sesión o crea tu Cuenta Smartbox

"Hola"

5

Configura tu método de acceso y voz



6





Elige tus conjuntos de cuadrícula

Grid tiene mucho contenido para ayudarte a comenzar, desde comunicación con símbolos y texto, aplicaciones y más.

¡Empieza a hablar!


El Grid Pad 10s

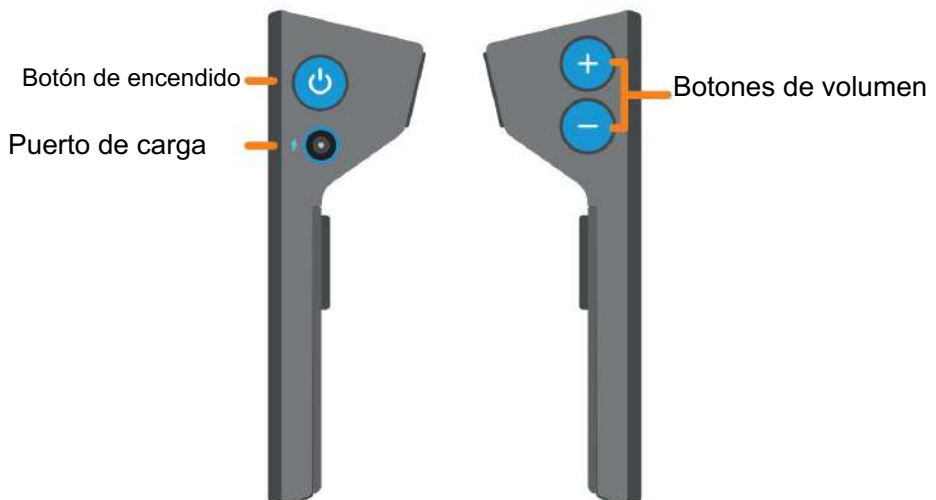

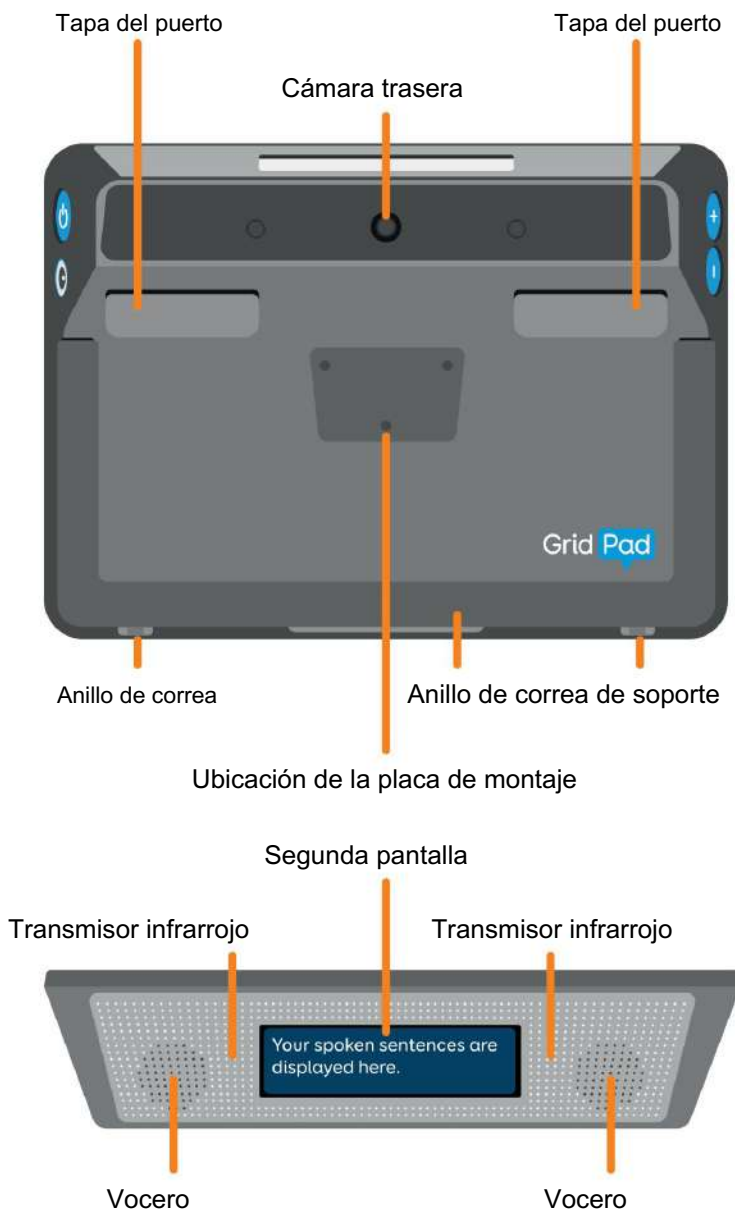

Puertos

Su Grid Pad cuenta con varios puertos para conectar dispositivos adicionales y acceder a otros métodos. Estos se encuentran debajo de las tapas de los puertos.

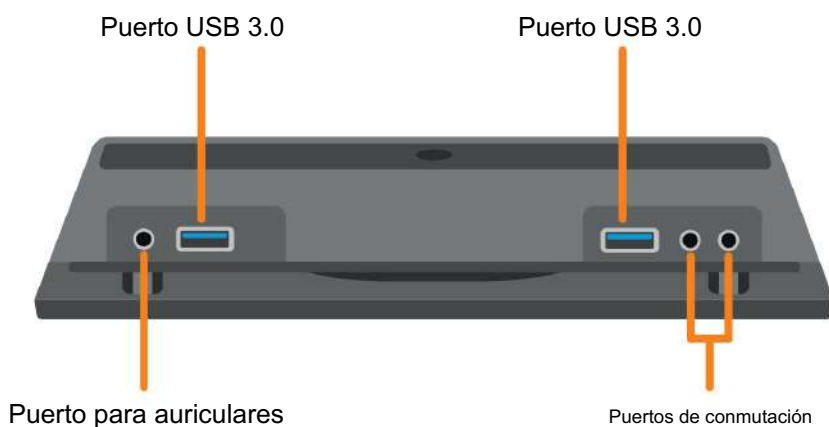



Conector de interruptor de 3,5 mm




Conector de auriculares de 3,5 mm



Conector USB tipo A

Etiquetas de puerto

Puede colocar las etiquetas del puerto en la parte posterior del Grid Pad para facilitar la identificación.

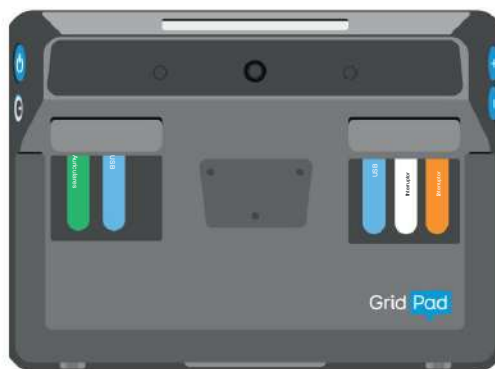

Aprendiendo más

Esta guía proporciona los conceptos básicos para empezar a usar su Grid Pad. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: thinksmartbox.com



Aprenda a editar y personalizar su contenido

Edición y funciones avanzadas



Personalizar su acceso alternativo y otras configuraciones

thinksmartbox.com/aprender-en-casa



Guías y recursos de conjuntos de cuadrículas
Contamos con una variedad de guías y
recursos para ayudarle a aprender y explorar
nuestros conjuntos de cuadrículas.

thinksmartbox.com/recursos-de-aprendizaje

Seminarios web y tutoriales

Compartimos seminarios web
regularmente durante todo el año. Puedes
seguirnos en nuestro canal de
YouTube y ver videos más cortos.



thinksmartbox.com/youtube



Únete a la comunidad

Un lugar donde los usuarios,
profesionales y familias de Grid
comparten ideas, hacen preguntas y se
apoyan mutuamente.

thinksmartbox.com/facebook

Contenido

Tu Grid Pad 10s

1.	Cómo encender su Grid Pad	22
2.	Estados de	23
3.	energía Cómo poner el Grid Pad en	24
4.	reposo Cómo apagar su Grid Pad	26
	Cómo cargar su Grid Pad 5.	28
6.	¿Cuánto durará la batería? 7.	30
	Colocación del Grid Pad 8.	32
	Montaje de su dispositivo 9.	34
	Colocación de la correa	36
10.	Estuche resistente	37

Introducción a Windows

11.	Uso de la pantalla táctil 12. Su	42
	escritorio Grid Pad 13. Abrir y cerrar	46
	aplicaciones 14. ¿Dónde van los archivos?	50
		52
15.	Configuración	53
16.	Conexión a Internet 17. Conexión de	54
	dispositivos Bluetooth	56

Introducción a Grid 3

18.	Conozca Grid 19. Explorador de	60
	Grid 20. Elección de sus	62
	conjuntos de cuadrícula 21. Elección de	64
	su voz 22. Obtenga más información	66
	sobre Grid	68

Acceso

23.	Introducción al acceso 24. Acceso	76
	táctil	78

25. Protectores de	84
teclas 26. Caso práctico de acceso táctil	86
27. Acceso con puntero 28.	88
Caso práctico de acceso con puntero 29.	100
Acceso con interruptor 30.	102
Caso práctico de acceso con interruptor 31.	118
Activación por voz	120
 Características de Grid Pad 10s	
32. Botón de encendido remoto 33.	126
Uso de los puertos del interruptor del botón de encendido remoto 34.	128
Cambio de las baterías del botón de encendido remoto 35.	130
Emparejamiento del botón de encendido remoto 36.	131
Pantalla de luz diurna 37. Uso	132
de la segunda pantalla 38. Uso de	134
infrarrojos 39. Configuración	138
de un control remoto infrarrojo 40. Configuración	139
manual de un control remoto infrarrojo 41. Conexión de un	140
teléfono 42. Programación de botones	146
	148
 Cuidando su dispositivo	
43. Actualización de Grid 3 44.	152
Actualización de Windows 45.	154
Copia de seguridad de sus conjuntos de cuadrículas con	155
Dropbox 46. Copia de seguridad de su	156
usuario de Grid 47. Limpieza y almacenamiento de su	158
Grid Pad 48. Propiedades antimicrobianas	160
49. Soporte 50.	161
Cómo encontrar su modelo y número de serie	162

Su

Almohadilla de cuadrícula 10s

Esta sección cubre todo lo que necesita saber sobre el hardware Grid Pad.

Utilice esto para familiarizarse con los puertos y botones, así como con otras características del dispositivo, incluida su placa de montaje, los anillos de la correa y cómo posicionar el dispositivo.

1. Encendido de su Grid Pad 2. Estados de energía 3.	22
Poner el Grid Pad en reposo	23
4. Apagado del Grid Pad 5. Carga del Grid Pad 6. ¿Cuánto durará la batería? 7.	24
Colocación del Grid Pad 8. Montaje del dispositivo 9. Colocación de la correa 10. Estuche resistente	26
	28
	30
	32
	34
	36
	37

1 Encender el Grid Pad

Para encender su Grid Pad, presione el botón de encendido en el costado del dispositivo durante poco menos de un segundo.



Se encenderá una luz blanca en el frente del dispositivo y el sistema se iniciará.

Si el dispositivo está en modo de suspensión, se reactivará.

Estados de poder

2




En

Su Grid Pad está listo para usarse.



Dormir

La pantalla está apagada y el Grid Pad no consumirá mucha energía.

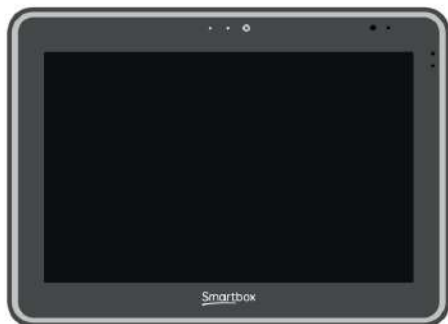

Apagado

El Grid Pad está apagado y no funciona consumir cualquier fuerza.


3 Poner el Grid Pad en reposo

El modo de suspensión es cuando la pantalla de tu Grid Pad está apagada, pero el dispositivo sigue encendido, de modo que puede activarse rápidamente cuando sea necesario.

Mientras esté en este modo, el dispositivo seguirá consumiendo batería, pero mucho menos que cuando está en uso.

Cómo poner el Grid Pad en reposo

Toque el botón de encendido en el costado del dispositivo.

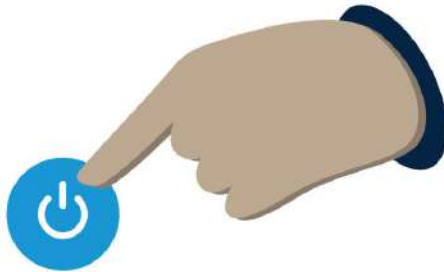

Modo de suspensión de Windows

Toque el menú Inicio

Seleccione el icono de encendido

Seleccionar Dormir

Pantalla de sueño

Muchos conjuntos de cuadrículas incluyen una opción de pantalla de suspensión .

Al activar la función de suspensión, la pantalla de tu Grid Pad se apaga para ahorrar batería cuando no está en uso. Puedes volver a activarla con el método de acceso habilitado.

Activar su dispositivo

La activación de su Grid Pad del modo de suspensión depende de cómo lo ponga en suspensión.

Desde la pantalla de suspensión

Activa tu método de acceso.

Desde Windows o después de presionar el botón de encendido

Toque el botón de encendido o active un interruptor conectado al puerto 1 del Switch.

4 Apagado del Grid Pad

Puedes apagar tu Grid Pad de varias maneras.

Windows se apagó

Cierra todas las aplicaciones que tengas abiertas y asegúrate de haber guardado todo el trabajo.

Toque el menú Inicio

Seleccione el icono de encendido

Seleccione Apagar

Grid Pad se apagará y se instalarán todas las actualizaciones de Windows pendientes.

También puede reiniciar su dispositivo desde aquí, lo que aplicará cualquier actualización.

Cierre de la red 3

Algunos conjuntos de cuadrícula tienen una celda de apagado, que se encuentra en

Una cuadrícula de Configuración u Opciones . Si la cuadrícula no tiene una celda de apagado, puede agregarla en el modo de edición.

Apagado de emergencia

Si tiene problemas con su Grid Pad y necesita forzar el reinicio del dispositivo, puede realizar un apagado de emergencia.


Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos.

Tenga en cuenta que perderá cualquier trabajo no guardado.

5 Cómo cargar su Grid Pad

Necesitará cargar la batería de su Grid Pad después de usarlo.


Conecte el puerto de carga de su Grid Pad al adaptador de corriente; el adaptador está claramente etiquetado.

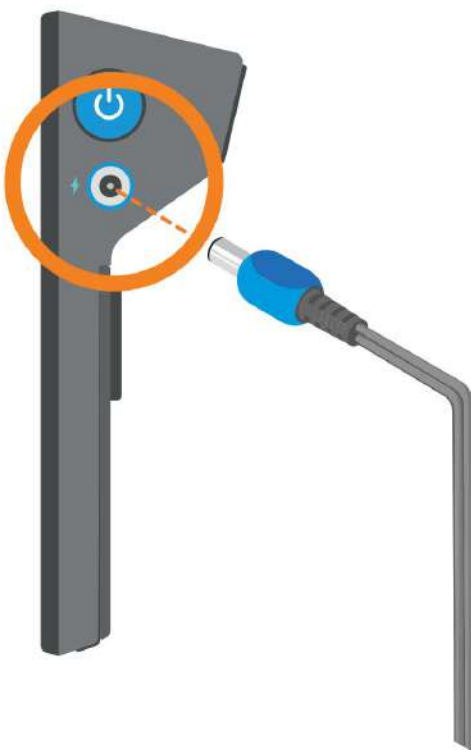

Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente para cargar.

Cuándo cargar su Grid Pad

Cuando la batería de tu Grid Pad baje al 10 %, verás que el LED naranja se enciende. Esto significa que debes cargarlo lo antes posible.

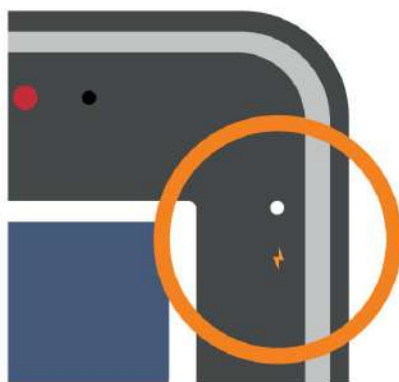

Mientras se carga, verá un LED blanco.

Cuando la batería esté llena, el LED se iluminará en verde.

Su Grid Pad tardará aproximadamente 5 horas
Para cargar si la batería está vacía.

6

¿Cuánto durará la batería?

La batería de su Grid Pad ha sido probada en diferentes situaciones.

Uso de CAA

Hablando con Grid.

Navegando por conjuntos de cuadrículas.

Obtendrás aproximadamente 7 horas de batería.
usar.

Uso de los medios de comunicación

Ver vídeos y escuchar música.

Jugando juegos.

Utilizando múltiples aplicaciones a la vez.

Obtendrás aproximadamente 4 horas de batería.
usar.

Consejos para ahorrar batería

El Grid Pad tiene una pantalla con brillo diurno que debe ajustarse alrededor del 30 % para uso en interiores. Por encima de este valor, la pantalla consumirá...


Más poder.

Ponga el dispositivo en modo de suspensión cuando no esté en uso y apáguelo si lo va a guardar.

Apaga la segunda pantalla.

Vida útil de la batería

El Grid Pad utiliza una batería similar a la de muchas laptops y tabletas, diseñada para durar toda la vida útil del dispositivo. No debería notar mucha degradación durante al menos dos años.

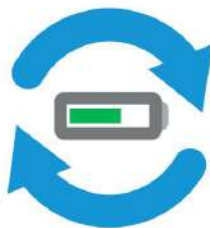

7 Posicionamiento de su Grid Pad

Su Grid Pad se puede utilizar en varias posiciones y lugares.

En un escritorio o bandeja




Coloque su Grid Pad sobre una superficie plana. Las patas de goma evitarán que el dispositivo se deslice.

Usando el soporte



El soporte se desplegará para permitirle levantar el Grid Pad a una posición cómoda.

Puedes desplegar el soporte hasta un máximo de 100 grados.

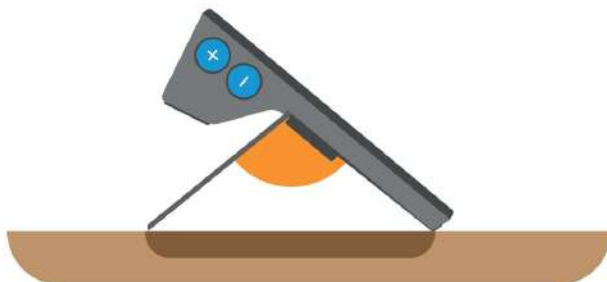

El soporte también tiene patas de goma para evitar resbalones.




No apoye el dispositivo con los altavoces y la segunda pantalla hacia abajo, ya que esto puede dañar el dispositivo.


8 Montaje del dispositivo

Su Grid Pad tiene un puerto de placa de montaje en la parte posterior del dispositivo.


Puede usar esto para fijar su Grid Pad a soportes de escritorio, piso y silla de ruedas de manera segura.

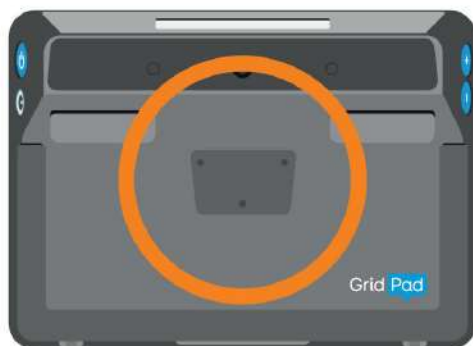


El kit de montaje Grid Pad es compatible con los soportes Daessy y ReHadapt .

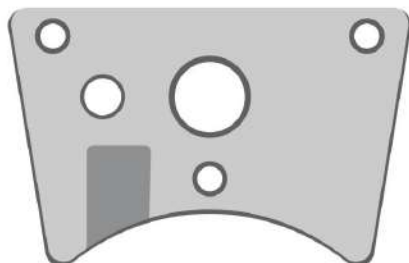

Utilice un destornillador para fijar firmemente la placa de montaje a su Grid Pad. Asegúrese de que los tres tornillos estén bien apretados. son seguros

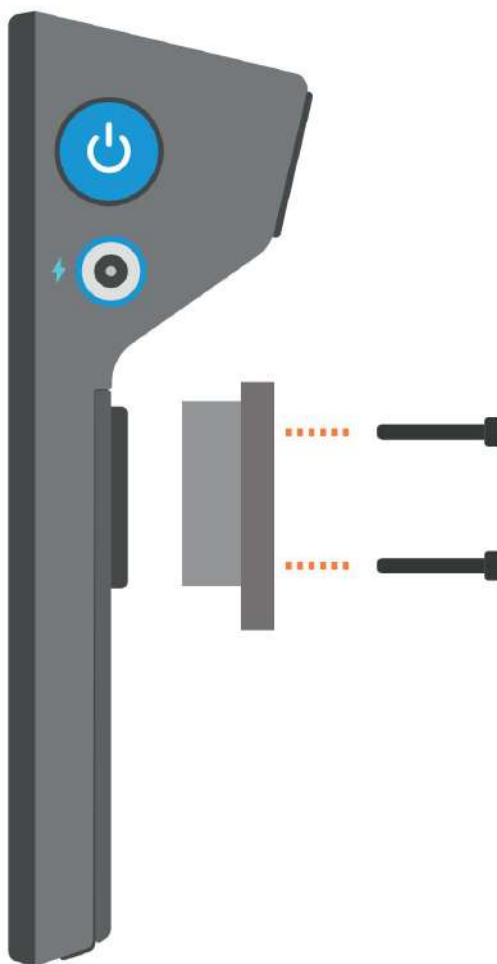

Siga las instrucciones incluidas con el montaje para fijar de forma segura su Grid Pad.

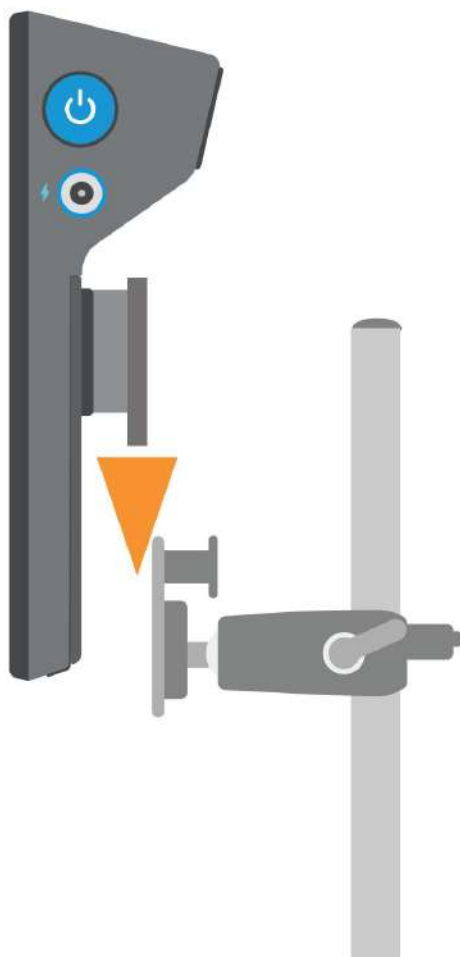


Ajuste su soporte para posicionar su Grid Pad.
Recuerde aflojar los tornillos o palancas de bloqueo
antes de realizar el ajuste y apretarlos una vez que la
almohadilla de rejilla esté en la posición correcta.



9 Colocación de la correa

Puede sujetar la correa Grid Pad a los anillos de correa incorporados en la parte inferior del dispositivo.

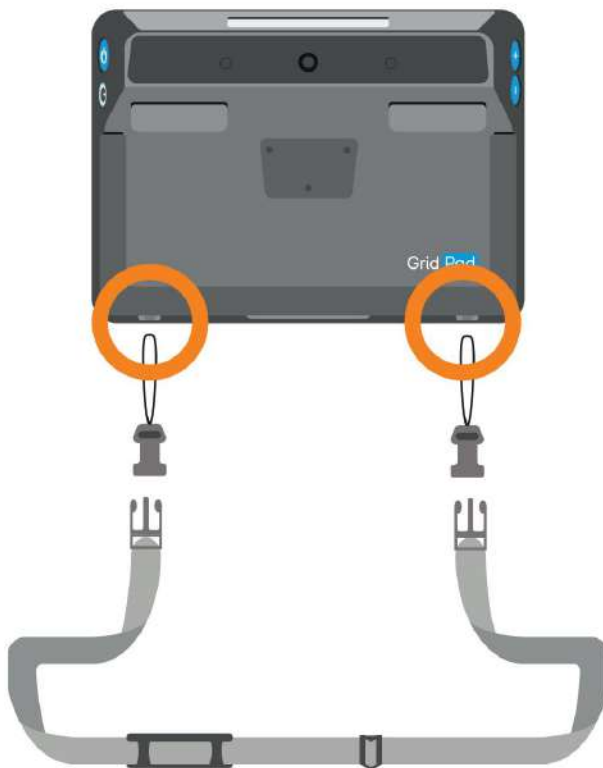

Pase las cuerdas del clip por las anillas y luego tire del clip de plástico a través de la cuerda. Fije la correa a los clips.

Estuche resistente

El Grid Pad 10s se puede colocar en un estuche resistente para mayor protección y portabilidad.



El estuche permite el acceso a todos los puertos y botones del Grid Pad y además añade un asa para facilitar el transporte y posicionamiento del dispositivo.



Empezando con Ventanas

Su Grid Pad funciona con el sistema operativo Windows.

Esta sección le ayudará a comenzar si es nuevo en Windows y en los dispositivos táctiles.

11. Uso de la pantalla táctil	42
12. Su escritorio Grid Pad	46
13. Abrir y cerrar aplicaciones	50
14. ¿Dónde van los archivos?	52
15. Configuración	53
16. Conexión a Internet	54
17. Conexión de dispositivos Bluetooth	56

11 Uso de la pantalla táctil

Su Grid Pad tiene una pantalla táctil que le permite usar gestos en la pantalla para interactuar y realizar tareas.

Como en la mayoría de las pantallas táctiles, generalmente se supone que utilizarás un dedo para tocar y navegar, pero también puedes usar un lápiz óptico.

Interacciones básicas



Grifo

Al tocar la pantalla, se seleccionará un elemento. Si toca un botón o enlace, se activará y realizará esa acción. Si toca un archivo o carpeta, lo seleccionará.



Doble toque

Dos toques seguidos abrirán un archivo o una carpeta. También abrirán un acceso directo desde el escritorio.




Sostener

Si mantiene presionado un archivo o una carpeta, esto se cuenta como un clic secundario. Se abrirá un menú con acciones adicionales. Si mantienes presionado un espacio vacío, podrás crear nuevas carpetas y realizar otras acciones.



Mover un archivo

Toca un elemento, mantenlo pulsado y arrástralo por la pantalla para moverlo. Para colocar un archivo en una carpeta, muévelo sobre ella y suéltalo.

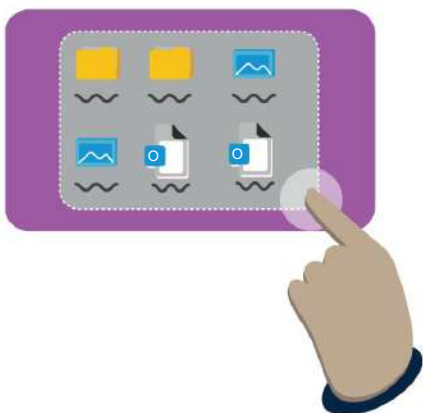


Realizar una selección múltiple

Si toca y mantiene presionado un espacio en blanco entre archivos y carpetas, puede arrastrar varios elementos para seleccionarlos.

Teclado y ratón

Quizás le resulte más cómodo y familiarizado utilizar un teclado y un mouse para navegar en Windows.

Puede conectarlos a los puertos USB en la parte posterior del Grid Pad.

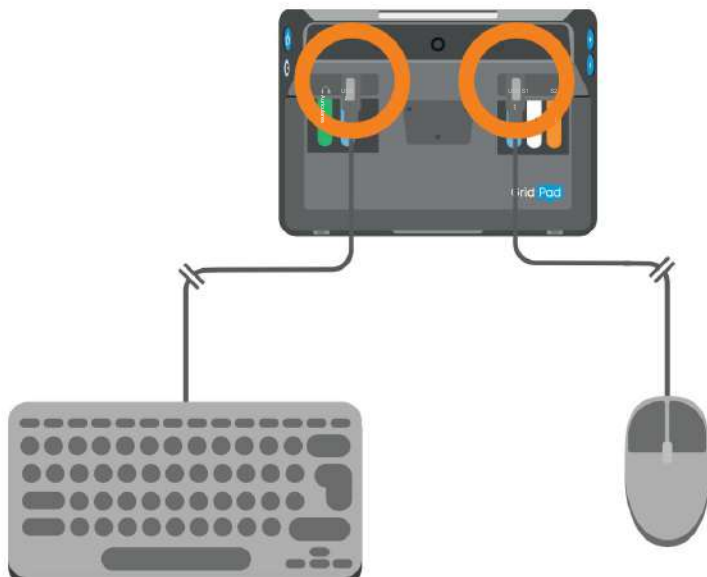

También puedes usar Bluetooth para conectar un ratón y un teclado inalámbricos.

Cuando se conecta un mouse, verá un cursor en la pantalla.



12 Tu escritorio Grid Pad

El escritorio es la pantalla principal que verá si su Grid Pad no abre Grid al iniciarse.

Si minimiza o cierra Grid, verá el escritorio.



Desde el escritorio puedes abrir y cerrar aplicaciones, cambiar la configuración de tu Grid Pad y acceder y organizar tus archivos.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra la barra de tareas.

Menú de inicio




Icono del menú Inicio

Al tocar el menú Inicio, se abrirá una lista de aplicaciones instaladas y botones adicionales para Energía, Configuración y Documentos.

También puedes ver una serie de mosaicos que son accesos directos a varias aplicaciones y carpetas.

Barra de búsqueda

Al escribir en la barra de búsqueda se buscarán archivos, aplicaciones y la web.

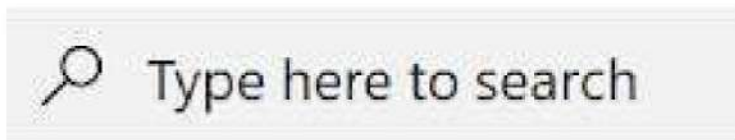

La barra de búsqueda

Aplicaciones ancladas



Aplicaciones ancladas a la barra de tareas

Estos son atajos rápidos para abrir aplicaciones.

Abrir aplicaciones



Aplicaciones con Grid 3

abiertas. Si tienes una aplicación abierta en tu dispositivo, aparecerá junto a tus aplicaciones ancladas. Las aplicaciones abiertas aparecen subrayadas en azul.

Área de notificación




El área de notificación

El lado derecho de la barra de tareas está ocupado por notificaciones e iconos de estado. Aquí puedes consultar el nivel de batería, la conexión Wi-Fi, el volumen y más.

Ajustes rápidos

Puede acceder rápidamente a la configuración de su Grid Pad tocando el ícono de notificación en la esquina derecha de la barra de tareas.

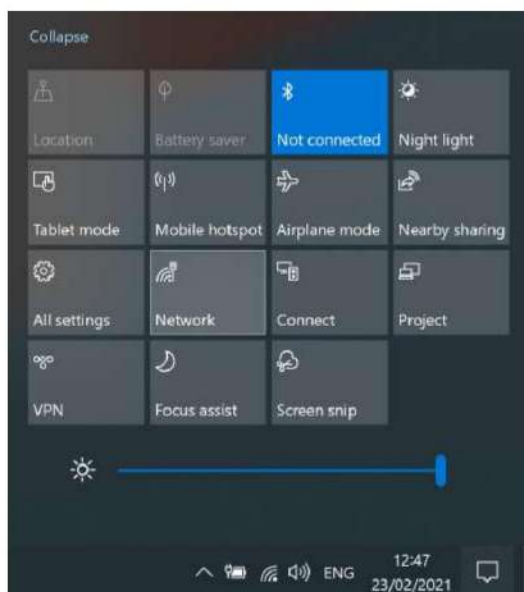

Configuración rápida en la barra lateral de notificaciones

13 Apertura y cierre de aplicaciones

Para abrir una aplicación desde el escritorio, tócala dos veces.



Cuadrícula 3

Si abre la aplicación desde la barra de tareas o el menú Inicio, solo necesita tocar una vez.



La mayoría de las aplicaciones, incluida Grid, tienen controles en la parte superior derecha de la ventana.

Minimizar




Esto ocultará la aplicación. Puedes volver a activarla desde la barra de tareas.

Maximizar



Esto hará que la aplicación ocupe toda la pantalla de tu dispositivo. Al tocarla de nuevo, volverá a su tamaño original.

Cerca

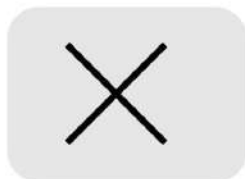


Esto cerrará la aplicación.

14 ¿A dónde van los archivos?

Los archivos que incluyen documentos, conjuntos de cuadrículas, música e imágenes se almacenan en carpetas en su Grid Pad.

Sus archivos se almacenan en carpetas.

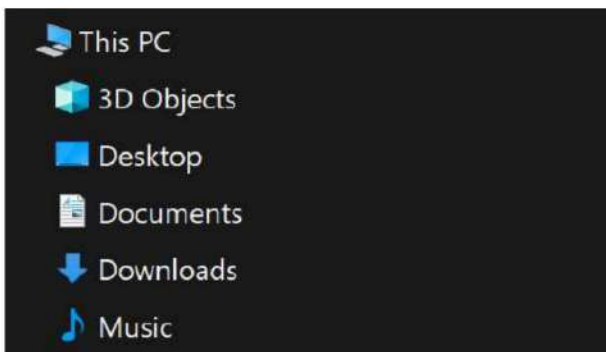

Al seleccionar Documentos en el menú Inicio , se abrirá la carpeta Documentos en el Explorador de archivos.

Puede ver otras ubicaciones en su Grid Pad, como Escritorio, Descargas e Imágenes.

También puede seleccionar Esta PC , lo que le permitirá explorar todo su dispositivo, así como cualquier unidad USB y de red conectada.

Ajustes


15

Quizás desees explorar la configuración de tu dispositivo.



La configuración de Windows se encuentra en el menú Inicio, seleccionando el ícono del engranaje de Configuración.

Aquí encontrarás muchas opciones, desde Sistema, donde puedes seleccionar cómo actúa y se comporta tu dispositivo, hasta Facilidad de acceso, donde puedes configurar las opciones de accesibilidad de Windows.

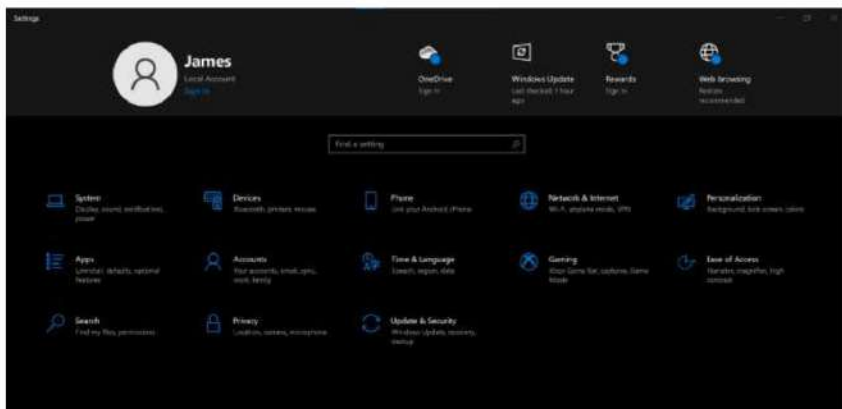


16 Conexión a Internet

Puede conectarse a Internet seleccionando el botón Wi-Fi en su área de notificaciones.



El Grid Pad buscará redes Wi-Fi cercanas.

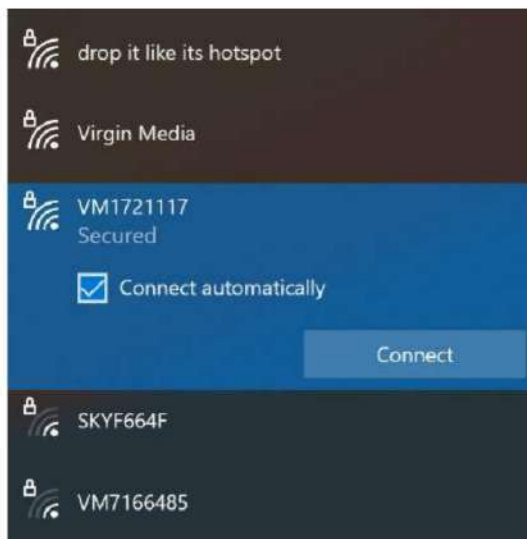

Seleccione la red a la que desea conectarse y seleccione Conectar.

Necesitará ingresar la contraseña de la red.

Una vez conectado, podrá acceder a servicios en línea, actualizaciones, navegar por la web y más.

Grid requiere una conexión a Internet para las siguientes funciones:

- Vinculación a su cuenta Smartbox
- Cuadrículas en línea
- Conexión a Dropbox
- Transmisión de medios
- Actualizaciones
- Guía de cuadrícula
- Soporte remoto desde Smartbox


17

Conexión de dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una forma de conectar dispositivos a su Grid Pad de forma inalámbrica.

Los dispositivos Bluetooth pueden incluir métodos de acceso como interruptores y punteros, así como teclados, auriculares y más.

Para conectar un dispositivo Bluetooth, abra Configuración y seleccione Dispositivos.

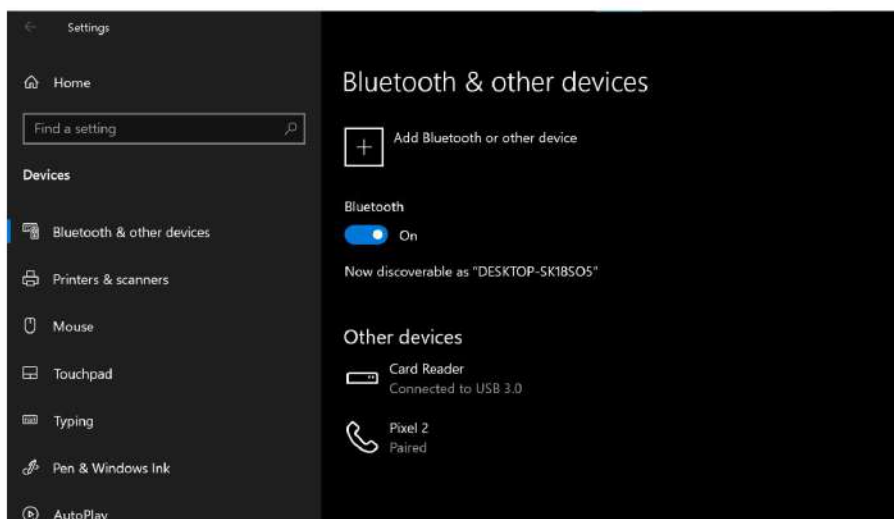

Seleccione Agregar Bluetooth u otro dispositivo.

Siga las instrucciones en pantalla, que pueden incluir la confirmación de una contraseña para garantizar que la conexión sea segura.

Tenga en cuenta que mientras se conecta un teléfono a Grid se utiliza Bluetooth, la configuración y el proceso de conexión se llevan a cabo en Grid.



Empezando con

Cuadrícula 3

Grid 3 es el software de comunicación y acceso que se proporciona con su Grid Pad.

Con Grid 3, su Grid Pad se convierte en un conjunto completo de herramientas de accesibilidad, donde configura su voz, método de acceso, paquetes de vocabulario y mucho más.

18. Conozca Grid 19.	60
Explorador de Grid	62
20. Elección de sus conjuntos de	64
cuadrícula 21. Elección de	66
su voz 22. Obtenga más información sobre Grid	68

Conociendo Grid



Perfil de usuario

Su perfil de usuario almacena todos sus conjuntos de cuadrícula, preferencias y configuraciones de acceso.



Explorador de cuadrícula

Grid Explorer es tu pantalla de inicio y es donde encontrarás tus conjuntos de cuadrículas.



Conjuntos de cuadrícula

Un conjunto de cuadrículas es una aplicación dentro de Grid. Son tus recursos para comunicarte y mucho más.



Modo de edición

Cada conjunto de cuadrícula se puede personalizar y editar o puedes crear un conjunto de cuadrícula desde cero.

18 Explorador de cuadrícula



El Explorador de cuadrículas muestra todos sus conjuntos de cuadrículas.
Al seleccionar uno se abrirá.

El Explorador de cuadrículas es totalmente accesible. Puede usar su método de acceso para seleccionar conjuntos de cuadrículas o navegar entre páginas.



Se puede abrir el menú para ver más opciones.

Para regresar al Explorador de cuadrículas desde un conjunto de cuadrículas, seleccione Menú - Explorador de cuadrículas.

Puedes ocultar el menú de Grid Explorer en Configuración – Computadora, ideal si estás usando acceso táctil con un protector de teclado.




Si desea volver al Explorador de cuadrículas, busque su icono. Puede encontrarlo en muchos conjuntos de cuadrículas.

19 Cómo elegir sus conjuntos de cuadrículas

Grid viene listo con muchos conjuntos de cuadrículas diferentes para elegir.

Puede agregar sus conjuntos de cuadrículas desde Menú - Agregar conjunto de cuadrícula.

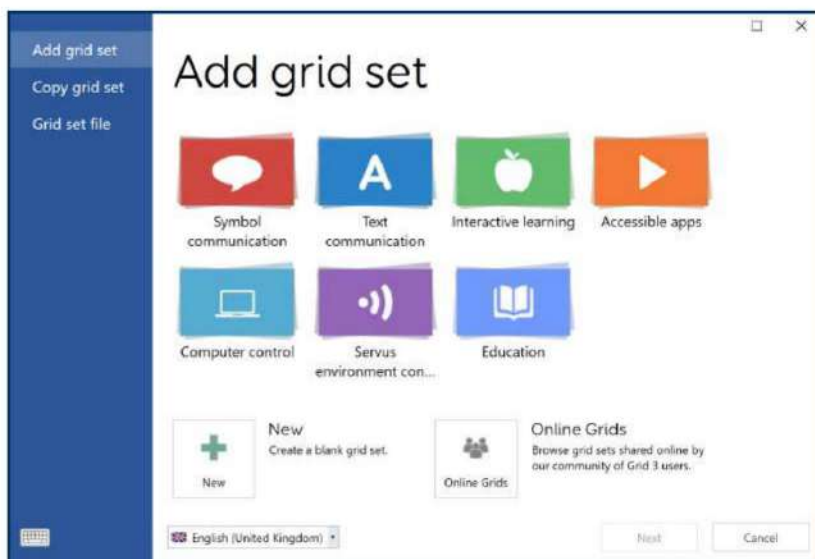

Los conjuntos de cuadrículas se organizan en categorías.

También puede crear un nuevo conjunto de cuadrículas o buscar en las cuadrículas en línea creaciones de otros usuarios de cuadrículas.



Super Core grid sets

Easy-to-use core vocabularies, to help early AAC users experience success with symbol communication and develop literacy skills.

Algunos conjuntos de cuadrículas tienen múltiples versiones, como Super Core, que tiene versiones de 30 y 50 celdas.



Super Core 50

Super Core is an easy-to-use core vocabulary designed to help early AAC users experience success with symbol communication. It combines a consistent core vocabulary with context specific language, focusing on daily routines and play activities to keep communication meaningful and motivating!



Super Core 30

Super Core 30 has the exact same vocabulary as Super Core 50, and is available for users who need fewer and larger cells on each grid. Words may take more selections to get to, but they will be easier for some users to select.

This easy-to-use core vocabulary is designed to help early AAC users experience...

Seleccione el conjunto de cuadrículas que desea agregar.



Verá más información sobre el conjunto de cuadrícula, sus características y si hay versiones alternativas disponibles en otros conjuntos de símbolos o para diferentes métodos de acceso.

20 categorías de conjuntos de cuadrícula

Comunicación de símbolos

Vocabularios y cuadrículas de comunicación que combinan palabras con símbolos. Algunos ejemplos son Super Core, WordPower y Symbol Talker.



Comunicación de texto

Teclados con enfoque en la accesibilidad y funciones adicionales para ayudarte a construir oraciones rápidamente, recordar mensajes y más. Algunos ejemplos son Fast Talker, Text Talker y Alpha Core.



Aprendizaje interactivo

Actividades divertidas para la educación temprana que le ayudarán a enseñar habilidades de acceso y comunicación. Elija entre Causa y efecto, Opciones, Desafíos y visuales. escenas.



Aplicaciones accesibles

Acceda a redes sociales, servicios de transmisión de vídeo y mensajería.

Algunos ejemplos son WhatsApp, YouTube y Facebook.



Control por computadora

Usa Grid para acceder a otras aplicaciones de tu Grid Pad, como procesadores de texto y herramientas creativas. También puedes controlar otros programas de Smartbox, como Look to Learn.



Control del medio ambiente

Estos conjuntos de cuadrícula están configurados para funcionar junto con el transmisor infrarrojo en su Grid Pad para controlar dispositivos externos.




21 Elegir tu voz

Tu voz en Grid se proyecta desde tu Grid Pad hacia el mundo.




Puedes elegir entre cientos de voces y controlar cómo quieres que suene tu voz.

Puede encontrar la configuración de voz en Menú - Configuración - Voz.

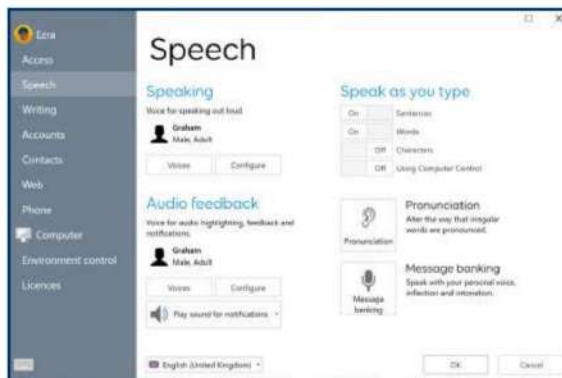

En el encabezado Hablar puedes elegir Voces para explorar la biblioteca de voces.

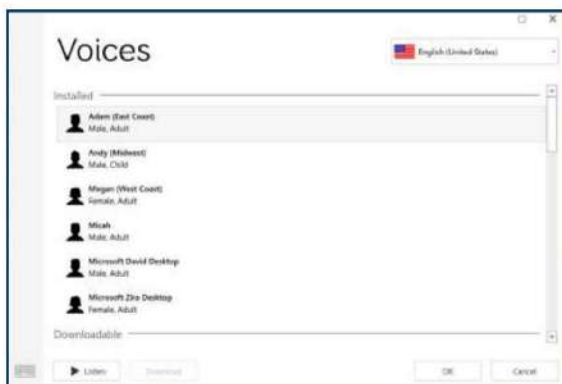

Algunas voces deberán descargarse antes de poder usarlas.

Seleccione el menú de país para explorar la gama de acentos e idiomas disponibles.

Configurando tu voz

Puede seleccionar Configurar para encontrar más opciones para controlar su voz.

Velocidad : esta configuración ajusta la velocidad con la que se pronunciarán sus palabras.

Tono : Qué tan alta o baja suena tu voz.

Volumen : Ajusta el volumen de tu voz. Ten en cuenta que esto no ajusta el volumen de tu Grid Pad.

Habla mientras escribes

En el encabezado "Hablar mientras escribes" , puedes configurar cuándo hablará Grid. Puedes seleccionar Oraciones, Palabras, Caracteres y Usar control de computadora.

Pronunciación

A veces, tu voz de Grid puede pronunciar una palabra incorrectamente. Puedes corregirlo seleccionando Pronunciación y añadiendo la palabra.

Introduce la palabra que se pronuncia mal y luego escríbela fonéticamente. Por ejemplo, el nombre "Siobhan" suele sonar extraño.

Para pronunciarlo correctamente, introduzca "Shev awn".

Banca de mensajes

También puedes reemplazar la voz de Grid con fragmentos de tu propia voz con Message Banking. Por ejemplo, si tienes un fragmento donde dices el nombre de un amigo, la grabación se reproducirá al usarlo.

Retroalimentación de audio

Grid también puede hablar para ayudarte a navegar y redactar tus mensajes. Esto se llama retroalimentación auditiva.

Puede configurar una voz diferente para sus comentarios, de modo que pueda distinguir entre su voz personal y la voz que lo ayuda a navegar.

También puedes cambiar la fuente de la retroalimentación de audio. Si tienes auriculares, puedes seleccionarlos para escuchar en privado.

22 Más información sobre Grid

Su Grid Pad viene con una guía de introducción a Grid 3 .



También puede descargar esta guía desde el sitio web de Smartbox thinksmartbox.com.

También encontrarás más guías y vídeos sobre edición, acceso y más.

También puedes descargar recursos para apoyar el uso de conjuntos de cuadrículas, como tableros de comunicación y carteles.

Guía de cuadrícula

Si quieres saber más sobre el conjunto de cuadrícula que estás utilizando, también puedes acceder a su guía.

Esto se encuentra en Menú – Guía de cuadrícula cuando estás en un conjunto de cuadrícula.

La Guía de cuadrícula le permitirá seguir explorando el conjunto de cuadrículas, al tiempo que le mostrará cómo usarlo e implementarlo.



Acceso

Su Grid Pad 10s es un dispositivo de acceso múltiple.

Esto significa que tienes muchas formas de interactuar y usarlo para hablar.

En esta sección descubra cómo configurar su método de acceso en Grid y explorar una variedad de configuraciones de usuario de ejemplo.

23. Introducción al acceso	76
24. Acceso táctil	78
25. Protectores de teclas	84
26. Caso práctico de acceso táctil	86
27. Acceso con puntero	88
28. Caso práctico de acceso con puntero	100
29. Acceso con interruptor	102
30. Caso práctico de acceso con interruptor	118
31. Activación por voz	120

23 Introducción al acceso

Su método de acceso describe los accesorios, configuraciones e interacciones que utiliza para realizar tareas en su Grid Pad.

Su Grid Pad 10s admite tres métodos de acceso principales dentro de Grid.



Toque, puntero e interruptor.

Cada método tiene una serie de configuraciones que puedes ajustar para que cada método funcione para ti. También puedes combinar métodos de acceso.

Grid guarda estas configuraciones para su usuario.

Esto significa que si comparte su dispositivo o lo usa en diferentes situaciones, puede tener diferentes configuraciones de acceso.

En esta sección encontrará descripciones de estas configuraciones y cómo funcionan.

También encontrará estudios de casos que describen la configuración de un usuario particular para ayudar a reunir todo en una configuración de usuario completa.



Acceso táctil

El acceso táctil es cuando interactúas con el Grid Pad usando su pantalla táctil.




Al utilizar Grid 3, tocará las celdas en la pantalla para activarlas .

Puedes configurar cómo funciona el acceso táctil en tu Grid Pad usando Grid 3.

Puede utilizar el acceso táctil junto con otros métodos de acceso para poder navegar por una cuadrícula configurada mediante el tacto, incluso si también ha configurado interruptores u otro método.


Puede encontrar la configuración de acceso táctil en Menú - Configuración - Acceso - Táctil.

Tenga en cuenta que la configuración de acceso táctil solo controla cómo responden sus conjuntos de cuadrículas al tacto. La barra de menú y las ventanas de configuración de Grid 3 siempre utilizarán su configuración de Windows.

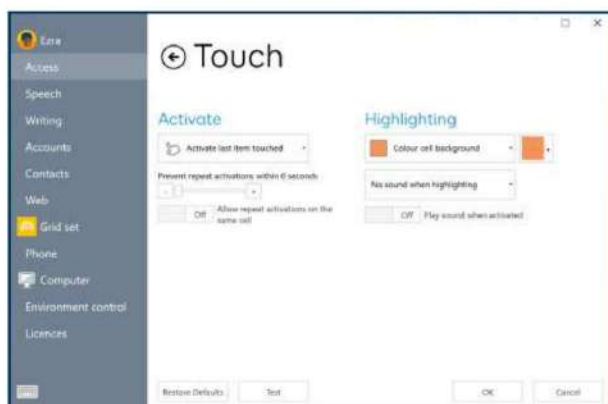


Cambiar la configuración táctil

En el encabezado Activar de la ventana de configuración táctil, puedes elegir cómo deseas que Grid responda a tu toque.

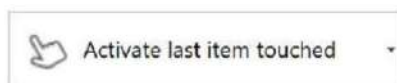

Activar el último elemento tocado


La configuración predeterminada para el acceso táctil es "Activar último elemento tocado". Esta opción significa que si tocas una celda y arrastras el dedo hacia otra, se activará la última celda sobre la que te mantengas pulsado antes de soltar.

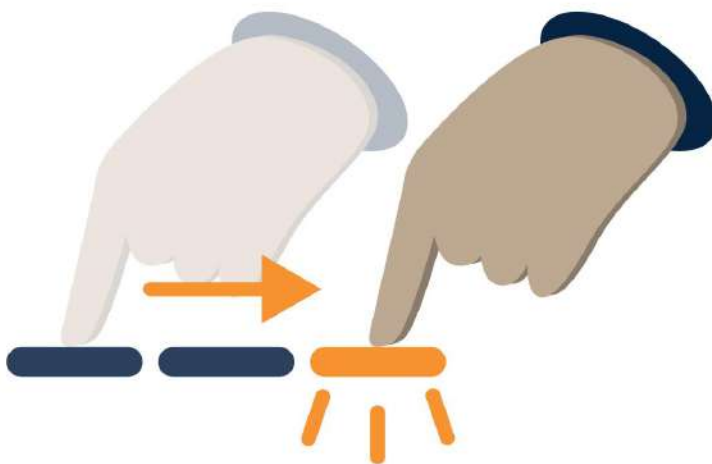

Activar el primer elemento tocado


La segunda opción disponible es Activar el primer elemento tocado. Con esta configuración, la primera celda... que se toque se activará, incluso si

arrastrar a otra celda.

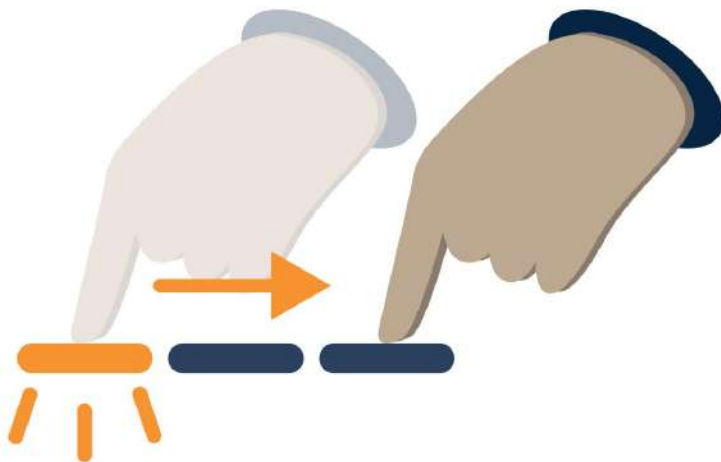


Toque y mantenga presionado para activar

La opción Tocar y mantener presionado para activar le permite ajustar el tiempo que debe mantener presionada una celda antes de que se active.

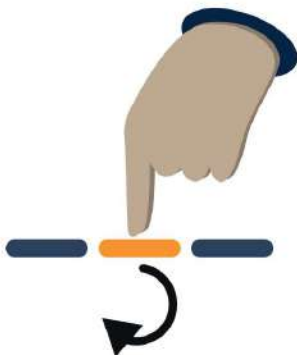

Puedes ajustar cómo se representa la permanencia y también alternar la escritura rápida.

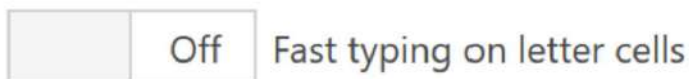

La escritura rápida reduce el tiempo de permanencia a la mitad en las celdas de letras para que la escritura sea más rápida. Por ejemplo, si el tiempo de permanencia está configurado en 4 segundos, las letras tendrán una permanencia de 2 segundos.

Destacando

La sección de resaltado te permite ajustar la respuesta visual al activarlo. Puedes elegir entre cuatro estilos y una gama de colores.



También puedes agregar sonidos como retroalimentación al activar y resaltar celdas.


Prevención de activaciones repetidas

Si encuentra que las celdas se activan repetidamente, puede ajustar la rapidez con la que Grid esperará antes de aceptar la siguiente activación.

Prevent repeat activations within 0 seconds



Ajuste el control deslizante Evitar activaciones repetidas para ayudar a filtrar pulsaciones múltiples.

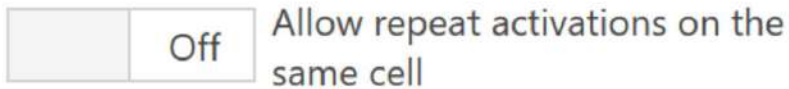

También puedes alternar si deseas permitir activaciones repetidas de la misma celda.

25 protectores de teclas

Un protector de teclado es una capa superpuesta para la pantalla del Grid Pad, generalmente hecha de plástico firme.

Es posible que desees agregar un protector de teclas a tu Grid Pad para evitar activaciones accidentales.

Los protectores de teclas se cortan a medida, específicos para su dispositivo y conjunto de cuadrícula.

Los protectores de teclado Grid Pad se fijan a tu dispositivo con una cinta adhesiva limpia. Se sujetan firmemente a la pantalla y se retiran sin dejar residuos.

Configuración de la cuadrícula 3

Antes de aplicar el protector de teclado, deberá configurar Grid 3. Se recomiendan las siguientes configuraciones:

- Configure Grid para que se abra cuando su Grid Pad esté encendido
- Elija el conjunto de cuadrícula que desea abrir con Red
- Ocultar el menú de la cuadrícula

Aplicación de un protector de teclado

Asegúrese de que la pantalla esté limpia y de haber quitado cualquier película protectora de la parte posterior del protector del teclado.

Asegúrese de que la cuadrícula esté abierta en el conjunto de cuadrícula correcto y alinee el protector de teclas en la parte superior.

Presione firmemente los bordes del protector de teclas contra la pantalla.

Quitar un protector de teclado

Sujete el protector de teclas por el borde. Levante suavemente para soltarlo.

No pase objetos planos como tarjetas de crédito entre el protector de teclado y el Grid Pad ya que esto puede dañar la cinta de agarre limpia.

26 Caso práctico de acceso táctil

Pria es una joven usuaria que accede a su dispositivo a través del tacto.

Tiene un nivel de alfabetización emergente y utiliza indicaciones auditivas para ayudarla a seleccionar las celdas correctas.

Pria usa la función de tocar y mantener presionado para activar la configuración de su cuadrícula. Esto significa que tiene una barra de progreso circular brillante que le permite ver cuánto tiempo debe mantener presionada la pantalla táctil para activar esa celda.



El terapeuta del habla y el lenguaje de Pria ha trabajado para decidir el mejor tiempo de permanencia para que ella pueda escuchar las indicaciones auditivas, sin que sea demasiado largo como para resultar incómoda.

Pria tiene desactivado el resaltado de celdas porque está usando el círculo de permanencia para mostrar qué celda está activa.

Tiene la cuadrícula configurada para decir la descripción al resaltar, lo que lee la etiqueta o descripción cuando presiona una celda.

Pria ha elegido una voz femenina para su comunicación. Ha elegido una voz masculina adulta para la retroalimentación auditiva, de modo que pueda distinguir fácilmente entre el habla y las indicaciones auditivas.

27 Acceso al puntero

El acceso al puntero es cuando usted interactúa con su dispositivo moviendo un puntero en la pantalla, a veces llamado cursor del mouse.



Al usar Grid 3, utilizará el puntero para ubicar sus celdas y luego las activará haciendo clic, manteniendo el cursor sobre ellas o activando un interruptor.


Las opciones del puntero en Grid le brindan una variedad de opciones para controlar otras aplicaciones, como procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de pintura y juegos.

Los dispositivos señaladores vienen en una variedad de formas y tamaños. Quizás esté familiarizado con los tradicionales

Ratones o trackpads presentes en muchas laptops. Se pueden usar rastreadores de cabeza, rastreadores de movimiento, joysticks y ratones de bola para mover el puntero en pantalla.


Conectar un dispositivo señalador

Los dispositivos señaladores se conectan mediante USB o Bluetooth.

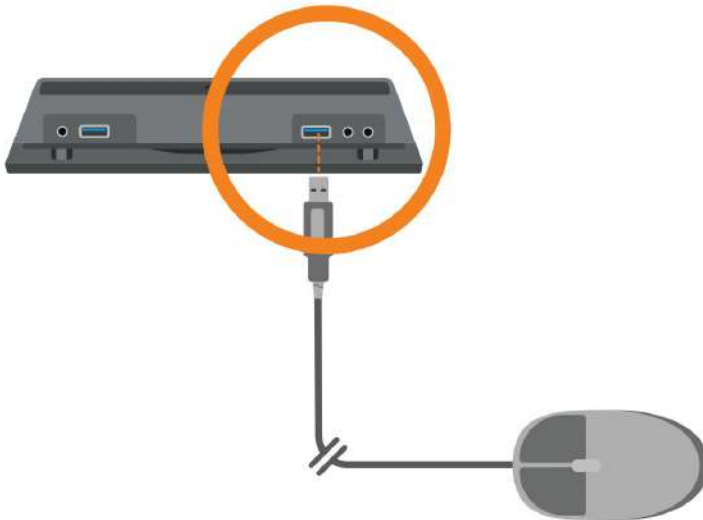

Si está utilizando USB, retire la cubierta del puerto y conecte el dispositivo señalador a un puerto disponible.

Si está conectando un dispositivo Bluetooth, deberá asegurarse de que Bluetooth esté activado en la configuración de Windows y seguir las instrucciones proporcionadas con su dispositivo.

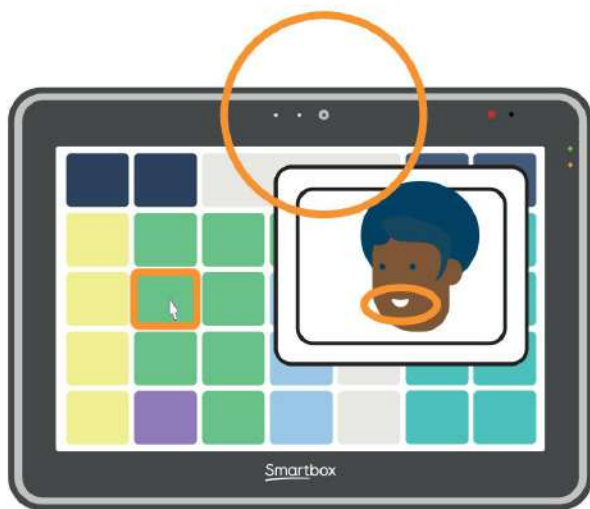

Los métodos de apuntado más avanzados, como los punteros de cabeza, pueden requerir la instalación de software adicional para su correcto funcionamiento. Siga las instrucciones incluidas con su dispositivo. También podría necesitar un soporte para fijar el dispositivo al Grid Pad.


Cambiar la configuración del puntero en Grid

Puede encontrar la configuración del puntero en Menú
- Configuración - Acceso - Puntero.

Puede ajustar las opciones de activación , el
resaltado y cómo actúa el puntero cuando se utiliza para
el control de la computadora.

Haga clic para activar

Si su puntero tiene un botón, como un mouse o un
joystick, la opción hacer clic para activar le permite tocar o
hacer clic en el botón para activar una celda.

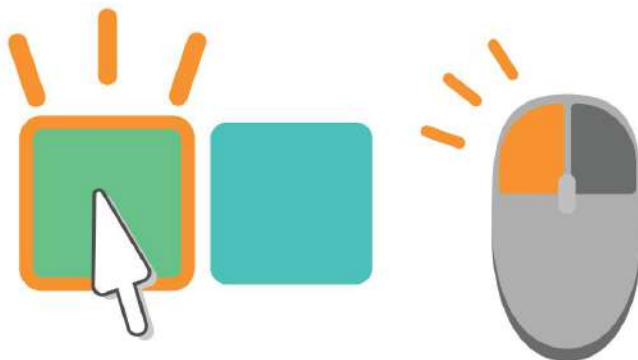


Mantener pulsado para activar

Puede utilizar Mantener para activar para ajustar el tiempo que mantiene presionado un botón antes de que se active una celda.



Con esta opción seleccionada, puede ajustar cómo aparece la barra de progreso y si desea activar o desactivar la escritura rápida .

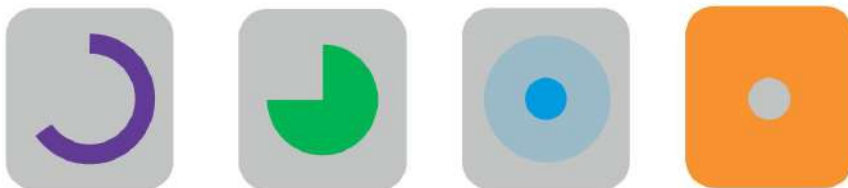

Permanecer para activar

Cuando selecciona la opción de permanecer para activar , al mantener el puntero sobre una celda y mantenerlo en ese lugar durante un tiempo determinado, se activará la celda.




Puede ajustar el tiempo de permanencia, la apariencia de la permanencia y si desea activar o desactivar la escritura rápida .

Presione el interruptor para activar

Puede combinar el movimiento de un puntero con un interruptor para poder mover el puntero en la pantalla y luego usar un interruptor para activar o hacer clic en la celda.

Esta configuración requerirá que usted tenga conectado un

cambia a tu Grid Pad.

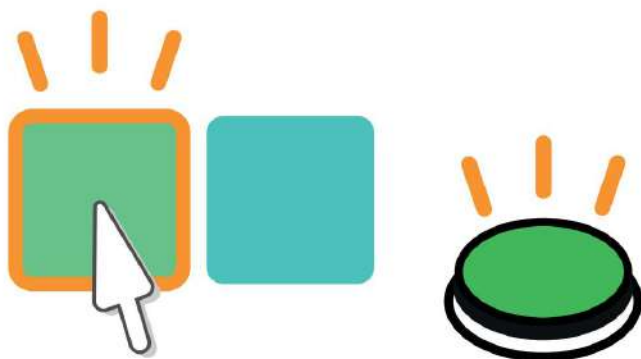

Prevención de activaciones repetidas

Cada una de las configuraciones de activación tiene la opción de filtrar clics y pulsaciones repetidas dentro de un tiempo establecido.

Destacando

La sección de resaltado te permite ajustar la respuesta visual al activarlo. Puedes elegir entre cuatro estilos y una gama de colores.


También puedes agregar sonidos para recibir retroalimentación cuando

Activando y resaltando células.

Control por computadora

Tiene varias opciones para ajustar cómo actúa el puntero cuando usa Grid para acceder a otras aplicaciones.


La mayoría de las aplicaciones de Windows responden a clics, doble clics y una combinación de arrastrar y mantener presionado para realizar acciones.

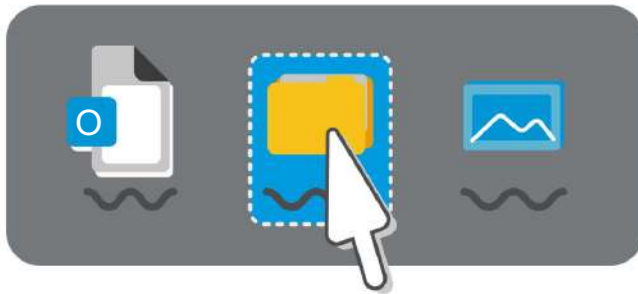

Las cuadrículas de control de computadora en Cuadrícula permiten seleccionar el tipo de clic o acción que se desea realizar. Las opciones de clic se encuentran en Control de computadora en Configuración - Acceso - Puntero. le permite cambiar la forma en que realiza ese clic.

Zoom para hacer clic

La opción de hacer zoom al hacer clic le permite enfocar el área de la pantalla con la que desea interactuar.

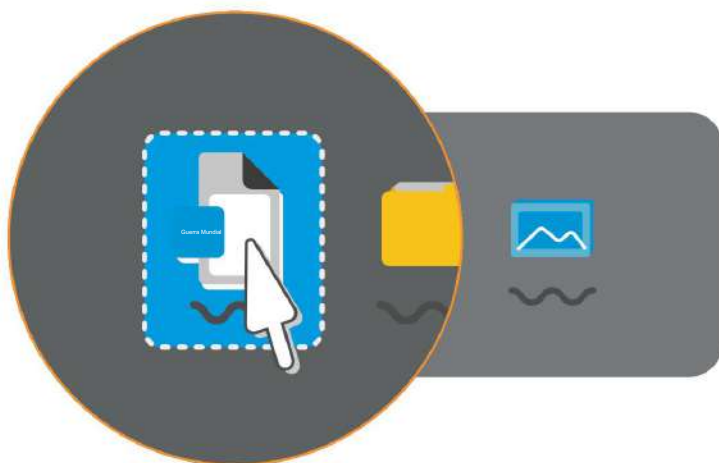


Puede ajustar la cantidad de aumento y el tiempo que tarda el zoom.

Detenerse para hacer clic

La opción Mantener pulsado para hacer clic le permite mantener el puntero sobre el área que desea activar.

Si mantiene el cursor en su lugar durante un tiempo determinado,


Activa el clic elegido.

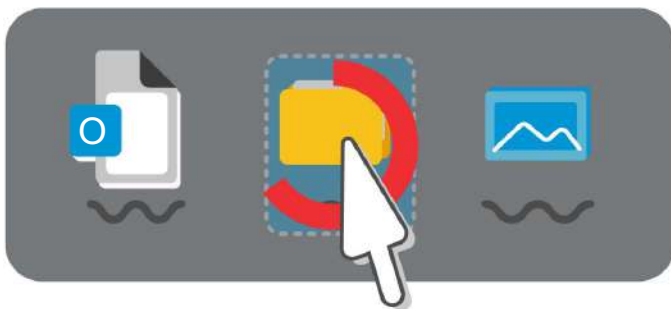

Puedes ajustar el tiempo que tarda en completarse la permanencia y el color del resaltado.

Presione el interruptor para hacer clic


Si tiene un interruptor conectado a su Grid Pad, puede usarlo para activar el clic de control de computadora seleccionado.

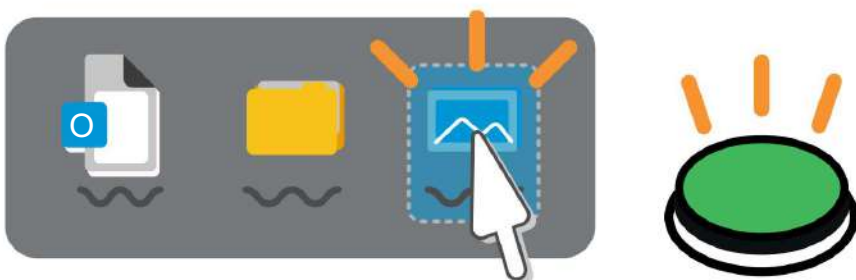

Cambiar la configuración del puntero en Ventanas


Windows tiene configuraciones adicionales que puedes usar para hacer que el puntero sea más visible y ajustar la velocidad a la que se mueve en la pantalla.

Puede encontrar estas configuraciones en el menú Inicio - Configuración - Dispositivos - Mouse.

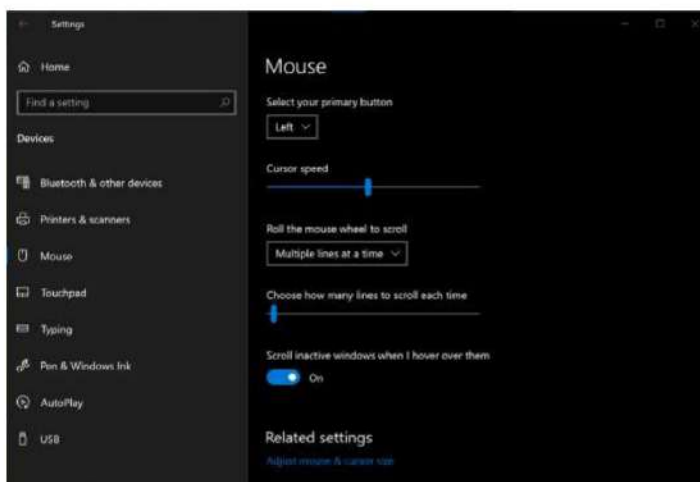

Aquí puedes ajustar qué botón de tu dispositivo es el principal. También puedes ajustar la velocidad.

Seleccionar Ajustar tamaño del mouse y del cursor le permite hacer que el cursor sea más visible ajustando su tamaño y color.

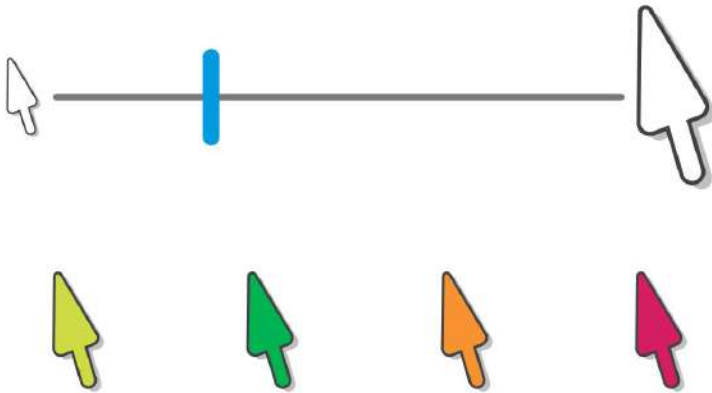

Estudio de caso de acceso de punteros

Ezra tiene veintipocos años y usa un joystick para acceder a su dispositivo. Su mango en forma de T le ayuda a mantener un agarre firme y a controlar mejor el movimiento del puntero .



El Grid Pad de Ezra

está montado en su silla de ruedas, y el joystick está en la bandeja. Le gusta el joystick porque el puntero acelera hacia su objetivo al mantener el extremo de la barra en T en su posición y se ralentiza al soltarlo.

Ezra asiste a un colegio residencial y usa su Grid Pad para apoyar su comunicación hablada, para comunicarse de forma remota con



amigos y familiares, y acceder a las redes sociales.

También usan su dispositivo para controlar las puertas de su habitación y algunas áreas de la universidad, así como cosas como su televisor.

Ezra usa un conjunto de cuadrículas llamado WordPower 100.

Recientemente, sus tutores universitarios han agregado una celda que lleva a Ezra entre sus cuadrículas de WordPower y sus cuadrículas de Control de Computadora .


En su configuración de cuadrícula, Ezra está configurado con acceso mediante puntero y clic para activar , y utiliza el botón en su joystick para esto.

En la configuración, el resaltado del puntero de Ezra está configurado para ampliar y colorear la celda. Esto ayuda a proporcionar un área de celda más grande al llegar a donde desea, dándole tiempo para soltar la barra T o compensando pequeños golpes ocasionales al presionar el botón izquierdo.



29 Cambiar acceso

El acceso por interruptor es cuando interactúas con tu Grid Pad usando dispositivos de interruptor externos.

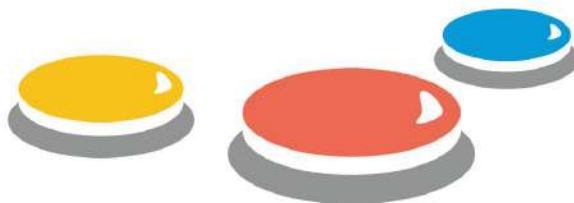

Los interruptores están disponibles en muchas formas y tamaños, desde botones simples hasta dispositivos complejos que se activan mediante expresiones faciales o movimientos musculares.


Puede conectar dos interruptores a su Grid Pad.

Estos utilizan los puertos de conmutación de 3,5 mm en la parte posterior del dispositivo, debajo de la cubierta del puerto.

También puedes conectar interruptores mediante los puertos USB o mediante Bluetooth.

Normalmente, al presionar un interruptor, se considera encendido o activado. Al soltarlo, se apaga.

Conexión de interruptores

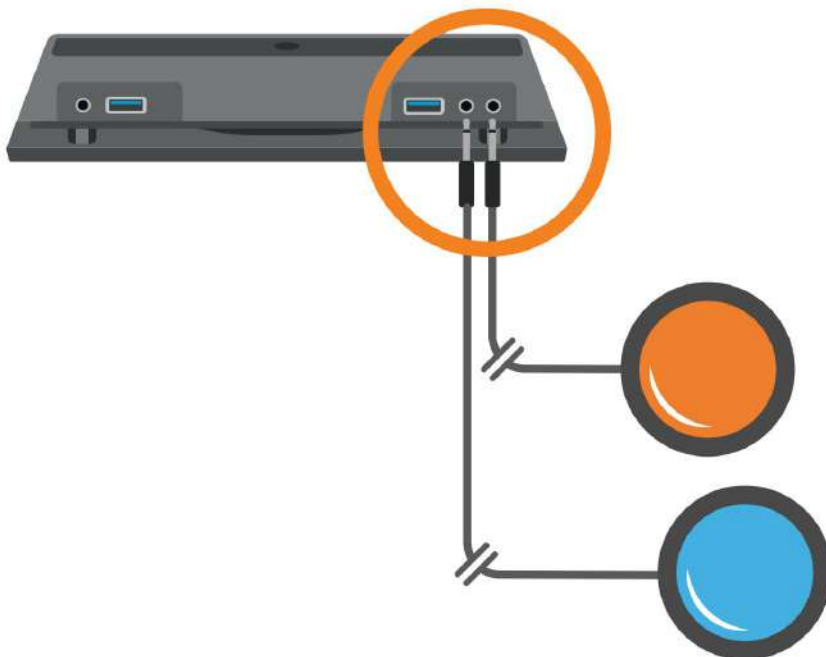

Retire la cubierta del puerto e inserte el enchufe del interruptor en el puerto.


Si está utilizando un conmutador, es mejor conectarlo al puerto denominado S2.

Una vez conectado, su conmutador deberá configurarse en Grid 3.

Agregar un interruptor en la cuadrícula

La configuración de los interruptores puede variar en complejidad. Descubrirá que tiene muchas opciones para que usar uno o más interruptores juntos sea lo más conveniente para usted.


Esta guía le mostrará los conceptos básicos que le ayudarán a comenzar.

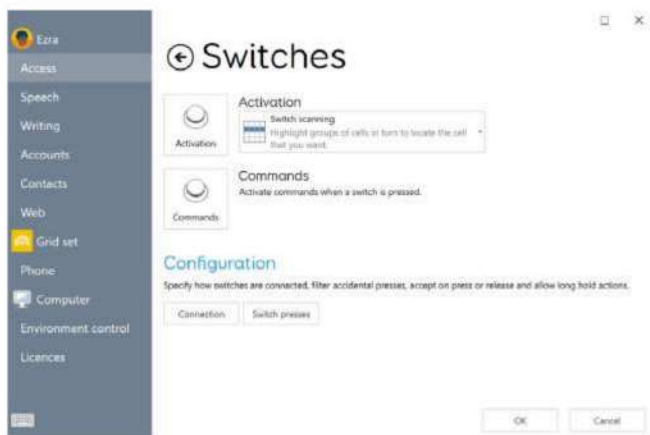

Puede encontrar la configuración de los interruptores en Menú - Acceso - Interruptores.

En la ventana de configuración de Switches, seleccione Conexión.

En el cuadro desplegable, seleccione Interruptores del panel de cuadrícula.

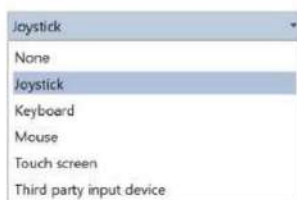

Puede activar o desactivar el interruptor y el ícono del interruptor se volverá verde para indicar que está activado.



Toque el botón Atrás para regresar a la ventana Interruptores.

Tu interruptor ahora está conectado a la red, sin embargo deberás elegir cómo funciona cuando se activa.

Activación

La lista desplegable de activación le permite

elige lo que sucede en tu conjunto de cuadrícula cuando se activa un interruptor.

Puedes elegir entre escaneo de Switch, joystick de Switch o eliminación de Switch. Puedes configurar el método de activación con el botón de Activación .



Escaneo de conmutadores


El escaneo por interruptor le permite localizar la celda en la cuadrícula que desea activar, siguiendo un resaltado que se mueve a través del conjunto de la cuadrícula.

Los conjuntos de cuadrículas se organizan en filas y columnas.



Al seleccionar Activación se mostrarán las opciones de escaneo de Switch.

En el encabezado Avanzado , puede utilizar el menú desplegable para elegir cómo desea escanear sus conjuntos de cuadrículas.

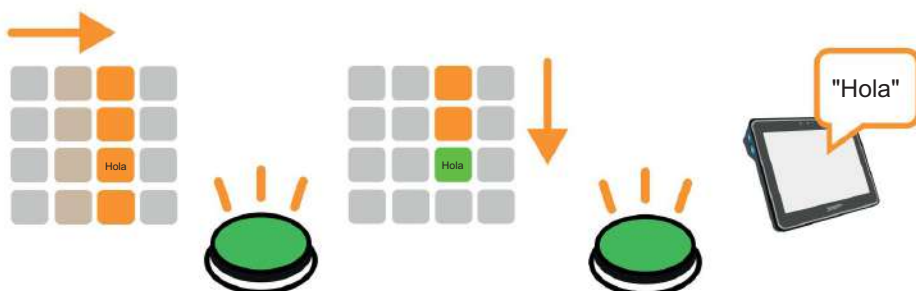


Un ejemplo de un escaneo de columna y luego de fila

También puede seleccionar si desea que el escaneo avance automáticamente o si desea utilizar otro interruptor para controlar manualmente el escaneo con toques o presiones.

Puede controlar la velocidad con la que avanza el escaneo. También puede elegir si desea que el escaneo se inicie automáticamente.

También dispone de varias opciones visuales para cambiar la apariencia del escaneo. Estas se encuentran en el apartado " Resaltado ".

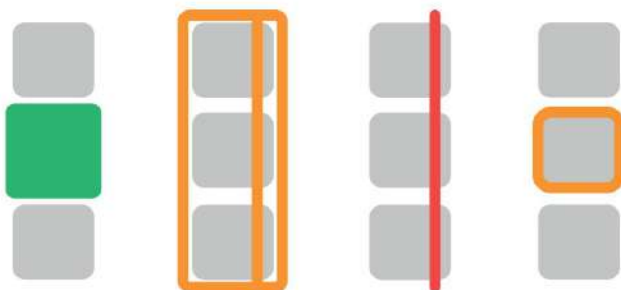

Ejemplos de resaltado de celdas al escanear con un interruptor


Puede ajustar el color y el tipo de resaltado, así como cualquier aumento.

También puedes agregar una descripción hablada o un sonido que siga al resaltado.

Joystick de conmutación

El joystick de conmutación le permite utilizar un joystick o un conjunto de interruptores para seleccionar las celdas en su cuadrícula. Estos se pueden conectar mediante USB, con un

adaptador o Bluetooth.

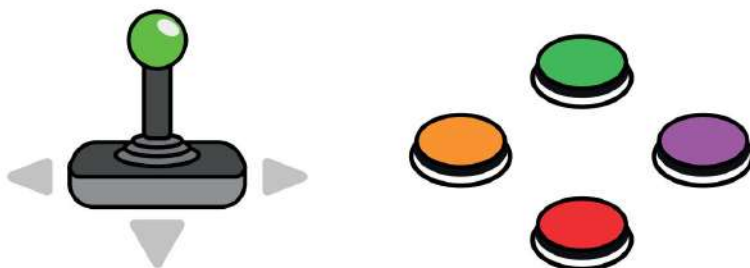

Al seleccionar Activación podrá elegir cómo actuará el joystick o el conjunto de interruptores.

En el encabezado Mover puedes elegir cómo responden el joystick o los interruptores al mantener presionados o tocarlos.


Puede agregar un interruptor adicional para activar celdas o elegir permanecer para activar la última celda resaltada.

Eliminación de interruptores

El método de eliminación del interruptor requiere dos o más interruptores conectados a su Grid Pad.

Con la eliminación de interruptores, su cuadrícula se divide en secciones que se activan mediante un interruptor asignado.

En el ejemplo siguiente, el interruptor 1 activa las celdas con un fondo rojo y el interruptor 2 activa las celdas con un fondo azul.

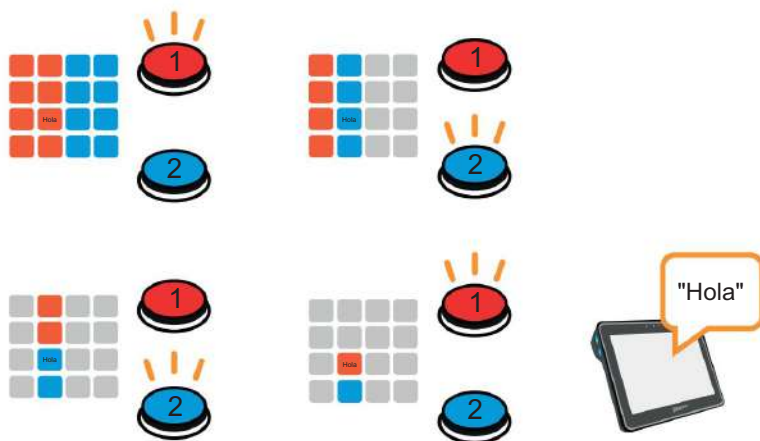

En el botón Activación , puede configurar la eliminación de interruptores para utilizar 2 o 4 interruptores.

También puedes cambiar los colores de cada bloque y configurar interruptores adicionales para detener y retroceder entre los pasos de eliminación.

Comandos de cambio


Puede asignar comandos de cuadrícula específicos a un interruptor.

Estos comandos se activarán cuando se presione el interruptor.

Puede agregar varios comandos a un conmutador si es necesario.

Puedes configurar un interruptor para activar un sonido, ir a la página de inicio de tu conjunto de cuadrícula o encender el televisor.

Para agregar un comando de cambio, seleccione el botón Comandos .

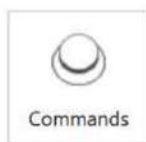

Commands

Activate commands when a switch is pressed.

La pantalla de comandos del interruptor mostrará todos los interruptores que tengan comandos asignados.

Para agregar un nuevo interruptor, seleccione Agregar interruptor botón.

Elija un Switch conectado .

A un interruptor que se utiliza para acceso también se le pueden asignar comandos.

Seleccione Agregar comando y busque el comando que desea activar.

Si el comando tiene opciones adicionales, como especificar qué cuadrícula abrir o qué sonido hacer, seleccionar Siguiente le permitirá personalizar la acción.



Al repetir este proceso se agregarán comandos adicionales y puedes arrastrar y soltar cada comando para cambiar el orden en que se activarán.

Pulsadores de interruptor

Puede filtrar y ajustar cómo responden sus interruptores a las pulsaciones accidentales en el botón Pulsaciones de interruptor.

Esta pantalla le permitirá ajustar el tiempo entre pulsaciones y, si desea, ajustar durante cuánto tiempo se puede mantener presionado un interruptor.



Métodos de conmutación alternativos

Puede utilizar otros dispositivos de entrada como interruptor, como un mouse, un teclado, un controlador de juegos o la pantalla táctil Grid Pad.

Seleccione el botón Conexión desde Menú - Configuración
- Acceso - Interruptores.

En la lista desplegable puedes seleccionar entre otros dispositivos que pueden usarse como conmutador.

Palanca de mando


Utilice un joystick o controlador de juego conectado por USB o Bluetooth como interruptor.



Cada botón del dispositivo se puede configurar como un interruptor independiente.

Si está utilizando una interfaz de conmutador, esto también se puede configurar en las opciones del Joystick .

Teclado

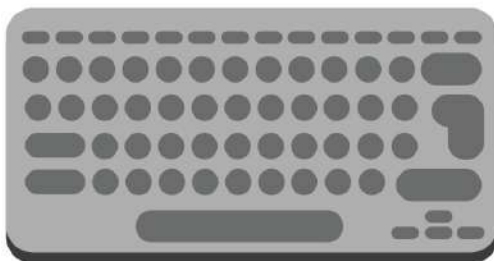

Si conecta un teclado a su Grid Pad ya sea con USB o Bluetooth, puede usar cualquier tecla para que actúe como interruptor.

Esto es útil para probar configuraciones más complejas cuando es posible que no tengas todos los interruptores disponibles.

Tenga en cuenta que si ha configurado una clave para que actúe como

interruptor, ya no podrá usar esa tecla normalmente mientras Grid esté abierto.

Ratón

Puede configurar los botones de un mouse conectado para que actúen como un interruptor.

Al igual que con la asignación de una tecla del teclado, no podrá usar el botón para navegar por su Grid Pad una vez que esté asignado como interruptor en Grid.

Pantalla táctil

Con la pantalla táctil seleccionada, toda la pantalla se convierte en un solo interruptor.



Tenga en cuenta que para continuar editando o accediendo a su Grid Pad fuera de Grid, necesitará conectar un mouse y un teclado.

Otros dispositivos

La mayoría de los conmutadores se conectan a los puertos de su conmutador o a los puertos USB y se muestran bajo el encabezado Joystick .


Algunos dispositivos que se conectan al puerto USB, o requieren software específico para funcionar, pueden aparecer como interruptores en la opción Dispositivo de entrada de terceros .

30 Caso práctico de acceso conmutado




Diego está aprendiendo a utilizar Grid con un interruptor. Anteriormente, su escaneo de interruptores estaba configurado para avanzar automáticamente, lo que significaba que cometía muchos errores y perdía la confianza rápidamente.

Su compañero de comunicación ha decidido probar la exploración asistida por el compañero. El compañero de comunicación usa un interruptor para avanzar la exploración y luego Diego usa

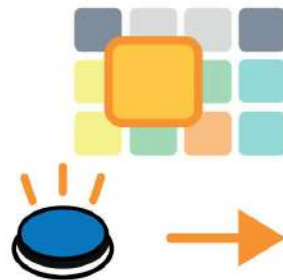

Su interruptor para seleccionar la celda deseada. En la configuración de cuadrícula, esto se llama "Tocar para avanzar".

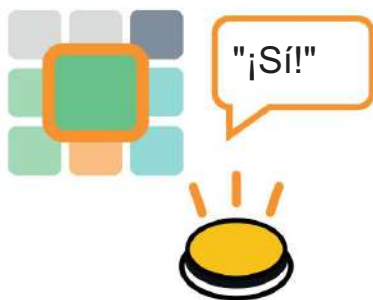

Este método permite al interlocutor establecer el ritmo a una velocidad que le funcione bien a Diego. Si ve que Diego intenta alcanzar su vara, puede hacer una pausa para darle tiempo a golpearla.

El interlocutor también puede activar la descripción en voz alta al resaltar, para darle a Diego información adicional sobre las celdas que está escaneando.

A medida que Diego avanza con el escaneo, su configuración se puede cambiar para avanzar automáticamente.

31

Activación por voz

La activación por voz le permite activar celdas en la cuadrícula con comandos de voz.



¡Hola Grid, TV! ¡Entra! ¡Canal Dos!


Esta puede ser una gran herramienta para usar Grid para controlar otros dispositivos como televisores y equipos de sonido.

Para utilizar este método de activación, necesitará utilizar el micrófono integrado en su Grid Pad o conectar unos auriculares mediante los puertos USB o Bluetooth.

Una vez configurado, puedes decir una frase de activación como “Hey Grid 3” seguida de la etiqueta de celda que deseas activar.

Puedes seguir agregando comandos y navegando por tu cuadrícula. Después de un período sin comandos, la cuadrícula se detendrá y tendrás que...

Utilice la frase de despertador nuevamente.

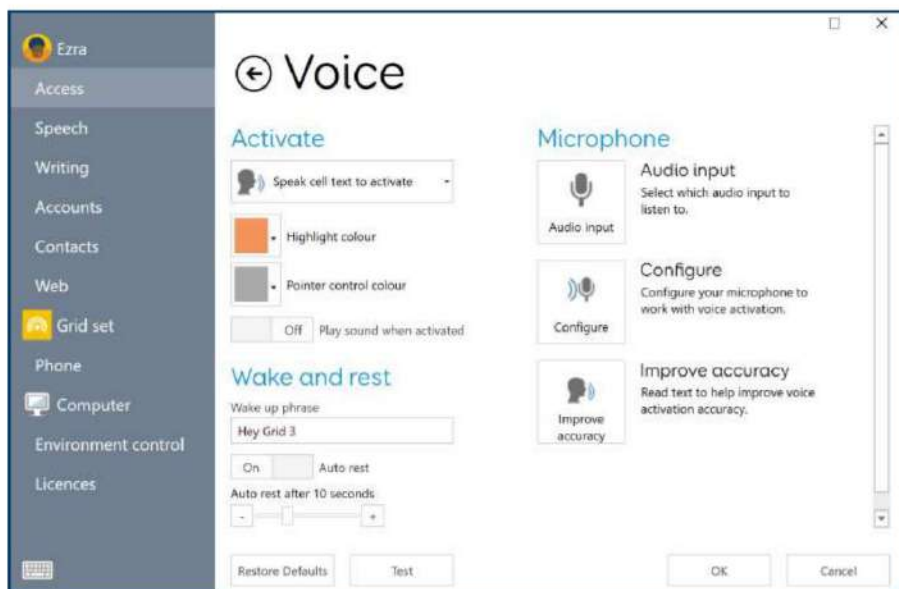

Mejorar la precisión de la voz

Tiene varias opciones para mejorar la forma en que Grid responde a su voz.

Las opciones Configurar y Mejorar la precisión son herramientas que le ayudarán a ajustar su configuración para garantizar que su voz se capte correctamente.

Si utiliza su Grid Pad para acceso de voz, también puede considerar un micrófono USB dedicado que puede mejorar la precisión.

También puedes utilizar auriculares y micrófonos Bluetooth.

Almohadilla de cuadrícula 10s

características

Su Grid Pad 10s tiene muchas funciones adicionales que puede aprovechar.

En esta sección se explican estas funciones para que puedas encender y apagar tu dispositivo de forma remota, conectar un teléfono inteligente y enviar tu voz y más a la segunda pantalla.

32. Botón de encendido remoto 33.	126
Uso de los puertos del interruptor del botón de encendido remoto	128
34. Cambio de las baterías del botón de encendido remoto 35.	130
Emparejamiento del botón de encendido remoto 36.	131
Pantalla de luz diurna 37. Uso	132
de la segunda pantalla 38. Uso de	134
infrarrojos 39. Configuración	138
de un control remoto infrarrojo 40. Configuración	139
manual de un control remoto infrarrojo	
41. Conexión de un	140
teléfono 42. Programación de	146
botones	148


32 Botón de encendido remoto

Su Grid Pad tiene un botón de encendido remoto incluido.

El botón de encendido remoto le permite encender y apagar su Grid Pad.

También se puede utilizar para configurar interruptores alejados del dispositivo.

El botón de encendido remoto viene emparejado con su Grid Pad de fábrica.

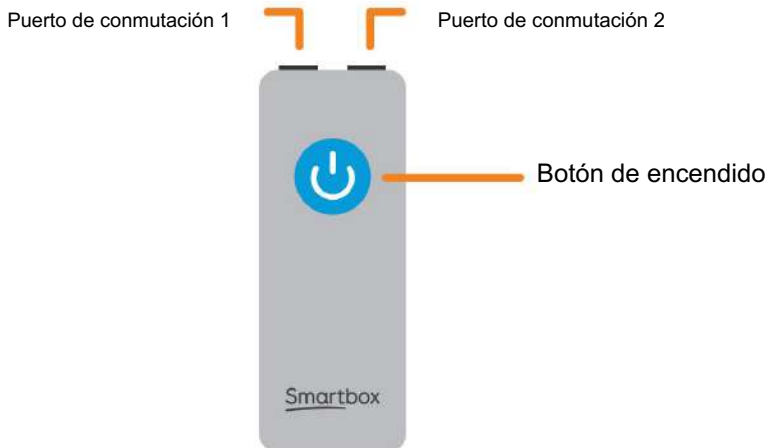

El puerto 1 del conmutador también funciona como botón de encendido.

Puede configurar cómo se comporta su botón de encendido remoto mediante Grid.

Puede encontrar la configuración en Menú - Configuración - Computadora.



Desde esta pantalla puedes alternar si quieres que tu botón de encendido remoto se encienda con el control remoto.
y apagar con control remoto.


También puedes elegir cuánto tiempo debe mantenerse presionado el botón o el interruptor conectado antes de que el dispositivo se apague.

33

Uso del control remoto de energía

Puertos de interruptor de botón

Los dos puertos en la parte superior del botón de encendido remoto le permiten conectar uno o dos interruptores con un enchufe estándar de 3,5 mm.

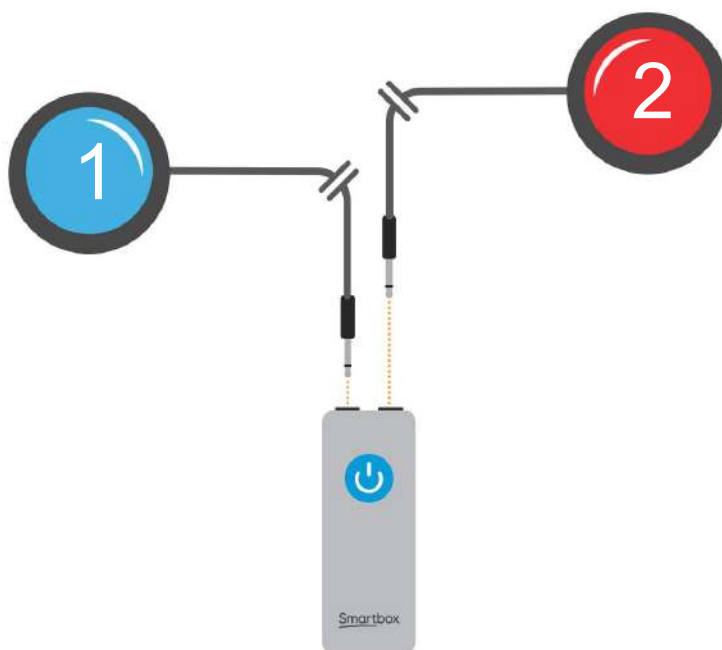

El puerto 1 del interruptor también puede actuar como botón de encendido, lo que le permite utilizar un interruptor conectado para encender y apagar su dispositivo.

Los puertos del interruptor del botón de encendido remoto están vinculados a los puertos del interruptor del Grid Pad.


Un interruptor conectado al Puerto 1 del botón de encendido remoto hará lo mismo que un interruptor conectado al Puerto 1 en su Grid Pad, de modo que puede usarlo para activar celdas en Grid y alternar el apagado del dispositivo con una presión prolongada.

34 Cambio de pilas

El botón de encendido remoto utiliza dos pilas AAA.

Para cambiar las pilas del botón de encendido remoto necesitas utilizar un destornillador para quitar los cuatro tornillos de la parte trasera del dispositivo.

Retire la tapa de la batería y las baterías gastadas y reemplácelas por otras nuevas.

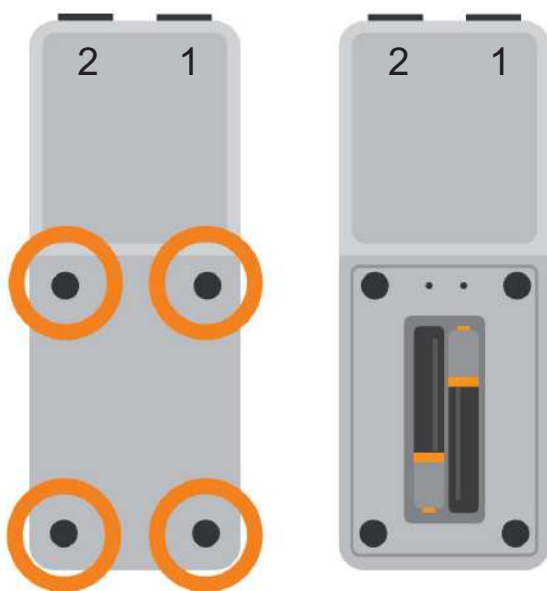

Emparejamiento del control remoto Botón


35

El botón de encendido remoto está emparejado con su Grid Pad desde fábrica.

Es posible que necesites emparejarlo nuevamente después de cambiar las baterías.



Mantenga presionados ambos botones de volumen del Grid Pad durante 10 segundos. El LED frontal parpadeará.

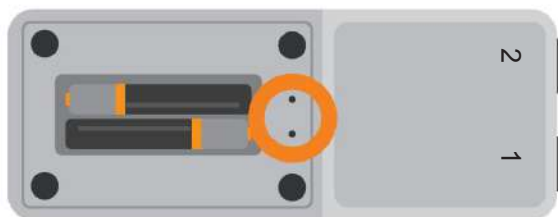

Use un alfiler o un alambre delgado para presionar el botón de emparejamiento, ubicado en el orificio izquierdo sobre las baterías. Manténgalo presionado durante 5 segundos hasta que los LED en la parte frontal del panel Grid parpadeen rápidamente para confirmar el emparejamiento.

36 Pantalla de luz diurna

La pantalla de su Grid Pad es brillante como la luz del día.
pantalla.

Esto significa que se puede ver claramente bajo la luz solar brillante cuando está configurado en su brillo máximo.

Tenga en cuenta que cuanto más brillante sea la pantalla, más batería consumirá. Un brillo de alrededor del 30 % es adecuado para uso en interiores.

Controlar el brillo de la pantalla

Ventanas

Puede ajustar el brillo de la pantalla en Configuración - Sistema - Pantalla.



Aquí también puedes activar la luz nocturna , que reduce la cantidad de luz azul de la pantalla durante la tarde y la noche. Esto puede ser útil si usas el dispositivo durante periodos prolongados.

Cuadrícula 3

Puede controlar el brillo de la pantalla desde la configuración o las cuadrículas de opciones de muchos conjuntos de cuadrículas.



Busque los comandos de brillo.

A veces son celdas individuales que aumentan el brillo cuando se seleccionan.

37 Uso de la segunda pantalla


La segunda pantalla de tu Grid Pad mostrará tus oraciones mientras hablas desde la Cuadrícula 3.

Puede cambiar su funcionamiento mediante las configuraciones que se encuentran dentro de sus conjuntos de cuadrículas.

También puedes encender o apagar la pantalla desde dentro de un conjunto de cuadrícula.

Cómo funciona la pantalla


La segunda pantalla refleja lo que hay en la ventana de chat de tu conjunto de cuadrícula.

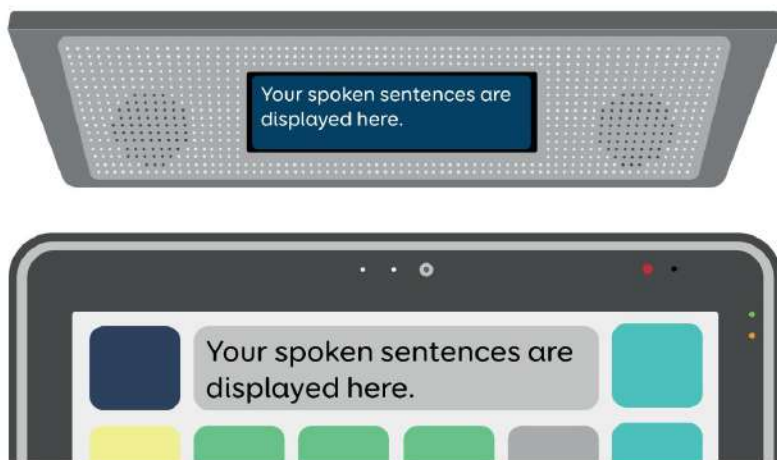

Comandos de cuadrícula que afectan al segundo pantalla

Habla mientras escribes


Si configura Grid para que hable mientras escribe, la segunda pantalla mostrará cada palabra a medida que se ingresa.

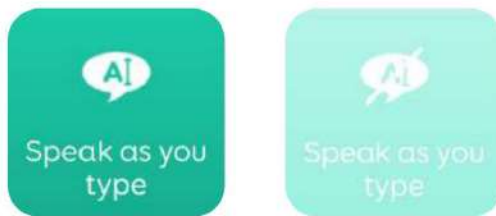

Si desactivas la opción "Leer mientras escribes" , la segunda pantalla mostrará tres puntos animados para indicar que estás escribiendo. Tu mensaje se mostrará al seleccionar " Leer mientras escribes".



Puedes encontrar opciones adicionales para Leer mientras escribes en la configuración de la cuadrícula. Puedes encontrarlas en Menú > Configuración > Voz.

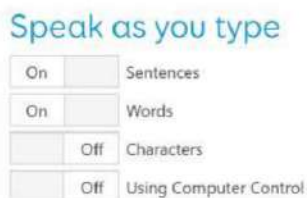

Aquí puede alternar entre oraciones, palabras, caracteres y si debe habilitarse la función de hablar mientras usa el control de computadora.

Segunda pantalla



Al alternar la celda de la segunda pantalla, la pantalla se encenderá o apagará .

Silenciar

La segunda pantalla continuará mostrando sus mensajes, incluso si el volumen del Grid Pad está silenciado.



Esto significa que puedes compartir un mensaje silencioso, sin tener que transmitir un mensaje en voz alta.

Agregar estas celdas a sus conjuntos de cuadrículas

Puede encontrar la Segunda pantalla, Hablar mientras escribe y Silenciar celdas en la configuración o herramientas de muchos conjuntos de cuadrículas.

También puedes agregarlos a un conjunto de cuadrícula existente en el modo de edición.

38 Uso de infrarrojos

Su Grid Pad tiene un receptor y un transmisor de infrarrojos (IR).



El receptor de infrarrojos se utiliza para aprender los controles de infrarrojos.
controles remotos.



Los transmisores IR se utilizan para enviar comandos IR desde
Grid a dispositivos como televisores y equipos de sonido.

Configuración de un control remoto por infrarrojos 39

Grid incluye conjuntos de cuadrículas de control ambiental Servus que están preparados para una variedad de dispositivos y electrodomésticos.

Uso de archivos remotos infrarrojos

Smartbox mantiene una lista de diferentes códigos de control remoto IR para muchos dispositivos de entretenimiento doméstico.

Antes de comenzar a configurar sus dispositivos, consulte la lista para ver si tenemos los códigos relevantes preprogramados para ahorrarle tiempo. Estos archivos se almacenan como archivos .remote. Para encontrar nuestra lista actual de...

Visitas remotas:

thinksmartbox.com/controles-remotos-ir

Instalar un archivo remoto

Para instalar un archivo .remote , descargue el archivo que necesita de nuestro sitio web, cierre Grid 3 y abra su Explorador de archivos.

Navegar a: Usuarios\Público\Documentos\
Smartbox\Grid 3\Control ambiental
Accesorios

Copie el archivo .remote en esta carpeta y abra Grid 3.

En Grid 3, vaya a Configuración – Control del entorno y ahora verá el nuevo dispositivo en la lista.

Configuración manual de un control remoto infrarrojo

40

Para configurar un control remoto manualmente, abra Grid 3 y vaya a Ajustes > Control del entorno. En Accesorios , seleccione Agregar.




Verás una lista de accesorios. Selecciona el tipo que quieras configurar y accederás a la pantalla de aprendizaje.



Aquí puedes nombrar tu dispositivo, cambiar el ícono y aprender acciones remotas.

Seleccione la acción que desea aprender, por ejemplo Potencia, luego toque el botón Aprender en el lado derecho de la ventana.

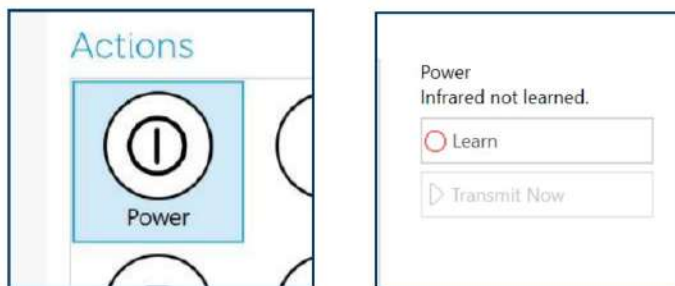

Aparecerá la ventana Aprender infrarrojos y se le pedirá que siga las instrucciones en la pantalla.

Apunte su control remoto directamente al frente de su Grid Pad, al menos a 2 pulgadas de distancia.

Verá el LED rojo del receptor en la parte superior derecha.



Cuando se recibe el código IR, este LED parpadeará una vez.

Una vez completada, la acción se volverá verde y podrá probarla tocando "Transmitir ahora". Siga estos pasos para cada acción correspondiente que aparezca en su control remoto y, luego, haga clic en "Aceptar" para guardar y volver a la ventana de control del entorno.

Controlar múltiples accesorios

Si está controlando más de un mismo

tipo de accesorio, puede utilizar celdas de contenido automático en sus conjuntos de cuadrícula de control de entorno.

Si tienes un televisor en el dormitorio y en la sala de estar, por ejemplo, puedes crear dos celdas de contenido automático de Televisión para elegir a qué televisor enviar comandos.



Comandos infrarrojos únicos

Si tienes un accesorio o juguete con pocas funciones, puedes usar el comando Infrarrojos para crear una celda de una acción específica.

Cuando agregue el comando Infrarrojo, accederá a la ventana Aprender Infrarrojo . Siga las

instrucciones en pantalla y haga clic en Aceptar para agregar el comando a una celda.


41 Conexión de un teléfono

Puedes conectar un iPhone Android o Apple a su Grid Pad para que pueda leer y enviar mensajes SMS y realizar y recibir llamadas telefónicas.

Esto utiliza Bluetooth, por lo que necesitarás tener tu teléfono encendido y cerca de tu Grid Pad.

Puede conectar dispositivos Android con Android 6 y superior o iPhone 6 y superior con el sistema operativo más reciente (iOS13 al momento de escribir este artículo).

Abra Grid, seleccione el menú y seleccione Configuración – Teléfono.

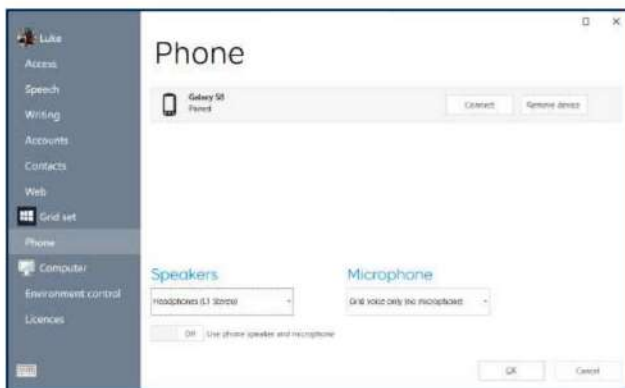

Los teléfonos detectables aparecerán en el Teléfono pantalla.

Toque Conectar junto a su teléfono para comenzar el emparejamiento.

Tu teléfono mostrará una notificación de confirmación, generalmente con un código PIN. Selecciona "Confirmar" o "Sí" para continuar con el emparejamiento.

También podrías recibir un par de avisos adicionales en tu teléfono mientras se empareja. Estos sirven para permitir que Grid acceda a varias funciones. Acepta todos los avisos.

Una vez completado el emparejamiento, verá una lista de lo que su teléfono puede hacer mientras está conectado a Grid.

Tu teléfono también comenzará a sincronizar mensajes y llamadas, por lo que es posible que comiences a ver ventanas emergentes en Grid.

42 Botones de programación

Los botones de volumen se pueden programar en Grid para que actúen como interruptores.



Se les pueden asignar una serie de comandos, de modo que puedas usarlos para cerrar un conjunto de cuadrículas, abrir una cuadrícula específica, ajustar el brillo y más.

Abra Configuración - Acceso - Interruptores.

Toque Conexión.

Selecione Teclado.

Selecione el interruptor que desee configurar y toque Cambiar clave.

Se abrirá una nueva ventana, presione el botón Subir o Bajar volumen en su Grid Pad.

Toque hacia atrás.

Ahora puedes asignar comandos a tu botón seleccionando el interruptor.



Cuidando de tu

Almohadilla de cuadrícula

Su Grid Pad es un dispositivo resistente, pero para que todo funcione sin problemas debe mantenerlo actualizado, respaldado y limpio.

Si tienes algún problema, también puedes averiguar dónde obtener ayuda.

43. Actualización de Grid 3	152
44. Actualización de Windows	154
45. Copia de seguridad de sus conjuntos de cuadrículas con Dropbox	155
46. Copia de seguridad de su usuario de Grid	156
47. Limpieza y almacenamiento de su Grid Pad	158
48. Propiedades antimicrobianas	160
49. Soporte	161
50. Cómo encontrar su modelo y número de serie	162

43 Actualización de la cuadrícula 3

Grid 3 tiene actualizaciones periódicas que introducen nuevas características y contenido, así como soporte para nuevos métodos de acceso y dispositivos.

Si su dispositivo está en línea, Grid 3 buscará actualizaciones y mostrará un ícono en la barra de menú si hay una nueva versión disponible.



Toque el ícono y siga las instrucciones en pantalla.
La red se reiniciará durante este proceso.

Comprobar actualizaciones manualmente

Abra el menú Inicio.

Busque la carpeta Smartbox .

Seleccione Actualizar Smartbox.

Esto actualizará todo el software de Smartbox en su Grid Pad, que incluye Grid, Look to Learn y más.

Acceso anticipado

Antes de su lanzamiento oficial, Grid entra en una fase llamada Acceso Anticipado. Se trata de una versión preliminar que muestra nuevas funciones y constituye la etapa final de pruebas.

Puedes activar el acceso anticipado en Configuración – Computadora.

No se recomienda utilizar Early Access si su Grid Pad es su dispositivo de comunicación principal.

44 Actualización de Windows

El sistema operativo de tu Grid Pad, Windows, recibe actualizaciones frecuentes de Microsoft. Estas mantienen tu dispositivo seguro y libre de errores, además de incorporar nuevas funciones.

Normalmente, se descargan mientras el Grid Pad está conectado a internet. Se instalan al apagar o reiniciar el dispositivo.

Comprobar actualizaciones manualmente

Abra el menú Inicio .

Vaya a Configuración - Actualizaciones y seguridad - Actualización de Windows

Windows descargará las actualizaciones disponibles y se preparará para instalarlas. La mayoría de las actualizaciones requieren que reinicie el dispositivo.

Realice una copia de seguridad de sus conjuntos de cuadrícula utilizando

45

Dropbox

Es importante mantener una copia de seguridad de sus conjuntos de cuadrícula y del perfil de usuario.

Puedes vincular tu cuenta Smartbox a una cuenta de Dropbox en Configuración – Cuentas.

Seleccione Dropbox y luego inicie sesión para vincular sus cuentas.

Cuando su cuenta Smartbox esté vinculada a Dropbox, sus conjuntos de cuadrículas y los archivos almacenados en mensajes se cargarán automáticamente.


Esto también significa que puedes usar Grid 3 en Windows y Grid para iPad y mantener tus conjuntos de cuadrículas sincronizados.

46 Realice una copia de seguridad de su usuario de Grid

Puede realizar una copia completa de su usuario de Grid desde la pantalla Usuario de Grid 3.

Vaya a Menú – Configuración y seleccione su usuario nombre.

En la parte inferior de la ventana Configuración, verá el botón "Copia de seguridad de usuario" . Púlselo para elegir dónde guardar la copia de seguridad.

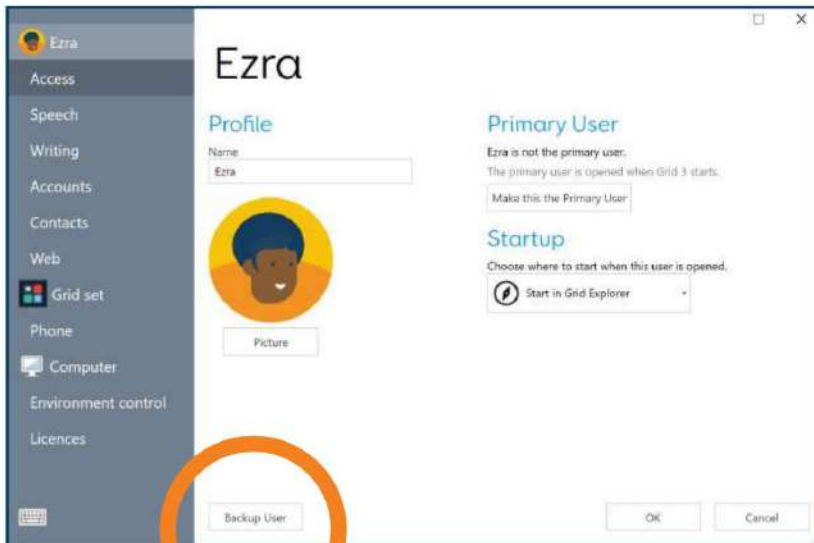

¿Qué información se respalda?

- Ajustes
- Conjuntos de cuadrícula
- Archivos de mensajes almacenados
- El diseño de su explorador de cuadrícula
- Predicciones
- Diccionario
- Contactos
- Notas
- Correo electrónico y mensajes de texto.

Restaurar una copia de seguridad

Puede restaurar su copia de seguridad de usuario en la pantalla de selección de usuarios. Si ya está en Grid, puede acceder a ella tocando Menú - Usuarios.

En esta pantalla seleccione Restaurar copia de seguridad Botón, localice su archivo de respaldo y toque Abrir.

47

Limpieza y almacenamiento de su

Almohadilla de cuadrícula

El cristal frontal de su Grid Pad se puede limpiar con un paño de microfibra. Debe limpiarlo regularmente con una toallita antibacteriana.

También puedes usar toallitas con alcohol para limpiar tanto la pantalla como la carcasa exterior del Grid Pad.

No utilice líquido de limpieza en aerosol, gel ni pulimento directamente sobre su Grid Pad, ni sumerja el dispositivo en agua.

Cómo guardar su Grid Pad

Cuando no esté en uso, su Grid Pad debe almacenarse de forma segura.

No apoye ni presione objetos duros contra el pantalla.

Desconecte todos los dispositivos conectados a los puertos del Grid Pad, incluidos los puertos USB, los puertos del conmutador y el cable de alimentación.

Almacenamiento del botón de encendido remoto

Al guardar su Grid Pad, le recomendamos quitar las baterías AAA del botón de encendido remoto y desconectar todos los interruptores.

48

Propiedades antimicrobianas

Los dispositivos de comunicación Grid Pad utilizan tecnología Sanitized® dentro de la carcasa y la pantalla.

Está clínicamente probado que esta tecnología retarda el crecimiento de bacterias y la propagación de virus mediante el uso de pequeñas partículas de plata que impiden que los microbios se repliquen.

Puedes encontrar este acabado en:

- Inhibe el crecimiento de bacterias y virus.
- Previene olores desagradables
- No se puede eliminar mediante la limpieza.



Apoyo

49

Nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarle.



Chat en línea
thinksmartbox.com

Correo electrónico

soporte@thinksmartbox.com



Teléfono

Reino Unido: 01684 578868

EE. UU.: (844) 341-7386

Refacción

Nuestro equipo de Reparaciones
puede cuidar de su dispositivo en
caso de daño.



50

Cómo encontrar su modelo y número de serie

Cuando contacte con nuestro equipo de soporte, tenga a mano el modelo y el número de serie de su dispositivo. Esto nos ayudará a identificar el dispositivo con el que tiene el problema.

Puede encontrar el número de serie en la parte posterior de su Grid Pad.

El número de serie del dispositivo se encuentra debajo del soporte, levante el soporte y el número de serie se encuentra aquí:



Contacto de soporte del proveedor

Contactar con Smartbox

Nuestro equipo de soporte está aquí para ayudar.

Puede comunicarse con nuestro equipo del Reino Unido los días laborables en

01684 578868

Puede comunicarse con nuestro equipo de EE. UU. de lunes a viernes en

(844) 341-7386

Puede enviarnos un correo electrónico a

soporte@thinksmartbox.com