

Gravity Chair

Manual del usuario



- ☐ VERSIÓN CLÁSICA - PEQUEÑA
#3770-0011
- ☐ VERSIÓN CLÁSICA - MEDIANA
#3770-0012
- ☐ VERSIÓN CLÁSICA - GRANDE
#3770-0013
- ☐ VERSIÓN CLÁSICA - EXTRA GRANDE
#3770-0014
- ☐ VERSIÓN LIMPIABLE - PEQUEÑA
#3770-0021
- ☐ VERSIÓN LIMPIABLE - MEDIANA
#3770-0022
- ☐ VERSIÓN LIMPIABLE - GRANDE
#3770-0023
- ☐ VERSIÓN LIMPIABLE - EXTRA GRANDE
#3770-0024

AVISO IMPORTANTE DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:

Este manual contiene instrucciones importantes que deben transmitirse al usuario de este producto.

No retire este manual antes de entregárselo al usuario final.

PROVEEDOR:

Este manual debe entregarse al usuario de este producto.

USUARIO:

Antes de utilizar este producto, lea todo el manual y guárdelo para futuras consultas.

medifab®

Manual de usuario de la silla Gravity
Manual: GravityChair201810

Número de serie:

SILLA DE GRAVEDAD

Medifab recomienda consultar con un profesional sanitario, como un terapeuta ocupacional, para determinar si la silla Gravity es adecuada para el usuario. Para evitar lesiones, lea, comprenda y siga todas las instrucciones y advertencias de este manual antes de instalar y usar la silla Gravity, en particular las precauciones de seguridad. Tenga en cuenta que los colores están sujetos a cambios.

APOYAR LOS BRAZOS en una posición con los codos hacia adelante, de modo que los hombros estén en una posición natural y relajada, significa que la tensión muscular alta es más leve.

El ángulo de la rodilla es MENOS DE 90°



El asiento y el respaldo reclinados significan que ambos lados de la silla mantienen la POSTURA del usuario ESTABLE. Sin el uso de cinturones y almohadillas

Forma estrecha APOYA LA CUERPO en buena posición

POSTERIOR/ANTERIOR

La inclinación se puede ajustar mediante la cuña de inclinación.

1. Soporte para la cabeza: La espuma ergonómica en forma de onda mantiene estable la posición de la cabeza y evita que se caiga hacia los lados.

2. Cubierta: La versión clásica cuenta con tejido transpirable en las superficies de contacto del usuario y el panel trasero, y es lavable en todas las demás áreas. La versión lavable es completamente lavable, incluyendo las superficies de contacto internas donde se sienta el cliente.

3. Forro del asiento: La tela de malla de aire con cojín acolchado en el interior mantiene la espalda seca y cómoda.

4. Espaciador: Ubicado debajo de la funda, bajo las caderas. Se puede quitar para una posición sentada más profunda si es necesario.

5. Bolsillo lateral: guarde este manual del usuario y otras pertenencias pequeñas en el interior.

6. Cuña de inclinación: se utiliza para reclinar la silla a la posición más adecuada para el usuario.



Asiento de apoyo: la inclinación del cuerpo principal mantiene al usuario en una posición estable y, como el asiento y el respaldo están siempre en ángulos rectos, las caderas del usuario soportan el peso.

Suave: Al no tener partes duras, no hay dolor en las zonas del cuerpo que tienen contacto con la silla.

Estable: Aunque la silla Gravity es suave, garantiza una posición de asiento estable porque distribuye la presión y los movimientos, y el tronco se apoya de acuerdo a la forma del cuerpo.

Capacidad de absorber el movimiento: Los movimientos repentinos causados por tensión muscular o estiramientos intensos se absorben, ya que el asiento se adapta al movimiento mediante deformación. Tras la deformación, gira lenta y automáticamente a su posición original.

Soporte lateral: Incluso con un control de posicionamiento insuficiente, el paciente logrará una buena posición sentada gracias al diseño ajustable de la silla. El diseño estrecho de la silla permite que la persona sentada adopte una postura casi siempre simétrica, especialmente cuando los músculos están relajados.

Fácil ajuste: La silla Gravity se puede ajustar fácilmente para pacientes con deformidades y contracciones quitando la espuma.

Ligero: la silla Gravity es liviana y fácil de mover.

Una excelente manera de sentarse: si un cliente siempre está acostado durante el día, paso a paso se pueden reducir los tiempos en posición acostada y se pueden evitar los problemas de estar acostado permanentemente al introducir la silla Gravity.



El objetivo es la relajación: utilizar la Gravity Chair como sistema de asiento alternativo hace que la vida no sea tan monótona y se evitan las desventajas de una posición permanente.

Esta sensación positiva se intensifica aún más al cambiar de posición con frecuencia, dentro o fuera de la Silla de Gravedad. La relajación aumenta la posibilidad de comunicación y facilita que el paciente se relacione con su entorno.

Cuatro tamaños para niños y adultos: Elija el tamaño según la profundidad del asiento, que debe ser aproximadamente 2 cm menor que la longitud de la parte superior de la pierna del usuario. Si el ancho del asiento es demasiado pequeño, es fácil pulir la espuma si es necesario. Si el ancho del asiento es demasiado grande, simplemente use un cojín adicional junto al usuario.

Cuidado de la funda de tapicería: La funda es cómoda y suave. Está hecho de 100 % algodón y se puede desmontar y lavar en la lavadora. El material específico del relleno del cojín absorbe el sudor y es lavable.

La inclinación es el factor más importante de una silla Gravity para mantener una posición de asiento óptima. La cuña de inclinación es fácil de ajustar y usar para controlar la posición del asiento. Recline la silla hasta que la cabeza y el torso queden estables.

ADVERTENCIA

Preste atención a quienes presentan tono muscular y movimientos reflejos. Se requiere especial atención del cuidador para evitar resbalones.



Inclinación posterior



Inclinación anterior



Si el usuario tiene un equilibrio postural insuficiente hacia la izquierda o la derecha, la inclinación se puede ajustar utilizando la cuña de inclinación.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado para asegurarse de que la silla esté en una posición estable. La cuña inclinable no se puede utilizar junto con la base móvil.



Medidas	Pequeño	Medio	Grande	Extra grande
Altura del usuario	90-110 cm	110-130 cm	130-150 cm	150-170 cm
Profundidad del asiento	26 centímetros	32 centímetros	40 centímetros	45 centímetros
Ancho del asiento en la parte trasera	20 centímetros	23 centímetros	27 centímetros	30 centímetros
Ancho del asiento en la parte delantera	27 centímetros	30,5 cm	37 centímetros	40 centímetros
Altura de la espalda	60 centímetros	69 centímetros	74 centímetros	80 centímetros
Ancho total de la silla	46 centímetros	49 centímetros	57 centímetros	60 centímetros
Altura total de la silla	55 centímetros	61 centímetros	66 centímetros	71 centímetros
Profundidad total de la silla	60 centímetros	71 centímetros	82,5 cm	91 centímetros

Una Silla Gravity puede considerarse la "silla secundaria" del usuario para relajarse, si la "silla principal" se utiliza para comer, jugar y estudiar. Se recomienda alternar la posición de sentado entre la Silla Gravity y la "silla principal".



ADVERTENCIA

Permanecer más de 30 minutos en la misma posición puede causar dolor. Se recomienda cambiar de posición regularmente o levantarse de la silla cada 30 minutos. Si tiene dificultad para cambiar de posición por sí solo, el cuidador debe prestar especial atención.



ADVERTENCIA

Nunca utilice la silla Gravity cerca de fuego, cigarrillos, encendedores o calentadores.



ADVERTENCIA

Durante el uso, no deje al usuario sin supervisión. Podría perder el equilibrio y causar situaciones peligrosas.



ADVERTENCIA

No utilice la silla Gravity para ningún otro fin que no sea el previsto. No la utilice como asiento de coche. No juegue con ella ni la utilice como taburete. Esto podría causarle lesiones.

Use un detergente suave para limpiar las fundas y el acolchado del asiento sucios, o séquelos a la sombra después de lavarlos con agua. El acolchado del asiento está hecho de 100 % poliéster y la funda (cuerpo principal/cuña de inclinación/ El reposacabezas/bolsillo está fabricado en 100% algodón.



Figura 1a

No lavar en seco	No usa blanqueador	Acción mecánica reducida	No dejar caer seco	Secar a la sombra	Plancha caliente



Figura 1b

ADVERTENCIA

Preste especial atención al cerrar la cremallera de la silla Gravity.

No fuerce la cremallera para que no muerda el borde de la espuma de uretano interior, ya que esto provocará que la cremallera se atasque y/o se descarrile en el peor de los casos (ver Figura 1a).

Al cerrar la cremallera, preste mucha atención y súbala muy despacio y con cuidado, empujando el borde de espuma de uretano hacia adentro con los dedos para que la cremallera no lo corte. Preste especial atención a las esquinas (ver Figura 1b).



SILLA DE GRAVEDAD

Mesa de bandeja de terapia

- Pequeño (para talla 1 y 2) 3770-7101-000
- Grande (para tallas 3 y 4) 3770-7102-000
- Ancho (para tallas 3 y 4) 3780-7103-000



Base móvil completa con ruedas con bloqueo

- Talla 1 3780-8701-000
- Talla 2 3780-8702-000
- Talla 3 3780-8703-000
- Talla 4 3780-8704-000
- Mango de empuje de acero inoxidable 3780-8720-021



Forros de asiento de colores

Pequeño / Talla 1

- Rojo 3770-0311-022
- Verde 3770-0311-055
- Azul 3770-0311-066

Mediano / Talla 2

- Rojo 3770-0312-022
- Verde 3770-0312-055
- Azul 3770-0312-066



Grande / Talla 3

- Rojo 3770-0313-022
- Verde 3770-0313-055
- Azul 3770-0313-066

Extra grande / Talla 4

- Rojo 3770-0314-022
- Verde 3770-0314-055
- Azul 3770-0314-066

Mesa ajustable por gravedad

Solo pedido de sangría (disponible aproximadamente 3 meses a partir de la fecha del pedido).





ADVERTENCIA

Esto no es un juguete. Siga todas las instrucciones y úselo solo como se indica.
El uso irregular puede provocar lesiones graves al usuario.



Levante el elástico, luego tome la hebilla plástica en forma de D del cinturón de seguridad y engánchela.
Sujételo hacia un lado usando el anillo elástico del tope del cinturón.



Repita con el otro lado.



Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté completamente abierto en cada lado y sujeto por los topes del cinturón para que el usuario pueda sentarse en la silla sin sentarse sobre el cinturón de seguridad.





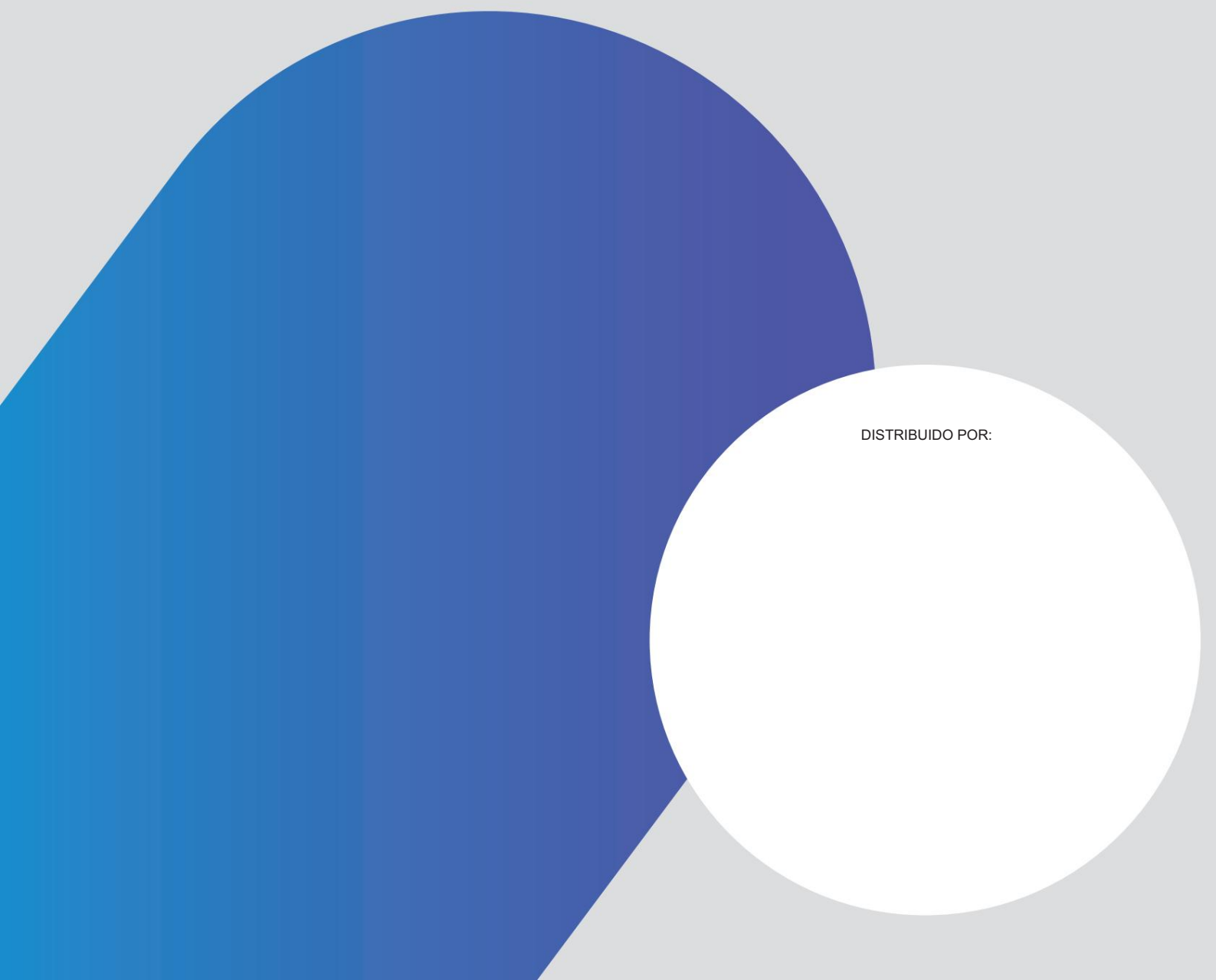
Distribuido por Medifab Ltd

32 Detroit Drive
Rolleston 7675
Nueva Zelanda

+64 3 307 9790

soluciones@medifab.com

www.medifab.com

A large, abstract graphic in the bottom half of the page. It consists of a large blue semi-circle on the left and a white circle on the right, which overlaps the blue semi-circle. The background is a light gray gradient.

DISTRIBUIDO POR: