

ENG



INSTRUCCIONES DE USO

Shark



CE

MD

Revisión 2-17.02.2025



¡ATENCIÓN! DURANTE EL USO Y EL MANTENIMIENTO, ASÍ COMO DURANTE LA INSTALACIÓN Y EL AJUSTE DE TODOS LOS MECANISMOS, EXISTE EL PELIGRO DE QUE ALGUNAS PARTES DEL CUERPO DEL USUARIO O DE SU ASISTENTE QUEDEN ATRAPADAS O COMPRIMIDAS EN LOS HUECOS/RANURAS ENTRE LOS ELEMENTOS. ESTA ACCIÓN DEBE TOMARSE CON EXTREMA PRECAUCIÓN. TRAS FINALIZAR EL AJUSTE, ES NECESARIO ESTABILIZAR LA POSICIÓN APRETAR CON PRECISIÓN LAS PERILLAS.

PERNOS.



¡ATENCIÓN! EL PAQUETE DEL PRODUCTO DEBE CONSERVARSE POR SI EL PRODUCTO REQUIERE RETRANSPORTE PARA GARANTÍA.



¡ATENCIÓN! MIENTRAS SE UTILIZA EL DISPOSITIVO, NO SE DEBE DEJAR AL NIÑO AFUERA. SIN SUPERVISIÓN.



¡ATENCIÓN! NO SE DEBE EXCEDER LA CARGA MÁXIMA DEL DISPOSITIVO.



¡ATENCIÓN! NO UTILICE EL DISPOSITIVO SI EL PRODUCTO PRESENTA DEFECTOS, PIEZAS DAÑADAS O FALTANTES.



¡ATENCIÓN! AJUSTE Y REGULACIÓN DEL DISPOSITIVO PARA CUMPLIR CON LAS REQUISITOS DE UN PACIENTE INDIVIDUAL DEBEN SER REALIZADOS POR UN ESPECIALISTA EN FISIOTERAPIA O UNA PERSONA CAPACITADA.



¡ATENCIÓN! EN CASO DE UN INCIDENTE MÉDICO GRAVE, EL USUARIO/PACIENTE DEBE INFORMAR EL INCIDENTE A LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES Y A EL FABRICANTE INMEDIATAMENTE.



¡ATENCIÓN! EL DISPOSITIVO CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS QUE PUEDEN REPRESENTAR UN RIESGO DE ASFIXIA O INGESTIÓN POR UN NIÑO.



¡ATENCIÓN! ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO, ASEGÚRESE DE LEER LAS INSTRUCCIONES DEL PROPIETARIO. MANUAL.

Contenido

1	Introducción	3	
2	Condiciones generales de seguridad	3	
3	Indicaciones y contraindicaciones de uso del producto	4	
4	Placa de identificación	5	
5	Marcado de símbolos	5	
6	Cumplimiento de los requisitos de los productos sanitarios	5	
7	Aplicación.....	6	
8	Datos técnicos	6	
9	Construcción del cochecito Shark	7	
10	Instalación del producto y primer lanzamiento	8	
10.1	Preparación para la operación	8	
10.2	Preparación para el uso	8	
10.3	Instalación del asiento en el chasis del cochecito	8	
10.4	Herramientas necesarias para ajustar el cochecito	9	
11	Uso y ajuste	9	
11.1	Despliegue y plegado del marco	9	
11.2	Montaje de las ruedas delanteras.		11
	Bloqueo de dirección de la rueda delantera.	11.3	12
11.4	Montaje de las ruedas traseras.	12	
11.5	Freno de estacionamiento.	13	
11.6	Pie basculante	14	
11.7	Mango de empuje	14	
12	Asiento de cochecito.....	14	
12.1	Ajuste del ángulo del respaldo	15	
12.2	Reposacabezas	16	
12.3	Soporte lateral	16	
12.4	Reposapiés	17	
12.5	Barra de seguridad	17	
12.6	Dosel.....	18	
12.7	Ajuste del ángulo del asiento	18	
12.8	Cinturones estabilizadores de cinco puntos	19	
12.9	Cinturones estabilizadores	19	
12.10	Secuestrador	19	
13	Accesorios	20	
13.1	Bandeja.....	20	
13.2	Insertos de montaje	20	
13.3	Cubierta de las piernas	20	
13.4	Funda para lluvia	21	
13.5	Bolsa debajo del bastidor	21	
13.6	Bolsa	21	
13.7	Chaleco estabilizador de línea Baffin	22	
13.8	Cinturones pélvicos de línea Baffin	22	
14	Repuestos y consumibles		22
15	Resolución de problemas.	22	
16	Limpieza y mantenimiento	23	
16.1	Recomendaciones de limpieza:	23	
16.2	Desinfección.....	24	
16.3	Recomendaciones de mantenimiento.....	24	
17	Eliminación del producto.....	24	
18	Condiciones de uso, almacenamiento y transporte	25	
19	Garantía/servicio	27	

1 Introducción

Shark, la silla de paseo para niños (en adelante, Shark) desarrollada por LIW Care Technology Sp. z oo ha sido diseñada para facilitar el cuidado diario de personas que necesitan transporte y cuyas enfermedades les impiden moverse de forma independiente y mantener una posición sentada correcta.

Nos hemos esforzado al máximo para garantizar que el cochecito Shark sea lo más fácil de usar posible, a la vez que ofrece una amplia gama de opciones de posicionamiento para el paciente. El dispositivo está diseñado principalmente para pacientes con parálisis y paresia de tres o cuatro extremidades, con parálisis de dos extremidades, unilateral o... cruzados, y cuyo peso no exceda de 40 kg.

2 Condiciones generales de seguridad

Antes de usar el cochecito, es necesario leer este manual. Siguiendo todas las recomendaciones, evitará daños al dispositivo y garantizará la seguridad y comodidad durante todo el uso del producto.

La principal preocupación de LIW Care Technology Sp. z oo es garantizar la seguridad de los pacientes que utilizan nuestros dispositivos. Para garantizar la total seguridad de los usuarios del cochecito Shark, deben seguirse estrictamente las siguientes

- recomendaciones:
1. Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente las instrucciones de uso y, en caso de duda, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.
 2. Asegúrese de comprender completamente toda la información, recomendaciones y advertencias contenidas en estas secciones.
 3. No deje al niño en el cochecito sin la supervisión de un tutor. 4. Cuando el niño esté sentado en el cochecito, asegúrese de que esté bien sujeto.
 - cayendose
 5. El cochecito infantil Shark Special está diseñado para ser utilizado por una persona a la vez.
 6. El uso inadecuado del cochecito puede resultar peligroso para la salud y provocar lesiones al usuario.
 7. Al usar y manipular el dispositivo Shark, así como al plegar o ajustar los mecanismos, preste especial atención a las piezas móviles que representan un riesgo real para la seguridad, como aplastar el cuerpo en agujeros o entre elementos. Después de cada ajuste, establezca la posición apretando cuidadosamente las tuercas y los pernos y asegúrese de que los componentes estén correctamente ajustados y fijados.
 8. Está prohibido transportar a un niño en el cochecito Shark mientras se conduce, es decir, el asiento del cochecito No es una silla de auto. El niño no puede permanecer en la silla mientras conduce.
 9. Está prohibido subir y bajar las escaleras con el cochecito, tanto con el niño como sin él.
 - paciente.
 10. El dispositivo no contiene sustancias que puedan suponer un peligro para la vida o la salud.
 11. Está prohibido transportar el cochecito con el paciente sentado en el asiento del mismo.

No se permiten modificaciones no autorizadas al dispositivo realizadas por el consumidor y pueden poner en peligro la vida o la salud del usuario y anulará la garantía

En las instrucciones de los dispositivos fabricados por LIW Care Technology Sp. z oo hay un párrafo marcado con el símbolo AVISO, cuyo propósito es llamar la atención sobre su contenido. El significado de dicho símbolo es el siguiente:



¡ATENCIÓN! Este símbolo se utiliza para llamar la atención del lector sobre el contenido marcado con este símbolo. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO CONTENIDO BAJO ESTA MARCA PUEDE PONER EN PELIGRO LA VIDA DEL USUARIO O SALUD.

3 Indicaciones y contraindicaciones de uso del producto.

El cochecito de asistencia Shark como dispositivo médico está destinado a pacientes con parálisis y paresia de tres o cuatro extremidades, así como parálisis unilateral o cruzada de dos extremidades.

El dispositivo médico Shark se recomienda para pacientes diagnosticados con:

- parálisis cerebral (PC), •
- distrofia muscular, • parálisis de
- diversos orígenes, • espina bífida, •
- mielomeningocele, •
- afecciones posteriores a lesiones
- de columna, • afecciones posteriores a
- lesiones craneoencefálicas, • estados posteriores a
- accidentes cerebrovasculares, •
- otras enfermedades que involucran paresia, parálisis y daño al sistema musculoesquelético
- que impiden el movimiento independiente.

Si existe una contraindicación para la posición sentada del paciente, la selección y el ajuste de la El uso del cochecito debe consultarse con el médico o fisioterapeuta.

El cochecito facilita el cuidado diario de los pacientes que requieren transporte y que no pueden moverse y sentarse correctamente sin ayuda.

Al principio, el paciente que utiliza el dispositivo debe acostumbrarse a la nueva ayuda. Por lo tanto, el paciente debe ser... Se sienta en él un par de veces al día durante unos minutos. El proceso de aceptación del dispositivo puede tardar desde unos minutos hasta varios días, dependiendo del estado de salud del paciente. El tiempo de permanencia en el dispositivo no está estrictamente especificado y depende del estado de salud y del proceso de rehabilitación; los pacientes suelen permanecer en él solo durante el transporte (salidas). El dispositivo garantiza la estabilización del paciente, ayuda a establecer una postura sentada correcta y facilita el desarrollo de la función cognitiva. También garantiza la comodidad y la seguridad del transporte.

Indicaciones:

- mejorar la ventilación pulmonar y prevenir la neumonía, • mejorar el estado
- mental, • tratar y ralentizar el progreso
- de la escoliosis en el caso de pacientes y adolescentes
- que perdió la función de caminar,
- crear una forma de sentarse correcta durante el transporte.

Contraindicaciones

- estado crítico del usuario, • sedación
- profunda, • fracturas
- inestables con recomendaciones ortopédicas específicas, incluidas fracturas de columna, • inestabilidad hemodinámica

4 Placa de identificación


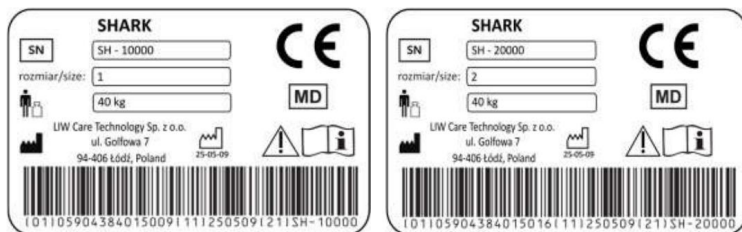


Figura 1

5 Marcado de símbolos

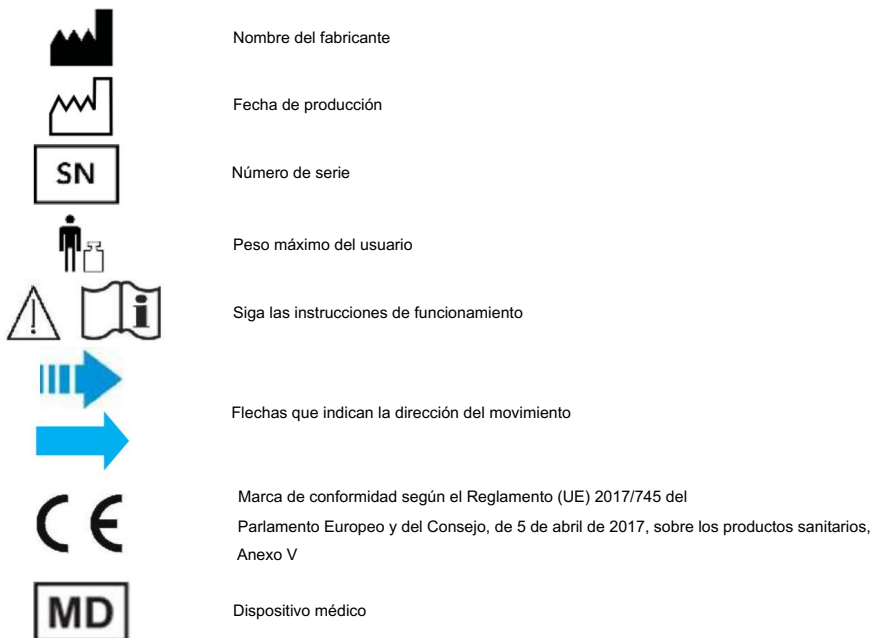

6 Cumplimiento de los requisitos de los productos sanitarios

El cochecito Shark cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios.

El cochecito Shark, de conformidad con el Anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, es un producto sanitario no invasivo, no activo, de clase I según la norma 1.

La declaración de conformidad del dispositivo está disponible en el departamento comercial del fabricante.



¡ATENCIÓN! Si se modifica el dispositivo, se utilizan repuestos no originales o se utiliza con productos de otro fabricante, retire el marcado CE.

7 Aplicación

El cochecito Shark permite una mayor movilidad a pacientes cuyas enfermedades les impiden moverse de forma independiente. El cochecito permite montar el asiento tanto en sentido de la marcha como en sentido contrario a la marcha. También es posible ajustar el ángulo del asiento con respecto al suelo entre 0° y 25°.



¡ATENCIÓN! El dispositivo es unipersonal, es decir, está diseñado para ser utilizado por una sola persona a la vez.



¡ATENCIÓN! El dispositivo debe cargarse únicamente hasta el límite permitido. Colocar objetos o apoyarse en él puede provocar pérdida de estabilidad y vuelco. encima.



¡ATENCIÓN! Con ajustes extremos y posturas desfavorables (inclinación), existe mayor riesgo de vuelco.



¡ATENCIÓN! Está prohibido mover el dispositivo con el usuario.



¡ATENCIÓN! Tenga mucho cuidado al subir y bajar bordillos, así como al maniobrar en superficies irregulares.



¡ATENCIÓN! Ni el asiento del cochecito ni el cochecito completo pueden utilizarse como sistema de retención infantil en vehículos a motor ni como asiento a bordo de aviones.

8 Datos técnicos

No.	Nombre del parámetro	Tamaño	
		1	2
1	Altura del asiento	60 centímetros	60 centímetros
2	Largo de espalda	54 centímetros	61 centímetros
3	Altura del soporte para la cabeza	28 - 49 centímetros	35 - 56 centímetros
5	Espaciado del soporte para la cabeza	20 - 26 centímetros	20 - 26 centímetros
3	Altura de los soportes del pecho	12 - 23 centímetros	16 - 30 centímetros
4	Espaciamiento de soporte lateral	20 - 26 centímetros	20 - 26 centímetros
6	Ángulo del respaldo	90 - 150°	90 - 150°
7	Profundidad del asiento	18-23 centímetros	26 - 32 centímetros
9	Espaciado del soporte pélvico (ancho del asiento)	22 - 26 - 32 centímetros	26 - 32 centímetros
10	Altura del reposapiés	20 - 28 centímetros	23 - 31 centímetros



ENG

11	Profundidad del reposapiés	18 centímetros	18 centímetros
12	Ángulo de ajuste del reposapiés	0 - 90°	0 - 90°
14	Inclinación hacia atrás	0 - 25°	0 - 25°
15	Longitud de la base de movilidad	81 centímetros	81 centímetros
16	Ancho de la base de movilidad	58 centímetros	58 centímetros
17	Diámetro de la rueda delantera	22 centímetros	22 centímetros
18	Diámetro de la rueda trasera	28 centímetros	28 centímetros
19	Altura del mango para guiar	73-118 cm	73 - 118 centímetros
20	Peso máximo del paciente	40 kilos	40 kilos
21	Carga máxima del cochecito	45 kilos	45 kilos
22	Peso del cochecito	20 kilos	20 kilos

9 Construcción del cochecito Shark



Figura 2

El dispositivo consta de:

1. Marco del cochecito

2. Empuje la manija

3. Ruedas traseras

4. Ruedas delanteras

5. Freno de estacionamiento

6. Bolsa debajo del chasis

7. Asiento del cochecito
8. Soportes para la cabeza

9. Soportes laterales

10. Barrera

11. Reposapiés

12. Dosel

13. Secuestrador

14. Cinturones de cinco puntos



10 Instalación del producto y primer lanzamiento

10.1 Preparación para la operación

Si el producto o el embalaje entregado está dañado, notifique al proveedor y al fabricante del producto.

El paquete contiene un cochecito compuesto por un marco y un asiento junto con accesorios según sus necesidades.
en la versión de equipo solicitada.

Para la instalación/montaje, funcionamiento y mantenimiento del dispositivo se requiere un espacio de aproximadamente 2 m2 .

Después de sacar el cochecito del embalaje, debe:

- desplegar el marco del

cochecito – ver 11.1, • instalar las ruedas delanteras –

ver 11.2, • instalar las ruedas traseras – ver 11.4, •

ajustar la posición del manillar de empuje – ver

11.7, • montar el asiento – ver 10.3, • ajustar los parámetros del

equipamiento del cochecito.

10.2 Preparación para el uso

Antes de utilizar el cochecito, usted deberá:

- comprobar que los mecanismos del armazón del cochecito funcionan correctamente y que el mecanismo de bloqueo de plegado está bloqueado, •

comprobar la fijación del asiento y si el mecanismo de fijación del asiento al armazón está

- correctamente

bloqueado, • regular y ajustar el equipamiento del cochecito, •

comprobar el estado de la tapicería.

10.3 Instalación del asiento en el chasis del cochecito

El cochecito Shark consta de dos componentes: el chasis y el asiento. Para preparar el...

Para usar el cochecito, el chasis debe estar desplegado y el asiento debe estar instalado. Fig. 3

Inserte el asa del asiento (1) en los soportes de montaje (2) del chasis del cochecito. El diseño del cochecito permite montar el asiento tanto mirando hacia adelante como hacia atrás.

La correcta instalación del asiento se indicará mediante un clic característico del mecanismo de bloqueo.



Figura 3



¡ATENCIÓN! Tras instalar el asiento, compruebe que esté bien fijado tirando de él. Un asiento bien fijado no puede salirse de los soportes. Una fijación incorrecta puede provocar que se suelte sin control.

Para retirar el asiento del chasis, presione los seguros (3) de los soportes y deslícelo para extraerlo. Los seguros se encuentran a ambos lados del cochecito. Fig. 4.

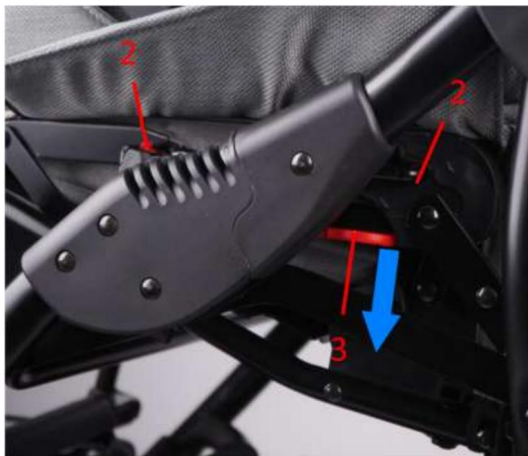


Figura 4



¡ATENCIÓN! Al instalar y desmontar el asiento, tenga especial cuidado con las piezas móviles que podrían pillarse las manos.

10.4 Herramientas necesarias para ajustar el cochecito

No se necesitan herramientas para ajustar completamente el dispositivo y los accesorios.

11 Uso y ajuste

11.1 Despliegue y plegado del marco

Para desplegar el marco Fig.5 debe colocar el marco plano sobre el suelo, tirar del brazo de bloqueo de transporte (1) de manera que el brazo de bloqueo se extienda más allá del pasador de bloqueo (2) y luego tirar del mango guía (3) hacia arriba hasta que escuche el clic característico del mecanismo de plegado del marco (4) Fig.6.

ENG



Figura 5



Figura 6



¡ATENCIÓN! Al desplegar el marco, tenga especial cuidado con las piezas móviles que podrían pillarse las manos.

ENG

Para ensamblar el marco (Fig. 7), tire de la palanca (4) que sujeta la manija (1) para desbloquear el mecanismo de plegado. A continuación, mueva la manija (1) para desbloquear el mecanismo (2). El mecanismo cuenta con una protección adicional contra plegados accidentales mediante un arco (3) montado en el mismo. Al plegar el marco, levante el arco (3) para que el mecanismo se mueva libremente.

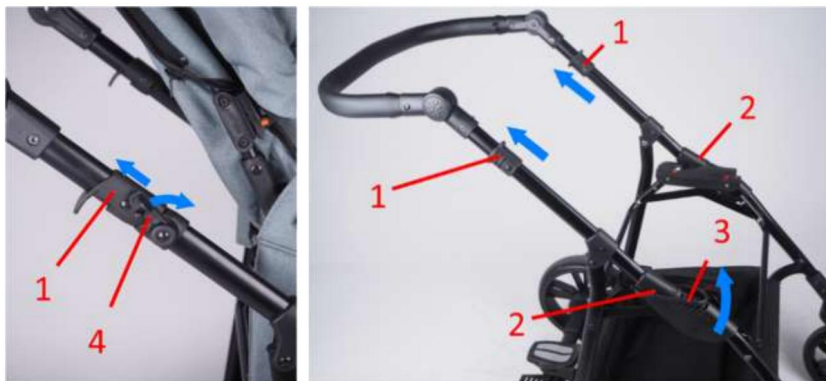


Figura 7



¡ATENCIÓN! Al montar el marco, tenga especial cuidado con las piezas móviles, ya que podría pillarse las manos.

11.2 Montaje de las ruedas delanteras.

El montaje de la rueda delantera (Fig. 8) se realiza insertando el eje de la horquilla (1) en los alojamientos de las ruedas delanteras (2) hasta que el mecanismo de bloqueo del eje se enganche. Al bloquearse, se oye un clic característico.

Para quitar las ruedas delanteras, presione el botón de liberación de bloqueo (3) ubicado en la superficie superior de la cuerpo de la rueda delantera, entonces será posible deslizar el eje de la horquilla fuera de las ranuras de la carrocería.



¡ATENCIÓN! Antes de montar las ruedas delanteras, elimine la suciedad del eje de la horquilla, el asiento de la carrocería y la rueda.



¡ATENCIÓN! Después de instalar las ruedas delanteras, asegúrese de que estén bien fijadas.

ENG



Figura 8

11.3 Bloqueo de dirección de la rueda delantera.

Las ruedas delanteras están equipadas con un mecanismo para bloquearlas en la posición "recta". Tras activar el bloqueo, las ruedas se bloquearán automáticamente. El bloqueo se activa mediante

Gire el anillo (4) (Fig. 8) ubicado en la parte superior del soporte de la rueda delantera. Tras girar el anillo, el bloqueo se activará automáticamente cuando la rueda esté en posición recta.

El desbloqueo se produce después de girar el anillo de bloqueo en la otra dirección.

11.4 Montaje de las ruedas traseras.

El montaje de la rueda trasera (Fig. 9) se realiza deslizando el cubo de la rueda (1) sobre el eje (2) hasta que el mecanismo de bloqueo de la rueda se enganche en el eje. Al bloquearse, se oirá un clic característico.

Para quitar las ruedas, presione el botón en el cubo de la rueda y luego deslice la rueda fuera del eje.

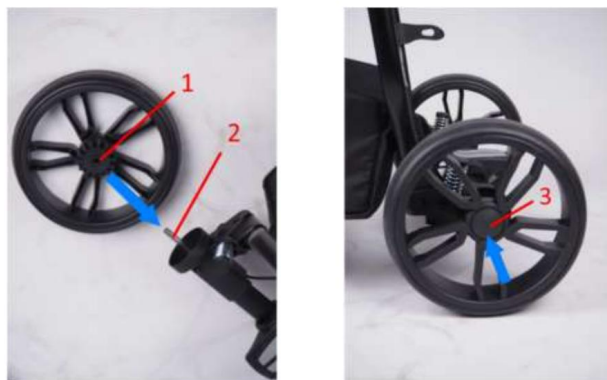


Figura 9

ENG



¡ATENCIÓN! Antes de montar la rueda, elimine la suciedad del eje y de la rueda.



¡ATENCIÓN! Después de montar la rueda, asegúrese de que esté bien fijada.

11.5 Freno de estacionamiento.

Para asegurar el cochecito contra movimientos accidentales, utilice el freno de estacionamiento (1) Fig.10. Presionando La palanca bloquea ambas ruedas traseras simultáneamente. El freno se libera al levantar la palanca.



¡ATENCIÓN! Revise periódicamente el estado de los frenos y elimine la suciedad y el barro acumulados.



¡ATENCIÓN! La estabilidad del cochecito puede verse comprometida si se empuja, se inclina o se apoya inesperadamente.



¡ATENCIÓN! Antes de soltar el freno, mueva suavemente el carro para aliviar la presión sobre los pasadores del freno.



Figura 10

11.6 Pie basculante

Para facilitar el acceso a umbrales bajos, utilice el reposapiés (3) Fig. 10. Para sortear un obstáculo, presione la plataforma con el pie y tire del manillar del cochecito hacia usted. Así será más fácil levantar las ruedas delanteras y sortear el obstáculo.

11.7 Mango de empuje

Para desbloquear el ajuste de la posición del manillar (1) (Fig. 11), presione simultáneamente los botones reguladores del manillar (2) a ambos lados del cochecito. A continuación, ajuste el manillar a la altura adecuada y suelte los botones reguladores. Tras ajustarlo, mueva el manillar hacia arriba y hacia abajo hasta que oiga el clic de bloqueo.



Figura 11



¡ATENCIÓN! Recuerde que cada elemento adicional colgado en el manillar afecta significativamente la estabilidad del cochecito.

12 Asiento de cochecito

Para adaptar mejor el asiento a las necesidades del paciente, el asiento del cochecito Shark cuenta con una serie de Opciones de ajuste para el ángulo del respaldo, la inclinación del asiento y los puntos de apoyo del paciente.



¡ATENCIÓN! Después de cada ajuste, asegúrese de que todos los elementos de ajuste estén correctamente ajustados y fijados.



¡ATENCIÓN! Al plegar o ajustar el asiento, tenga especial cuidado con las piezas móviles que podrían pillarse las manos.

12.1 Ajuste del ángulo del respaldo.

Para ajustar el ángulo del respaldo (Fig. 12), mueva ligeramente el respaldo (1) hacia la posición vertical para facilitar el levantamiento de la palanca de liberación (2) y, a continuación, ajuste el ángulo deseado (1). El respaldo se bloquea al soltar la palanca (2). La posición del respaldo se ajusta gradualmente según las muescas del mecanismo (3).

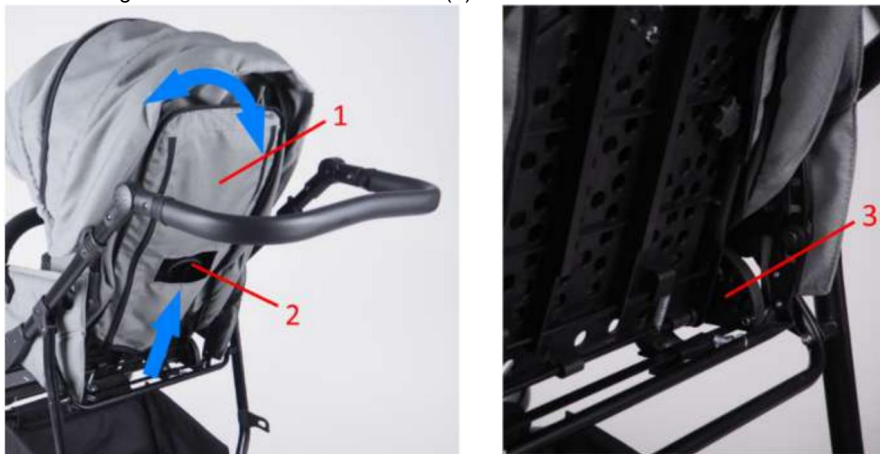


Figura 12

Para utilizar el rango completo de ajuste del ángulo del respaldo, también es necesario ajustar el parabrisas Fig.13.

Para cambiar su posición, presione los botones de ajuste (1) ubicados a ambos lados del asiento y colóquelo en la posición deseada.

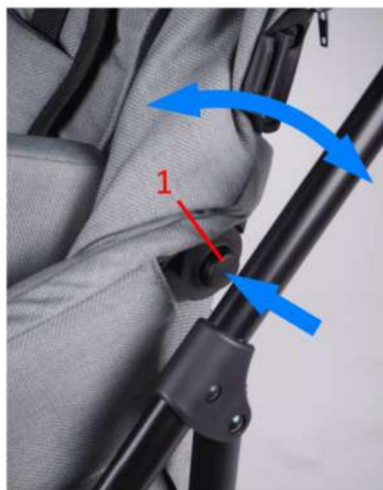


Figura 13



¡ATENCIÓN! Al ajustar el ángulo del respaldo, tenga especial cuidado con las piezas móviles que podrían pillarse las manos.

12.2 Soportes para la cabeza

Para ajustar la posición de los reposacabezas (1), Fig. 14, afloje las perillas (2), ajuste la posición de los soportes y apriételas (2). La posición de los soportes derecho e izquierdo se puede ajustar independientemente.



Figura 14

12.3 Soporte lateral

Para ajustar la posición de los soportes del pecho (3) Fig.14 afloje las perillas (4), luego ajuste la posición. Tras ajustar la posición deseada de los soportes pectorales (3), apriete las perillas (4) para bloquear su movimiento. La posición de los soportes derecho e izquierdo es independiente y se puede ajustar por separado.

12.4 Reposapiés

El reposapiés del asiento Shark se puede ajustar en longitud y ángulo con respecto al asiento.

Para desbloquear el ajuste del ángulo de inclinación, presione ambos botones de los reguladores (1) Fig. 15 y coloque el reposapiés en la posición deseada. Para bloquearlo, suelte los botones y mueva el reposapiés hasta que los seguros de los reguladores encajen.



Figura 15

Para ajustar la longitud del reposapiés, presione los pasadores de bloqueo (2) (Fig. 15) y, a continuación, cambie la posición de la plataforma. La posición de la plataforma se bloquea automáticamente cuando los pasadores de bloqueo se insertan en los siguientes orificios de base (3).



¡ATENCIÓN! No se suba al reposapiés, ya que existe el riesgo de que el cochecito se vuelque, lesionando al usuario y dañando el producto.

12.5 Barra de seguridad

El cochecito está equipado con una barra de seguridad (1), Fig. 16. La barra termina con asas (2), que se colocan en los soportes (3) ubicados a ambos lados del asiento. El cierre de la barra se indica mediante un clic característico.

Para quitar la barra, presione el botón de bloqueo de montaje de la barra (3) y deslice los soportes de la barra (2) hacia afuera. montajes.



Figura 16

12.6 Toldo. Para

montar la cabina (Fig. 17), los ganchos del toldo (1) deben insertarse en los soportes (2) ubicados a los lados del respaldo hasta que se oiga un clic característico del pestillo. A continuación, cierre la cremallera que une el toldo al respaldo del asiento.

Para desmontar la capota, abra la cremallera que conecta la capota al respaldo del asiento y luego presione el Bloquee (3) el cierre del capó (1) en ambos lados del asiento y deslice el capó hacia arriba desde los sujetadores (2).



Figura 17

12.7 Ajuste del ángulo del asiento

El asiento del cochecito se puede ajustar según su inclinación con respecto al suelo. Para ello, tire del asa (1) Fig.18, liberando el bloqueo de posición (2) y ajuste la inclinación del asiento. A continuación, suelte el asa (1). El ángulo del asiento se bloqueará en la posición de bloqueo más cercana.

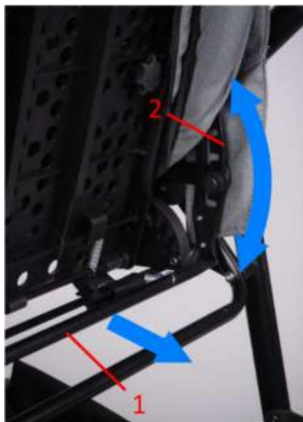


Figura 18



¡ATENCIÓN! Al ajustar el ángulo del asiento, tenga especial cuidado con las piezas móviles que podrían pillarse las manos.



¡ATENCIÓN! Cualquier cambio en la inclinación del asiento altera el centro de gravedad general, lo que afecta la estabilidad del cochecito.

12.8 Cinturones estabilizadores de cinco

puntos Los cinturones estabilizadores de cinco puntos (1) Fig.19 se utilizan para mantener la posición correcta del usuario en el Cochecito. Los cinturones se fijan al marco del asiento mediante correas.

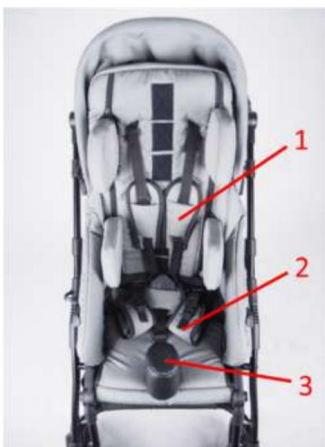


Figura 19

12.9 Cinturones estabilizadores

Los cinturones estabilizadores (2) Fig.19 se fijan directamente al armazón del asiento. El ajuste de los cinturones estabilizadores se realiza ajustando la longitud de la correa de sujeción. Un ajuste correcto de los cinturones estabilizadores debe proporcionar una buena estabilización del cuerpo del usuario y no causar molestias.

12.10 Secuestrador

El abductor (3) Fig.19 se fija al asiento. La cuña puede fijarse en dos posiciones.

13 Accesorios

Para aumentar la funcionalidad, el cochecito Shark puede equiparse con accesorios adicionales:

13.1 Bandeja

La bandeja se fija al asiento de forma intercambiable con la barra de seguridad. La fijación se realiza de la misma manera que la barra de seguridad.



¡ATENCIÓN! La carga máxima de la mesa es de 3 kg.

13.2 Colocación de insertos

Los insertos de espuma que reducen la profundidad del asiento (1) y el cojín lateral (2) (Fig. 20) se fijan al tapizado del asiento del cochecito mediante velcro. El uso de estos insertos permite ajustar el espacio del asiento a las necesidades del paciente.

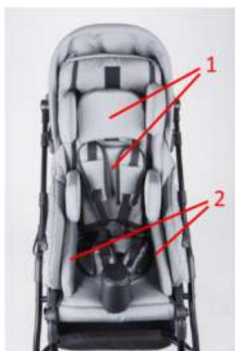


Figura 20

13.3 Cubierta de piernas

Para que el cochecito pueda usarse incluso en climas fríos, puede equiparse con un protector de piernas para niños, que protege las piernas del paciente del frío. El protector se fija a la barra de seguridad.



Figura 21

ENG

13.4 Funda para lluvia

La funda para lluvia debe fijarse doblando sus bordes flexibles sobre el respaldo del asiento y el reposapiés.

13.5 Bolsa debajo del bastidor

La bolsa se utiliza para llevar objetos prácticos. Se fija al chasis, debajo del asiento. Su peso no debe superar los 3 kg.



Figura 22



¡ATENCIÓN! La carga máxima de la bolsa inferior es de 3 kg.

13.6 Bolsa

La bolsa se utiliza para llevar objetos prácticos. Se fija directamente al asa del cochecito.

La carga máxima de la bolsa es de 2 kg.



Figura 23



¡ATENCIÓN! La carga máxima de la bolsa es de 2 kg. Tenga en cuenta que cualquier objeto adicional colgado del asa afecta significativamente la estabilidad del cochecito y podría volcarlo.

13.7 Chaleco estabilizador de línea Baffin

El cochecito Shark puede equiparse con un chaleco que estabiliza la posición del paciente. El chaleco se fija al armazón del asiento de forma intercambiable con las correas de cinco puntos. Para fijarlo y ajustarlo (Fig. 24) longitud de las correas de sujeción, pase la correa (1) a través de la ranura en el marco del asiento y luego ensártela el extremo de la correa a través de la hebilla (2), después de determinar la longitud de la correa, apriete el extremo libre de la correa bloqueando su longitud.



Figura 24

Las correas de sujeción del chaleco se conectan al mismo mediante hebillas. Para abrocharlo, tire de ambas correas. Presione la hebilla hasta oír un clic característico. Para desabrochar el chaleco, presione el botón de liberación.

13.8 Cinturones pélvicos de línea Baffin

Para estabilizar la pelvis, son adecuados los cinturones de estabilización pélvica. Las correas se fijan de forma intercambiable en los puntos de fijación de las correas estándar. El ajuste y la colocación de las correas de entrepierna de soporte pélvico se realiza de la misma manera que para el ajuste del chaleco (véase 13.7). Para abrochar las correas, conecte las dos partes de la hebilla que une la correa de ajuste hasta que oiga un clic característico. Para soltar el chaleco, presione el desenganche de la hebilla.

14 Repuestos y consumibles

El fabricante no prevé que el usuario tenga que sustituir los componentes consumibles del cochecito. La reparación o sustitución debe ser realizada por el distribuidor autorizado o el centro de servicio del fabricante.

15 Resolución de problemas.

Si las ruedas traseras no giran, verifique si el freno de estacionamiento está atascado.

Si las ruedas giratorias delanteras no giran al realizar un giro, verifique que el bloqueo de la dirección no esté bloqueado.

Si un dispositivo con ruedas giratorias tiene problemas para moverse, verifique que las ruedas no estén bloqueadas por elementos intermedios o si el mecanismo de freno de estacionamiento no está bloqueado.

Si el marco no se puede desplegar, compruebe si el seguro de transporte se ha salido del pasador de bloqueo (punto de control 11.1).

Si el marco no se pliega, verifique que la barra de seguridad del mecanismo de plegado no esté bloqueando su movimiento (punto de verificación 11.1)

16 Limpieza y mantenimiento

El cochecito Shark es un dispositivo mecánico fabricado en aluminio y acero recubierto con pintura en polvo. Los insertos de espuma y esponja están fijados a la estructura metálica del dispositivo. Las espumas están cubiertas con fundas textiles. Ninguno de los revestimientos del cochecito debería causar irritación cutánea. El cochecito Shark, como cualquier dispositivo médico, debe mantenerse limpio y utilizarse según las recomendaciones del fabricante.

16.1 Recomendaciones de limpieza:

- Los revestimientos de pintura y los elementos de plástico deben limpiarse con un paño humedecido con agua. Se permite el uso de productos de limpieza suaves. Aspire mecánicamente o con un cepillo de cerdas suaves. • Debe limpiar regularmente la base de movilidad y eliminar la suciedad y el barro de las piezas móviles. • No utilice productos de limpieza agresivos. Posible corrosión, daños en la pintura o en las espumas/esponjas.
- Se permite limpiar los insertos de espuma y esponja con un paño humedecido con agua y un producto químico suave. Después, séquelos bien a temperatura ambiente. • Antes de lavarlos, retire los insertos de espuma de las fundas. • Lave las fundas a mano o en una lavadora de tambor a 40 °C.
- Secado: Colgar a temperatura ambiente. No usar secadora.
- Evite la exposición prolongada a la luz solar y verifique la temperatura del asiento antes de colocar a su hijo en el cochecito.
- Los insertos de espuma y esponja deben aspirarse mecánicamente o con un cepillo de cerdas suaves, limpiando. También se permite utilizar un paño humedecido con agua y una gamuza suave.



¡ATENCIÓN! No lave los insertos de espuma.



¡ATENCIÓN! Antes de volver a usar el cochecito, la tapicería y los insertos de espuma y esponja deben estar secos.



¡ATENCIÓN! Al lavar las fundas de tapicería, preste especial atención a los cierres de velcro. Para evitar dañar la tapicería, asegúrese de que los cierres de velcro estén bien cerrados durante el lavado y no entren en contacto con la superficie. No lave con insertos de espuma. Lave únicamente la tapicería.



¡ATENCIÓN! El cochecito debe recibir mantenimiento al menos una vez al año (cada 12 meses) por parte de un técnico cualificado. Durante el mantenimiento, se debe realizar una inspección de seguridad del cochecito: se debe comprobar el estado de las conexiones móviles, los mecanismos de cierre y los ajustes. La inspección periódica del dispositivo garantiza un funcionamiento a largo plazo y sin problemas.

16.2 Desinfección

Si el dispositivo es utilizado por diferentes personas (por ejemplo, en un centro de rehabilitación), se deben utilizar desinfectantes. Para la desinfección manual de los componentes metálicos y plásticos del producto, se recomienda INCIDIN PLUS en una concentración del 0,25 % al 0,5 % o un desinfectante similar.

Siga las instrucciones de aplicación de desinfectante proporcionadas por el fabricante.

16.3 Recomendaciones de mantenimiento

El cochecito Shark debe someterse a las inspecciones periódicas y tareas de mantenimiento que se enumeran a continuación.

En la tabla a continuación se indican las instrucciones para garantizar un funcionamiento sin problemas a largo plazo. Si el usuario no puede realizar las siguientes actividades por sí solo, debe buscar asistencia en un centro de servicio especializado en equipos médicos o contactar directamente con el servicio técnico del fabricante. Estas actividades no están cubiertas por la garantía actual y son de pago.

Actividad	A diario	Semanalmente	Mensual
Comprobación del correcto funcionamiento de los frenos de las ruedas	---		
Comprobación del montaje de la rueda	---		
Comprobación de la fijación del chaleco, cinturones pélvicos	---		
Comprobación del estado de la tapicería del asiento	---		
Inspección visual de elementos estructurales (daños, grietas)	---		
Comprobación del correcto funcionamiento de todos los mecanismos del cochecito		---	
Comprobación de las conexiones de los tornillos (eliminación de posibles holguras)		---	
Comprobación de la fijación del reposapiés		---	
Inspección visual del desgaste de los componentes de las ruedas			---
Comprobación del correcto funcionamiento del mecanismo de ajuste de inclinación			---
Comprobación del correcto funcionamiento del mecanismo de ajuste del ángulo del respaldo			---
Limpieza general del cochecito			---

17 Eliminación del producto

Si el usuario deja de usar el producto, está obligado a desecharlo de acuerdo con la normativa ambiental. Está obligado a desinfectarlo, ya que un producto que no se desinfecta conforme a la normativa ambiental aplicable se considera residuo peligroso.

El usuario podrá liquidar el producto:

- Contar con una empresa que cuente con los permisos necesarios para recibir el equipo para su disposición.
- En caso de desguace del producto, los componentes de plástico y metal utilizados deberán eliminarse por separado, de acuerdo con los requisitos.

- Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con las autoridades locales, las empresas de eliminación de residuos o nuestro servicio.

18 Condiciones de uso, almacenamiento y transporte

En la sección de datos técnicos se incluyen dimensiones e información útil para el manejo y transporte.

Por razones de seguridad, el cochecito debe transportarse en partes, el asiento y el chasis por separado. El método de transporte se muestra en el dibujo Fig.25.



¡ATENCIÓN! No se permite mover el cochecito con el paciente sentado.



¡ATENCIÓN! Al mover los componentes del cochecito, tenga especial cuidado con las piezas móviles que podrían pillarse las manos.

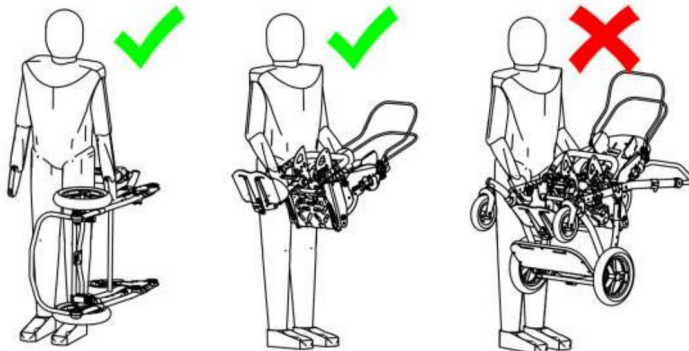


Figura 25

Al utilizar el cochecito, sujételo por la barra de empuje para evitar que se desplace.

Debido a la posibilidad de mover el cochecito al aire libre, si se moja, por ejemplo como resultado de Precipitación, sus elementos deberán secarse lo antes posible.

Las personas en cochecitos no deben ser transportadas en vehículos a motor como automóviles, barcos o aviones.

Si es necesario transportar el cochecito solo sin el usuario en vehículos como trenes, tranvías, autobuses, aviones, barcos, etc., pregunte a los responsables del transporte en estos medios de transporte cómo se puede transportar el cochecito de forma segura hasta el destino.

El transporte, la manipulación y el almacenamiento se realizarán preferentemente sobre el producto vacío y plegado, de modo que para evitar daños al producto, a terceros o al vehículo de transporte.

El método para plegar el dispositivo y posiblemente quitar el asiento se describe en el capítulo de uso y ajuste.



¡ATENCIÓN! Durante el uso, la temperatura de la superficie en contacto con el paciente/usuario puede variar según las fuentes de calor externas a las que haya estado expuesto (p. ej., la luz solar). Asegúrese de que el dispositivo se encuentre a una temperatura de funcionamiento segura; es decir, el cuidador debe comprobar que la temperatura del dispositivo no sea demasiado alta antes de que el usuario entre en contacto con él.

El fabricante no prevé el reembalaje del producto, salvo en casos de servicio técnico. El dispositivo debe embalsarse de forma que no sufra daños adicionales durante el transporte.

¡ATENCIÓN!



El dispositivo puede almacenarse/transportarse y utilizarse a temperaturas entre -20 °C y +40 °C y una humedad relativa entre 10 % y 90 %; sin embargo, se recomienda almacenarlo/transportarlo a temperatura y humedad ambiente.



Si el dispositivo ha sido almacenado o transportado a una temperatura ambiente alta y ha estado expuesto a la luz solar directa, asegúrese de que el dispositivo esté a una temperatura de funcionamiento segura, es decir, el cuidador debe verificar que la temperatura del dispositivo no sea demasiado alta antes de que el usuario tenga contacto con el dispositivo.

19 Garantía/servicio

Si observa alguna falla o daño, deje de usar el dispositivo inmediatamente y contacte al vendedor o fabricante. El dispositivo dañado debe protegerse de la expansión del área dañada. No intente reparar el dispositivo usted mismo. No sustituya las piezas originales del dispositivo por piezas fabricadas por usted mismo ni de una fuente distinta a la recomendada por el fabricante.

- Si el usuario decide no utilizar más el dispositivo, está obligado a desecharlo de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente.
- El fabricante especifica una vida útil del producto de 5 años. Transcurrido este período, el dispositivo debe someterse a una inspección del fabricante, que determinará si es apto para su uso posterior.
- El servicio post garantía del dispositivo lo realiza el fabricante.

Datos de contacto del servicio:

LIW Care Technology Sp. z o.o. z o ul.

Golfowa 7 94-406

Łódź, Polonia

www.liwcare.pl

correo electrónico: reklamacje@liwcare.pl

tel. : +48 42 212 35 18

- La dirección actual está disponible en el sitio web www.liwcare.pl Las
- condiciones de garantía se especifican en la tarjeta de garantía.

ENG



LIWCARE.PL