

Andador
puffin



**Manual
de usuario**

WEX

Advertencias y precauciones

ATENCIÓN!
LEER MANUAL
ANTES DE USAR

1. Uso general y supervisión

- Antes de utilizar el equipo, lea las instrucciones de uso, advertencias y precauciones incluidas con el producto. Consérvelas para futuras referencias.
- Para el uso seguro y correcto del equipo, la persona acompañante debe estar debidamente capacitada.
- El equipo no debe utilizarse sin la supervisión de una persona capacitada.
- El equipo debe utilizarse exclusivamente como producto médico, siguiendo las instrucciones de este manual.
- El equipo no debe utilizarse sobre terrenos irregulares o accidentados, ni cerca de piscinas o escaleras.
- El uso en escaleras mecánicas y similares está expresamente prohibido.
- Asegúrese de la estabilidad del producto y del correcto funcionamiento de las ruedas y los frenos antes de colocar al usuario en el equipo.
- Asegúrese que los frenos se encuentren bloqueados antes de que el usuario entre o salga del equipo. No coloque al usuario en el equipo si las ruedas no se encuentran frenadas.

2. Ajuste al usuario y límites de uso

- El equipo debe encontrarse correctamente ajustado de acuerdo con las medidas y necesidades del usuario. El peso máximo admitido es de 60 kg para el talle M.
- Si el usuario se encuentra próximo al límite máximo de carga y/o presenta movimientos involuntarios importantes, como balanceos, considere utilizar un producto de mayor tamaño y con una mayor capacidad de carga.
- Tenga en cuenta la capacidad del usuario para controlar la velocidad de marcha y realizar curvas cerradas, ya que el producto podría volverse inestable.
- Asegúrese que las piezas móviles no puedan apretar o aprisionar ninguna parte del cuerpo durante los ajustes.
- Compruebe que los tornillos se encuentren correctamente ajustados.

3. Seguridad del usuario y estabilidad

- El equipo debe utilizarse sobre una superficie firme y nivelada. No utilice el equipo sobre superficies resbaladizas.
- No utilice el equipo si presenta daños o si falta alguna de sus partes.



Advertencias y precauciones

ATENCIÓN!
LEER MANUAL
ANTES DE USAR

- No cuelgue ningún elemento de las empuñaduras, ya que esto puede provocar su vuelco.

4. Condiciones ambientales

- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes directas de calor, incluyendo llamas abiertas, cigarrillos encendidos y calefactores eléctricos o a gas.
- Asegúrese que las superficies en contacto con el usuario se encuentren a una temperatura que no pueda producir lesiones en la piel. Tenga especial precaución al utilizar el equipo cerca de fuentes de calor.
- Si la temperatura de la superficie supera los 41 °C, deje que el producto se enfríe antes de utilizarlo.

5. Limpieza

- Mantenga el equipo limpio para conservar su correcto funcionamiento.
- Antes de cada uso, elimine cualquier residuo o suciedad del equipo utilizando un paño humedecido con agua tibia y un detergente o jabón suave sin cloro. Deje secar completamente el producto antes de volver a utilizarlo.
- Limpie regularmente el equipo a mano con un paño húmedo.

- No utilice agentes de limpieza agresivos ni productos abrasivos.
- No utilice limpiadores a base de cloro ni soluciones con altas concentraciones de vinagre.
- Asegúrese que el equipo se encuentre completamente seco antes de volver a utilizarlo.

6. Inspección y mantenimiento

- La frecuencia de las inspecciones puede variar en función de la intensidad de uso y del desgaste del producto. Se recomienda inspeccionar el producto al menos una vez al año, antes de volver a ponerlo en servicio y después de un período de almacenamiento prolongado (superior a 4 meses).
- Las inspecciones deberán ser realizadas por una persona capacitada para comprender el uso y funcionamiento del dispositivo.

Lista de comprobación para el mantenimiento:

- Verifique que las ruedas se muevan libremente y que los bloqueos y frenos de las ruedas puedan accionarse correctamente.
- Verifique el correcto funcionamiento del mecanismo de bloqueo de dirección de cada rueda.



Advertencias y precauciones

ATENCIÓN!
LEER MANUAL
ANTES DE USAR

- Verifique que la altura y el ángulo de las empuñaduras puedan ajustarse correctamente y permanezcan firmes en la posición seleccionada.
- Verifique que las tuercas y los tornillos del producto se encuentren correctamente ajustados.
- Verifique que el producto no presente grietas ni signos de desgaste.

Realice una inspección visual para detectar piezas dañadas, desgastadas, faltantes o que funcionen incorrectamente. En caso de detectar un mal funcionamiento, deje de utilizar el producto inmediatamente y comuníquese con su distribuidor autorizado.

Luego de realizar cualquier ajuste, asegúrese de volver a ajustar firmemente todos los tornillos y tuercas que hayan sido aflojados.

7. Accesorios, modificaciones y garantía

- Se prohíbe realizar modificaciones en la estructura del equipo, ya que ello podría comprometer su seguridad y funcionamiento y generar situaciones de riesgo para el usuario.

- Toda modificación realizada en el equipo que no sea llevada a cabo por personal autorizado de **WEX** anulará la garantía del producto. **WEX** no será responsable por los daños o consecuencias derivados de dichas modificaciones.
- Utilice únicamente accesorios y repuestos provistos por **WEX** para este producto. De lo contrario, la seguridad del usuario podría verse comprometida.





Especificaciones

**XS****S****M**

 Altura del paciente	0.80 a 1.10mts	1.00 a 1.40mts	1.30 a 1.65mts
 Rango de edad	0-6 años	4-12 años	9-16 años
 Peso máximo de usuario	30kg	45 kg	60 kg
 Largo de equipo	72 cm	84 cm	87 cm
 Ancho del equipo	62 cm	69 cm	69 cm
 Ancho entre puños	30-60 cm	37-66 cm	37-66 cm
 Altura de puños	43-65 cm	55-83 cm	75-105 cm
 Ancho interior	40 cm	47 cm	47 cm
 Altura plegado	40 cm	40 cm	40 cm
 Peso del equipo	7,2 kg	7,7 kg	9,4 kg



¿Cómo regular tu andador **Puffin**?

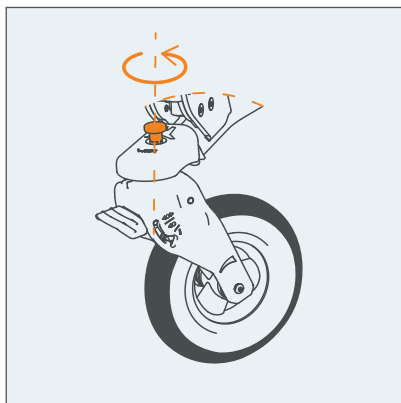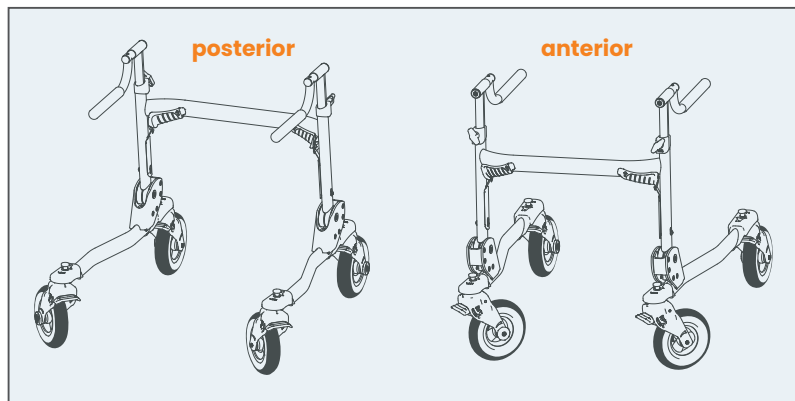


Configuración de marcha

1. Levantando y girando el pin, se trava o libera el giro de la rueda, y de esta manera se puede configurar el andador en **POSTERIOR** o **ANTERIOR**, dejando las dos ruedas que quedan atrás trabadas (con el freno hacia adelante).




¿Cómo regular tu andador **Puffin**?

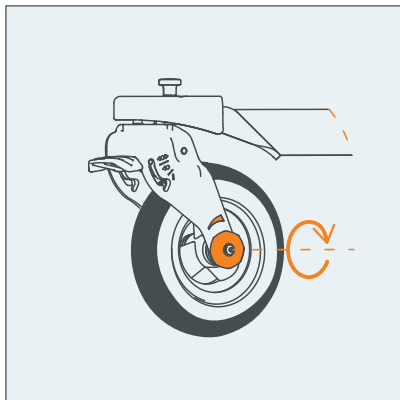

Ajuste de fricción

- 2.** Girando la perilla como indica la imagen, se endurece el paso del andador.



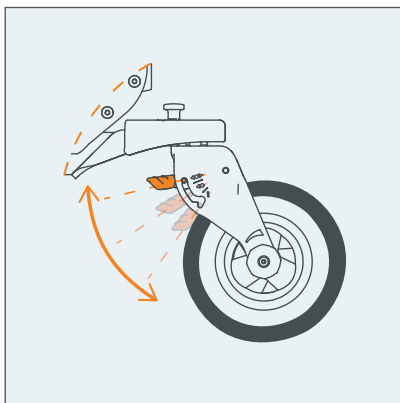


Ajuste del freno

- 3.** En la primera posición del freno (arriba) la rueda gira libre. En la segunda posición (medio) la rueda avanza, pero no retrocede. En la tercera (abajo) la rueda queda bloqueada.



¿Cómo regular tu andador **Puffin**?

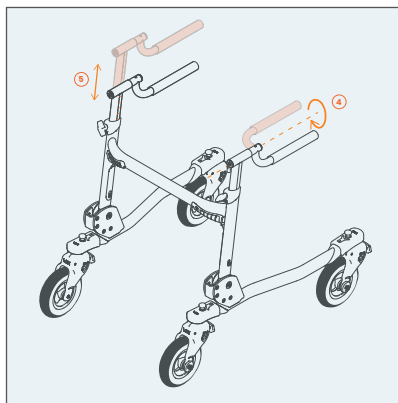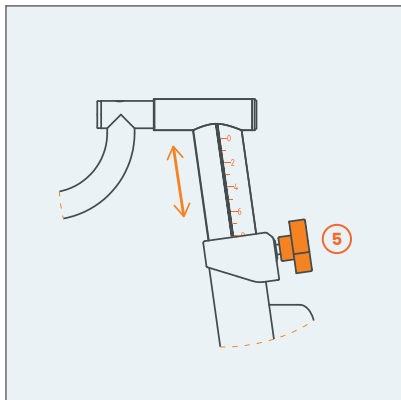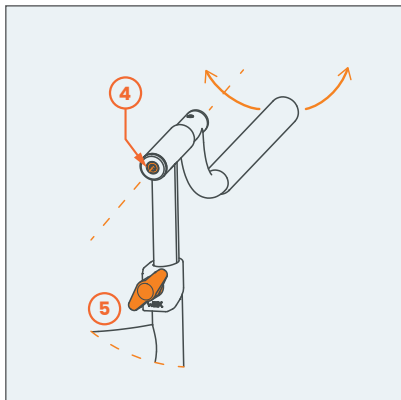



Ajuste de toma anterior

4. Desajustando el tornillo allen (naranja), se libera el giro del toma. Se ajusta hasta el ángulo necesario, y se vuelve a apretar para fijarlo.

5. Girando la perilla se suelta la empuñadura, permitiendo subirla y bajarla. Con la regla se pueden emparejar las alturas. No se debe ver la palabra MÁX.




¿Cómo plegar tu andador **Puffin**?

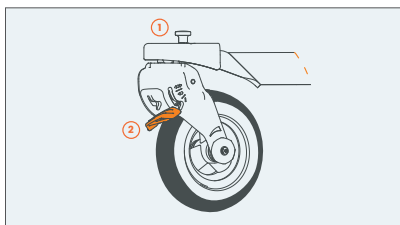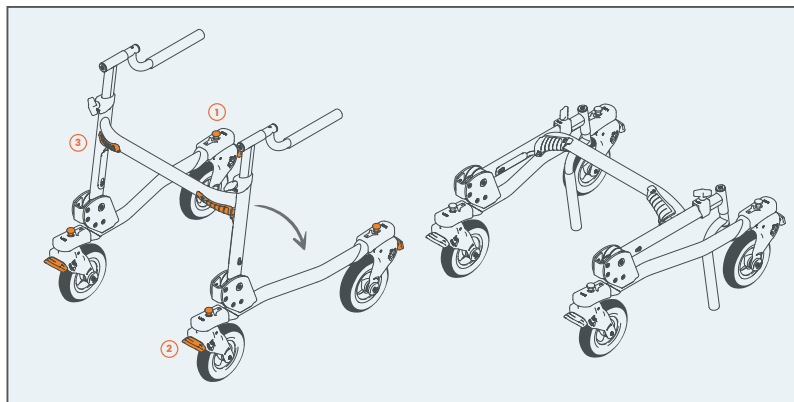

1. Levantar y girar el pin para soltar el giro de las ruedas. Girarlas hasta que queden hacia adentro, y volver a trabar el pin. Éste paso es opcional, sirve para que el andador ocupe menos lugar.




2. Llevar los frenos a la posición de bloqueo (abajo).

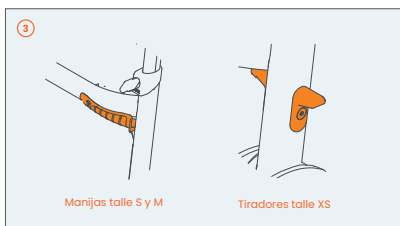

3. Una vez aseguradas las ruedas, levantar las dos manijas a la vez (o tiradores en el talla XS) y bajar el chasis (cómo indican la flecha), hasta que se escuche un "clic" y se trabe. Se abre de la misma forma. Apretando las manijas y levantando el chasis.







Accesorio opcional: Soporte de pelvis

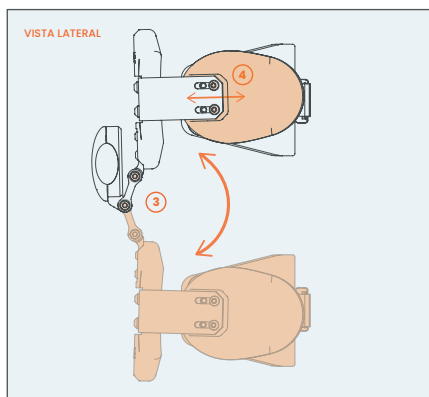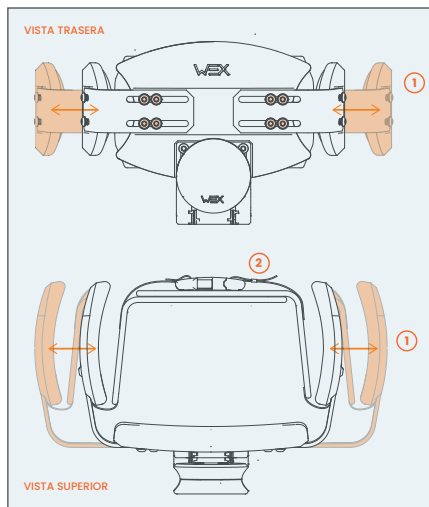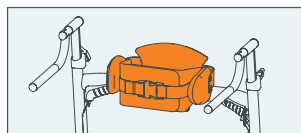

- 1.** Soltar los tornillos posteriores para regular el ANCHO del soporte. Una vez encontrada la medida, ajustar los tornillos.
- 2.** Ajustar la faja con el velcro y asegurarla con la hebilla. Luego, ajustar firmemente la cinta.
- 3.** Aflojar los tornillos laterales (sólo un poco, sin sacarlos) para regular la ALTURA y PROFUNDIDAD del PAD DORSAL. También se puede abrir completamente y girar el soporte para extenderlo.
- 4.** Aflojar los tornillos señalados para regular levemente la PROFUNDIDAD de los PAD LATERALES.



Accesorio opcional: Apoyo antebraquial

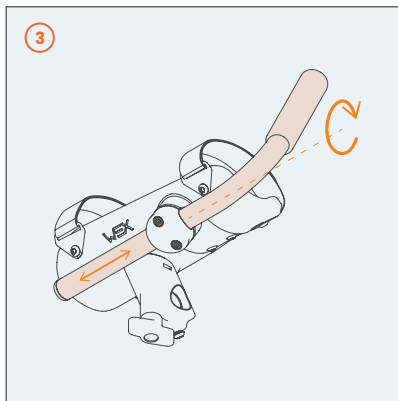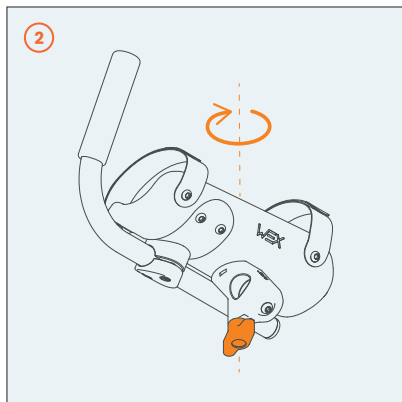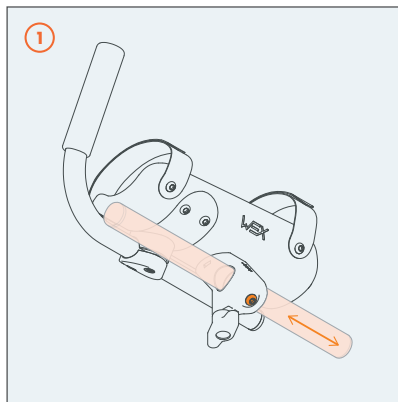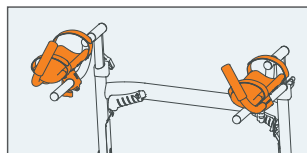

- 1.** Desajustando el tornillo que está debajo del apoyo, podemos AJUSTAR LA UBICACIÓN sobre el caño de empuñadura.
- 2.** Soltando la tuerca mariposa debajo del apoyo, se puede GIRAR todo el apoyo con respecto al caño fijado en el punto 1.
- 3.** Desatornillando ligeramente el clamp, se puede AJUSTAR EL TOMA tanto en profundidad como en ángulo.



puffin | **WEX**