

Apoyacabeza

WEX
MOBILITY



Advertencias y precauciones



- Antes de utilizar el producto, lea las instrucciones de uso, advertencias y precauciones incluidas con el producto. Consérvelas para futuras referencias.
- Para el uso seguro y correcto del producto, la persona acompañante debe estar debidamente capacitada.
- El producto no debe utilizarse sin la supervisión de una persona capacitada.
- Compruebe que los tornillos se encuentren correctamente ajustados.
- Realizar una inspección visual para detectar piezas dañadas o desgastadas, faltantes o que funcionen mal. En caso de un mal funcionamiento, deje de usar el producto de inmediato y contacte con su distribuidor local tan pronto como sea posible.
- Toda modificación realizada al equipo que no sean llevadas a cabo por personal de WEX anulará la garantía del producto. WEX no será responsable por los daños o consecuencias derivados de dichas modificaciones.
- El equipo debe encontrarse correctamente ajustado de acuerdo con las medidas y necesidades del usuario.
- Luego de cada regulación, vuelva a apretar firmemente cada tornillo que se haya aflojado.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes directas de calor, incluyendo llamas abiertas, cigarrillos encendidos y calefactores eléctricos o a gas.
- Asegúrese de que las superficies en contacto con el usuario se encuentren a una temperatura que no pueda producir lesiones en la piel. Tenga especial precaución al utilizar el equipo cerca de fuentes de calor.
- Se prohíbe el uso del dispositivo para fines distintos a los que se estipulan en el manual de usuario.
- Se prohíbe el uso del dispositivo en el caso de constatarse que el mismo se encuentra dañado o carece de alguna de sus partes.
- Se prohíbe realizar cambios a la estructura y montajes, debido a que podría resultar peligroso.
- No colgar bolsas o elementos para prevenir posible vuelco o sobrecarga en dichos elementos.

Advertencias y precauciones






- Limpie regularmente el equipo a mano con un paño húmedo.
- No utilice agentes de limpieza agresivos ni productos abrasivos.
- No use limpiadores a base de cloro y vinagre en dosis altas.
- Asegúrese de que el equipo se encuentre completamente seco antes de volver a utilizarlo.
- Utilice únicamente accesorios y repuestos provistos por WEX para este producto. De lo contrario, la seguridad del usuario podría verse comprometida.
- La frecuencia de las inspecciones puede variar en función de la intensidad de uso y del desgaste del producto. Se recomienda realizar una inspección al menos una vez al año, antes de volver a poner el producto en servicio y después de un período de almacenamiento prolongado (superior a 4 meses). Las inspecciones deberán ser realizadas por personal calificado.
- Antes de cada uso, se recomienda: limpiar cualquier residuo y suciedad del dispositivo con un paño humedecido en agua tibia y un detergente/jabón suave sin cloro, y dejar que se seque antes de usarlo.

Medidas

		Talle S	Talle M
	Ancho del pad	26,5 cm	38,5 cm
	Altura del pad	13 cm	13 cm
	Ancho del pad móvil	6,5 cm	12 cm

¿Cómo instalar tu Apoyacabeza?

1. Montaje sobre un respaldo

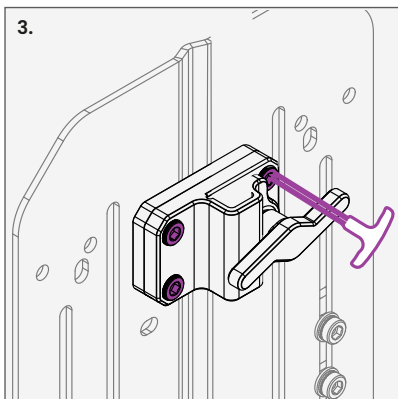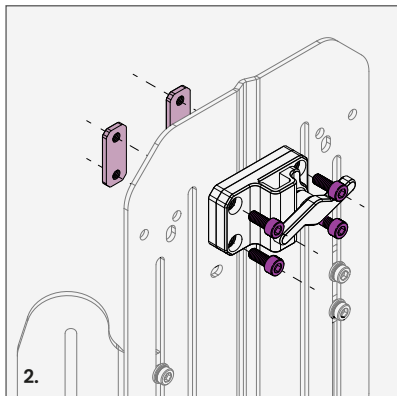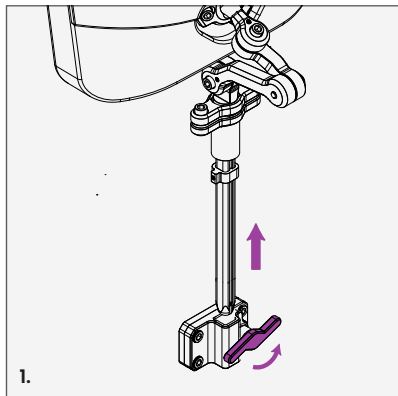


1. Aflojar la perilla señalada para retirar el mastil y quedarse únicamente con el anclaje.

2. Retirar los tornillos y piezas roscadas señalados, presentar el anclaje sobre el respaldo, y volver a ensamblar como muestra el dibujo.


3. Luego ajustar bien los tornillos.

¿Cómo regular tu Apoyacabeza?



2. Articulación de los eslabones

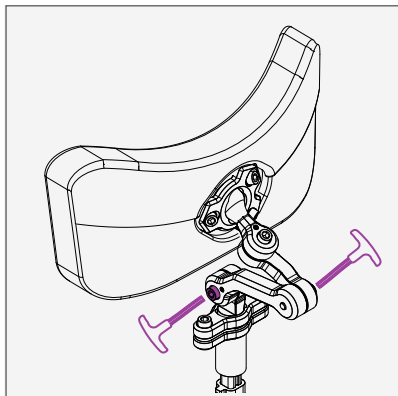

Aflojar primero el tornillo de seguridad, y luego el grande para regular. Mover los eslabones y ubicar el apoyacabeza en la posición deseada.

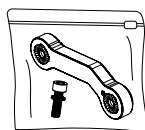


**En caso de necesitar mayor longitud o amplitud de articulación, agregar el eslabón adicional que se entrega junto al equipo.*

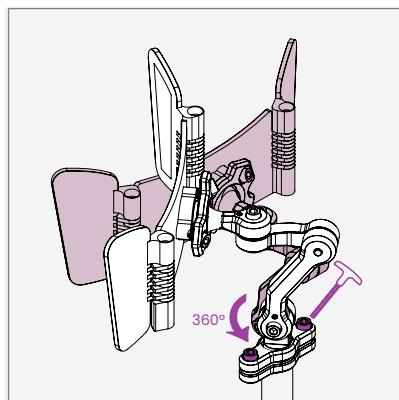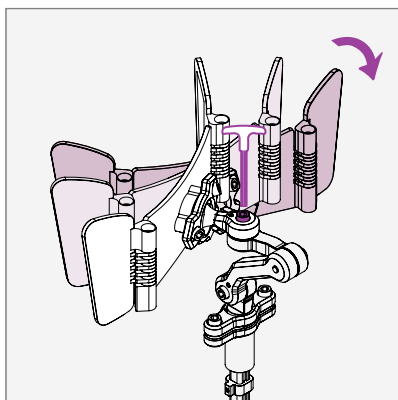

**El tornillo de seguridad se encuentra en todos los eslabones. Aflojarlo para regular y luego volver a ajustar en todos los casos.*

¿Cómo regular tu Apoyacabeza?



3. Articulación del cabezal

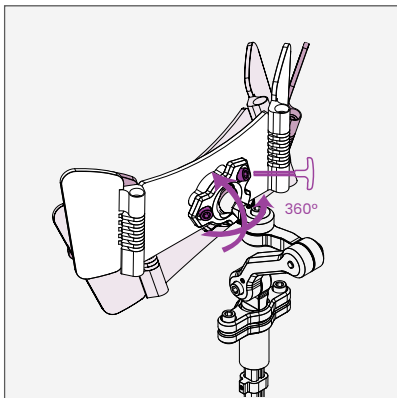

Movimiento de rótula

Aflojar primero el tornillo de seguridad y luego el tornillo señalado para mover el pad o cabezal del apoyacabeza. Colocar en la posición deseada, y luego volver a ajustar bien los tornillos.

**No es necesario abrir la funda para realizar esta regulación.*

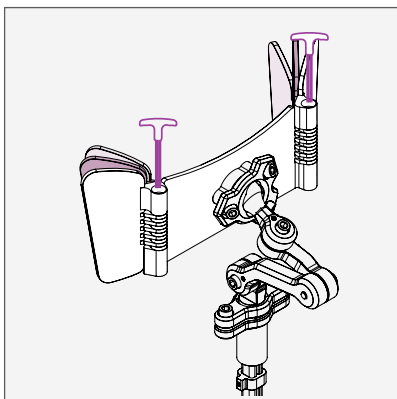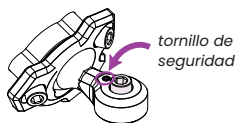

Movimiento de laterales del Pad

**Para esta regulación deberá abrir la funda de tela para acceder a las piezas metálicas.*

Aflojar los tornillos que se encuentran dentro de las piezas metálicas, regular los laterales y volver a ajustar los tornillos.

Apoyacabeza | WEX