

TAPIR



Manual de usuario



WEX

Advertencias y precauciones



- Antes de usar el equipo, el usuario debe leer las instrucciones de uso, advertencias y precauciones incluídas con el producto.
- Para el correcto uso del dispositivo, la persona acompañante debe estar debidamente entrenada.
- El producto no puede ser usado sin supervisión.
- La silla se debe encontrar posicionada sobre suelo firme y plano. Nunca utilizar el dispositivo sobre un plano inclinado.
- Compruebe regularmente que los cinturones, las cinchas, correas, hebillas y accesorios funcionen correctamente.
- Compruebe que los tornillos de ajuste estén estables y ajustados.
- Asegúrese de la estabilidad del producto y del correcto funcionamiento de las ruedas/frenos antes de colocar al usuario en el mismo.
- Ajuste el equipo de acuerdo con las medidas y necesidades del paciente. El peso máximo del paciente no debe superar los **60kgs**.
- El dispositivo se debe mantener fuera del alcance de fuentes directas de calor, incluyendo llamas desnudas, cigarrillos y calentadores eléctricos o a gas.




- Asegúrese de que las superficies en contacto con el usuario se encuentren a una temperatura que no pueda producir daños en la piel. También tener precaución al acercarse a fuentes de calor.
- Se prohíbe el uso del dispositivo para fines distintos a los que se estipulan en el manual de usuario.
- Se prohíbe el uso del dispositivo en el caso de constatarse que el mismo se encuentra dañado o carece de alguna de sus partes.
- Se prohíbe realizar cambios a la estructura, debido a que podría resultar peligroso.
- La realización de modificaciones al equipo que no sean llevadas a cabo por personal de Rehab anulan la garantía del producto. **Rehab** no se responsabiliza por las mismas.



Especificaciones



 Peso del paciente	60 kg	 Altura de respaldo	29 - 56 cm
 Ancho de asiento	19 - 36 cm	 Profundidad de asiento	23 - 36 cm
 Peso chasis	23,4 kg	 Ancho y largo total	63,5 / 78,7 cm

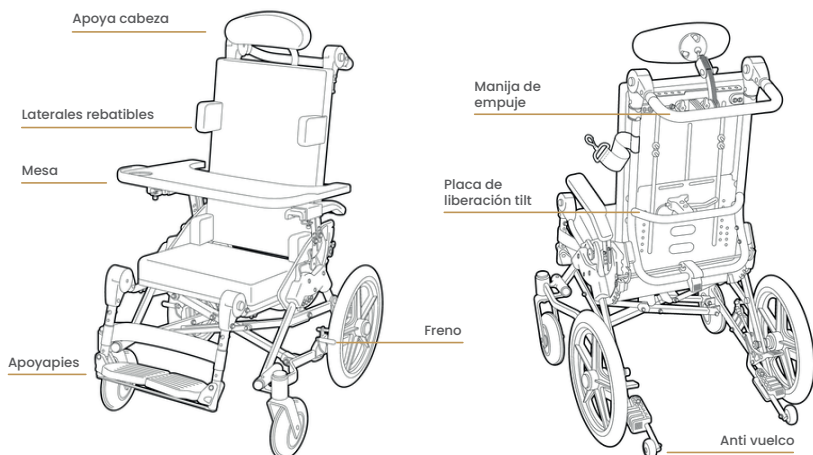

Accesorios incluidos en la **Tapir**



1. Apoyacabeza

Apoya Cabeza de un componente. Almohadilla en dos medidas (25 x 13 o 35 x 13cm), interior con dos bisagras ajustables para generar efecto envolvente. Mástil en aluminio con regulaciones múltiples con sistema de link con eje estriado.




2. Respaldo

Respaldo de aluminio modular. Estructura posterior preparada para crecer en 10 cm de altura e incorporar apoya cabeza y strap secundarios.



Accesorios incluidos en la **Tapir**

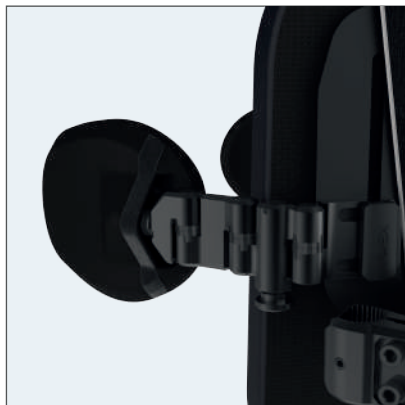

3. Laterales rebatibles

Juego de pads laterales rebatibles para estabilización de tronco en la línea media, ajustables en altura, ancho e inclinación. Sistema de link con eje estriado auto bloqueante.



4. Mesa

Mesa con escotadura desmontable, ajustable en profundidad

Debe usarse para tareas funcionales, no para control postural o como restricción.

Deslice la mesa sobre los apoyabrazos desde el frente y apriete las perillas para asegurar la bandeja.



Accesorios opcionales de la **Tapir**



1. Rueda todo terreno

Perfecto para terrenos mixtos con superficies irregulares. Este accesorio ofrece esa ventaja de rendimiento sin comprometer el acceso a casas pequeñas, entornos concurridos o aulas. La rueda se coloca en segundos sin necesidad de herramientas.





2. Extensión de asiento

El kit de mayor profundidad de asiento extiende la profundidad del asiento con un nuevo rango de 32 a 45 cm. El kit incluye una base de asiento más larga y rieles de asiento más resistentes.



¿Cómo abrir la base de la Tapir?

- ① Separe las ruedas por completo
- ② Empuje hacia abajo la correa gris
- ③ Pise ambos frenos





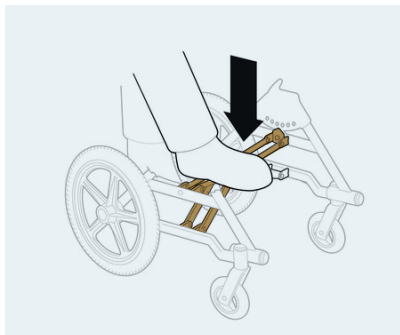
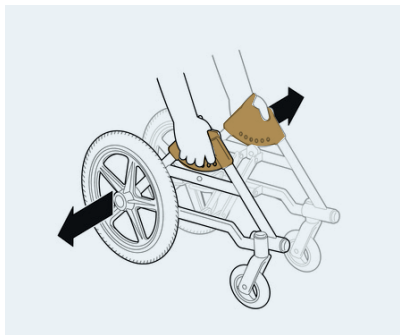


¿Cómo colocar el asiento de la Tapir?



- ① Apriete la palanca de tilt y levante el asiento. **Nota:** Para muchas personas, esto es más fácil hacerlo desde atrás.
- ② Alinee los pivotes con ambos receptores, colóquelos en su lugar y suelte la palanca de tilt. Suelte la correa.
- ③ Abra el asiento con la barra de reclinación.
 - I. Empuje la palanca de bloqueo roja hacia adelante con el pulgar.
 - II. Apriete la barra de reclinación.
 - III. Abra el asiento a la posición preferida.



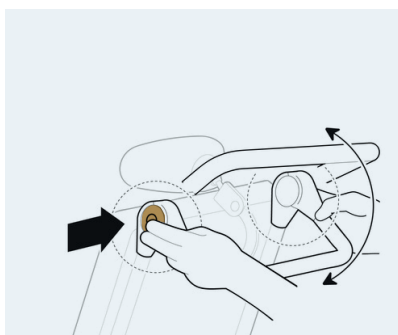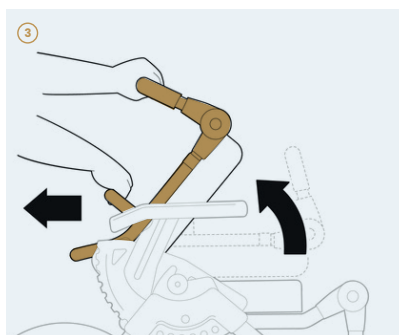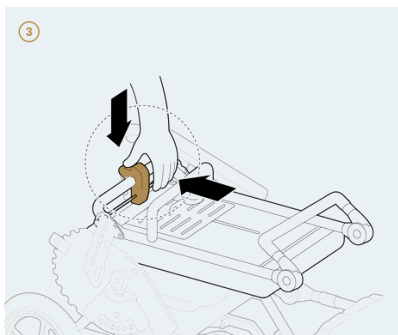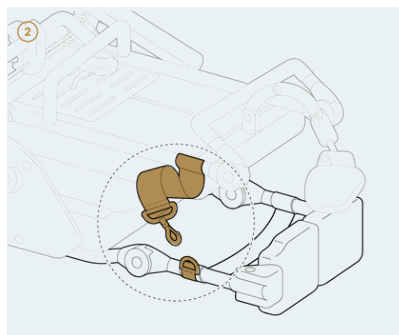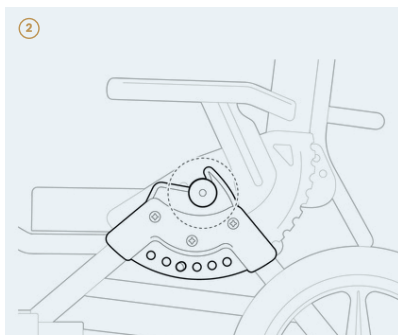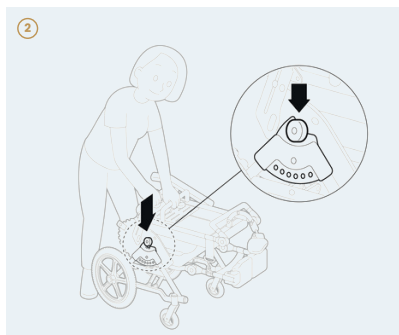

¿Cómo bascular la Tapir?

Tapir tiene un sistema de basculación fácil de usar. La basculación frecuente mejora la comodidad, la salud y la participación. La basculación cambia el ángulo del asiento junto con el respaldo.

- I. Apriete la palanca de inclinación mientras sostiene firmemente la manija de empuje.
- II. Suelte la palanca de inclinación en la posición deseada.
- III. Escuche un chasquito y agite la manija de empuje para verificar el bloqueo.

ATENCIÓN!

- I. Utilice siempre las dos manos: en la manija de empuje y en la palanca de basculación.
- II. Esté preparado para sostener el peso del usuario cuando se bascule.
- III. Use los frenos de rueda cuando bascule.

