

Respaldo

MAKI HIGH



**Manual
de usuario**

WEX

Advertencias y precauciones



- Antes de usar el equipo, el usuario debe leer las instrucciones de uso, advertencias y precauciones incluidas con el producto.
- Para el correcto uso del dispositivo, la persona acompañante debe estar debidamente capacitada.
- El producto no puede ser usado sin supervisión.
- Se prohíbe el uso del dispositivo para fines distintos a los que se estipulan en el manual de usuario.
- Regule y ajuste el equipo de acuerdo con las medidas y necesidades del paciente.
- Luego de cada regulación, vuelva a apretar firmemente cada tornillo que se haya aflojado.
- Compruebe que los tornillos estén estables y ajustados.
- Se prohíbe el uso del dispositivo en caso de constatarse que el mismo se encuentra dañado o carece de alguna de sus partes.
- No cuelgue bolsas ni elementos en los controles laterales o montajes, para prevenir posibles vuelcos o sobrecargas.
- No utilice el dispositivo si presenta daños, piezas faltantes o cualquier condición que pueda comprometer la seguridad del usuario.
- El dispositivo se debe mantener fuera del alcance de fuentes directas de calor, incluyendo llamas desnudas, cigarrillos y calentadores eléctricos o a gas.
- Asegúrese de que las superficies en contacto con el usuario se encuentren a una temperatura que no pueda producir daños en la piel. También tenga precaución al acercarse a fuentes de calor.
- Limpie regularmente el producto con un paño húmedo y, si es necesario, con agua tibia y detergente o jabón suave sin cloro. No utilice limpiadores abrasivos.
- Deje secar completamente el producto antes de volver a usarlo.
- Realice una inspección visual para detectar piezas dañadas o desgastadas, faltantes o que funcionen mal. En caso de un mal funcionamiento, deje de usar el producto de inmediato.
- Se recomienda realizar la inspección con una persona que comprenda el uso



Advertencias y precauciones



del dispositivo anualmente, cada vez que se retira de servicio y después de un almacenamiento prolongado (más de 4 meses).

- Solo se deben usar accesorios y partes provistas por WEX para este producto; de otra manera, usted compromete la seguridad del usuario.

- Se prohíbe realizar cambios en la estructura y montajes, debido a que podría resultar peligroso.
- La realización de modificaciones al equipo que no sean llevadas a cabo por nuestro personal anula la garantía del producto. WEX no se responsabiliza por las mismas.

Especificaciones

	Ancho	Alto	Pad Lateral
Maki High 25x30	25 cm	30 cm – 35 cm	S
Maki High 30x35	30 cm	35 cm – 45 cm	S
Maki High 35x40	35 cm	40 cm – 50 cm	M
Maki High 40x45	40 cm	45 cm – 55 cm	M




¿Qué incluye el **Maki High**?


Respaldo



Montajes

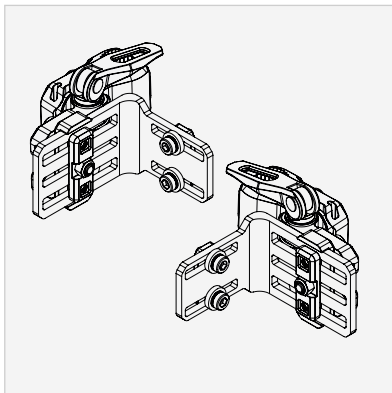

Controles laterales

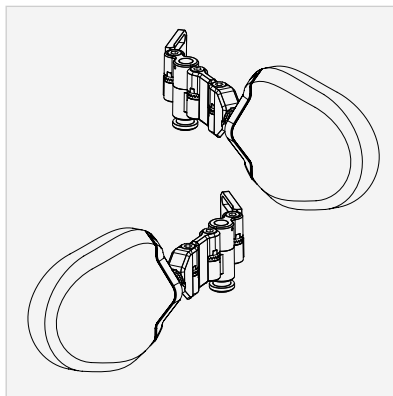


El respaldo **Maki High** cuenta con un respaldo, un juego de montajes (izquierdo y derecho) y controles laterales de tronco rebatibles (izquierdo y derecho).




¿Cómo regular tu **Maki High**?

1. Regulación de contenciones laterales

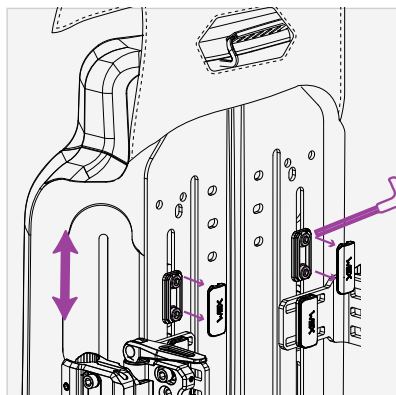


Abra la funda trasera del respaldo **Maki High**, retire las tapas que cubren los tornillos indicados y aflójelos para regular la altura y la extensión en ancho de las chapas laterales, como se muestra a continuación.

Regulación de altura

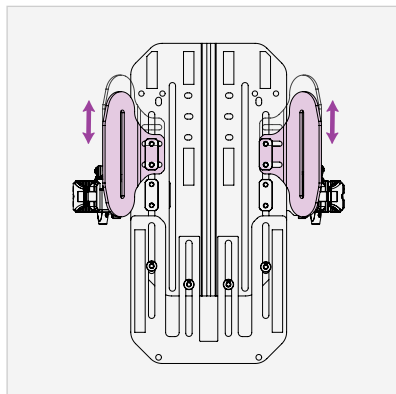


Regulación de ancho

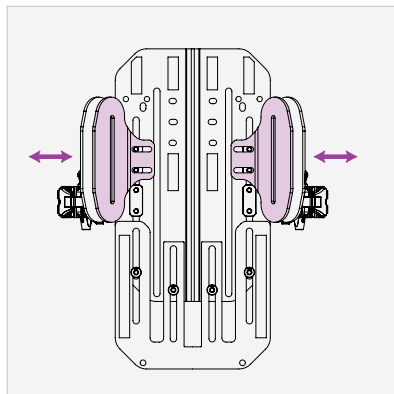



¿Cómo regular tu Maki High?

2. Regulación de altura del respaldo

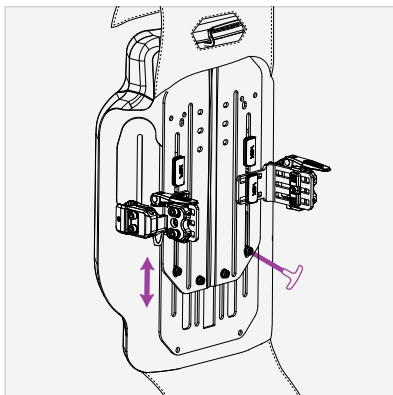

Afloje los tornillos indicados en la imagen para dar la altura necesaria al respaldo. Luego volverlos a ajustar.

**Todos los talles cuentan con 4 tornillos, exceptuando el respaldo de 40x45 que cuenta con solo 3 para regular la altura.*

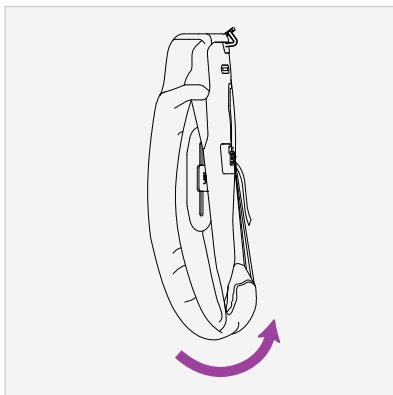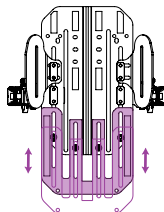


Al cerrar la funda de tela, la espuma excedente se dobla hacia atrás y se ajusta con las cintas como se muestra en la imagen.




¿Cómo regular tu Maki High?

3. Ubicación de los montajes

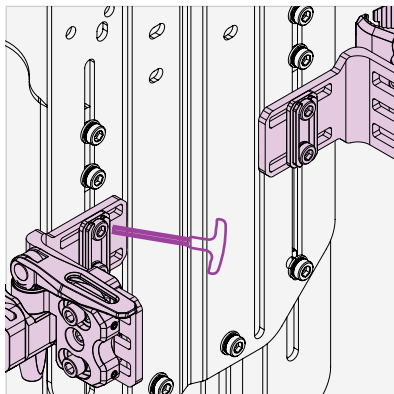


Afloje los tornillos indicados para desplazar los montajes a lo largo de las ranuras y ajustar su ancho y altura.


**Si ud. cuenta con montajes de refuerzo, el procedimiento de ubicación es el mismo (ver imagen a continuación)*

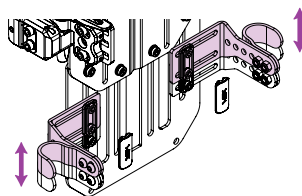

Regulación de altura

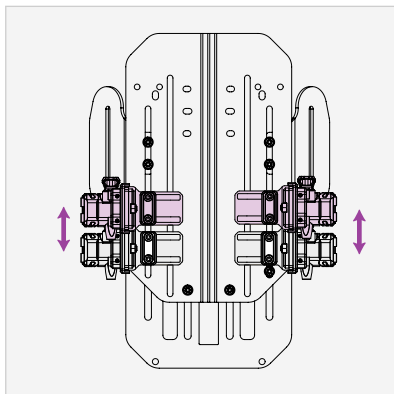


Regulación de ancho

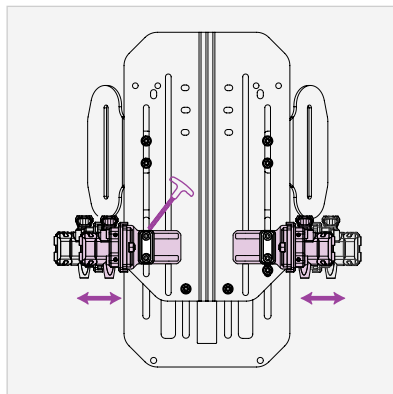



¿Cómo montar tu Maki High?

4. Colocar el montaje en el chasis de la silla

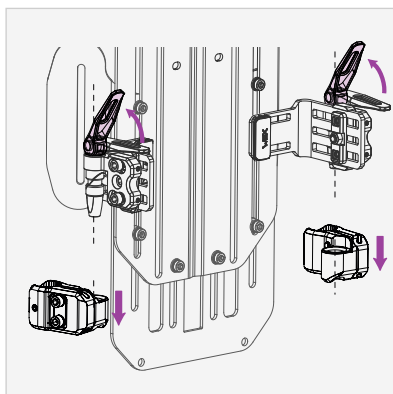


Separar la abrazadera del montaje

Levante la palanca coloreada en la imagen para poder separar la abrazadera del montaje. Luego, retire los tornillos (A) señalados de las abrazaderas para colocarlas en el chasis de la silla y vuelva a ajustarlos. Fije la posición ajustando el tornillo (B).

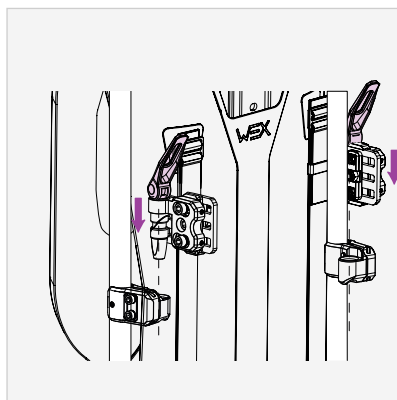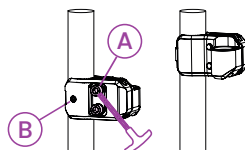


Montar el respaldo en la silla

Acople nuevamente el respaldo encastrando los montajes sobre las abrazaderas instaladas. Verifique que ambos montajes hayan quedado correctamente bloqueados al bajar la palanca nuevamente.

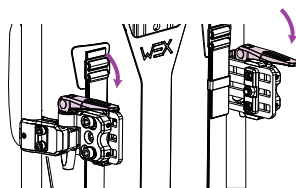



¿Cómo montar tu Maki High?

5. Regular posición del respaldo con respecto a la silla

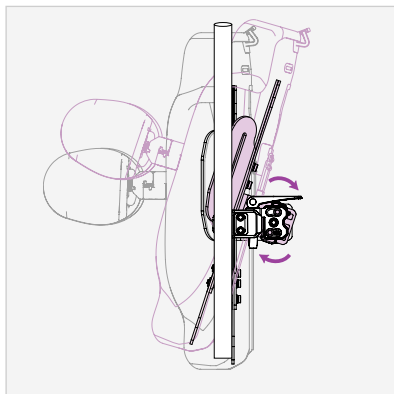


Regular inclinación

Afloje primero los tornillos prisioneros (C) para permitir la rotación. A continuación, afloje los tornillos (D) hasta obtener la inclinación deseada en el respaldo y vuelva a ajustarlos.

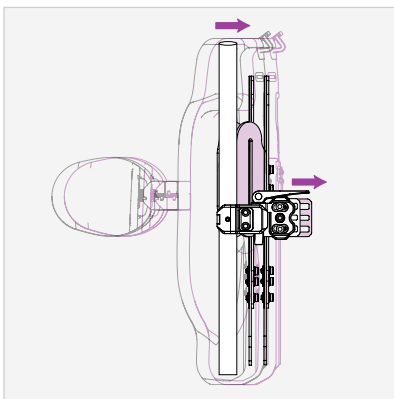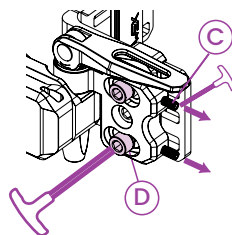


Regular profundidad

Afloje el tornillo señalado (en ambos montajes) para regular la profundidad del respaldo. Luego volver a ajustarlos.

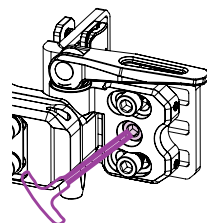

¿Cómo regular tu **Maki High**?



6. Ubicación de los controles laterales rebatibles

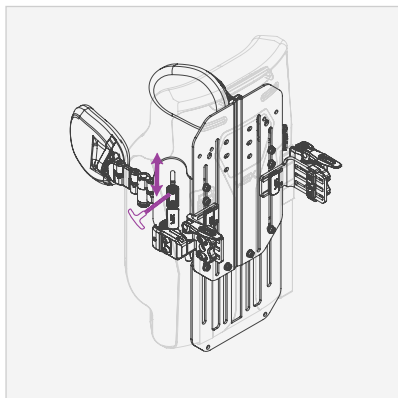

Ajustar altura


Retire la tapa cubretornillos y afloje los tornillos señalados. Mueva los controles laterales a la altura deseada, vuelva a ajustar y coloque nuevamente la tapa.

7. Accionamiento para rebatir controles laterales

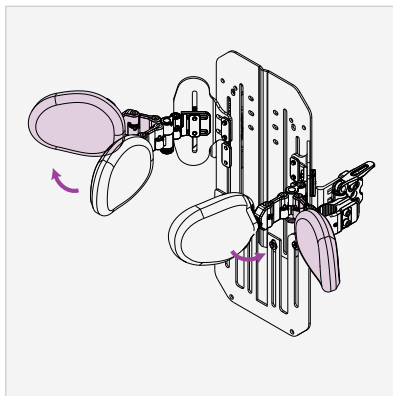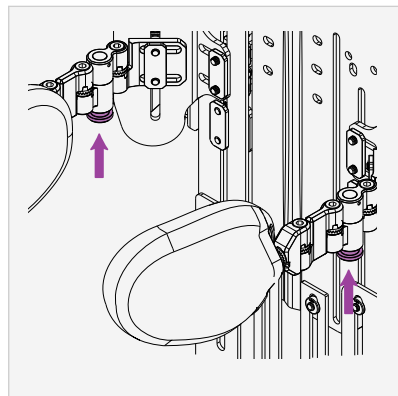



¿Cómo regular tu Maki High?

8. Posición de los controles laterales rebatibles

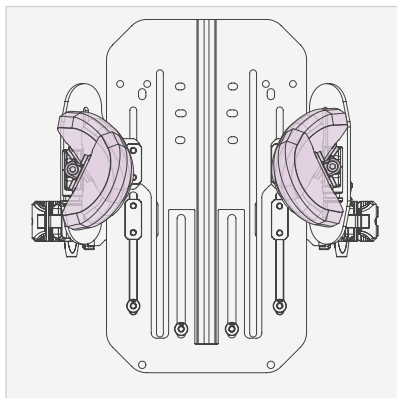


Regulación de ángulo del pad

Afloje el tornillo que se encuentra al destapar el pad. Esto permitirá regular su ángulo.

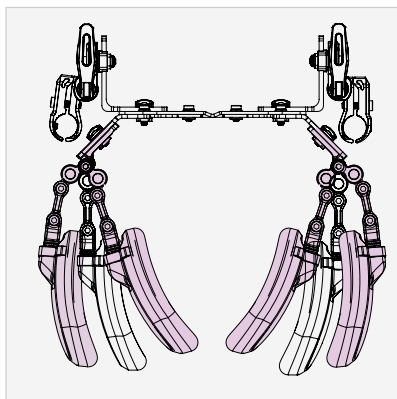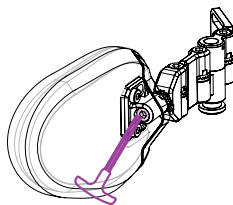

Regulación de articulación

Afloje los tornillos señalados que unen los eslabones. Esto le permitirá articular el control según lo requiera. Luego, vuelva a ajustarlos.

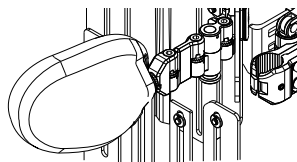

MAKI HIGH | WEX