

Respaldo

MAKI LOW



**Manual
de usuario**

WEX

Advertencias y precauciones



- Antes de usar el equipo, el usuario debe leer las instrucciones de uso, advertencias y precauciones incluidas con el producto.
- Para el correcto uso del dispositivo, la persona acompañante debe estar debidamente capacitada.
- El producto no puede ser usado sin supervisión.
- Se prohíbe el uso del dispositivo para fines distintos a los que se estipulan en el manual de usuario.
- Regule y ajuste el equipo de acuerdo con las medidas y necesidades del paciente.
- Luego de cada regulación, vuelva a apretar firmemente cada tornillo que se haya aflojado.
- Compruebe que los tornillos estén estables y ajustados.
- Se prohíbe el uso del dispositivo en caso de constatarse que el mismo se encuentra dañado o carece de alguna de sus partes.
- No cuelgue bolsas ni elementos en los controles laterales o montajes, para prevenir posibles vuelcos o sobrecargas.
- No utilice el dispositivo si presenta daños, piezas faltantes o cualquier condición que pueda comprometer la seguridad del usuario.
- El dispositivo se debe mantener fuera del alcance de fuentes directas de calor, incluyendo llamas desnudas, cigarrillos y calentadores eléctricos o a gas.
- Asegúrese de que las superficies en contacto con el usuario se encuentren a una temperatura que no pueda producir daños en la piel. También tenga precaución al acercarse a fuentes de calor.
- Limpie regularmente el producto con un paño húmedo y, si es necesario, con agua tibia y detergente o jabón suave sin cloro. No utilice limpiadores abrasivos.
- Deje secar completamente el producto antes de volver a usarlo.
- Realice una inspección visual para detectar piezas dañadas o desgastadas, faltantes o que funcionen mal. En caso de un mal funcionamiento, deje de usar el producto de inmediato.
- Se recomienda realizar la inspección con una persona que comprenda el uso



Advertencias y precauciones

ATENCIÓN!
LEER MANUAL
ANTES DE USAR

- del dispositivo anualmente, cada vez que se retira de servicio y después de un almacenamiento prolongado (más de 4 meses).
- Solo se deben usar accesorios y partes provistas por WEX para este producto; de otra manera, usted compromete la seguridad del usuario.
 - Se prohíbe realizar cambios en la estructura y montajes, debido a que podría resultar peligroso.
 - La realización de modificaciones al equipo que no sean llevadas a cabo por nuestro personal anula la garantía del producto. WEX no se responsabiliza por las mismas.



Medidas


	Ancho	Alto
Maki Low 30x25	30 cm	25 cm - 35 cm
Maki Low 35x30	35 cm	30 cm - 40 cm
Maki Low 40x30	40 cm	30 cm - 40 cm
Maki Low 45x30	45 cm	30 cm - 40 cm

¿Qué incluye el Maki Low?

Respaldo




Montajes regulables


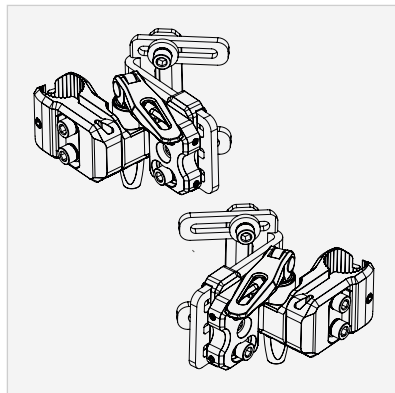


¿Cómo regular tu **Maki Low**?

1. Regulación de altura del respaldo

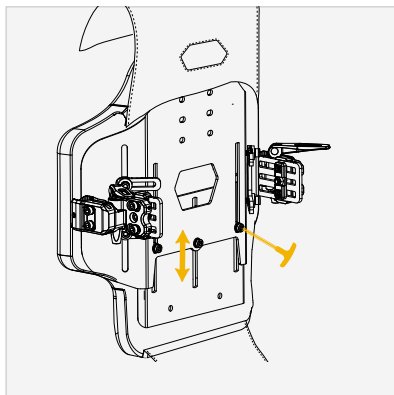

Aflojar los tornillos indicados en la imagen para deslizar las chapas y dar la altura necesaria al respaldo. Luego volver a ajustar los tornillos.

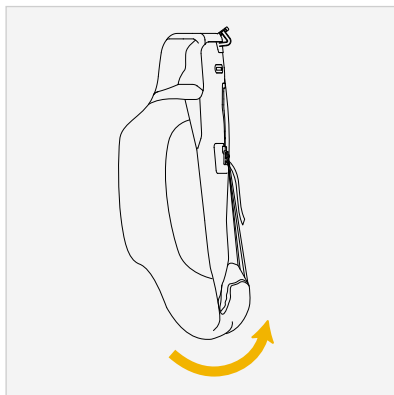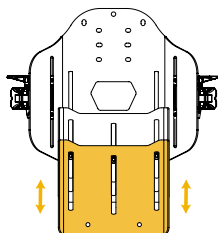


Una vez ajustada la altura, cierre la funda de tela. La espuma sobrante se comprimirá hacia atrás. Finalmente, ajuste las cintas de cierre como se muestra en la imagen.




¿Cómo regular tu **Maki Low**?

2. Ubicación de los montajes

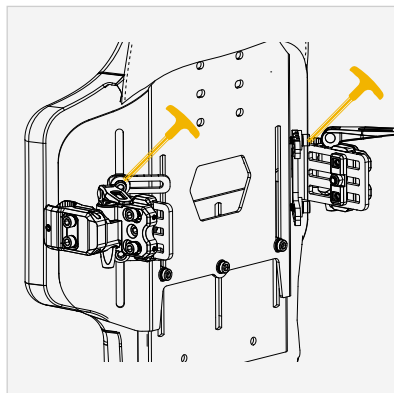


Afloje los tornillos indicados en la imagen para desplazar los montajes a lo largo de las ranuras. Esto permite ajustar tanto la altura como el ancho de los montajes según la silla. Luego, ajuste nuevamente los tornillos.

Regulación de altura

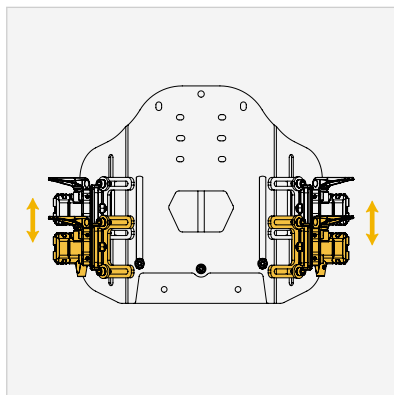


Regulación de ancho

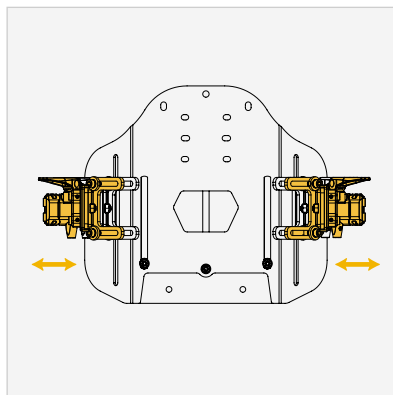



¿Cómo montar tu Maki Low?

3. Colocar el montaje en el chasis de la silla

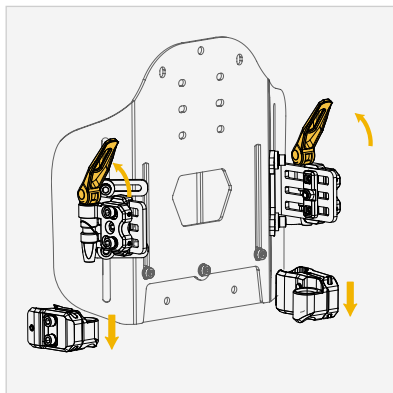


Separar la abrazadera del montaje

Levante la palanca indicada en la imagen para liberar la abrazadera del montaje. Retire los tornillos señalados y coloque las abrazaderas sobre el chasis de la silla. Una vez posicionadas correctamente, vuelva a ajustar los tornillos.

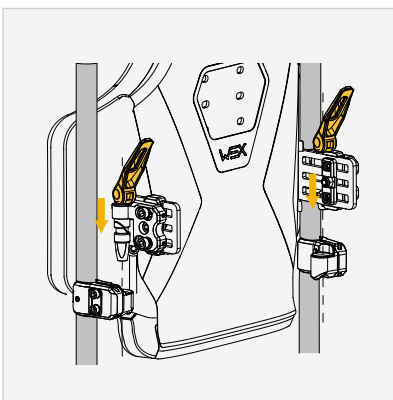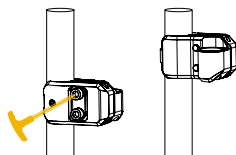


Montar el respaldo en la silla

Acople nuevamente el respaldo haciendo encastrar los montajes sobre las abrazaderas instaladas. Verifique que ambos montajes hayan quedado correctamente bloqueados al bajar la palanca nuevamente.

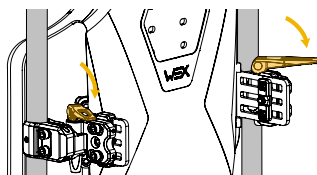



¿Cómo montar tu Maki Low?

4. Regular posición del respaldo con respecto a la silla

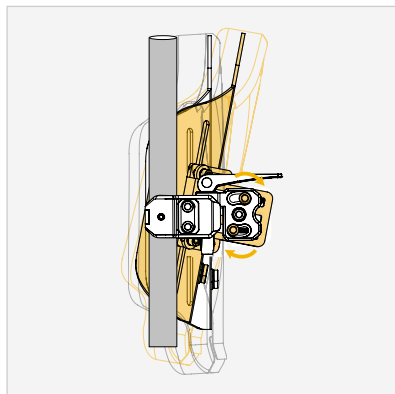


Regular inclinación

Retire casi completamente los tornillos (A) para liberar el mecanismo de rotación. Luego, afloje los tornillos (B) hasta alcanzar la inclinación deseada del respaldo. Una vez finalizado el ajuste, vuelva a apretar firmemente todos los tornillos.

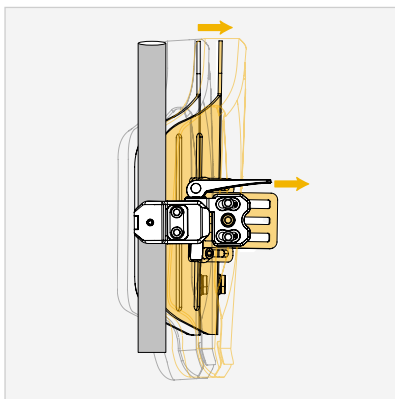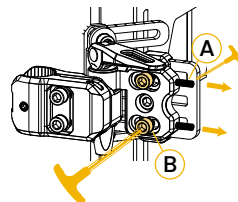

Regular profundidad

Afloje el tornillo indicado en ambos montajes y desplace el respaldo hasta alcanzar la profundidad deseada. Finalmente, vuelva a ajustar los tornillos.

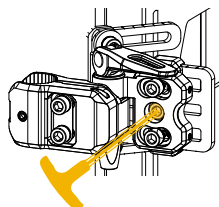

MAKI LOW | WEX