

Manual de usuario **Pelican**



Tabla de contenidos

Prefacio.....	12
Declaración de conformidad	12
Vida útil	12
Eliminación	12
Placa de identificación.....	12
Reutilizar.....	12
Garantía	12
Partes del producto	13
Propósito previsto	13
Indicación Contraindicación.....	13
Volumen de suministro.....	13
Instrucciones de seguridad.....	13
Preparación para el uso	14
Ajuste del marco base	14
Plegado para transporte	14
Instrucciones de mantenimiento	15
Limpieza / desinfección	15
Montaje de accesorios (disponibles opcionalmente)	15
Ajuste de accesorios (disponibles opcionalmente) ...	16
Posicionamiento del usuario.....	18
Sugerencias de uso.....	18
Datos técnicos	19

Prefacio

Gracias por elegir un producto de . No te decepcionará el diseño, la funcionalidad y la calidad de este producto. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes del uso inicial. Contienen información de seguridad importante y valiosos consejos para el uso y cuidado adecuados. Si tiene preguntas o necesita información adicional, póngase en contacto con su distribuidor especializado Drive DeVilbiss que suministró su producto. Estas instrucciones de funcionamiento contienen toda la información importante para el ajuste y el funcionamiento. Las instrucciones de funcionamiento más actuales están disponibles en formato PDF en línea o se pueden solicitar al servicio de atención al cliente. Se pueden mostrar formatos ampliados para personas con discapacidad visual. Los pacientes ciegos deben ser instruidos por su asistente. Las reparaciones, así como algunos ajustes, requieren una formación técnica especial y, por lo tanto, deben ser realizadas por el distribuidor de suministros médicos.

Declaración de conformidad

Para el producto descrito, KG declara el cumplimiento de acuerdo con el reglamento de dispositivos médicos (UE) 2017/745.


Vida útil

Nuestra empresa asume una vida útil de cinco años para este producto, siempre que el producto se utilice según lo previsto y se cumplan todos los requisitos de mantenimiento y servicio. Esta vida útil puede superarse significativamente si el producto se manipula, repara, mantiene y utiliza con cuidado y no hay límites técnicos basados en el desarrollo posterior de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, la vida útil también puede acortarse significativamente debido a un uso extremo e inadecuado. La determinación de la vida útil por parte de nuestra empresa no representa ninguna garantía adicional.

Disposición

Si ya no necesita el producto, póngase en contacto con su distribuidor especializado o llévelo a su centro de eliminación local.

Placa de identificación

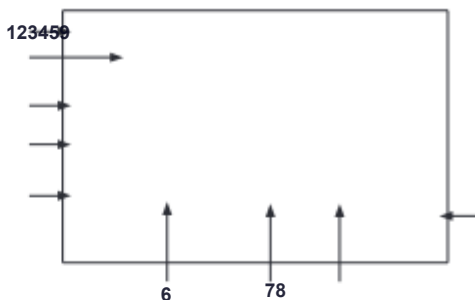


Reutilización

Este producto se puede reutilizar. Tenga en cuenta que todos los documentos técnicos necesarios para un manejo seguro también deben entregarse al nuevo usuario. El producto debe ser revisado por el distribuidor especializado, limpiado y restaurado a un estado óptimo. Siga siempre las instrucciones del fabricante durante la preparación; Estos están disponibles a pedido. Los accesorios están disponibles en su distribuidor especializado o en

Garantía

El período de garantía para el producto suministrado por nosotros es de 24 meses a partir de la fecha de compra. Las piezas defectuosas se reemplazarán sin cargo si se puede demostrar que hay un defecto en los materiales o la fabricación. Las piezas sujetas a desgaste generalmente no están cubiertas durante el período de garantía normal, a menos que las piezas necesiten un nuevo reparado o reemplazo que sea necesario como consecuencia clara y directa de un error de fabricación o de material. Nos reservamos el derecho de error y modificaciones en función de las mejoras técnicas y los cambios de diseño. **EXCLUSIÓN DE GARANTÍA** Los artículos sujetos a desgaste incluyen (entre otros): ruedas, frenos y manijas

Partes del producto

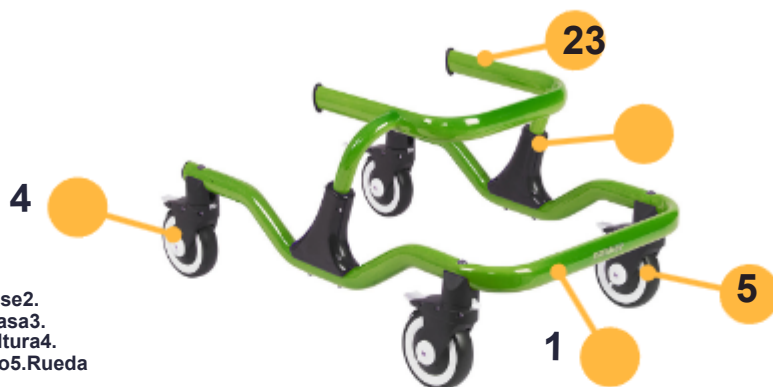

1. Marco base
2. Marco con asa
3. Ajuste de altura
4. Tope trasero
5. Rueda con freno

Propósito

Las ayudas para caminar para niños generalmente consisten en un marco tubular con cuatro rodillos o ruedas. Pueden equiparse con asientos, respaldos y soportes pélvicos y diferentes sistemas de sujeción, que dan a los niños la libertad de movimiento para que puedan moverse por su zona de vida de forma independiente o con la ayuda de un asistente.

Indicación | Contraindicación

INDICACIÓN: Ayuda para caminar para niños y adolescentes para uso en interiores para compensar o mejorar la capacidad limitada para caminar y para corregir problemas de postura corporal.

Mantener/promover/salvaguardar la marcha y la bipedestación (entrenamiento de la marcha). El objetivo es aprender a caminar activamente o a la locomoción independiente, ampliar un radio de acción limitado y compensar la inestabilidad de la marcha. El andador para niños se puede tirar detrás del cuerpo o empujar frente al cuerpo. Como resultado, la ayuda wal-king aumenta la estabilidad trasera cuando está de pie y ofrece una libertad de movimiento óptima de las piernas. **CONTRAINDICACIÓN:** Limitación de la movilidad en caso de deterioro del movimiento/coordinación/equilibrio, pero aún así se conserva adecuadamente la capacidad para caminar si el uso de otras ayudas para caminar no es suficiente. En general, la indicación para el entrenamiento de la marcha debe hacerse bajo supervisión médica / ortopédica. Para ello, antes de la provisión de la ayuda para caminar, debe aclararse a este respecto si existen contraindicaciones con respecto al paciente.

Por lo general, no se deben proporcionar ayudas para el entrenamiento de la marcha si, por ejemplo, se presenta una malposición del pie y/o síntomas de dolor. Si no está seguro de la indicación y contraindicación, hable con el médico y/o terapeuta responsable. Volumen de suministro

1 xWalking frame1
1xInstrucciones de uso

Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones de uso.
- Se debe verificar que todos los componentes no estén dañados y que encajen bien antes de su uso. ¡No use el producto si hay algún defecto!
- ¡Use el producto solo como ayuda para caminar!
- Utilice el producto solo sobre una superficie lisa y sólida
- Tome nota del peso máximo permitido del usuario. Esta información se puede encontrar en los datos técnicos de estas instrucciones de uso, así como en la placa de identificación.
- ¡El uso en escaleras mecánicas y similares está expresamente prohibido!
- No cuelgue ninguna bolsa en el asa, ¡riesgo de vuelco!
- Al plegar / desplegando el producto, la ropa y las partes del cuerpo se pueden pellizcar.
- Proteja el producto de la luz solar directa. Las piezas del producto pueden calentarse y causar lesiones en la piel si se tocan.

- El producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 60 °C durante largos períodos de tiempo (por ejemplo, uso en una sauna, etc.).
- Antes de cada uso, asegúrese de que su producto esté intacto y que todas las piezas ajustables estén debidamente aseguradas.
- Revise los tornillos del producto con regularidad y cierre diez veces, si es necesario.
- El uso correcto del producto requiere una capacitación precisa y cuidadosa del cuidador.
- Los usuarios que tienen dificultades para leer deben leer las instrucciones de uso para comprender cómo manejar el producto.
- ¡Solo para uso en interiores!
- Úselo solo bajo supervisión.

Preparación para el uso

Levante la parte superior del marco a la posición vertical (foto 1). Ambas barras encajan automáticamente en los huecos del marco. ¡Advertencia! ¡Asegúrese de que las barras se hayan encajado correctamente en su lugar para evitar que el producto se derrumbe involuntariamente!



Importante: El marco de tamaño M y L es plegable; ¡el marco de la talla S no es plegable! La mayoría de los accesorios (disponibles opcionalmente) se fijan al cuadro mediante abrazaderas y varillas de ajuste (foto 2).



Ajuste del marco con mango Al mantener presionada la palanca (J), la altura deseada se puede ajustar en incrementos. Ahora suelte la palanca (J) (foto 3).

Importante Asegúrese de que las palancas se hayan encajado correctamente en su lugar (se puede escuchar un chasquido cuando encajan en su lugar) y que el marco ya no se pueda mover. Ajuste de las ruedas (frenos y bloqueo – dirección de movimiento)



1. Cada rueda se puede bloquear individualmente para estabilidad direccional. Este bloqueo ayuda al usuario a aprender a caminar en línea recta. El bloqueo de ambas ruedas traseras evita el deslizamiento lateral al caminar, mientras que las ruedas delanteras aún son dirigibles. Para bloquear las ruedas, la palanca de bloqueo (E) debe introducirse en el orificio (F) de la rueda (foto 4).

2. Cada rueda se puede ajustar de manera que ruede en una sola dirección. Esto es útil para los usuarios que tienen dificultades para caminar y rodar involuntariamente hacia atrás. Para ello, empuje el pasador (G) hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Al rodar hacia adelante, la rueda hace un sonido de clic (foto. 5).

3. Usando el pedal de freno (H), la velocidad del entrenador de marcha se puede ajustar en incrementos o se puede frenar por completo. Cuanto más se presiona el pedal hacia abajo, mayor es la resistencia a la rodadura. Presione el pedal hasta el fondo para frenar el entrenador de marcha (foto. 4).

Plegado para el transporte

El entrenador de marcha GT (solo tallas M y L) se puede plegar para facilitar el transporte. Para hacer esto, lleve los accesos y el marco superior a la posición más baja. Se recomienda pararse detrás del entrenador de marcha en o-

Ajuste del bastidor base GT

der para doblarlo. Levante ambas barras (J) y colapse el marco como se muestra (foto. 6).



Instrucciones de mantenimiento

- Revise regularmente el desgaste y la estabilidad de las conexiones metálicas y atornilladas y garantice la estabilidad. Apriete los tornillos, si es necesario.
- Compruebe en particular que los bloqueos de las ruedas hayan encajado en su lugar. Póngase en contacto con el distribuidor responsable si una conexión no está en la forma adecuada.
- En caso de defectos, póngase en contacto con su distribuidor especializado al que compró este producto.
- Verifique el estado de las ruedas regularmente. Son "a prueba de fallas", lo que significa que no tiene que verificar la presión del aire ni llenarlos de aire. Sin embargo, siempre revise los neumáticos en busca de grietas u otros daños.
- Las reparaciones/mantenimiento necesarios pueden ser realizados solo por personal capacitado.

Limpieza / Desinfección

- ¡Limpie regularmente a mano con un paño húmedo!
- ¡No utilice ningún agente de limpieza agresivo!
- ¡No use limpiadores abrasivos!
- ¡No use limpiadores a base de cloro y vinagre en dosis altas!
- Para desinfectar, se puede utilizar un desinfectante en aerosol como Descosept AF o Bacillo! AF.

Montaje de accesorios (opcionalmente disponible)


General Los accesorios se pueden unir al marco y ajustar según la terapia deseada, las habilidades motoras del usuario y la selección de accesorios. Abra la abrazadera aflojando el tornillo y girando

hacia abajo. A continuación, gire el soporte giratorio hacia arriba (foto. 7).

2. Coloque la abrazadera del soporte del antebrazo en el marco oval superior, gire el tornillo de estrella hacia arriba y apriete (foto. 8).



3. Se recomienda montar el soporte del antebrazo delante del tubo del cuadro principal (foto. 9). Esto implica una posición estable y ofrece suficiente espacio para montar los demás accesorios. Para los usuarios con cuerpos delgados, los soportes del antebrazo se pueden montar en el interior (foto 10).

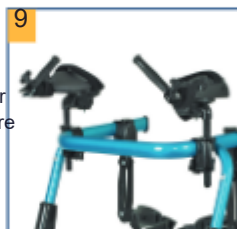


Cinturón de cadera



La ayuda de fijación de la cadera (cinturón lumbar) está montada directamente detrás del tubo del cuadro principal. Asegúrese de que la marca "Top" en el cojín del respaldo esté orientada hacia adelante y que las correas necesarias para asegurar el cojín del respaldo corran detrás de él (foto 11).

Arnés de asiento


Cuando el asiento esté destinado a soportar una inclinación hacia delante, monte los accesorios con abrazaderas y varillas de ajuste (A) en el extremo del bastidor superior (foto. 12/13).

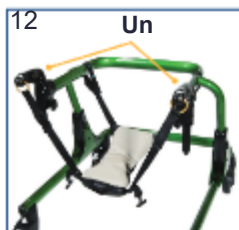

Correa para el muslo



Envoltura de tobillo

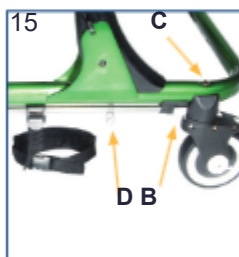

Ahora empuje el resorte de sujeción (D) presionando ambas lengüetas juntas en el resorte firmemente sobre la rueda trasera de modo que la varilla ya no se pueda mover (foto 15). Tirador(Nº de art.:)



Abra la abrazadera soltando el tornillo y gírelo hacia abajo. Luego gire el soporte giratorio hacia arriba (foto 16).



2. Coloque la abrazadera del soporte del antebrazo en el marco superior ovalado, gire el tornillo de estrella hacia arriba y apriete.

3. Se recomienda montar el soporte del antebrazo delante del tubo del bastidor principal (foto. 17).

Ajuste de accesorios (opcionalmente disponible)

Soporte del antebrazo




1. Aflojar el tornillo (K) permite una variedad de ajustes: (foto. 18).

- Ajuste de los reposabrazos hacia o lejos del cuerpo
- Rotación de los brazos hacia arriba o hacia abajo

• Rotación de los brazos inclinados hacia adentro o hacia afuera

• Ajuste del reposabrazos hacia adelante o hacia atrás

2. Para ajustar la altura del soporte del antebrazo, presione el botón (L), ajuste el soporte del antebrazo en la posición deseada y suelte el botón. El reposabrazos se bloquea correctamente cuando el botón encaja de forma audible en su lugar (esto se facilita subiendo o bajando ligeramente el reposabrazos) (foto 19).

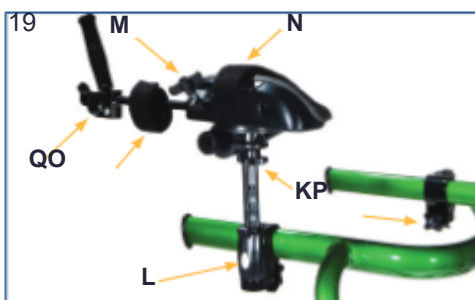

3. El tornillo (M) se utiliza para ajustar la longitud del mango para diferentes longitudes de antebrazo y la rotación en un ángulo de izquierda a derecha.

4. La correa para el brazo (N) y la correa para la muñeca (O) aseguran los brazos del usuario. El uso de la muñequera evita que el brazo se golpee

deslizamiento dental del soporte del antebrazo.5. El ancho entre los soportes del antebrazo se puede ajustar quitando y reposicionando las abrazaderas y ajustando las varillas.

• Paso 1: Afloje el tornillo (K) y retire el antebrazo.

• Paso 2: Presione el botón (L), extraiga la varilla de ajuste y gírela en la posición deseada.

• Paso 3: Vuelva a colocar el soporte del antebrazo en la varilla de ajuste y apriete el tornillo (K). Los pasos 1 y 2 muestran la posición de la abrazadera en el interior del marco superior. El paso 3 muestra la posición en el exterior que aumenta la distancia entre los soportes de los brazos (foto 19). Cinturón de cadera (S = N° de art.: ; M = Arte. No.: ; L = Art. N° de referencia:)

1. Para ajustar el ancho del cinturón de cadera, las abrazaderas se pueden unir al interior o al exterior en el marco superior (foto. 9/10). Luego, los soportes laterales se pueden mover hacia adelante o hacia afuera aflojando el tornillo (S).

2. Para ajustar la altura, presione el botón (T), ajuste a la altura deseada y suelte el botón. La varilla de ajuste se encaja correctamente en su lugar cuando el botón encaja audiblemente en su lugar.

3. Al aflojar el tornillo (T), el cinturón de cadera se puede ajustar hacia adelante o hacia atrás en el marco o volver a quitar por completo, como se muestra en la foto 20.



4. Las cuatro correas (V) se pueden usar individualmente para ajustar o aflojar o para cambiar el ángulo de la posición inclinada hacia adelante (foto 20).


Arnés de asiento(S = N° de art.: ; L = Art. N° de referencia:)

1. Para ajustar la altura de la parte trasera del asiento, presione el botón (X), ajuste a la altura deseada y suelte el botón. La varilla de ajuste se encaja correctamente en su lugar cuando el botón hace clic audiblemente en su lugar.


2. Aflojando el tornillo (Y), la parte trasera del asiento se puede ajustar hacia adelante o hacia atrás en el marco o quitar por completo, como se muestra en la foto 21.

3. Las hebillas del cinturón (Z) se utilizan para asegurar la parte delantera y trasera del asiento. Asegure los cierres delanteros del cinturón como desee. Coloque los sujetadores del cinturón trasero en las varillas de ajuste para un ajuste adicional de la altura como se muestra o directamente en el bastidor superior (las tapas en el extremo evitan que

los cinturones se deslicen del marco).21

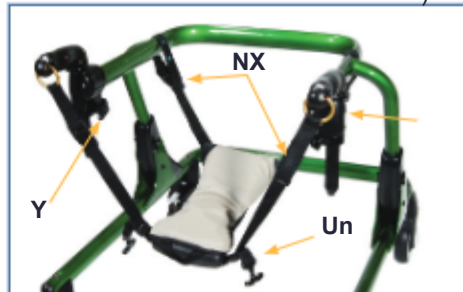

4. Las hebillas del cinturón (A) se utilizan para ajustar la altura del asiento (foto. 21). Correa para el muslo (S = N° de art.: ; L = Art. N° de referencia:)

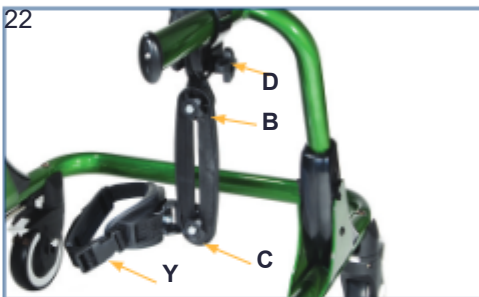

1. La correa del muslo se puede ajustar hacia o lejos del usuario aflojando el tornillo (B). Vuelva a apretar el tornillo.

2. La altura o el ángulo de la correa del muslo se puede ajustar aflojando el tornillo (C).

3. Aflojando el tornillo (D), la correa del muslo se puede ajustar hacia adelante o hacia atrás en el marco o quitar por completo, como se muestra en la foto 22.


4. La correa se puede aplicar o ajustar en el muslo utilizando el cierre del cinturón (E) (foto 22). Tobillera(S = N° de art.: ; M = Arte. No.: ; L = Art. N° de referencia:)

1. La correa se puede aplicar o ajustar en el tobillo usando el cierre del cinturón (F)

2. La guía de pasos se puede ajustar presionando y moviendo los resortes de sujeción (G) en las varillas.

3. La envoltura del tobillo se puede quitar por completo moviendo los resortes de sujeción (H) lejos de la rueda, como se muestra en la foto 23.

23

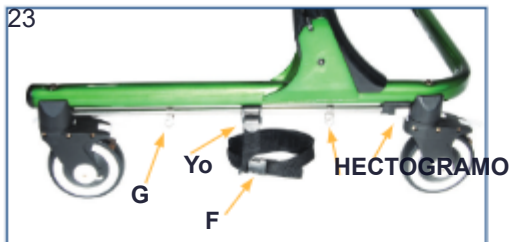


4. El cierre del cinturón (I) se utiliza para el ajuste lateral de la tobillera (foto 23).

Posicionamiento del usuario

1. Accione los frenos de estacionamiento para frenar el entrenador de la marcha.
2. Abra los cierres del cinturón trasero del asiento y los sujetadores del cinturón trasero del cinturón de cadera. Afloje las correas del soporte del antebrazo, la correa del muslo y la envoltura del tobillo.
3. Coloque al usuario en el entrenador de marcha y cierre los rearclos del cinturón de cadera.
4. Apriete las correas de las piernas.
5. Asegure el soporte del antebrazo con las correas para los brazos.
6. Cierra la correa del muslo y las correas de la tobillera.
7. Ajuste la altura deseada del cinturón de cadera.

24

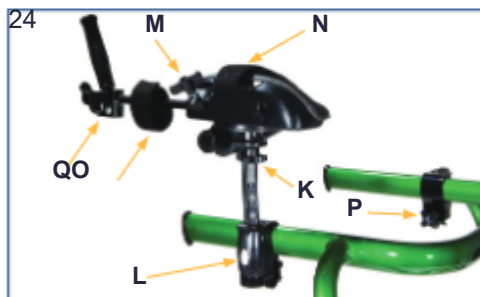


8. Ajuste la posición de inclinación hacia adelante (ángulo de inclinación) utilizando las correas del cinturón de cadera (foto. 24). Asegúrese de que el borde superior del cinturón de cadera no descansa en las axilas para evitar puntos de presión.
9. Ajuste el ancho, la altura y el ángulo de los soportes de los brazos (foto. 20).
10. Ajuste la altura, el ángulo y la longitud de la correa para guiar las piernas (foto 14). De esta manera, las patas se pueden ajustar más juntas o más separadas. Además, evita que el cuerpo se tuerza en el entrenador de la marcha.
11. Ajuste las correas de la tobillera para guiar las piernas (foto. 15).
12. Suelte los frenos (foto. 25).

2625



Consejos de

uso27

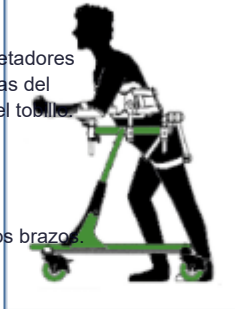

Asegúrese de que el centro de gravedad del cuerpo esté lo más centrado posible entre las ruedas delanteras y traseras. Si los apoyos se utilizan individualmente y en posiciones extremas (demasiado atrás o hacia adelante), el centro de gravedad del usuario se desplaza hacia delante o hacia atrás y existe el riesgo de que el entrenador de la marcha se vuelque.

¡Advertencia! Si los soportes se utilizan individualmente y se colocan al final del marco, existe un mayor riesgo de vuelco. La foto 26 muestra la posición normal. Asegúrese de que la posición inclinada hacia adelante se logre mediante el ajuste diferente de la correa superior e inferior en la parte posterior del soporte del tronco y la colocación de la fijación de la cadera detrás de los hombros. La foto 27 muestra el ajuste de una posición extremadamente inclinada hacia adelante. Tenga en cuenta el ajuste diferente de la correa superior e inferior del cinturón de cadera. La correa delantera y trasera de la fijación de la cadera se coloca en las varillas de ajuste en el extremo del marco superior. Los soportes del antebrazo deben colocarse en la parte delantera del marco superior. Como se muestra en la foto. 27, los soportes se pueden colocar muy lejos hacia adelante o hacia atrás.

Datos técnicos

TAMAÑO	S		M		L
Color	Azul guerrero	verde mágico	verde mágico	Azul guerrero	gris espada
Número de artículo					
Altura (hasta aprox.)	114 cm		122 cm		155 cm
Longitud total	830 milímetros		820 milímetros		960 milímetros
Ancho total	575 milímetros		660 milímetros		700 milímetros
Altura total	380 - 475 milímetros		540 - 660 mm		740 - 995 mm
Ancho entre los controladores	350 milímetros		450 milímetros		490 milímetros
Ancho entre ruedas traseras	450 milímetros		540 milímetros		580 milímetros
Tamaño de las ruedas delanteras			Ø 140 mm		
Tamaño de las ruedas traseras			Ø 140 mm		
Peso	10,5 kg		12,5 kg		16,5 kg
Carga máx.	34 kg		68 kg		91 kg
Material del marco			Stahl / Aluminio		

Accesorios a juego disponibles por separado

TAMAÑO	S		M		L
Soporte para antebrazos	Nº de art.:		Nº de art.:		
Arnés de asiento	Nº de art.:		Nº de art.:		
Correa de mano	Art. No.:	Art. No.:	Hip belArt. No.:	Art. No.:	Correa del musloArt. No.:
Envoltura de tobillo	Art. No.:	Art. No.:	HandleArt. No.:	Art. No.:	Art. No.: