

REHA ShiftPro™

Silla de posicionamiento






El fabricante solo se responsabiliza del uso correcto del dispositivo cuando el producto se haya adquirido a un empleado cualificado de Akces-MED Ltd. o en una tienda médica especializada.

Akces-MED Ltd. se reserva el derecho de introducir cambios técnicos y comerciales en el contenido de las instrucciones sin previo aviso.



El producto marcado con el símbolo CE es un producto sanitario de clase I, de conformidad con la regla 1, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, relativo a los productos sanitarios.

La empresa Akces-MED Ltd. ha implementado el sistema de gestión de calidad ISO 13485 en lo que respecta a la producción, las ventas y el servicio.

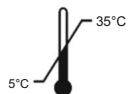

Contenido

Introducción.....4

1. El propósito del manual de usuario.....5

2. Indicaciones y contraindicaciones de uso.....5

3. Características generales de la silla.....7

4. Tabla de tallas.....8

5. Cómo usar la silla.....9

 5.1 Despliegue de la silla.....9 5.2

 Plegado de la silla.....10 5.3

 Respaldo ajustable.....11 5.4

 Estabilizador de cabeza ajustable.....10 5.5

 Soportes pectorales ajustables.....12 5.6

 Asiento ajustable.....12

 5.7 Bloqueo de abducción.....13

 5.8 Soportes pélvicos ajustables.....13

 5.9 Cinturón pélvico.....14

 5.10 Reposabrazos ajustables.....15

 5.11 Reposapiés ajustable.....15

6. El uso de la silla.....16

 6.1 Preparación del usuario.....16 6.2

 Preparación de la silla.....16 6.3 Posición

 sentada.....17

 6.4 Cómo usar los chalecos.....18

7. Normas de seguridad.....21

8. Condiciones de garantía.....23

9. Mantenimiento y limpieza.....23

10. Etiquetado.....27

Introducción

Reha Shift Pro™ es una silla de rehabilitación avanzada especialmente diseñada para niños con disfunciones musculoesqueléticas. Gracias a sus dimensiones compactas y características innovadoras, la silla proporciona un cuidado integral y comodidad de uso en el entorno doméstico.

Reha Shift Pro™ cuenta con características avanzadas, como un reposapiés con ajuste suave y continuo, un asiento con ajuste de profundidad y un respaldo de altura ajustable. Esto permite adaptar la silla al desarrollo del niño a medida que crece con él. Los soportes pélvicos y torácicos ajustables garantizan una excelente estabilidad lateral. La barandilla de seguridad y los reposabrazos ajustables mejoran la protección y adaptan la silla al ni
necesidades individuales de cada usuario.

Además, la base equipada con 4 ruedas giratorias con frenos independientes garantiza un fácil desplazamiento y estabilidad en diferentes espacios. Su diseño compacto, junto con la práctica base plegable, convierte a Reha Shift Pro™ en el soporte ideal para niños con diversas necesidades de rehabilitación.

Reha Shift Pro™ no es solo una silla de rehabilitación, sino una solución integral que permite a los niños participar más plenamente en las actividades diarias, a la vez que les proporciona comodidad y movilidad.

Recuerde leer este manual de usuario detenidamente. Encontrará información útil y pautas para el uso seguro y eficaz del producto.

Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Consultor médico: móvil +48 516 183 883

Akces-MED Ltd.: tel. +48 17 864 04 70

Correo electrónico: export@akces-med.com



¡ATENCIÓN!

Antes de utilizar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse con el manual de usuario.

1. El propósito del manual de usuario



El manual de instrucciones contiene la información básica necesaria para preparar correctamente el dispositivo antes de usarlo, usarlo, mantenerlo y limpiarlo.

Este manual de usuario debe guardarse en un lugar de fácil acceso. Está dirigido a personas que cuidan a usuarios con discapacidad, así como a médicos y fisioterapeutas que utilizan el dispositivo.

Antes de utilizar el Reha Shift Pro™ por primera vez, el usuario (o cuidador) está obligado a familiarizarse con el manual de usuario.

2. Indicaciones y contraindicaciones de uso

Estos dispositivos médicos están destinados a personas con enfermedades ortopédicas, neurológicas y cardiológicas, así como a personas que, tras una cirugía, presentan disfunciones musculoesqueléticas, no han adquirido la capacidad de sentarse de forma independiente o tienen dificultades para adoptar y mantener la posición sentada.

Este dispositivo es útil tanto para personas con flacidez muscular y tono reducido como para quienes padecen espasticidad. También puede ser muy beneficioso para quienes requieren alivio prolongado de una o ambas extremidades inferiores. Es una ayuda indispensable en el proceso de rehabilitación, tanto para la movilidad como para la integración social. Resulta de gran utilidad en actividades cotidianas como la rehabilitación, así como al jugar, estudiar o comer. La elección del tamaño adecuado depende de las indicaciones médicas y los parámetros anatómicos, independientemente de la edad del usuario.

El dispositivo se recomienda para personas en los siguientes casos:

Parálisis cerebral : diversos tipos y formas.

Lesiones cerebrales y de la médula espinal con parálisis y debilidad de las extremidades inferiores, trastornos del equilibrio y de la coordinación motora de diferente etiología.

Enfermedad desmielinizante (por ejemplo, esclerosis múltiple - EM).

Meningocele .

Enfermedades musculares con debilidad y parálisis (distrofia, miastenia gravis, miositis) .

Trastornos genéticos .

Degeneración y enfermedades neurológicas.

¿ Otras afecciones relacionadas con debilidad muscular, parálisis y trastornos musculoesqueléticos.

¿ Después de lesiones en la cabeza y la médula espinal y traumatismos de la columna vertebral con parálisis y paresia.

2. Indicaciones y contraindicaciones de uso

Contraindicaciones:

• Estado crítico del usuario.

• Parálisis .

• Sedación profunda .

• Fracturas inestables con recomendaciones ortopédicas específicas, incluidas las fracturas de columna.

• Trombosis venosa profunda no tratada .

• Inestabilidad hemodinámica .

• Se identificó una disfunción cerebral al sentarse erguido.

• Artritis severa de la columna cervical.

• Embolia pulmonar.

• Infarto de miocardio reciente en las últimas 24 horas.

• Heridas postoperatorias recientes o heridas que no cicatrizan en la zona de la espalda, la zona de la cintura pélvica y las articulaciones de la cadera.
y muslos.

• Los usuarios con trastornos mentales no deben permanecer en el dispositivo sin la supervisión de un cuidador.




3. Características generales de la silla



¡INFORMACIÓN!

Los accesorios disponibles para este producto se pueden encontrar en el sitio web akces-med.com en la sección del producto. página.

4. Tabla de tallas

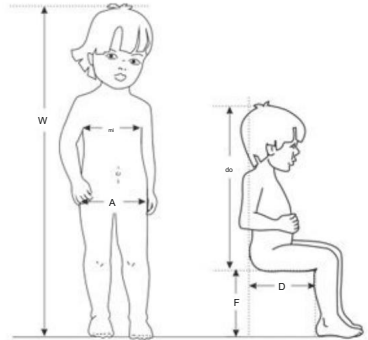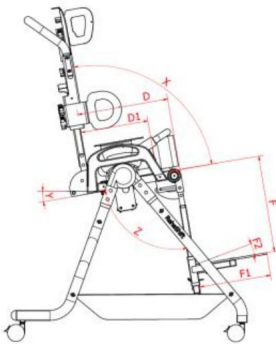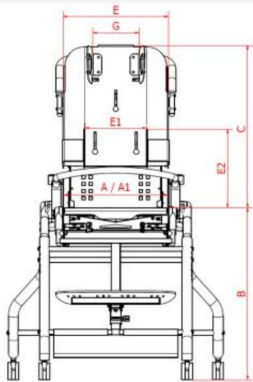

Símbolo	Medición	Unidad	Talla 1
W	altura indicativa del usuario *	[cm]	100 - 120
A	ancho del asiento (sin soportes pélvicos) ancho	[cm]	33
A1	entre soportes pélvicos altura del asiento	[cm]	17 - 28
B	altura del	[cm]	53
do	respaldo altura de	[cm]	52 - 58
C1	los soportes del pecho	[cm]	22 - 25 min oparcia wysokość 28 - 31
C2	altura de los reposabrazos	[cm]	oparcia máx. wysokość 12 - 17
D	profundidad del	[cm]	28 - 33
D1	asiento profundidad del asiento hasta el bloque de	[cm]	19 - 24
mi	abducción ancho del respaldo	[cm]	34
E1	ancho entre los soportes del pecho ancho	[cm]	16 - 22
—	entre el estabilizador de la cabeza	[cm]	12 - 20
F	longitud del reposapiés longitud	[cm]	15 - 31
F1	de la plataforma del reposapiés	[cm]	22
F2	ángulo de inclinación de la plataforma	[°]	-5 - 10
—	del reposapiés ángulo de inclinación	[°]	90 - 180
Z	del respaldo ángulo de inclinación	[°]	90 - 180
Y	del reposapiés ángulo de	[°]	10
	inclinación del asiento peso máximo del usuario	[kg]	40

Peso y dimensiones	Unidad	Talla 1
ancho	[centímetros]	70
longitud	[centímetros]	78
altura	[centímetros]	102 - 108
ancho después del	[centímetros]	70
plegado longitud después	[centímetros]	120
del plegado altura después	[centímetros]	33
del plegado peso	[kg]	16,5

Nota: El margen de tolerancia de la medición es de +/- 1 cm / 1/2 pulgada.
* Esta medida no puede ser el parámetro principal al elegir el tamaño del producto.

5. Cómo usar la silla

5.1 Despliegue del cochecito



¡UWAGA!

La base cuenta con una correa de seguridad; es necesario inspeccionar su estado y, si observa abrasiones, grietas o roturas, deje de usar el producto y póngase en contacto con el fabricante o un servicio técnico autorizado.

distribuidor al que se le compró el producto para su reemplazo.



CLIC CARACTERÍSTICO



5. Cómo usar la silla

5.1 Despliegue del cochecito



¡INFORMACIÓN!

Al armar la cesta de juguetes, presta atención a la correa de seguridad: la cesta tiene un recorte especial para que pase por el centro.



¡ATENCIÓN!

Antes de utilizar el producto, compruebe que el asiento esté correctamente montado en la estructura.

5.2 Plegado del cochecito



5. Cómo usar la silla

5.3 Respaldo ajustable

AJUSTE DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO



AJUSTE DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO



⚠ ATENCIÓN1

Al ajustar el ángulo del respaldo, asegúrese de que los pasadores de bloqueo estén bloqueados a la misma altura.

El mando para ajustar la altura del respaldo se encuentra detrás de la parte posterior del asiento.

Antes de utilizar el producto, compruebe que los elementos de ajuste estén correctamente bloqueados y apretados.

AJUSTE DE ALTURA DEL RESPALDO



5.4 Estabilizador de cabeza ajustable



¡INFORMACIÓN!

Los estabilizadores de cabeza ajustables se pueden regular en ángulo y anchura.

5. Cómo usar la silla

5.5 Soportes de pecho ajustables



5.6 Asiento ajustable



¡INFORMACIÓN!

Los mandos para ajustar la profundidad del asiento están ubicados debajo del asiento.

Tras aflojar los pomos, ajuste la profundidad del asiento a su gusto y apriete los pomos.

Al realizar el ajuste, retire el bloqueo de abducción (página 13).

5. Cómo usar la silla

5.7 Bloqueo de abducción



5.8 Soportes pélvicos ajustables

¡INFORMACIÓN!

Los mandos de ajuste están situados debajo del asiento.



5. Cómo usar la silla


5.9 Cinturón pélvico



1.



2.

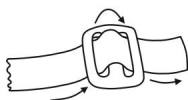

3.




4.



5. Cómo usar la silla

5.10 Reposabrazos ajustables

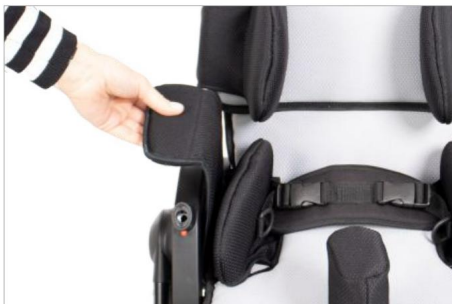

5.11 Reposapiés ajustable



¡ATENCIÓN!

Al sentar y sacar al usuario del asiento, ¡asegúrese de no pisar el reposapiés!

6. El uso de la silla



¡ATENCIÓN!

Antes de utilizar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse con el manual de usuario.

No olvide preparar tanto el producto como al usuario antes de utilizar el dispositivo.

6.1 Preparación del usuario

Antes de utilizar el producto, es fundamental asegurarse de que:

¿ La vestimenta del usuario es ligera y cómoda; se recomienda ropa deportiva. ¿ Los zapatos deben ser cómodos y, además, deben estabilizar el tobillo. ¿ Por razones de higiene y para evitar la abrasión, es recomendable que el usuario siempre use ropa al usar el dispositivo; la piel no debe estar descubierta, especialmente en lugares de contacto regular con tapicería.

Los drenajes, bolsas, catéteres, etc., si se aplican, deben estar bien sujetos para que funcionen correctamente y no causen molestias.

Durante el uso del producto, si es

z necesario que el usuario utilice algún tipo de soporte ortopédico (collarín, corsé, ortesis, calzado) si así lo recomienda el médico.



¡ATENCIÓN!

La indumentaria debe proteger la piel del usuario del contacto directo con la tapicería, así como con otras partes del equipo.

¡Solo el médico puede tomar una decisión sobre el uso de cualquier tipo de material ortopédico!

6.2 Preparación de la silla

1. Antes de usar es necesario: ¿

desplegar el dispositivo, ¿

colocar el dispositivo sobre un suelo nivelado, ¿

asegurarse de que todas las piezas estén en buen estado, correctamente montadas y estables,

¿ bloquear los frenos,

¿ ajustar el dispositivo a las medidas del usuario, ¿

desabrochar el chaleco para colocar fácilmente al usuario en el dispositivo,

¿ colocar al usuario en el dispositivo,

¿ sujetar todos los elementos que estabilizan al usuario, por ejemplo, chaleco, cinturones de tronco, cinturones estabilizadores de pies, etc., ¿ montar el equipo adicional, por ejemplo, bandeja.

2. En caso de que el usuario tenga problemas de vejiga, es necesario colocar una tela especial en el asiento. Esta tela se puede adquirir en farmacias o tiendas de artículos médicos.

6. El uso de la silla

6.2 Preparación de la silla



¡ATENCIÓN!

Antes de usar el producto, es fundamental asegurarse de que todos los cinturones y el equipo de seguridad estén correctamente abrochados y ajustados. Además, compruebe que no se suelten debido a la presión y verifique que las abrazaderas de los elementos ajustables estén bien apretadas.

El equipo funciona correctamente solo cuando se ajusta a la altura y el peso del usuario. Recuerde tener en cuenta estas medidas al comprar el producto.

El ajuste correcto es fundamental, ya que solo así el producto será seguro.

Está prohibido obligar al usuario a mantener una posición específica, ya que se sentirá incómodo y esto puede provocar una mala postura.

6.3 Posición sentada

El primer uso de la silla de posicionamiento suele tener lugar en un centro de rehabilitación, neurología, neurocirugía u ortopedia. Es fundamental ajustar correctamente cada elemento de la silla al usuario, teniendo en cuenta su condición y las contracturas y deformidades existentes. El primer uso de la silla en casa debe realizarse con la ayuda de personal cualificado (fisioterapeuta, enfermero/a o familiares debidamente preparados) tras haber leído el manual de instrucciones.



¡ATENCIÓN!

Un ajuste incorrecto de la silla puede provocar efectos secundarios como desmayos, deformidades corporales, sobrecarga articular, etc.

Si aparecen los síntomas mencionados, deje de usar la silla inmediatamente, sáquelo de ella y acuéstelo. Si los síntomas persisten, consulte a un médico de inmediato. Si los síntomas han desaparecido, informe al médico para que pueda decidir el siguiente paso en su rehabilitación.

La decisión de utilizar la silla de posicionamiento siempre debe ser tomada por el médico tratante.

El ajuste de la silla al usuario solo debe ser realizado por personas que hayan recibido la formación adecuada y hayan leído el manual de instrucciones.

6. El uso de la silla

6.4 Cómo usar los chalecos



El chaleco proporciona soporte postural a los usuarios de sillas de ruedas, así como a los usuarios sentados en sillas de posicionamiento u otros asientos de rehabilitación. Cuando se usa correctamente, el chaleco permite al usuario adoptar la posición sentada correcta durante un período de tiempo más prolongado. El diseño y la forma del chaleco permiten al usuario mover libremente sus extremidades superiores dentro de las limitaciones del usuario.

Si el chaleco no se usa correctamente, puede suponer una grave amenaza para la salud y la vida del usuario.

Posibles riesgos derivados del uso del chaleco:

- 1) Si las correas inferiores del chaleco están demasiado flojas, existe el riesgo de que el chaleco se desplace hacia arriba, hasta el cuello del usuario, dificultando la respiración. Compruebe siempre la tensión de las correas y ajústelas de manera que el borde inferior del chaleco quede cerca de la parte inferior del abdomen del usuario.
- 2) En caso de que el usuario se resbale del asiento, el borde superior del chaleco cubre el cuello del usuario y bloquea la tráquea, dificultando la respiración; por lo tanto, es necesario utilizar SIEMPRE los accesorios que estabilizan la pelvis del usuario, como un cinturón pélvico, cinturones de abducción de muslos o un bloque de abducción.
- 3) Existe el riesgo de que las correas superiores del chaleco presionen el cuello del usuario, obstruyendo la tráquea y dificultando la respiración. Esto podría ocurrir si el cuerpo del usuario no está correctamente sujeto en el asiento o la silla de paseo; en ese caso, es necesario utilizar los accesorios opcionales de estos dispositivos y estabilizar el cuerpo del usuario con los soportes laterales. Si no es posible utilizar dichos accesorios con el dispositivo y el cuerpo del usuario no puede estabilizarse correctamente, se debe sustituir el dispositivo por uno que sí los incluya.
- 4) El chaleco está demasiado ajustado al respaldo y, como consecuencia, el usuario no puede respirar con facilidad. En este caso, el chaleco debe aflojarse de manera que el cuidador pueda introducir una mano extendida entre el chaleco y el cuerpo del usuario. Sin embargo, si queremos estabilizar correctamente el cuerpo del usuario, debemos utilizar un chaleco dinámico, como el FlexPoint®, que no le cause dificultad para respirar.

Instrucciones para el uso correcto del chaleco:

- 1) Asegúrese de que el usuario esté sentado en la mejor posición posible:
 • en el medio del asiento,
 • profundamente en el asiento de tal manera que la columna lumbar del usuario descansa contra el respaldo.
- 2) Sujete la pelvis del usuario.
- 3) Asegúrese de que los soportes laterales del dispositivo, si se utilizan, estén colocados correctamente. Es obligatorio que los usuarios con poco control del tronco utilicen los soportes laterales. Estos limitan los movimientos laterales del cuerpo del usuario, lo que podría provocar que las correas del chaleco se compriman en el cuello.

6. El uso de la silla

6.4 Cómo usar los chalecos

4) Asegure el chaleco:

- ¿ abrochar y ajustar las correas inferiores del chaleco, de modo que el borde inferior del chaleco quede situado cerca la parte inferior del abdomen del usuario,
- ¿ abrochar la correa horizontal del chaleco (si la tiene),
- ¿ abrochar las correas de los hombros del chaleco,
- Compruebe que las hebillas del chaleco no se abran al presionarlas.

5) Comprobar la posición del usuario:

- Asegúrese de que el chaleco no pueda moverse por sí solo hacia el cuello del usuario.
- Asegúrese de poder introducir una mano extendida entre el chaleco y el cuerpo del usuario.

Para prevenir lesiones y minimizar los riesgos asociados al uso del chaleco, se deben seguir las siguientes normas:

- 1) La posición del chaleco DEBE comprobarse cada vez después de colocar al usuario en el asiento.
- 2) Se debe prestar especial atención a proteger al usuario de caídas hacia adelante, resbalones del asiento o elevación de la pelvis. El chaleco DEBE usarse con los accesorios que sujetan la pelvis del usuario en todo momento (por ejemplo, el cinturón pélvico, los cinturones de abducción de muslos o el bloque de abducción). El uso del chaleco no debe considerarse de forma aislada, sino como parte de un sistema general de soporte postural que incluya soportes como cinturones pélvicos, reposapiés, estabilización del torso, cinturones de abducción de muslos, posición de inclinación y respaldo reclinable.
- 3) Se debe prestar especial atención a asegurar que todo el pie del usuario tenga un apoyo estable. Si el dispositivo no está equipado con un soporte para los pies, estos deben descansar firmemente contra el suelo.
- 4) Debe recordarse que cualquier cambio en el ángulo de inclinación del respaldo, asiento o reposapiés
¡La función de inclinación en el espacio podría afectar la eficacia de los cinturones y soportes!
- 5) Se debe prestar especial atención al uso de elementos de estabilización o soportes laterales. Si el usuario tiene poco control del tronco, los soportes laterales limitarán los movimientos laterales, lo que podría provocar la compresión de las correas del chaleco sobre el cuello del usuario.
- 6) La colocación del chaleco y su ajuste al usuario solo pueden ser realizados por una persona debidamente capacitada, que esté familiarizada con las instrucciones de uso del chaleco y las normas de su uso seguro.
- 7) No realice reparaciones ni modificaciones al chaleco por su cuenta. Para reparar o reemplazar cualquier pieza del chaleco, póngase en contacto con el fabricante.
- 8) No utilice un chaleco dañado o incompleto, ya que esto supone una grave amenaza para la salud y la vida de la persona.
¡usuario!
- 9) ¡No deje al usuario sin supervisión en el dispositivo!
- 10) La correcta utilización del chaleco debe controlarse especialmente de acuerdo con las normas.
Recomendaciones en caso de niños, usuarios con problemas de memoria o enfermedades mentales.
- 11) Asegúrese de que todas las personas que atienden al usuario estén familiarizadas con las normas de uso seguro del chaleco.

6. El uso de la silla

6.4 Cómo usar los chalecos

Cómo cuidar el chaleco:

El chaleco solo funciona eficazmente si se mantiene limpio y se le da el mantenimiento adecuado según las instrucciones del fabricante. Antes de cada uso del chaleco, compruebe lo siguiente:

- 1) Las correas del chaleco no están deshilachadas ni desgastadas. Si lo están, cámbielas por unas nuevas.
- 2) Las correas del chaleco no están sujetas a las ruedas del dispositivo.
- 3) Las hebillas no están dañadas. Si lo están, cámbielas por unas nuevas.
- 4) El cierre de velcro se sujeta firmemente. Si no es así, retire la suciedad o el pelo del velcro o reemplácelo con uno nuevo.
- 5) No se han producido cambios en la altura o el peso del usuario desde el momento en que se ajustó el chaleco al usuario.
- 6) Las correas de los hombros del chaleco se ajustan de manera que no queden ni demasiado sueltas ni demasiado apretadas.
- 7) El chaleco debe limpiarse regularmente con agua tibia y jabón y secarse al aire libre.
Luz solar y otras fuentes de calor. El chaleco debe estar siempre seco antes de su uso.

Si tiene alguna duda o pregunta sobre el uso del chaleco, póngase en contacto con su médico o fisioterapeuta.

7. Normas de seguridad



La silla de posicionamiento Reha ShiftProTM debe utilizarse respetando las directrices incluidas en este manual de usuario.

No olvide preparar tanto el producto como al usuario antes de utilizar el dispositivo.

Es fundamental consultar con un médico o fisioterapeuta para elegir la silla adecuada y determinar su tamaño. Asimismo, es esencial familiarizarse con las instrucciones del manual de usuario antes de utilizar el aparato.

1) Antes de usar es necesario:

Asegúrese de que no haya daños ni fallas que puedan poner en peligro la vida del usuario.

¿ comprobar si todas las piezas funcionan y están correctamente montadas y, además, comprobar si no lo están roto,

¿ compruebe que todos los tornillos, perillas y todas las piezas pegadas, cosidas o roscadas estén apretadas,

¿ comprobar si los frenos funcionan correctamente,

¿ compruebe si las hebillas funcionan correctamente,

¿ utilice siempre cinturones de seguridad, las cintas de velcro deben superponerse un mínimo de 8 cm,

¿ ajustar el dispositivo según las medidas y necesidades del usuario, por ejemplo, el ajuste de las correas, estribo, etc.,

Asegúrese de que todas las piezas móviles y perillas de ajuste estén estables y bloqueadas.

Asegure al usuario con elementos como chaleco, cinturones estabilizadores para los pies, soportes, bloque de abducción y reposacabezas. Es fundamental asegurar al usuario para evitar caídas. Si se produce una contractura en abducción, se recomienda usar un bloque de abducción para prevenir úlceras entre las rodillas.

2. Está prohibido utilizar la silla para fines distintos a los previstos.

3. Está prohibido usar la silla si está dañada o le falta alguna pieza.

4. Está prohibido dejar al usuario sin supervisión.

5. La silla solo debe usarse cuando haya alguien capacitado y con conocimientos.

6. Está prohibido dejar la silla y al usuario en terreno inestable sin supervisión, incluso si el freno está puesto.
comprometido.

7. Está prohibido subir o bajar las escaleras; no importa si el usuario está colocado en el dispositivo o no.

8. Es importante asegurarse de que el usuario no se pare sobre el pie de página durante el acceso o la salida.
fuera de la silla.

9. Es importante accionar el freno al entrar y salir de la silla.

10. Asegúrese de que ninguna de las extremidades esté cerca de los radios u otros elementos ajustables.

11. Preste atención al acercarse a fuentes de fuego o de alta temperatura mientras utiliza el dispositivo. Además, no guarde la silla en habitaciones con alta humedad.

7. Normas de seguridad

12. Asegure la silla durante el transporte para evitar posibles daños. El fabricante no se responsabiliza de los daños que se produzcan debido a una preparación inadecuada del dispositivo durante el transporte.
13. Antes de usar la silla, retire todo el embalaje de papel y plástico. ¡El embalaje no es un juguete! Manténgalo lejos de niños y animales.

¡ATENCIÓN!

Un ajuste incorrecto del producto puede provocar efectos secundarios como desmayos, deformidades corporales, sobrecarga articular, etc. Si se presentan estos síntomas, deje de usar el producto inmediatamente, retire al usuario y acuéstelo. Si los síntomas persisten, consulte a un médico de inmediato. Si los síntomas han desaparecido, informe al médico para que pueda determinar el tratamiento a seguir.

Los incidentes graves relacionados con este dispositivo deben comunicarse tanto al fabricante como a la autoridad competente de su país.

Está prohibido colocar al paciente en el dispositivo mientras se encuentre en un automóvil, autobús o tren.

El producto contiene piezas pequeñas que los niños pueden tragar.

No utilice un producto que presente signos de daño, rotura o desgaste. Solo un producto en buen estado y un uso adecuado garantizan su correcto y seguro funcionamiento. Si el producto está dañado, deje de usarlo y póngase en contacto con el fabricante.

Bajo ninguna circunstancia una persona no cualificada debe reparar o modificar el producto ni su construcción, ya que la salud y la seguridad del usuario dependen de ello, además de que ello conllevará la pérdida de la garantía.

El peso del usuario no debe ser mayor que el peso máximo descrito en la página 8, donde encontrará información sobre este tema.

8. Condiciones de la garantía

Akces -MED Ltd. vende productos libres de defectos o fallas de fabricación.

El fabricante ofrece al comprador una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Todos los defectos que se detecten durante el período de garantía serán reparados sin cargo alguno.

Todos los defectos que aparezcan después del período de garantía solo podrán repararse si el usuario paga por ellos. Esta norma no se aplica a los productos reembolsados; el usuario puede solicitar el reembolso al Servicio Nacional de Salud.

La silla está cubierta por una garantía de 36 meses en el territorio de Canadá; los detalles de los derechos derivados de la garantía extendida se regulan en la tarjeta de garantía.

El fabricante afirma que el producto tiene una vida útil de 48 meses. Transcurrido este plazo, el usuario solo podrá utilizarlo si lo envía al fabricante para su reparación. Posteriormente, el fabricante determinará la vida útil del producto y la fecha de la próxima revisión.

² Si el producto está dañado, póngase en contacto con nuestro distribuidor o con el Departamento de Atención al Cliente de Akces-MED Ltd. (tel. +48 17 864 04 77, correo electrónico: export@akces-med.com).

9. Mantenimiento y limpieza

La silla de posicionamiento Reha Shift Pro, un dispositivo médico, debe mantenerse siempre limpia y utilizarse según las instrucciones del fabricante. Debe guardarse en un lugar limpio, seco y ventilado. El mantenimiento y la limpieza deben realizarse al menos una vez al mes. La limpieza y el mantenimiento periódicos son esenciales para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad.

Recomendaciones para la limpieza de la tapicería y otros elementos del asiento:

1. Lavar con agua tibia usando un paño suave y detergentes suaves.
2. Asegúrese de que el paño no esté demasiado mojado, ya que esto podría agrandar la mancha y dañar la tapicería o la espuma que se encuentra en su interior.
3. Recuerde eliminar el exceso de humedad de la tapicería antes de la siguiente limpieza.
4. Después de limpiar las manchas, la tapicería debe enjuagarse con agua tibia y secarse con un paño limpio.
5. No debe mojar la tapicería.
6. La tapicería no debe mojarse durante la limpieza.
7. No utilice cepillos duros para limpiar la tapicería.
8. No limpie la tapicería con productos químicos fuertes, como disolventes o cáusticos a base de cloro.
9. No limpie, reemplace ningún elemento ni realice mantenimiento a la silla durante su uso.
10. Los elementos metálicos y plásticos deben limpiarse a mano con limpiadores adecuados, después de haber leído el recomendaciones del fabricante del limpiador en cuestión.

9. Mantenimiento y limpieza

11. Es posible desinfectar los elementos metálicos, plásticos, de madera y de tapicería del producto con un desinfectante de uso común. Para desinfectar el elemento seleccionado, rocíe su superficie con un desinfectante disponible en el mercado y límpielo con un paño limpio y seco. Después de la desinfección, espere a que el elemento se seque por completo, especialmente en el caso de la tapicería. Antes de usar el desinfectante, compruebe en una zona poco visible que la superficie desinfectada no se decolore ni se dañe.



¡ATENCIÓN!

¡Recuerda que la tapicería siempre debe estar seca antes de usarla!

El fabricante de la silla, Akces-MED Ltd., no se responsabiliza de los daños causados por el uso de productos de limpieza inadecuados.

Antes de usarlo es necesario:

ruedas limpias ,

¿ compruebe que tanto la base como las ruedas estén correctamente montadas, compruebe que el freno detenga el giro de la rueda,

¿ comprobar si la construcción de la silla de ruedas está libre de roturas o cualquier tipo de deformidad,

¿ compruebe que todas las piezas móviles funcionan y que todos los tornillos, tuercas, perillas, etc., están correctamente apretados,

¿ compruebe que los cinturones, chalecos, cinturones de tronco, cinturones estabilizadores de pies, etc., no estén deshilachados; compruebe que las hebillas y abrazaderas funciona correctamente.



¡ATENCIÓN!

El fabricante solo se responsabiliza de los fallos o daños ocultos que aparezcan a pesar de que el usuario haya cumplido con las instrucciones.

En caso de cualquier daño, es fundamental ponerse en contacto con la persona que le vendió el producto.



9. Mantenimiento y limpieza

INSPECCIÓN TÉCNICA

Se deben realizar inspecciones técnicas periódicamente. Antes de cualquier mantenimiento, el producto debe limpiarse a fondo para detectar cualquier daño oculto.

Frecuencia	¿Qué se debe revisar? ¿Qué se debe hacer?		Observaciones
Antes de cada uso.	Estado general del producto.	Controlar: por cualquier daño visible, interrumpa el uso del producto y ¿ si el producto está completo, ¿ si todos los pernos, tornillos, perillas, tuercas y demás elementos de la construcción están completos y apretados.	En caso de cualquier daño o defecto, ¿ todo el producto grietas o defectos mecánicos, Póngase en contacto con su proveedor/distribuidor o con el fabricante.
	Ruedas y frenos	Controlar: montadas y si contacte con su proveedor/distribuidor o el no están dañados, ¿ si el freno está bloqueando la rueda giratoria, Si las ruedas no están sucias. Si es necesario, limpie las ruedas.	En caso de cualquier daño o defecto, suspenda el uso del producto y ¿ si las ruedas están correctamente fabricante.
	Fijación de los elementos de construcción.	Compruebe todos los mecanismos del producto y, en caso de daños o defectos, sus partes móviles. Compruebe en particular: correctamente montado (si se pone en contacto con su proveedor/distribuidor o el correspondiente), ¿ si las ruedas están correctamente montadas (si corresponde), ¿ si los elementos que aseguran al usuario están correctamente montados y funcionan bien (si corresponde), ¿ si todas las piezas móviles están completas, funcionan correctamente, no se atascan, ¿ si los mecanismos de ajuste de los siguientes elementos funcionan correctamente (si corresponde): reposacabezas, respaldo, asiento, bloque de abducción, reposabrazos, reposapiés.	suspenda el uso del producto y ¿ si el asiento está proveedor/distribuidor o el correspondiente), Fabricante.
Una vez por semana.	Elementos de tapicería.	Controlar: daño, rasgaduras, roturas, costuras sueltas o deformaciones en la tapicería, deje de usar el producto y póngase en contacto con su proveedor/distribuidor o los elementos Fabricante. ¿ si las correas estabilizadoras, los chalecos o los cinturones de seguridad no están deshilachados ni retorcidos y si las hebillas funcionan correctamente, ¿ si las correas estabilizadoras, los chalecos o los cinturones de seguridad funcionan correctamente y no se sueltan bajo presión o al tirar de ellos.	En caso de cualquier daño o defecto, si hay algún daño, rasgaduras, roturas, costuras sueltas o deformaciones en la tapicería, deje de usar el producto y póngase en contacto con su proveedor/distribuidor o los elementos Fabricante.
	Limpieza del producto.	Si la estructura y la tapicería se ensucian (polvo, barro, etc.) durante el uso diario, límpielas con un paño húmedo sin detergentes. Elimine la suciedad (por ejemplo, pelo, restos de comida, etc.) de las partes móviles del producto.	
		antes de usar el producto, compruebe si la tapicería está seca.	

70

9. Mantenimiento y limpieza

INSPECCIÓN TÉCNICA

Se deben realizar inspecciones técnicas periódicamente. Antes de cualquier mantenimiento, el producto debe limpiarse a fondo para detectar cualquier daño oculto.

Frecuencia	¿Qué se debe revisar? ¿Qué se debe hacer?		Observaciones
Una vez al mes.	Ejes de rueda, conectores rápidos (si corresponde).	Controlar: Si las ruedas giran y no están flojas. Para el mantenimiento de las ruedas, aplique una pequeña cantidad de lubricante conservante entre el eje y el cubo de la rueda. Comprueba si puedes quitar y colocar las ruedas fácilmente.	Limpia las ruedas cuando estén sucias. En caso de daños o defectos, deje de usar el producto y póngase en contacto con su proveedor/distribuidor o con el fabricante.
	Conectores para la construcción de productos (soldadura, roscado, soldadura blanda).	Controlar: ¿ el estado del marco del producto en los lugares de unión (soldaduras, roscas, soldadura blanda).	En caso de daños o defectos, deje de usar el producto y póngase en contacto con su proveedor/distribuidor o con el fabricante.
	Neumáticos/cámaras de aire (si corresponde).	Controlar: ¿ estado de desgaste de los neumáticos. Compruebe si hay daños visibles. Compruebe la presión de los neumáticos (si corresponde).	Si la presión de los neumáticos es demasiado baja, inflelos al nivel correcto. En caso de daños o defectos, deje de usar el producto y póngase en contacto con su proveedor/distribuidor o con el fabricante.
Una vez cada 6 meses.	Piezas móviles de construcción.	Controlar: Si las partes móviles de la estructura no han sufrido daños, manténgalas utilizando un agente de limpieza adecuado.	En caso de daños o defectos, deje de usar el producto y póngase en contacto con su proveedor/distribuidor o con el fabricante.
	Etiquetado del producto	Comprobación: ¿ si las marcas y etiquetas son legibles.	En caso de daños o defectos, deje de usar el producto y póngase en contacto con su proveedor/distribuidor o con el fabricante.
Después de la vida tiempo de la acabados del producto.	Verificación detallada del producto.	Compruebe el producto	El fabricante especifica la vida útil del producto, la cual se indica en el manual de usuario. Transcurrido dicho plazo, el usuario solo podrá utilizar el producto si lo envía previamente al fabricante para su revisión. Posteriormente, el fabricante redefinirá la vida útil del producto y la fecha de la próxima revisión.

10. Etiquetado



Declaración de que el producto cumple con los requisitos esenciales



Número de catálogo



Número de serie



Lea las instrucciones del manual antes de usarlo.



¡Debes tomar precauciones especiales!



Fabricante



Fecha de producción



El producto no contiene látex.



Conservar en un lugar seco.



Prohibición de uso sin cinturones de seguridad abrochados.



Proteger de la luz solar



limitación de temperatura de almacenamiento



Almacenamiento de humedad relativa



Secar en posición vertical



No clorar



No planchar



No lavar en seco



No usa blanqueador



¡Café lleno! ¡Contenido delicado!



Está prohibido subir o bajar las escaleras. No importa si el usuario está dentro del dispositivo o no.



Prohibición de dejar al usuario sin supervisión durante el uso del producto.



Debes leer la información adicional.



Debes pulsar el botón que se muestra en la foto.



Necesitas utilizar las herramientas indicadas en la descripción del montaje.



Dispositivo médico MD

Datos de muestra [;date

CÓDIGO QR
DESPUÉS DEL ESCANEÓ,
TE DIRIGE A
EL SITIO WEB DEL PRODUCTO

FABRICANTE
DIRECCIÓN
CARGA MÁXIMA PERMITIDA
SOBRE EL PRODUCTO

NÚMERO DE SERIE
EN FORMATO DE CÓDIGO DE BARRAS

AKCESMED
www.akces-med.com

REHA SHIFT PRO 1
FOTELIK REHABILITACYJNY

REHA SHIFT PRO 1
POSITIONING CHAIR

MAX LOAD:40 kg

11.2023 MD

AKCES-MED Sp. z o.o.
Jasionka 65061
35-002 JASIONKA
POLAND

1416361539151

CÓDIGO DE BARRAS

ETIQUETADO
BUSCAR

FECHA DE PRODUCCIÓN

REHSTPRO 007/P/1/BB

NÚMERO DE SERIE

FABRICANTE



Akces-MED Sp. z oo

Jasionka 955 B

36-002 Jasionka tel.

+48 17 864 04 77

correo electrónico: [export@akces-](mailto:export@akces-med.com)

med.com BDO: 000031619

Distribuidor autorizado