


Soporte dinámico para el brazo

ART NOS.: AS201L, AS201R, AS202L, AS202R, AS200L, AS200R

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

Estas instrucciones proporcionan información importante para el uso y mantenimiento seguros de los soportes de brazo Bodypoint®. Dar estas instrucciones al usuario o a su cuidador.

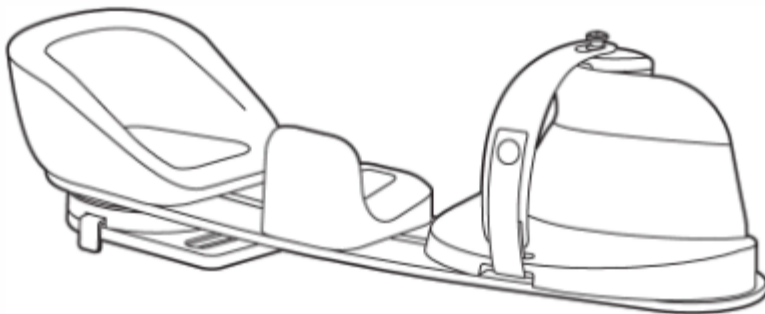

USO PREVISTO:

El soporte dinámico para brazos es un soporte dinámico y móvil para el codo, el antebrazo y la mano que se acopla a una silla de ruedas manual o eléctrica. Proporciona soporte para las extremidades superiores, rango dinámico funcional de movimiento en el hombro y un soporte de mano innovador y flexible que promueve la función de la mano y ayuda a minimizar el tono de los flexores y las contracturas.

Este producto incluye componentes modulares que se pueden ajustar para un ajuste ortopédico personalizado. Un mecanismo pivotante permite a los usuarios ejercitar el hombro en un rango de movimiento funcional y dinámico. El soporte flexible para la mano ayuda a colocar la muñeca, la mano y los dedos en una alineación neutra y minimiza el tono flexor y las contracturas.

Este producto está diseñado para montarse en una variedad de modelos de sillas de ruedas con reposabrazos ajustables en altura y se puede quitar fácilmente para transferencias utilizando la función de liberación rápida. Para garantizar el mejor resultado clínico, los usuarios deben consultar con un profesional sanitario cualificado antes de utilizar el producto.

&¡ADVERTENCIA! Este producto debe ser instalado y ajustado por un técnico de rehabilitación calificado. Este producto solo debe usarse para colocar los brazos de una persona en una silla de ruedas. El mal uso de este producto es no autorizado e inseguro.

El brazo mosto ser colocado correctamente en el soporte del brazo. Un soporte para el brazo mal ajustado podría permitir que el brazo del usuario se deslice y disloque el hombro o empeore el tono flexor de la mano. Haga que su terapeuta o técnico demuestre su ajuste y uso adecuados. Si las habilidades físicas o cognitivas del usuario le impiden operar este producto de manera segura, un cuidador debe estar siempre presente durante su uso. Asegúrese de que todos los cuidadores sepan cómo operar correctamente el producto. Este producto puede cambiar la forma en que una persona se sienta. Continúe practicando actividades regulares de alivio de presión y controles de integridad de la piel. Si se produce un aumento del enrojecimiento o la irritación de la piel, suspenda su uso y consulte a su profesional de la salud calificado.



&¡ADVERTENCIA! Supervise siempre al usuario cuando la placa de pivote esté desbloqueada para girar. La placa de pivote siempre debe estar bloqueada al conducir la silla de ruedas o transportarla en un vehículo para evitar daños o lesiones que puedan resultar de golpear puertas u otros obstáculos cerca del costado de la silla. Al montar, compruebe que el soporte del brazo esté bien bloqueado en el Placa adaptadora de liberación de quick. El instalador debería escuchar un sonido audible de "clic". Si ocurre un incidente grave relacionado con el uso de este producto, debe informarse al fabricante (Bodypoint, Inc.) y a la autoridad competente local. Es más seguro transferirse de su silla de ruedas a un asiento de vehículo instalado por el fabricante, y usar el sistema de sujeción de ocupante probado contra choques del vehículo. No utilizar el equipo adecuado para la sujeción en un vehículo puede provocar lesiones graves o la muerte.

CONTROLES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD Y RENDIMIENTO:

Para garantizar la seguridad del usuario, este producto debe revisarse periódicamente para verificar su funcionamiento y signos de desgaste. Si el producto no funciona correctamente o si se encuentra un desgaste significativo en las piezas, deje de usarlo y comuníquese con su proveedor para obtener una reparación o reemplazo calificado por parte de Bodypoint®. Bajo ninguna circunstancia este producto debe ser alterado o reparado por personas no calificadas. **LIMPIEZA:** Este producto se puede limpiar limpiando con desinfectante o un paño empapado en agua tibia y jabón. Secar con una toalla o secar al aire. Se puede aplicar un desinfectante suave a la superficie. Para limpiar la correa de mano, lavar a máquina, caliente, 60°C (140°F). No usar lejía. Secar en secadora, a baja temperatura o secar por goteo. No planchar. **CHATARRA/ELIMINACIÓN:** Este producto está hecho de materiales que se pueden eliminar de forma segura sin precauciones especiales al final de su vida útil. **GARANTÍA:** Este producto tiene una garantía limitada de por vida contra defectos de mano de obra y materiales que surjan bajo el uso normal por parte del consumidor original. Póngase en contacto con su proveedor o Bodypoint® para


reclamaciones de garantía.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

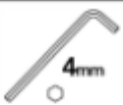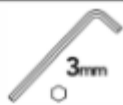Llave hexagonal de 4 mm	Llave hexagonal de 3 mmPara un ajuste fino opcional del pestillo de liberación rápida
	

CONTENIDO DEL PAQUETE


Un	B	y	D	Y	F
Coder a	Antebraz Alm	Bloqueo de y Corre	Base Tabla	Rápido Lanzami Placa adaptado	Placa pivotante

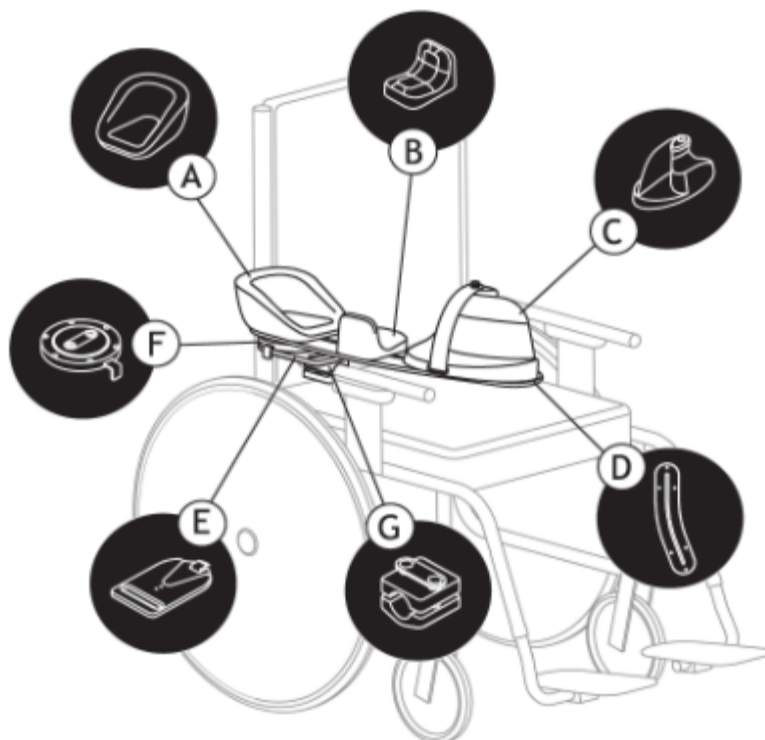

HARDWARE DE MONTAJEABRAZADERA OPCIONAL O PLACA SOLO POR SEPARADOABRAZADERA DE MONTAJE DEL REPOSABRAZOS QUE SE MUESTRA ARRIBA

G	H
ReposabrazosAbrazaderas de montaje Compatible con tubos de reposabrazos redondos de 019 mm (3/4") o 022125 mm [7/8"/1"]	ReposabrazosPlaca de montaje Compatible conReposabrazos planos

COLOCACIÓN DEL SOPORTE DEL BRAZO PARA EL USUARIO

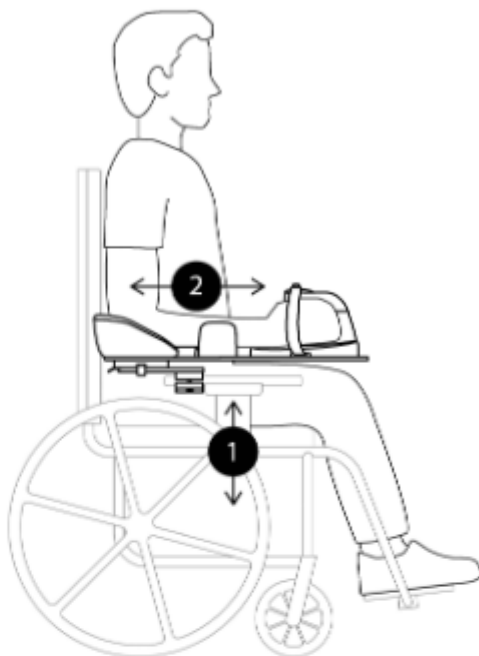

1. Altura

Se recomienda el uso de un reposabrazos ajustable en altura para un posicionamiento óptimo.

Ajuste la altura del reposabrazos para apoyar el codo para una

Distribución de la presión del brazosin levantar el hombro.

2. Profundidad

Para Ajuste el Brazo Apoyo hacia adelante o hacia atrás, afloje los tornillos ubicados en el reposabrazos hardware de montaje.

Deslice el reposabrazos hacia adelante o hacia atrás en el reposabrazos hasta la posición correcta.

Para obtener más información, consulte: "AJUSTE FINO ADICIONAL DE LA PLACA PIVOTANTE: AJUSTES DE PROFUNDIDAD ADICIONALES".

3. Lateral

Para ajustar el soporte del brazo más cerca o más lejos del usuario, afloje los tornillos que sujetan la placa adaptadora de liberación rápida al soporte del reposabrazos hardware.


Deslice el soporte del brazo hacia adentro o hacia afuera y vuelva a apretar firmemente ambos tornillos.

4. Ángulo

La placa pivotante permite un rango de 60° de rotación interna a externa. Para elegir el ángulo del soporte del brazo, extraiga la lengüeta de la placa de pivote y coloque el soporte del brazo.

Empuje la lengüeta de la placa de pivote hacia adentro para bloquear en el ángulo deseado en incrementos de 5°.

Para obtener más información, consulte: "AJUSTE FINO ADICIONAL DE LA PLACA PIVOTANTE: LÍMITES ADICIONALES DE ROTACIÓN INTERNA Y EXTERNA".

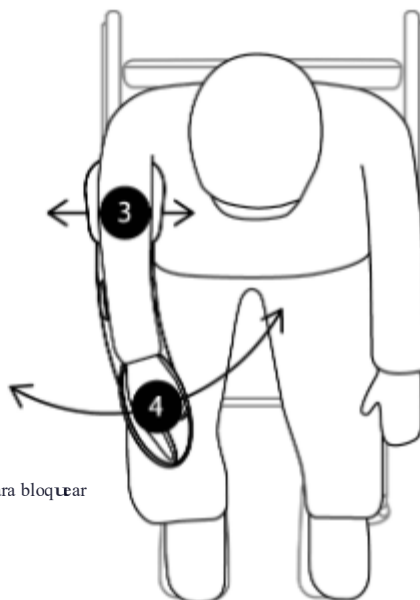


INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL BRAZO

Antes de la instalación, retire el receptor de liberación rápida del soporte del brazo. Para más información consulte: "USO DE LA PLACA ADAPTADORA DE LIBERACIÓN RÁPIDA".

Para más información

1. Monte el receptor de liberación rápida en el reposabrazos de la silla de ruedas utilizando el hardware de montaje del reposabrazos opcional. Apriete parcialmente los tornillos de montaje para permitir el ajuste. Consulte las instrucciones incluidas con el hardware de montaje opcional para obtener más detalles.

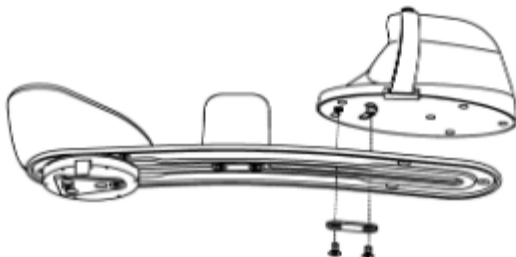


2. Monte el bloque de mano en la placa base utilizando la placa de arandela y los tornillos M6 incluidos (2).

Nota: No apriete completamente los tornillos hasta que se hayan realizado los ajustes finales.

hecho Para cabe el usuario.
r

3. Deslice el soporte del brazo en la placa adaptadora de liberación rápida: el pestillo de liberación rápida debe bloquearse con un "clic" audible.

Nota: El pestillo de liberación rápida se puede ajustar para eliminar cualquier juego aflojando los tornillos MS (2) en la parte inferior con una llave hexagonal de 3 mm. Empuje el pestillo de liberación rápida con fuerza contra el borde posterior de la cuña de liberación rápida mientras vuelve a apretar los tornillos para asegurarlo en su lugar.

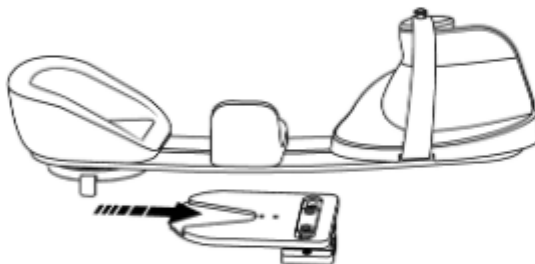


AJUSTE DE LA ALMOHADILLA DEL ANTEBRAZO Y EL BLOQUEO DE LA MANO

Comience colocando el codo del usuario en la codera.

Para ajustar el Hand Block, afloje los tornillos M6 (2) y deslice el HandBlock a lo largo de la placa base para evitar que el antebrazo del usuario se mueva. Apriete el tornillo trasero hasta que quede ajustado, luego ajuste el ángulo del bloque de mano 0-30 ° para colocar correctamente la mano y la muñeca.


Apriete completamente ambos tornillos para asegurar el bloque de mano en su lugar.

Para ajustar la almohadilla del antebrazo, afloje los tornillos M6 (2) y deslice la almohadilla del antebrazo a lo largo de la placa base para acunar el brazo del usuario detrás de la muñeca. Se puede ajustar hacia adentro o hacia afuera, rotar o reinstalar en la dirección opuesta para soportar o limitar el movimiento del brazo. Vuelva a apretar los tornillos.

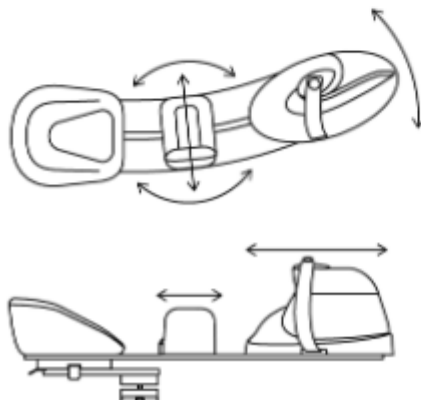


USO DE LA PLACA ADAPTADORA DE LIBERACIÓN QUICK

Presione hacia abajo el pestillo de liberación rápida para desbloquearlo y retirarlo. Para volver a instalar, deslice el soporte del brazo en el receptor de liberación rápida hasta que encaje con un "¡clic!" audible.

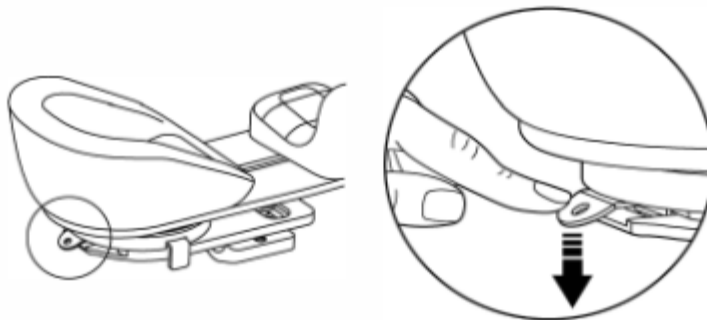

BLOQUEO/DESBLOQUEO DE LA PLACA DE PIVOTE

El soporte del brazo se puede desbloquear para permitir un movimiento dinámico o bloquear para mantener una posición fija del brazo. Para desbloquear, extraiga la lengüeta de la placa de pivote. El soporte del brazo ahora puede girar libremente a través de un rango de 60° de interno a externo. Para bloquear, presione la pestaña de la placa de pivote. El soporte del brazo se puede bloquear en incrementos de 5°.

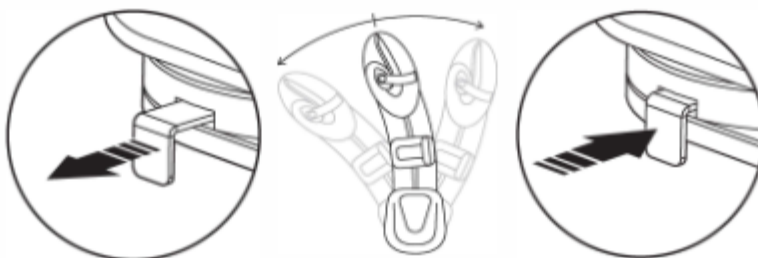

ABRIR


PIVOTE

CERRADURA

& ¡ADVERTENCIA! Supervise siempre al usuario cuando la placa de pivote esté desbloqueada para girar. La placa pivotante siempre debe estar bloqueada al conducir la silla de ruedas o transportarla en un vehículo para evitar daños o lesiones que podrían resultar de golpear puertas u otros obstáculos cerca del costado de la silla.

AJUSTE FINO ADICIONAL DE LA PLACA PIVOTANTE

AJUSTES DE PROFUNDIDAD ADICIONALES

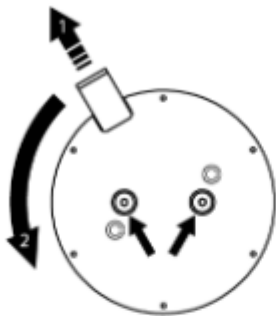


Se pueden realizar ajustes adicionales reposicionando la placa pivotante hasta 20 mm hacia adelante en la placa base.

Para acceder a los tornillos de montaje, retire la cuña de liberación rápida y extraiga la lengüeta de la placa de pivote para desbloquear y gírelo hasta que los tornillos de montaje M6 sean visibles a través de los dos orificios de acceso.


Afloje ambos tornillos para deslizar la placa de pivote hacia adelante, luego vuelva a apretar completamente ambos tornillos y vuelva a colocar el Quick-Cuña de liberación.

LÍMITES DE ROTACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS ADICIONALES

La configuración estándar de la placa pivotante permite una rotación interna de 30° / externa de 30° desde la posición neutral (alineada con el reposabrazos de la silla). Esto proporciona la misma función ya sea que se instale en el lado derecho o izquierdo. Algunos usuarios son capaces de un mayor rango de rotación interna del brazo, que se puede acomodar reposicionando la cuña de liberación rápida en la parte inferior de la placa de pivote para permitir una rotación interna de 45° / 15° externa.

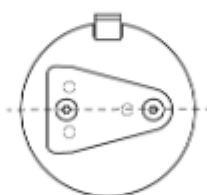

30°/30°

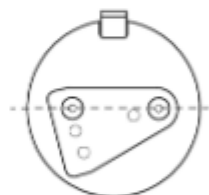

15°/45°

CONTROLES DE SEGURIDAD Y RENDIMIENTO

El usuario debe estar sentado en silla de ruedas antes de realizar el control de seguridad.

1. FUNCIONAMIENTO NORMAL

Compruebe si hay puntos de pelliczo o piezas sueltas.

2. COMODIDAD La zona de irritación.

3. POSICIÓN Con posición firme y correcta de la parte superior del cuerpo y los hombros del usuario.

4. ADICIONAL Construya la silla a través de un rango completo de movimiento, incluida la inclinación, el plegado y el balanceo, y verifique cualquier interferencia y ajuste el soporte para el brazo si es necesario.

