


Talk Pad

Tu guía

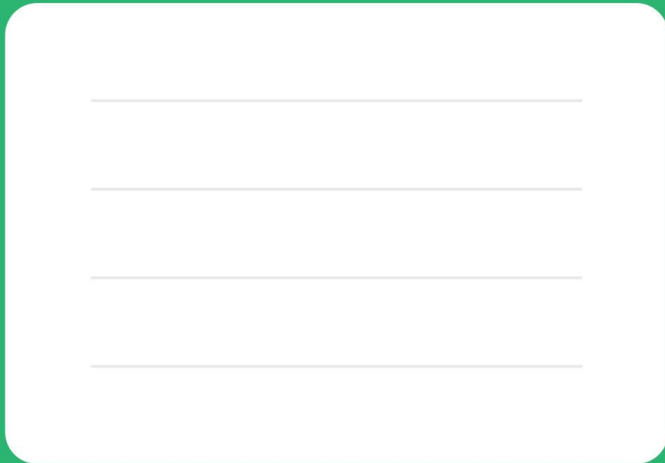

Creado por

Smartbox
1

Cómo usar su Talk Pad de forma segura

Uso de Talk Pad en un entorno médico

No se debe confiar en que su Talk Pad sea la
única forma que tiene el usuario de hacer una
llamada de emergencia o dar una alarma.

Grid para iPad no está diseñado para realizar una
evaluación médica de un usuario.

thinksmartbox.com/seguridad

Grid para iPad y tus

datos

Grid para iPad no almacena
ningún dato de usuario en línea sin
su permiso.

Todos los datos relativos a sus
cuentas sociales y de correo
electrónico se almacenan localmente y
nunca se comparten.

Al crear una cuenta en Grid para iPad,
se le mostrarán varias opciones de
privacidad. Con su permiso, Grid para iPad
puede registrar el historial de chat y usar
datos de ubicación para mejorar la
predicción a lo largo del tiempo. Estos
datos siempre se almacenan
localmente y no se envían a
Smartbox.

¿Para quién está destinado Talk Pad?

Un usuario de CAA



- Comunicación
- Aplicaciones accesibles
- Acceso alternativo a otro software

Apoyando a un usuario de CAA



- Cambiar la configuración
- Creación de perfiles de usuario de Grid
- Agregar conjuntos de cuadrículas
- Edición o creación de conjuntos de cuadrículas

Talk Pad está integrado en el iPad de Apple

Asegúrese de haber leído el manual y estar familiarizado con el uso de su dispositivo y el sistema operativo iPad OS.

Su Talk Pad detalles

Este Talk Pad es un...



Talk Pad 8



Talk Pad 10



Talk Pad 13

El número de modelo de este Talk Pad es...

El número de serie de este Talk Pad es...

¿Quién es responsable de su Talk Pad?



Este Talk Pad está listo para usar

Este Talk Pad está listo para autoconfigurarse



Sabemos que cuidar un dispositivo a veces puede ser confuso, con tantas cuentas y contraseñas diferentes. Usa estas páginas para registrar detalles y recordatorios importantes.

Tu ID de Apple es...

Un recordatorio de tu contraseña de Apple ID ...

Su cuenta Smartbox es...

Un recordatorio de la contraseña de su cuenta Smartbox ...

Tu contraseña

Código de acceso guiado

¿A quién llamar para pedir ayuda y apoyo?

Soporte de Smartbox

Reino Unido: 01684 578868

EE. UU.: (878) 302-3674


thinksmartbox.com/soporte-inteligente




¿Qué es Talk Pad?

Su Talk Pad es un dispositivo de pantalla táctil.

¡Interactúa con la pantalla tocándola con tus dedos!

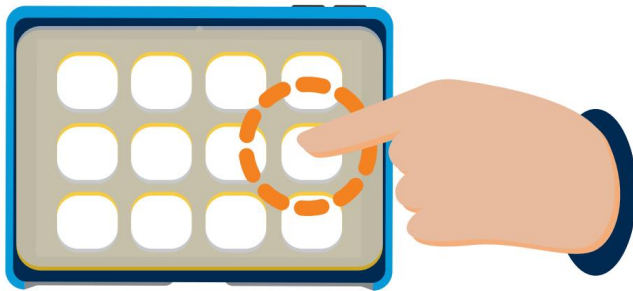

Puede comunicarse mediante la pantalla táctil o configurando otros métodos de acceso, como interruptores o dispositivos señaladores.

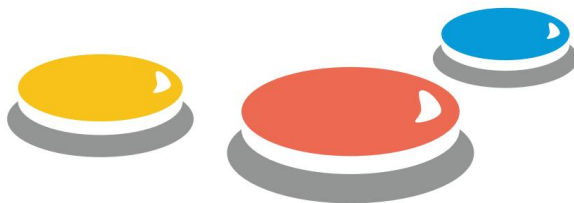

Hay algunas funciones y configuraciones más avanzadas a las que puedes acceder presionando botones y usando más de un dedo.




Su Talk Pad funciona con Grid para iPad, una aplicación AAC completa que incluye acceso instantáneo a una enorme biblioteca de conjuntos de cuadrículas.

Hay contenido para todos: desde potentes herramientas de comunicación para usuarios de texto hasta conjuntos de cuadrículas para comunicarse con símbolos y desarrollar la alfabetización.

Todo en Grid está diseñado para facilitar la construcción de oraciones, el aprendizaje del idioma y el habla.

Configuración de su dispositivo

Paso 1

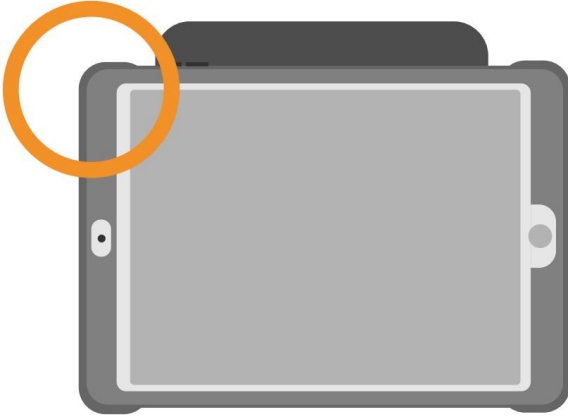

Encienda su Talk Pad con el botón de encendido ubicado en el lado izquierdo del dispositivo.

Paso 2




Encienda el altavoz con el botón de la parte superior.

Paso 3

Talk Pad se puede proporcionar listo para usar o para configuración automática.

Se proporciona una breve guía para ayudarle con su configuración.

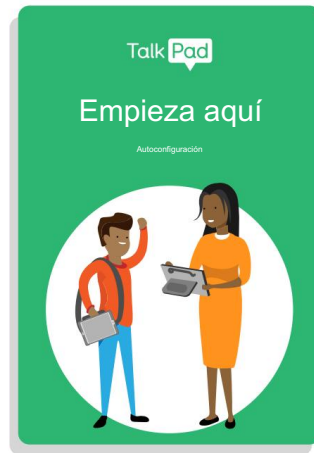

Recuerde tomar nota de los datos de su cuenta.
Hay espacio para que puedas hacer esto al principio
de esta guía.

Contenido

Su dispositivo Talk Pad	12
TalkPad 8	14
1 TalkPad 10	16
2 Talk Pad 13	18
3 Cómo encender su Talk Pad	20
4 5 Cómo apagar el Talk Pad	21
6 Cómo cargar su Talk Pad	22
7 El altavoz Bluetooth 8	24
Colocación del Talk Pad 9	26
Usando el soporte	28
10 Colocación de la correa para el hombro	30
11 El kit de montaje	31
12 Conexión de auriculares	32
13 Uso de un protector de teclado	33

Introducción al sistema operativo iPad	34
14 Uso de la pantalla táctil	36
15 La pantalla de inicio de su Talk Pad	38
16 Apertura y cierre de aplicaciones	40
17 Configuraciones	42
18 Cuenta y seguridad	43
19 Bloqueo del Talk Pad	44
20 Configuraciones de accesibilidad	45
21 Acceso guiado	46
22 La App Store	47

Introducción a Grid para iPad 48

23 Conociendo Grid	50
24 Su cuenta y perfil de Smartbox	52
Explorador de cuadrícula 25	53
26 opciones del Explorador de cuadrícula	54
27 conjuntos de cuadrícula	56
28 El menú de configuración de la cuadrícula	58
29 Modo de edición	60
30 Cómo ocultar la cuadrícula del menú del iPad	62

Cuidado de su Talk Pad 64

31 Actualización de Grid para iPad	66
32 Actualización del sistema operativo del iPad	68
33 Cómo hacer una copia de seguridad de sus conjuntos de cuadrícula con Dropbox	69
34 Cómo hacer una copia de seguridad de su usuario de Grid	70
35 Soporte	72
36 Cómo encontrar su modelo y número de serie	73
37 Quitar el iPad	74
38 Inserción del iPad	75
39 Avisos de seguridad	76

Su dispositivo Talk Pad


Esta sección cubre todo lo que necesita saber sobre el hardware Talk Pad.

Utilice esto para familiarizarse con los puertos y botones de su Talk Pad, así como con otras características del dispositivo, como el altavoz, los anillos de la correa y el soporte.

	TalkPad 8	14
1	TalkPad 10	16
2	Talk Pad 13	18
3	Cómo encender su Talk Pad	20
4 5	Cómo apagar el Talk Pad	21
6	Cómo cargar su Talk Pad	22
7	El altavoz Bluetooth 8	24
	Colocación del Talk Pad 9	26
	Usando el soporte	28
10	Colocación de la correa para el hombro	30
11	El kit de montaje	31
12	Conexión de auriculares	32


1 Talk Pad 8

- iPad mini en funda resistente
- Correa
- Cable de carga para iPad
- Cable de carga para altavoz
- Protector de pantalla
- Bolsa de transporte
- Cuadrícula para iPad

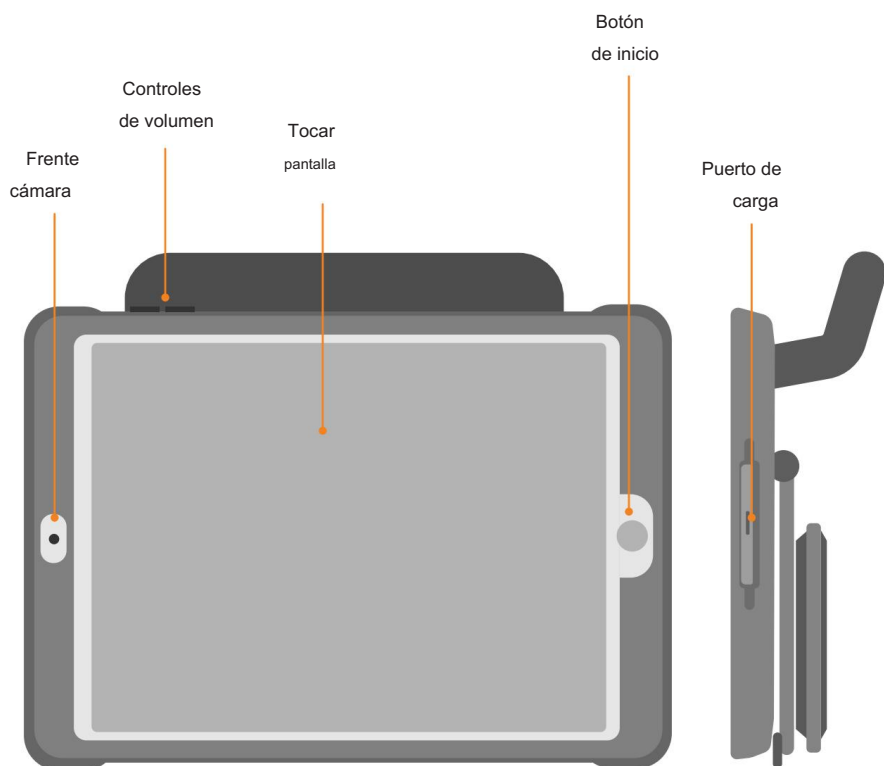


El Talk Pad 8 tiene una pantalla pequeña de 8 pulgadas y es lo suficientemente liviano para transportarlo fácilmente mediante su asa o la correa de hombro incluida.

La funda resistente y el protector de pantalla mantienen el iPad seguro en su interior, mientras que el altavoz Bluetooth está siempre conectado, lo que garantiza que puedas ser escuchado en cualquier situación.

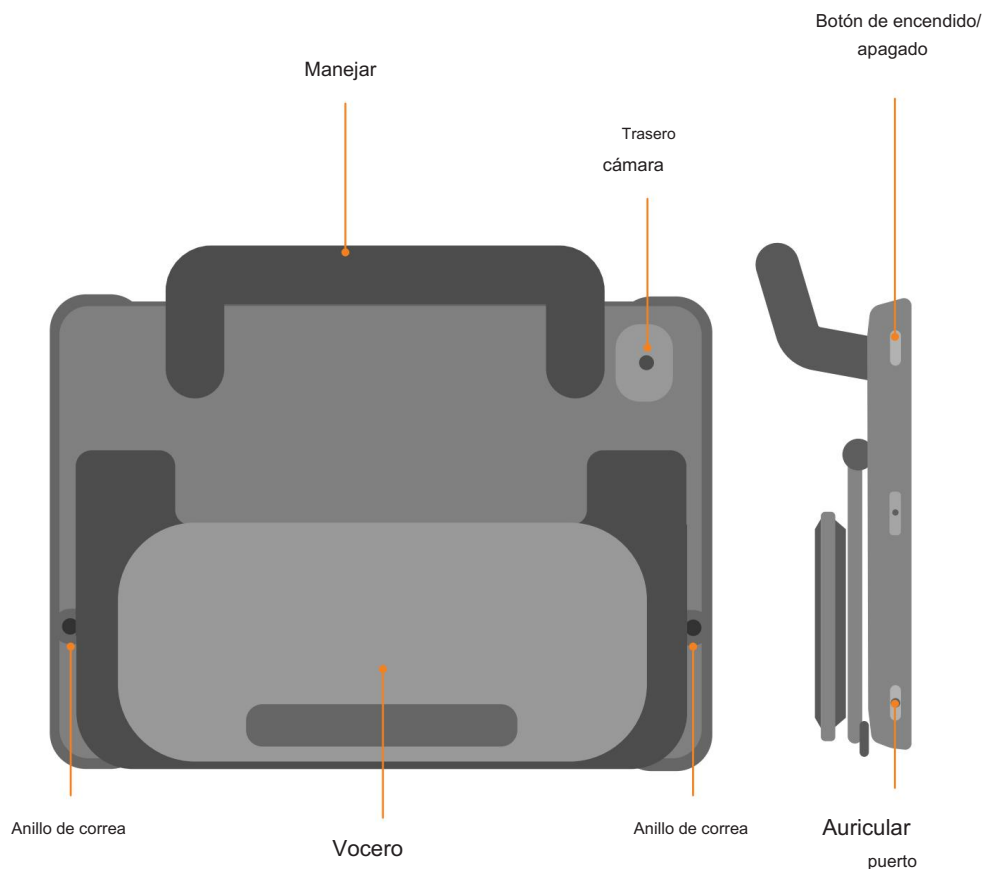

2 Talk Pad 10


- iPad en funda resistente
- Correa
- Cable de carga para iPad
- Cable de carga para altavoz
- Protector de pantalla
- Bolsa de transporte
- Cuadrícula para iPad

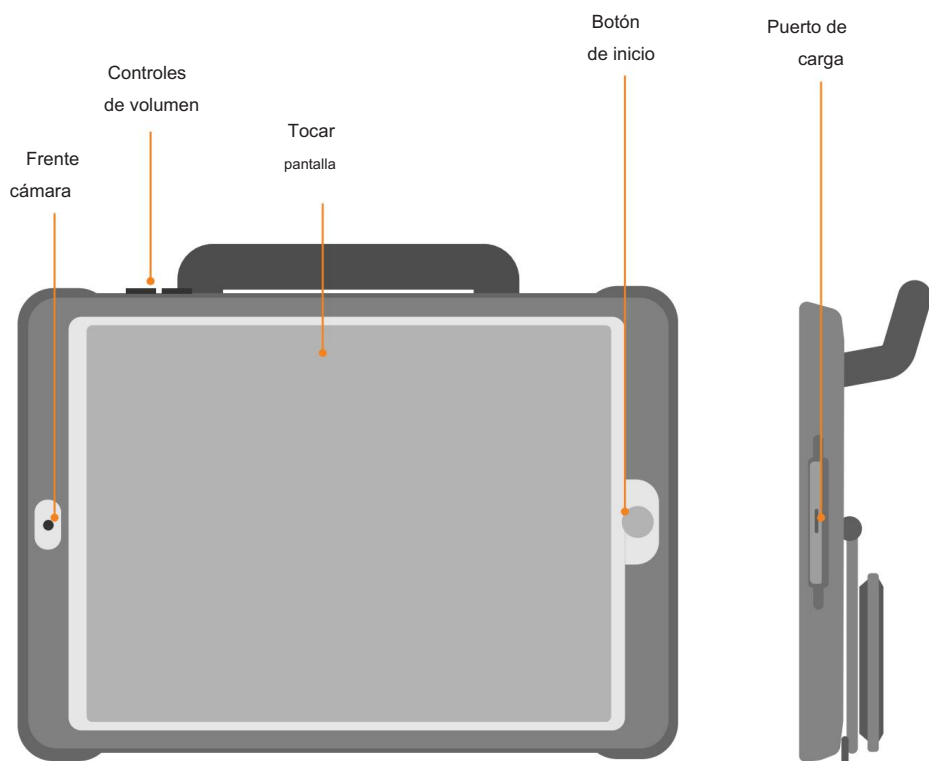

El Talk Pad 10 tiene una pantalla de 10 pulgadas y es lo suficientemente liviano para transportarlo fácilmente mediante su asa o la correa de hombro incluida.


La funda resistente y el protector de pantalla mantienen el iPad seguro en su interior, mientras que el altavoz Bluetooth siempre está conectado.

Los puntos de conexión de la placa de montaje significan que puede montar el dispositivo en una silla de ruedas o un soporte.

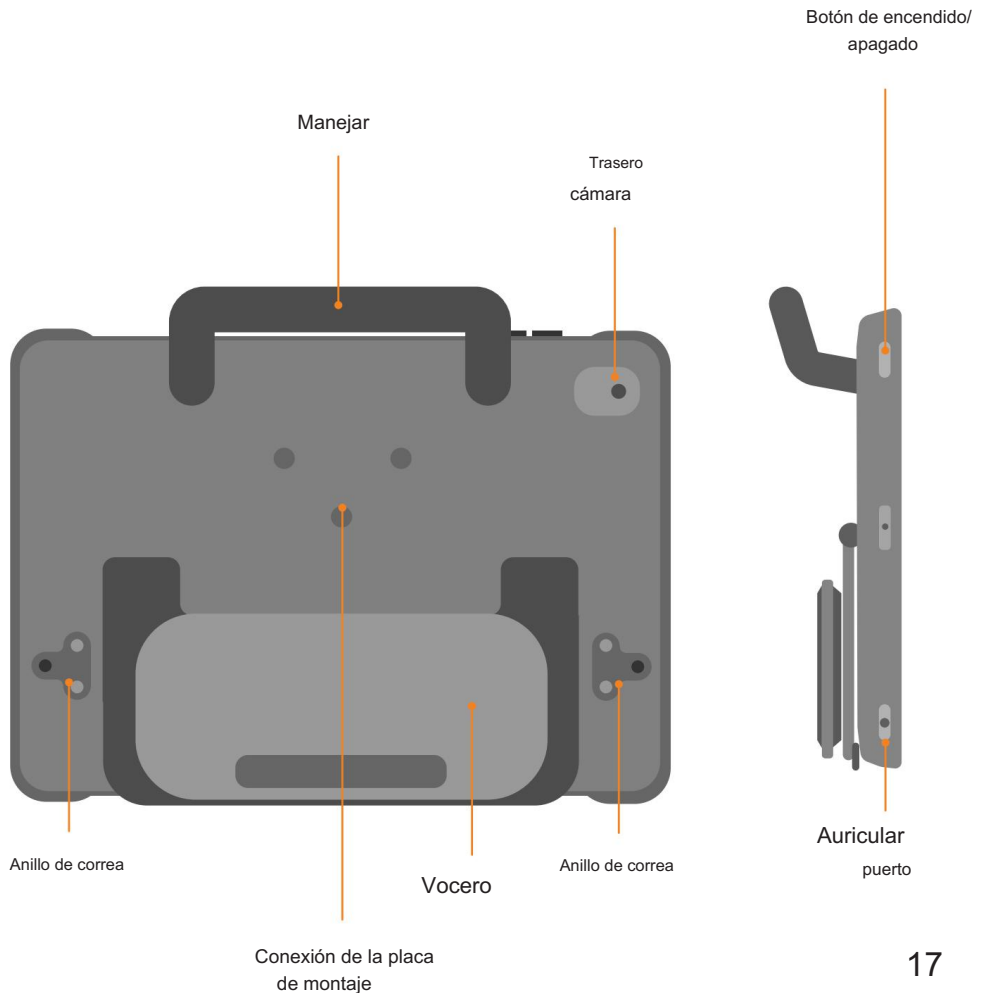

3 Talk Pad 13


- iPad Pro en funda resistente
- Correa
- Cable de carga para iPad
- Cable de carga para altavoz
- Protector de pantalla
- Bolsa de transporte
- Cuadrícula para iPad

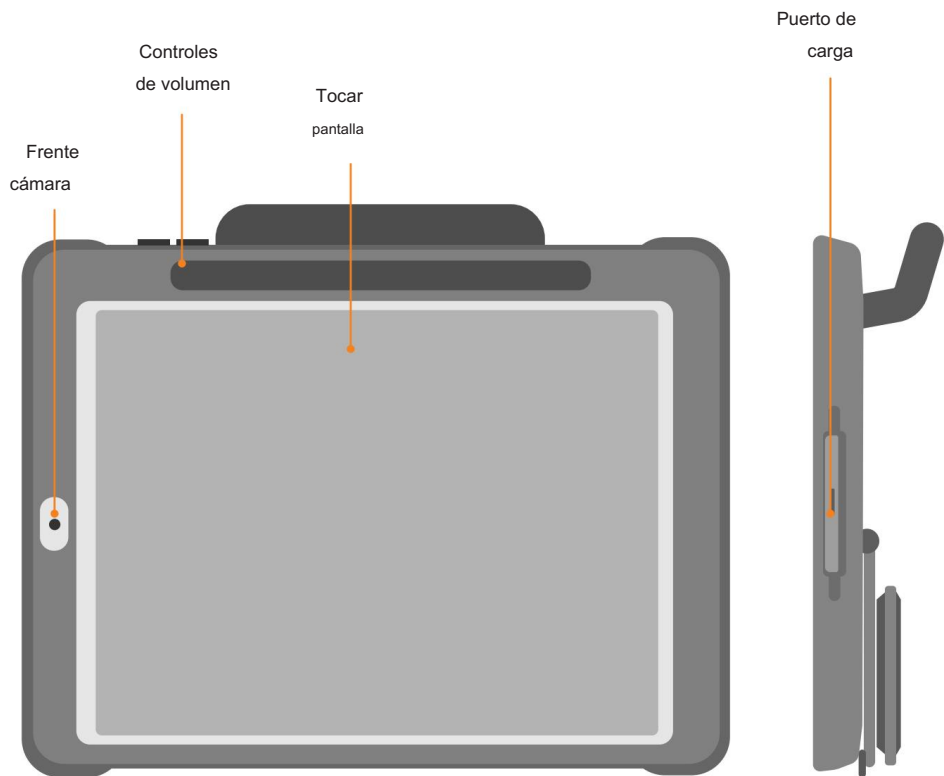

El Talk Pad 13 tiene una pantalla de 13 pulgadas y se puede transportar fácilmente con su asa o la correa para el hombro incluida. Su gran pantalla y su potente procesador lo hacen rápido y con gran capacidad de respuesta.

La funda resistente y el protector de pantalla mantienen el iPad seguro en su interior, mientras que el altavoz Bluetooth siempre está conectado.


Los puntos de conexión de la placa de montaje significan que puede montar el dispositivo en una silla de ruedas o en un soporte.

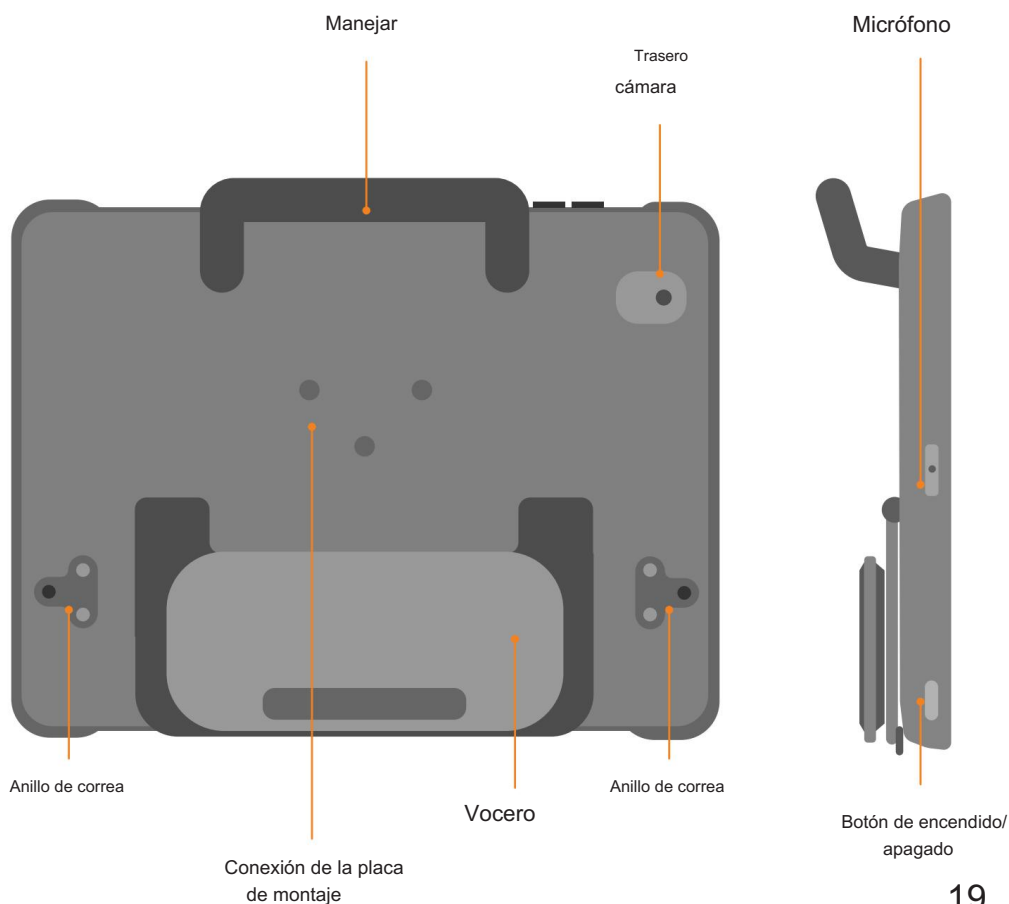

4 Cómo encender su Talk Pad

El botón de encendido se encuentra en la parte superior izquierda de su Talk Pad.

Para encender su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

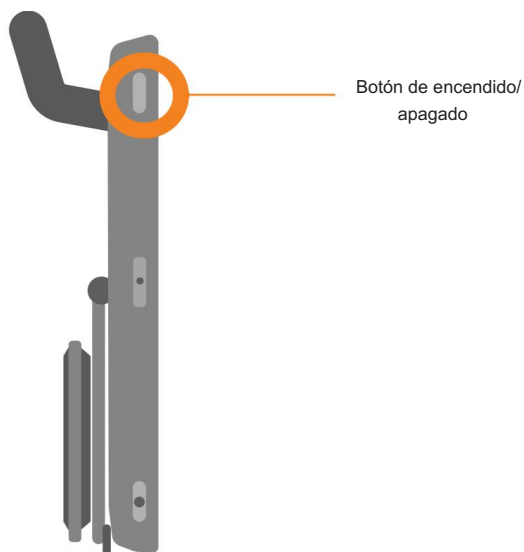

Cómo poner el Talk Pad en reposo

Suspender es un modo de bajo consumo en el que el dispositivo está inactivo y la pantalla está apagada.

Al presionar el botón de encendido el dispositivo pasará al modo de suspensión.

Presione el botón de encendido nuevamente para activar el dispositivo.


Cómo apagar el Talk Pad

5

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Si tiene un Talk Pad 13, mantenga presionado el botón de encendido y presione el botón para subir el volumen.

Luego, deslice el interruptor "Deslizar para apagar" en la pantalla para apagar el dispositivo. Presione la X para cancelar el apagado.

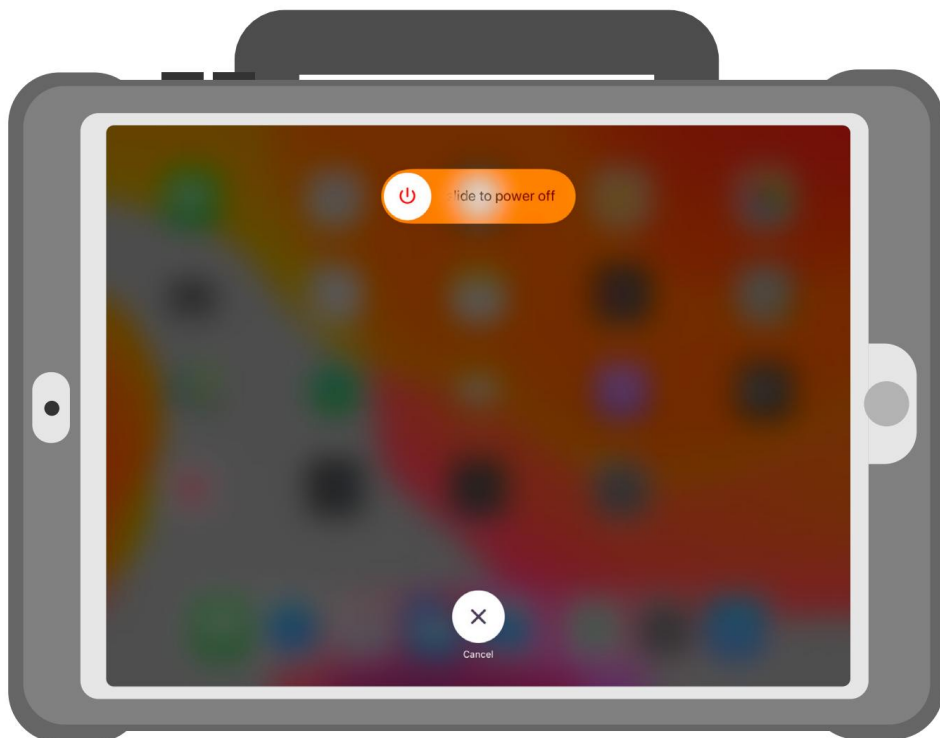

6 Cómo cargar su Talk Pad


El Talk Pad y el altavoz tienen baterías separadas, por lo que ambos deben cargarse al mismo tiempo.


Conecte el puerto de carga del Talk Pad al adaptador de corriente; el adaptador está claramente etiquetado.

Conecte el puerto de carga del altavoz al adaptador de corriente.

Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente para cargar.

Es mejor cargar su Talk Pad cuando no esté en uso.

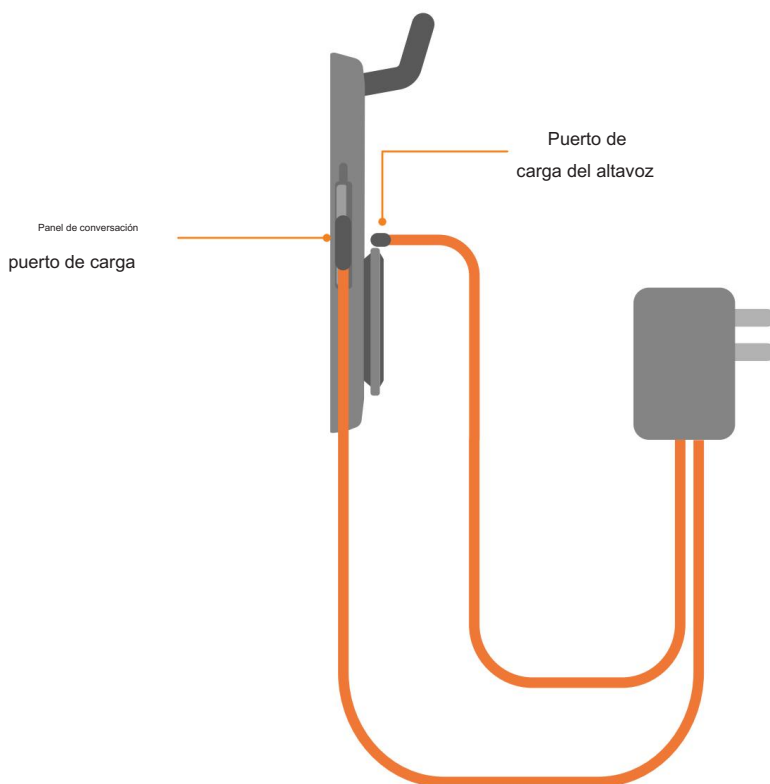

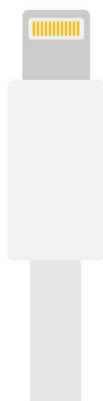


Conector Lightning

Puertos de carga del
Talk Pad 8 y 10



Conector USB-C

Puertos de carga del Talk Pad
13 y del altavoz

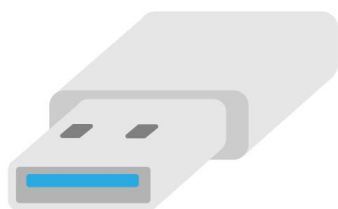


Conector USB-A

Conecta el cable Lightning
y los cables USB al enchufe de
carga

7 El altavoz Bluetooth

Su Talk Pad tiene un altavoz Bluetooth incorporado.


Dependiendo de la configuración de su Talk Pad, se emparejará cuando desempaquete su dispositivo o deberá emparejar el altavoz como parte del proceso de configuración.

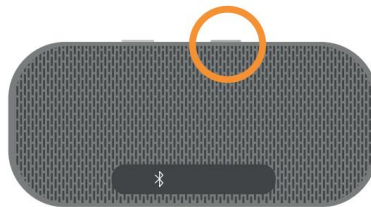

El altavoz tiene su propio botón de encendido y batería. ¡Recuerda cargarlo cuando cargues tu dispositivo!

¿Dónde está tu configuración de Bluetooth?

La configuración de Bluetooth se encuentra en la aplicación Ajustes . Selecciona Ajustes y, a continuación, Bluetooth para ver una lista de todos los dispositivos conectados. El altavoz aparece como Lenovo 700BT.

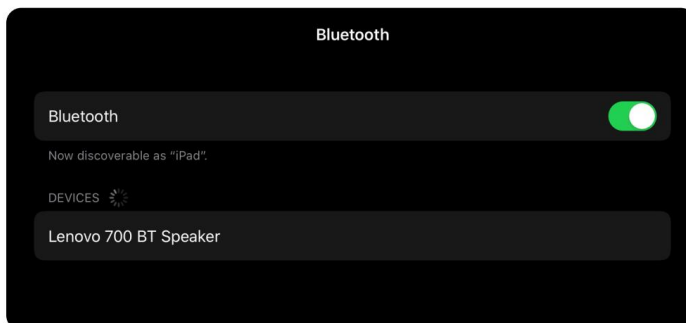


Cómo volver a conectar el altavoz Bluetooth

Si su altavoz se desconecta del Talk Pad, puede volver a conectarlo fácilmente.

Paso 1

Si ha colocado la pegatina Smartbox sobre el altavoz, será necesario quitarla.

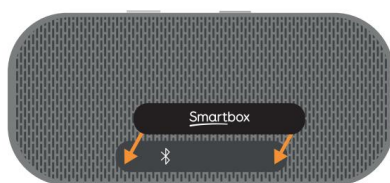

Paso 2

Mantenga presionado el botón Bluetooth durante varios segundos hasta que se muestre una luz azul en el altavoz.



Paso 3

Accede a la aplicación Ajustes y selecciona Bluetooth. Pulsa Altavoz Lenovo 700 BT para conectarlo.

8

Colocación de su Talk Pad

Talk Pad se puede transportar gracias a su resistente asa.

El soporte en la parte posterior del Talk Pad se puede utilizar para colocar el dispositivo sobre una mesa o escritorio.

Para mayor seguridad puedes colocar la correa incluida para poder llevar el dispositivo alrededor del cuello.




Los Talk Pad 10 y 13 también se pueden montar en un soporte con la placa de montaje universal opcional Daessy y Rehadapt.

Esto también le permitirá colocar el Talk Pad en una silla de ruedas o encima de una cama.




9 Uso del soporte

El soporte para su Talk Pad se puede utilizar para colocarlo en un escritorio o mesa para que pueda usarse cómodamente en cualquier ángulo.

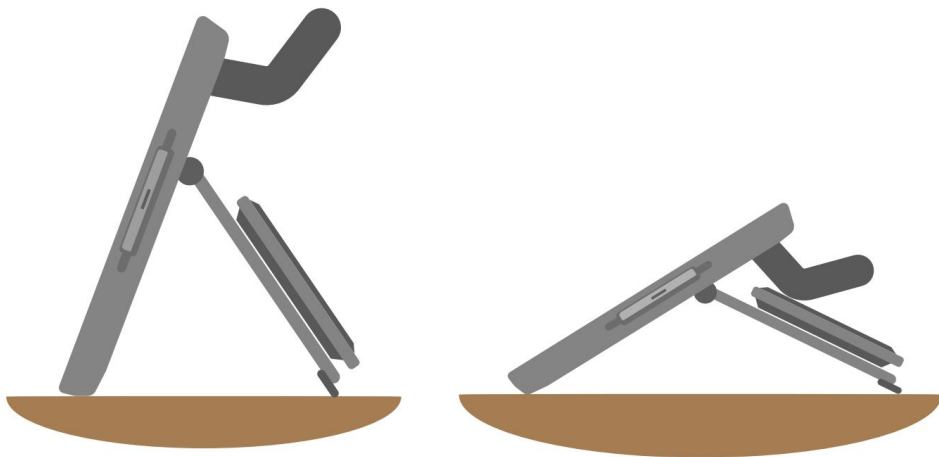


Si usa el soporte con el montaje, tenga cuidado de no abrirlo por completo o podría rayar el altavoz.

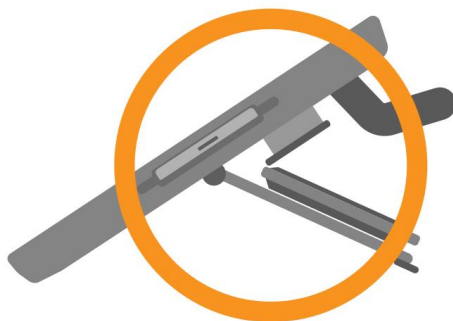

Ajuste del soporte

Proporcionamos el soporte de forma que se pueda mover con firmeza, pero que permanezca en su lugar durante su uso. Si desea ajustar el par de apriete del soporte, puede usar una llave Allen para apretar la tuerca de seguridad. No la apriete demasiado.


¡Ten en cuenta que tendrás que hacer esto en ambas bisagras!

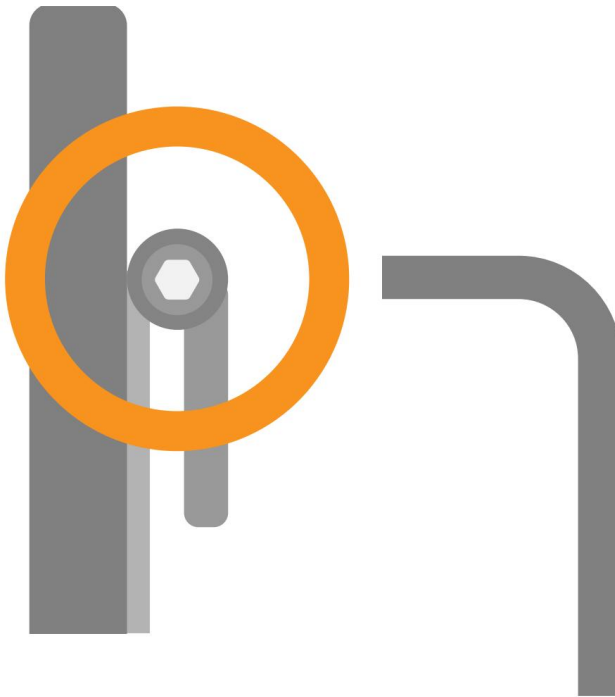

10 Colocación de la correa para el hombro

Su estuche se suministra con una correa de hombro opcional.

Esto se puede colocar pasando los cierres por los orificios de la correa en la parte trasera del estuche.

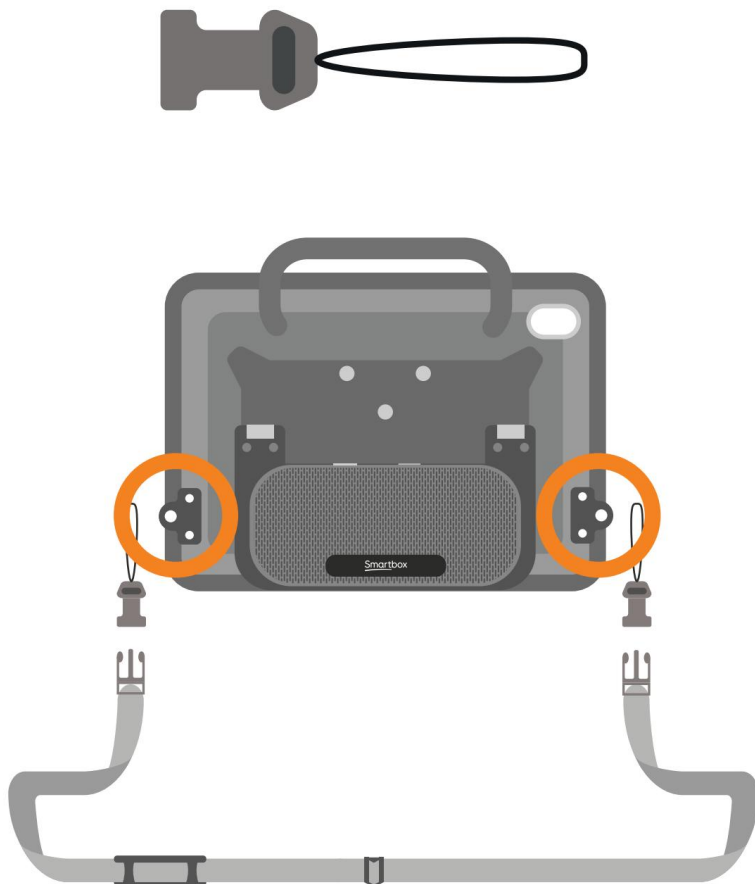

El kit de montaje


11

La funda de tu iPad te permite colocar una placa de montaje para que puedas posicionar tu dispositivo como necesites.




El kit de placa de montaje se vende por separado.

Coloque el espaciador y la placa en los tres orificios para tornillos en la parte trasera de la carcasa.

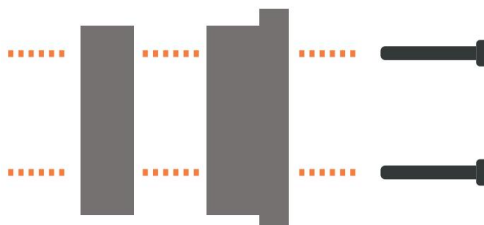

12 Conexión de auriculares

Los Talk Pad 8 y 10 cuentan con una entrada para auriculares de 3,5 mm. Puedes usarla para conectar unos auriculares al dispositivo y disfrutar de la música.

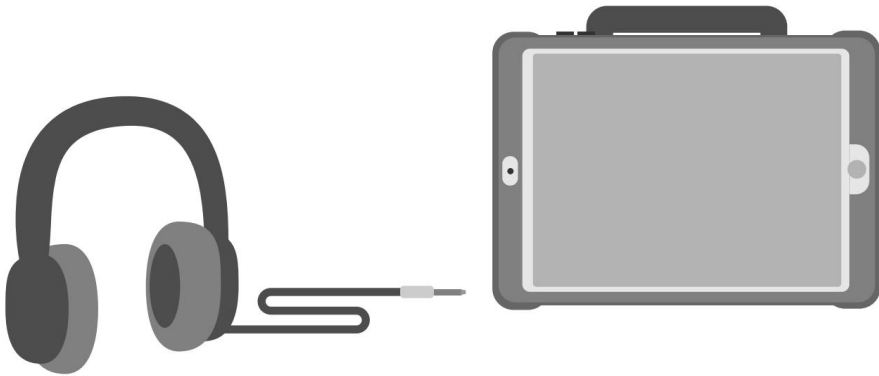

Al conectar los auriculares, el audio dejará de salir por el altavoz Bluetooth.

Para continuar usando el Talk Pad para comunicarse, desconecte los auriculares y espere unos momentos para que el altavoz Bluetooth se active. reconectar

Usando un protector de teclado

Se puede colocar fácilmente un protector de teclado en la pantalla de su Talk Pad.

Los protectores de teclas son láminas de plástico para la pantalla táctil, recortadas para adaptarse a diversas cuadrículas en Grid para iPad. Te ayudan a realizar selecciones más precisas en la pantalla táctil.

El protector de teclas Talk Pad cuenta con una exclusiva cinta de agarre limpio. Se adhiere firmemente a la pantalla y se retira sin problemas. Se puede colocar y quitar varias veces y se limpia fácilmente.

Aplicación de un protector de teclado

Asegúrese de que la pantalla esté limpia y que se hayan quitado todas las películas protectoras de la parte posterior del protector de teclas.

Asegúrese de que Grid para iPad esté abierto y configurado con el conjunto de cuadrícula que necesita.

Coloque el protector de teclado en la pantalla y alinéelo con la cuadrícula establecida.

Presione firmemente los bordes del protector de teclas contra la pantalla.

Quitar un protector de teclado

Pase la uña, una tarjeta de crédito u otro objeto plano entre el protector del teclado y la pantalla y levántelo con cuidado. Las asas del protector se soltarán y podrá retirarlo.

Introducción al sistema operativo iPad

Tu Talk Pad está integrado en un iPad de Apple. El iPad funciona con un sistema operativo llamado iPad OS (a veces llamado iOS).

iPad OS tiene una serie de funciones que te ayudarán a navegar por tu Talk Pad, así como funciones de accesibilidad para un mayor acceso.

13	Uso de la pantalla táctil	36
14	La pantalla de inicio de su Talk Pad	38
15	Apertura y cierre de aplicaciones	40
16	Configuraciones	42
17	Cuenta y seguridad	43
18	Bloqueo del Talk Pad	44
19	Ajustes de accesibilidad	45
20	Acceso guiado	46
21	La App Store	47

14 Uso de la pantalla táctil

El Talk Pad es principalmente un dispositivo táctil. Al navegar por el sistema operativo del iPad, hay algunos gestos que te ayudarán a navegar rápidamente.



Grifo

Toque la pantalla con el dedo y luego retírelo rápidamente.

¿Cuándo harías esto? - Para abrir la aplicación Grid para iPad, siga un enlace web o utilice el teclado en pantalla.



Tocar y mantener presionado

Toque la pantalla con el dedo y manténgalo presionado durante unos instantes.

¿Cuándo harías esto? - Para resaltar una palabra para copiar, abre un menú rápido.



Golpe fuerte

Mueva un dedo por la pantalla rápidamente.


¿Cuándo harías esto? - Para moverse entre páginas, moverse a través de una lista o una colección de imágenes.



Voluta

Toque la pantalla y mueva el dedo.

¿Cuándo harías esto? - Para navegar hacia arriba y hacia abajo en una página web o un documento, o alrededor de una imagen.

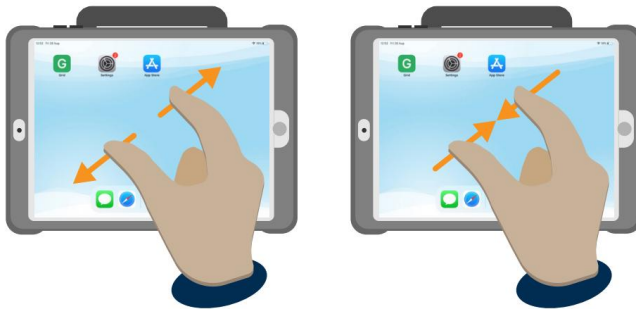

Zoom


Coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos para acercar, júntelos para alejar.

¿Cuándo harías esto? - Para agrandar una imagen en tu pantalla, mira el texto pequeño.


Recuerda que estos gestos se pueden combinar. Por ejemplo, si mantienes pulsado un texto y luego deslizas el dedo, resaltarás el texto sobre el que pases el dedo.

15 La pantalla de inicio de su Talk Pad

Esta es la pantalla de inicio de tu iPad OS. Dependiendo de tu configuración, puede que tenga un aspecto ligeramente diferente, pero siempre funcionará igual.

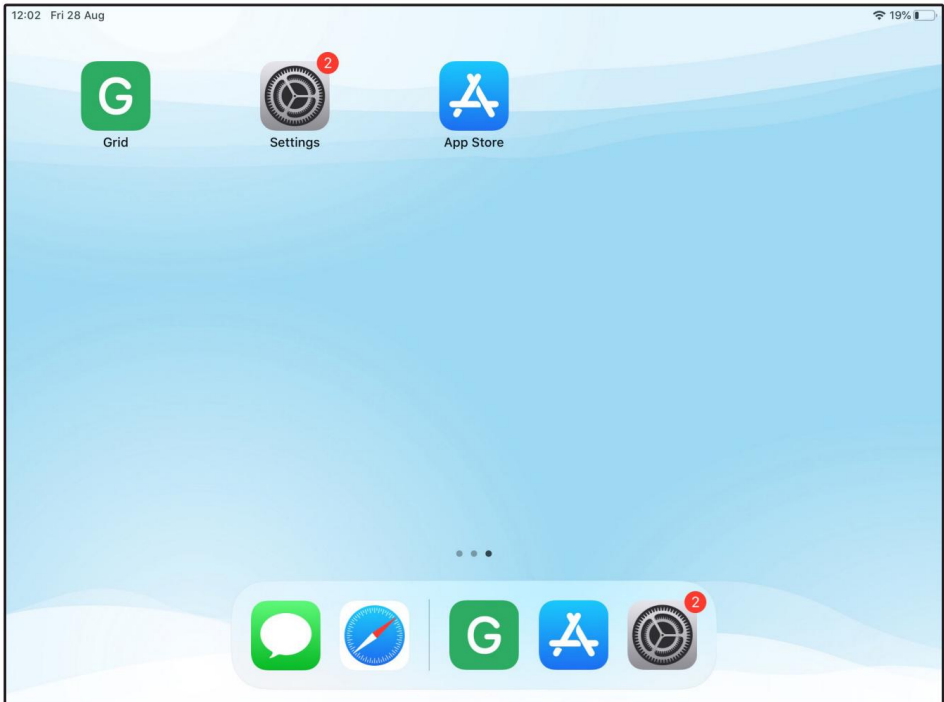

Si descargas más aplicaciones en el Talk Pad, la pantalla de inicio se llenará y tendrá varias páginas. Puedes navegar entre ellas.

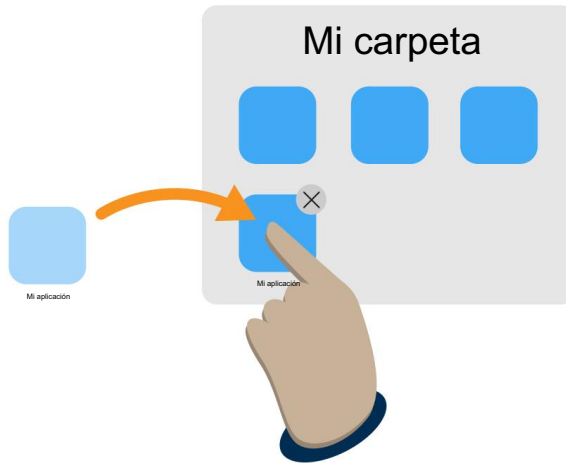

Las aplicaciones se pueden organizar en carpetas. Para ello, mantén presionada una aplicación hasta que se mueva. Luego, arrástrala sobre la carpeta donde quieras colocarla. Si la arrastras sobre otra aplicación, crearás una nueva carpeta.

Consejo: Si tienes un Talk Pad autoconfigurado, tendrás muchas aplicaciones de Apple que quizás no necesites. Para eliminar una aplicación, mantén presionado su ícono y selecciona Eliminar aplicación.

¡También puedes crear una carpeta con aplicaciones que quizás no necesites todo el tiempo!

16

Abrir y cerrar aplicaciones

Para abrir una aplicación, toca su ícono. Se abrirá.



Cuando se abre una aplicación, llena la pantalla.

Dejar una aplicación en el Talk Pad 8 y 10

Para cerrar una aplicación y volver a la pantalla de inicio, presione el botón Inicio una vez.



Dejar una aplicación en el Talk Pad 13

Para cerrar una aplicación y volver a la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Cerrar aplicaciones

Al salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio, no se cierra, sino que se suspende . Esto significa que puedes volver a donde estabas; por ejemplo, podrás acceder directamente a Grid para iPad.

Generalmente, lo mejor es dejar las aplicaciones suspendidas si estás cambiando entre ellas.

Para cerrar una aplicación en el Talk Pad 8 y 10

Pulsa dos veces el botón Inicio. Se mostrarán todas las aplicaciones suspendidas y abiertas. Luego, desliza el dedo hacia arriba sobre la aplicación que quieras cerrar.

Para cerrar una aplicación en el Talk Pad 13

Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro. Esto mostrará todas las aplicaciones suspendidas y abiertas. Luego, desliza hacia arriba la aplicación que quieras cerrar.

17

Ajustes

La personalización del sistema operativo de tu iPad y los ajustes de tu experiencia se realizan en la aplicación Configuración .

Aquí puedes controlar casi todos los aspectos del Talk Pad, desde la conexión a Wi-Fi, el cambio de sonidos de notificación y más.



Áreas de configuración útiles

Wifi

Conectarse a Internet y administrar redes.

General

Obtenga información sobre su Talk Pad.

Pantalla y brillo

Ajuste el brillo de la pantalla, alterne entre el modo claro y oscuro y ajuste el tamaño del texto.

Algunas opciones se pueden activar o desactivar. Toca el interruptor junto a la opción para activarla.



Cuentas y seguridad

18

iPad OS tiene varias opciones de cuenta y seguridad.

Tu ID de Apple

Esta es la cuenta más importante de tu dispositivo. Con ella puedes comprar aplicaciones en la App Store, hacer una copia de seguridad de tu Talk Pad en iCloud, usar Buscar y más. Si tienes un Talk Pad de configuración automática, la habrás creado durante la configuración.

Código de acceso

Un código de seis dígitos que se utiliza para desbloquear el Talk Pad y configuraciones específicas.

Autenticación de dos factores

Esto se vincula a tu ID de Apple y vincula tu cuenta a otro dispositivo Apple o teléfono móvil. Esto envía un código de autenticación a un segundo dispositivo para confirmar inicios de sesión, compras y otros procesos seguros.

Identificación táctil

Los Talk Pad 8 y 10 cuentan con un lector de huellas dactilares en el botón de inicio. Este puede usarse en lugar de una contraseña para desbloquear el dispositivo y confirmar ciertas acciones.

Identificación facial

El Talk Pad 13 tiene una cámara frontal avanzada que puede desbloquear el dispositivo con tu cara.

Código de acceso guiado

Este código le permitirá salir del modo de acceso guiado.


19 Bloqueo del Talk Pad

Al pulsar el botón de encendido en su Talk Pad, el dispositivo pasará al modo de suspensión.

Para activar el dispositivo necesitarás ingresar tu código de acceso o usar tu Touch ID.

Si su Talk Pad se suministró con configuración automática, habrá agregado su código de acceso o Touch ID durante el proceso de configuración.

Puede activar o desactivar el bloqueo en la aplicación Configuración, en Touch ID y código de acceso.

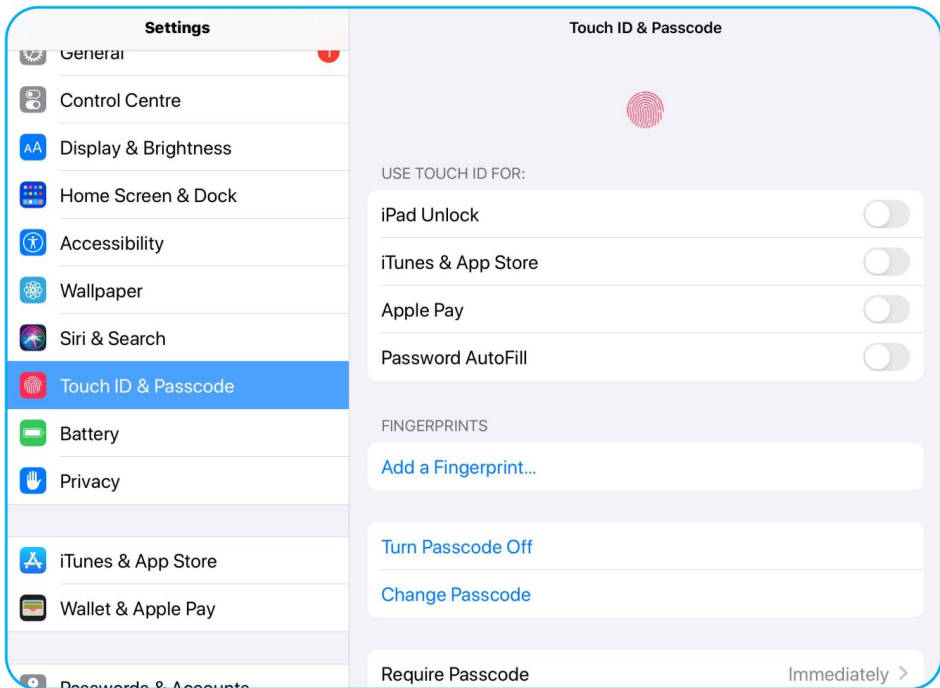

Configuración de accesibilidad


20

iPad OS tiene muchas funciones de accesibilidad que puedes usar para facilitar la navegación.

Puede encontrar las funciones de accesibilidad en la aplicación Configuración.

Los ajustes de accesibilidad están diseñados para el sistema operativo iPad. Grid para iPad ya está diseñado con la accesibilidad en mente y, por lo tanto, no requiere todas las funciones.

Recomendamos configuraciones de control táctil y por interruptor .

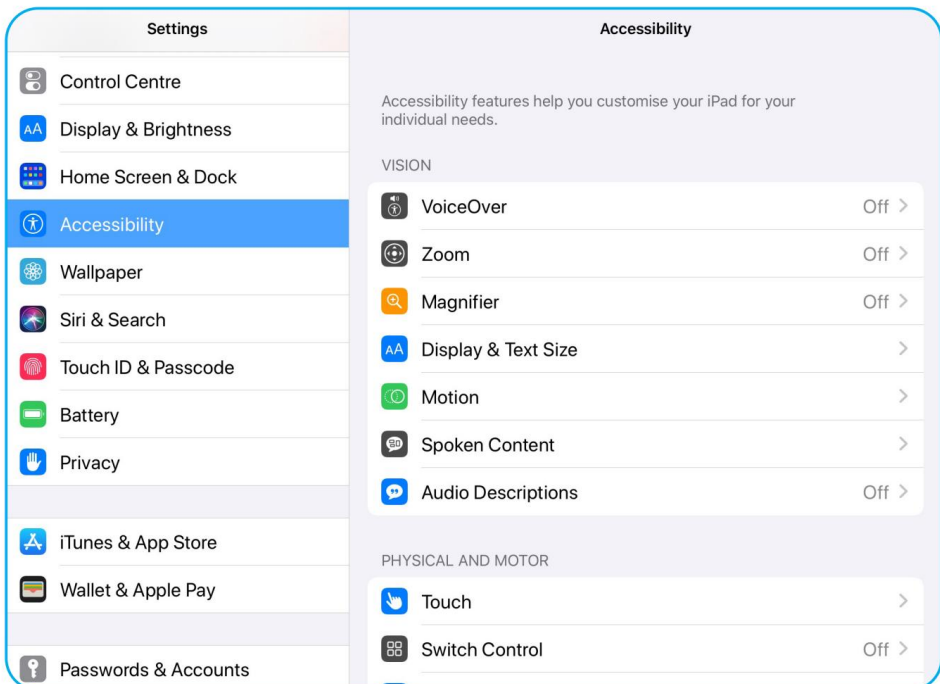

21 Acceso guiado

Puede utilizar el acceso guiado para bloquear su Talk Pad en una sola aplicación.

En Configuración - Accesibilidad, seleccione Acceso guiado y luego active el interruptor.

Necesitará establecer una contraseña de acceso guiado. Esta contraseña se usará para salir del modo de acceso guiado. ¡Asegúrese de anotarla!

Puede enmascarar un área de la pantalla para evitar el acceso, por ejemplo, para cubrir el botón Explorador de cuadrícula en Grid para iPad.

Cómo activar el acceso guiado en Talk Pad 8 y 10

Haga triple clic en el botón Inicio para acceder al menú Accesibilidad.

Cómo activar el acceso guiado en Talk Pad 13

Haga triple clic en el botón de Encendido para acceder al menú Accesibilidad.

Cómo desactivar el acceso guiado en Talk Pad 8 y 10

Haz triple clic en el botón Inicio e introduce tu código de acceso guiado.
Selecciona Finalizar.

Cómo desactivar el acceso guiado en Talk Pad 13

Haz triple clic en el botón de encendido e introduce tu código de acceso guiado.
Selecciona "Finalizar".

La App Store


22

Si has configurado un ID de Apple, puedes usarlo para acceder a la App Store. Aquí puedes descargar nuevas apps a tu Talk Pad.

Puede buscar en la App Store, explorar por categoría y ver listas de aplicaciones populares gratuitas y pagas.

Cómo pagar por aplicaciones

Para pagar una aplicación, necesitarás tener un método de pago asociado a tu ID de Apple.

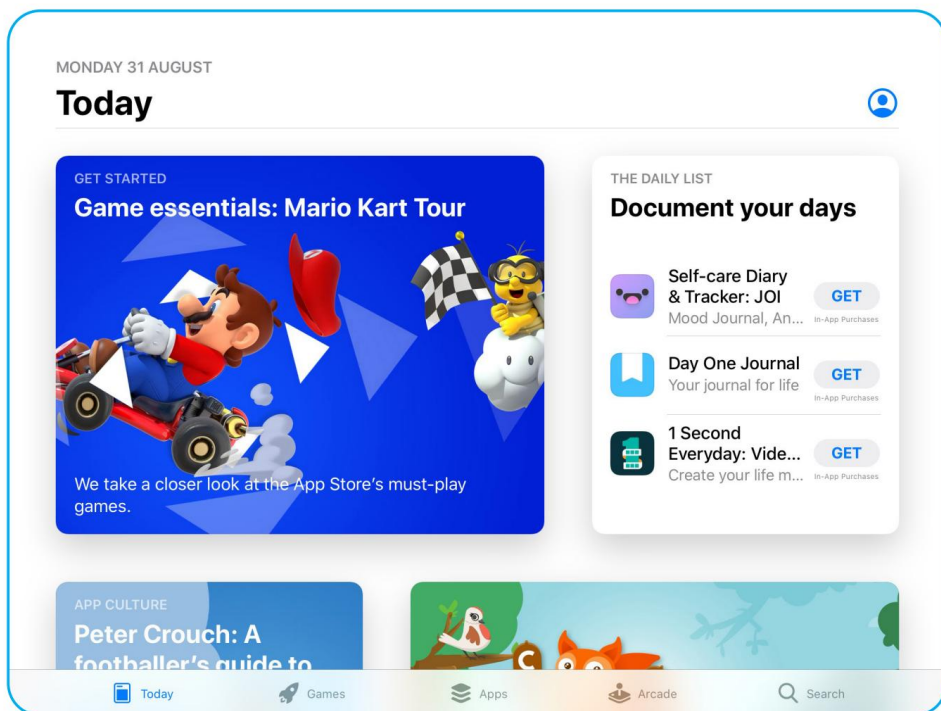

Empezando con Cuadrícula para iPad

Grid para iPad es una aplicación completa de CAA que incluye acceso a una enorme biblioteca de cuadrículas. Grid para iPad te permite configurar una voz, crear oraciones, comunicarte con texto, símbolos y mucho más.

22 Conociendo Grid	50
23 Su cuenta y perfil de Smartbox	52
Explorador de cuadrícula 24	53
25 opciones del Explorador de cuadrícula	54
26 conjuntos de cuadrícula	56
27 El menú de configuración de la cuadrícula	58
28 Modo de edición	60
29 Cómo ocultar la cuadrícula del menú del iPad	62


23

Conociendo Grid




Tu perfil

Su perfil de usuario almacena su cuenta Smartbox, conjuntos de cuadrículas y otras configuraciones.

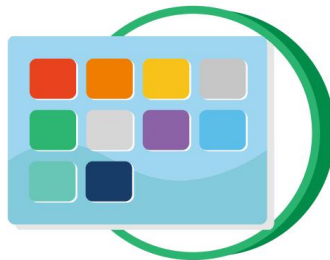

Explorador de cuadrícula

Grid Explorer es tu pantalla de inicio y es donde encontrarás tus conjuntos de cuadrículas.

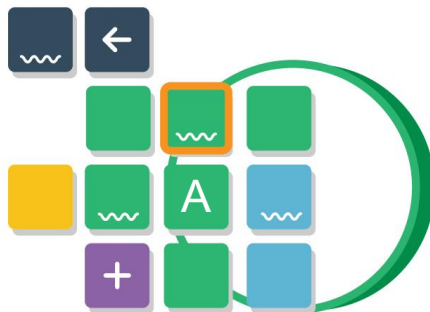

Conjuntos de cuadrícula

Un conjunto de cuadrículas es una aplicación dentro de Grid. Son tus recursos para comunicarte y mucho más.



Modo de edición

Cada conjunto de cuadrícula se puede personalizar y editar o puedes crear un conjunto de cuadrícula desde cero.

Su cuenta y perfil de Smartbox

Cuando inicie Grid para iPad por primera vez, deberá seguir algunos pasos para crear una cuenta Smartbox y crear su perfil.

Si ya tiene una cuenta Smartbox, puede iniciar sesión desde la pantalla de inicio para transferir muchas de sus configuraciones.

Para configurar una cuenta Smartbox necesitará una dirección de correo electrónico.

También puedes vincular tu cuenta a Dropbox, una solución de almacenamiento en línea. Esto te permite hacer copias de seguridad de tus conjuntos de cuadrículas y otras personalizaciones, así como editarlos remotamente.

Su cuenta Smartbox almacenará

Tu nombre de usuario

Tu configuración de voz


Tu configuración de acceso a Dropbox

Su cuenta de Dropbox almacenará

Tus conjuntos de cuadrícula

Sus archivos bancarios de mensajes

Explorador de cuadrícula

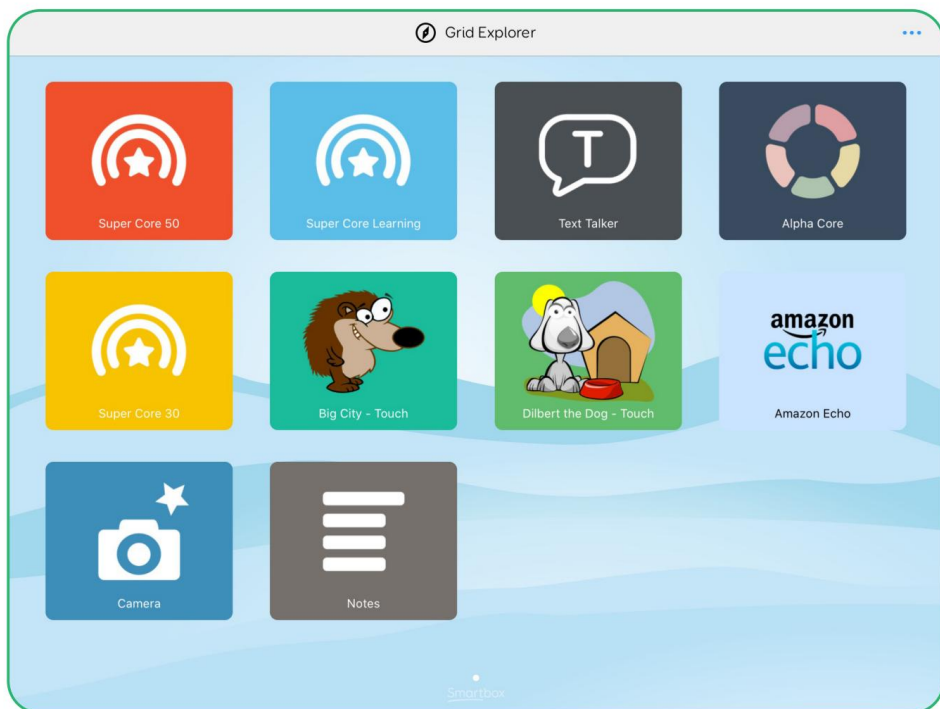


Este es Grid Explorer, tu pantalla de inicio de Grid para iPad. Cada mosaico es un conjunto de cuadrículas. Al tocar un conjunto de cuadrículas, se abrirá.

Si su Explorador de cuadrículas no tiene ningún conjunto de cuadrículas, puede agregarlos desde la pantalla Agregar conjunto de cuadrículas .

26

Opciones del Explorador de cuadrícula

Al tocar los tres puntos en la parte superior derecha de Grid Explorer, se abrirá el menú de opciones de Grid Explorer.

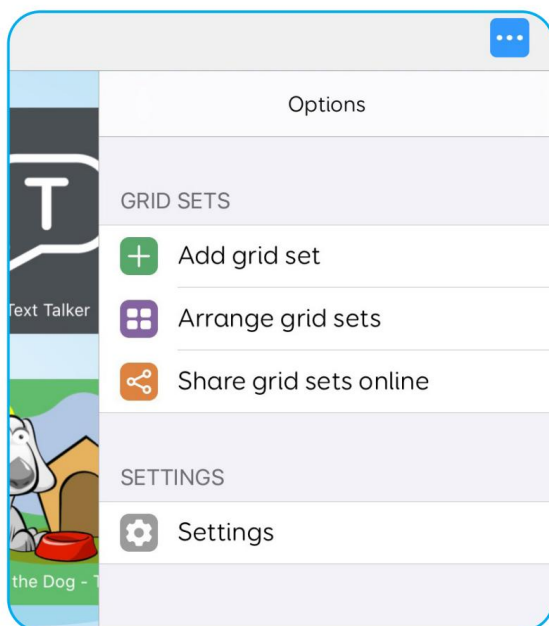

Agregar conjuntos de cuadrículas

Abra la ventana Agregar conjuntos de cuadrículas donde puede buscar conjuntos de cuadrículas por categoría.



Organizar conjuntos de cuadrículas

Organice, cree carpetas y elimine conjuntos de cuadrículas de su Explorador de cuadrículas.



Compartir conjuntos de cuadrículas en línea

Abre la ventana para compartir conjuntos de cuadrículas. Puedes subir tus conjuntos de cuadrículas a Online Grids, nuestra plataforma para compartir conjuntos de cuadrículas. Los conjuntos de cuadrículas subidos a Online Grids están disponibles para todos los usuarios de Grid.



Ajustes

Accede a la configuración de Grid. Aquí puedes personalizar su funcionamiento, ajustar tu perfil y mucho más.

27

Conjuntos de cuadrícula

Los conjuntos de cuadrículas se organizan en categorías. Puede explorarlas seleccionando "Añadir conjunto de cuadrículas" en el menú "Explorador de cuadrículas".



Comunicación de símbolos

Conjuntos de cuadrículas basados en símbolos que se pueden utilizar para explorar vocabulario básico o construir oraciones a partir de temas.



Comunicación de texto

Conjuntos de cuadrículas basados en texto que ofrecen una variedad de diseños de teclado y funciones adicionales como banco de mensajes.



Aprendizaje interactivo


Actividades divertidas que se pueden utilizar para introducir la causa y el efecto, la toma de decisiones y una excelente manera de explorar el acceso, con animaciones y juegos.



Aplicaciones accesibles

Navega por internet, toma fotos o controla un Amazon Echo. Las aplicaciones accesibles son herramientas adicionales para los usuarios de Grid.

Grid para iPad incluye muchos conjuntos de cuadrículas. A continuación, se muestran tres opciones populares para empezar.

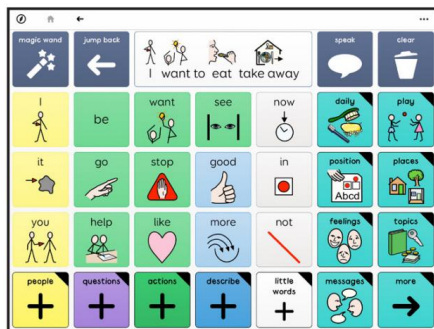


Súper núcleo

Un vocabulario básico basado en símbolos, diseñado para ayudar a los usuarios de CAA a experimentar el éxito con la comunicación con símbolos.

Hablador de texto

Un potente conjunto de cuadrícula de teclado. Genere mensajes rápidamente en el momento y prepárese para las conversaciones con antelación.

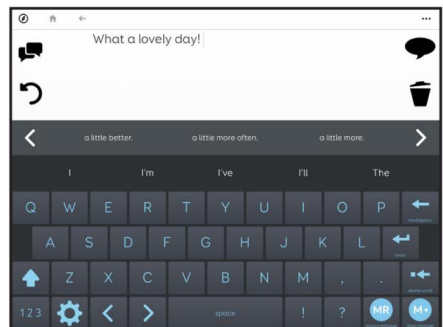

Núcleo Alfa


Un vocabulario de CAA basado en texto, diseñado para adultos alfabetizados con necesidades de acceso cambiantes.

28

El menú de configuración de la cuadrícula

Cuando estás en un conjunto de cuadrícula, el menú Cuadrícula cambia para brindarte más opciones.

La barra superior de un conjunto de cuadrícula tiene las siguientes opciones:

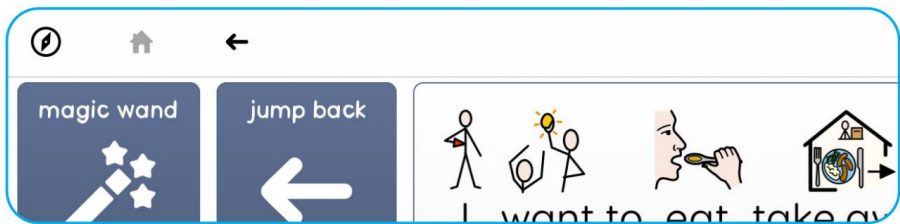


Explorador de cuadrícula

Cierra el conjunto de cuadrículas y regresa al Explorador de cuadrícula.



Cuadrícula de inicio

Regresa a la cuadrícula de inicio del conjunto de cuadrículas.

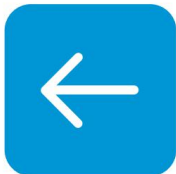

Atras

Retroceda una cuadrícula.

Al tocar los tres puntos en la parte superior derecha se abrirá el menú de opciones.



Editar

cuadrícula Abra el modo Edición para comenzar a editar su conjunto de cuadrículas.



Editar lista de palabras

Edite la lista de palabras en su cuadrícula si hay una.



Configuración

Abra la configuración de la cuadrícula.



Buscar palabra

Abra la herramienta Buscar palabra, esto le permite encontrar instancias de palabras en el conjunto de la cuadrícula y le muestra cómo llegar a ellas.



Manual del conjunto de

cuadrículas Abra un navegador web para descargar la documentación del conjunto de cuadrículas.


29


Modo de edición

El modo de edición le permite editar y personalizar cualquier cuadrícula o crear un nuevo conjunto de cuadrículas desde cero.

En el modo de edición, tienes control total sobre el aspecto del conjunto de la cuadrícula y puedes cambiar el comportamiento de cada celda.

Esto puede ser tan simple como agregar una palabra a una cuadrícula creando una nueva celda de escritura, o agregar un comando más complejo a las celdas, como tomar una foto en una cuadrícula de cámara.

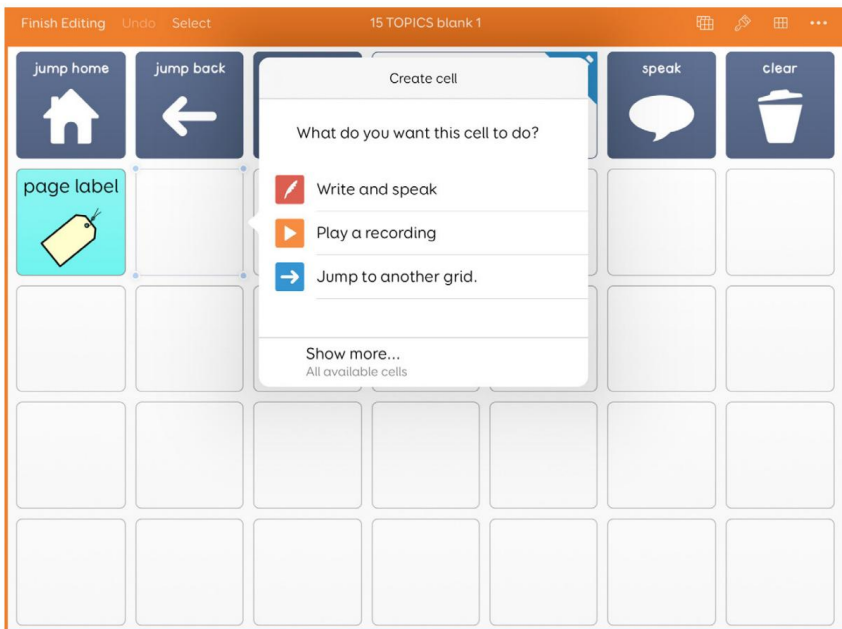

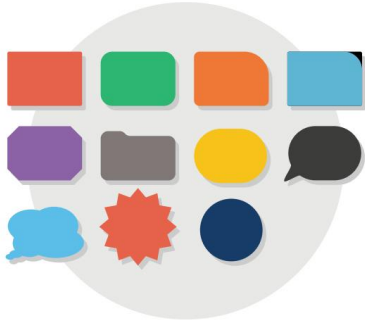

Apariencia

Controla el tamaño, el color y la forma de cada celda.

Etiqueta

Ajuste el tamaño y la fuente de la etiqueta.

Hola Hola
Hola



Símbolo


Puedes cambiar o editar el símbolo de cada celda. Incluso puedes elegir una foto.

Obtenga más información en nuestro centro de capacitación Grid
thinksmartbox.com/centro-de-formacion

30 Cómo ocultar la cuadrícula del menú del iPad

Es posible que desees evitar el acceso a los menús de Grid para iPad cuando esté en uso.

Podrás seguir usando los botones Explorador de cuadrícula, Inicio y Atrás para navegar. Si quieres evitar el acceso a ellos, tendrás que configurar el Acceso guiado.

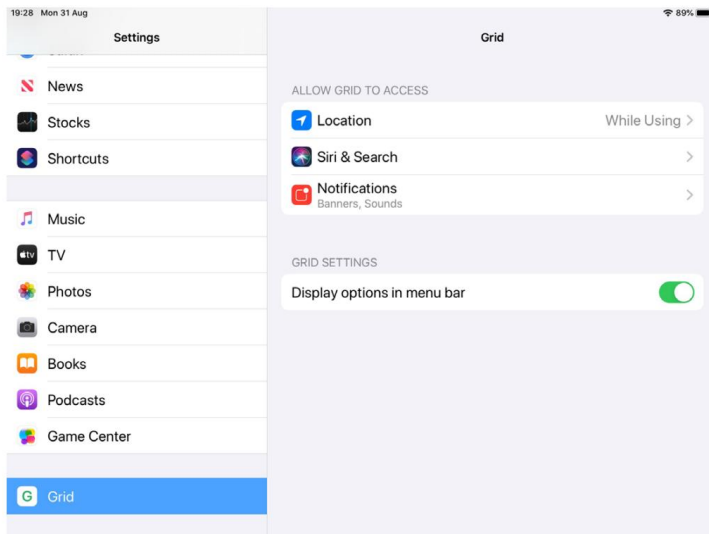

La configuración del menú se encuentra fuera de Grid para iPad, en la app Ajustes de iPad OS . Desliza la opción de la izquierda hacia abajo hasta encontrar Grid.

Desactive el interruptor 'Mostrar opciones en la barra de menú'.

Notas

This image shows a full page of white paper with horizontal grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

Cuidando de tu

Panel de conversación

Esta sección cubre cómo cuidar Talk Pad y cómo obtener ayuda.

Los avisos de seguridad detallan información importante de uso y conformidad.

31 Actualización de Grid para iPad	66
32 Actualización del sistema operativo del iPad	68
33 Cómo hacer una copia de seguridad de sus conjuntos de cuadrícula con Dropbox	69
34 Cómo hacer una copia de seguridad de su usuario de Grid	70
35 Soporte	72
36 Cómo encontrar su modelo y número de serie	73
37 Quitar el iPad	74
38 Inserción del iPad	75
39 Avisos de seguridad	76

31 Actualización de Grid para iPad

Grid para iPad se actualiza constantemente para incorporar nuevas funciones, conjuntos de cuadrículas y aprovechar las nuevas funciones del iPad.


Actualizaciones automáticas

Si su Talk Pad está conectado a Internet, puede descargar actualizaciones automáticamente.

En la aplicación Configuración de iPad , seleccione su ID de Apple.

Seleccione iTunes y App Store.


En el encabezado de descargas automáticas, active las Actualizaciones de la aplicación.
Cambiar a encendido.

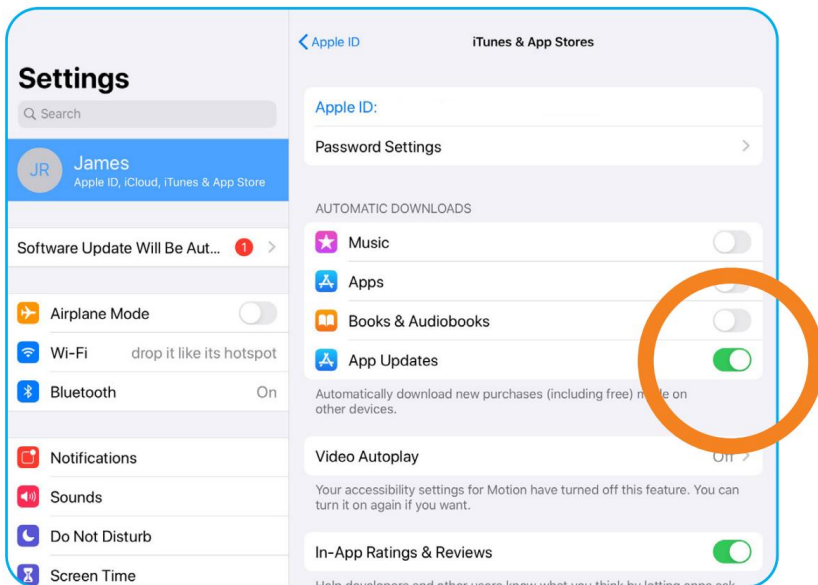

Actualizaciones manuales

Puedes buscar una actualización manual en la aplicación App Store .


Toque el ícono de Usuario en la parte superior derecha.

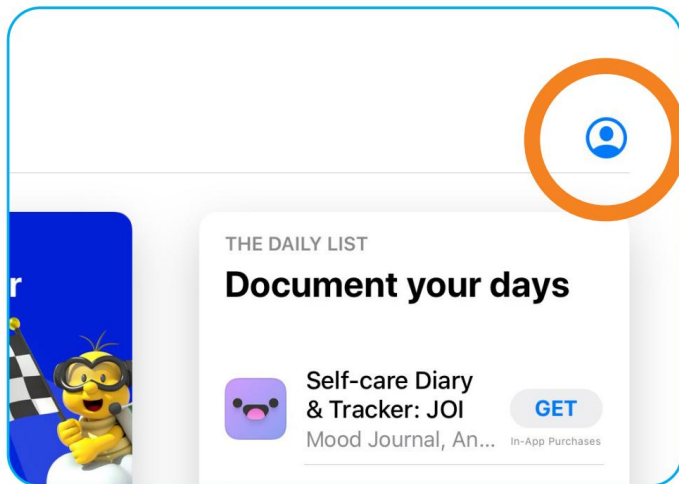

Desplácese hacia abajo y verá una lista de actualizaciones disponibles con un ícono de descarga a la derecha.

32 Actualización del sistema operativo del iPad

El sistema operativo del iPad recibe actualizaciones periódicas de Apple. Si tu Talk Pad está conectado a internet, estas se descargarán automáticamente.

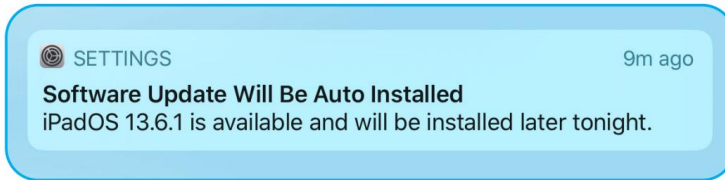

Es posible que veas una notificación en la pantalla de bloqueo. Las actualizaciones solo se instalan si el Talk Pad está cargándose.

Puede buscar actualizaciones manualmente en la aplicación Configuración, en General.




Realice una copia de seguridad de sus conjuntos de cuadrícula utilizando

33

Dropbox

Es importante mantener una copia de seguridad de sus conjuntos de cuadrícula y del perfil de usuario.

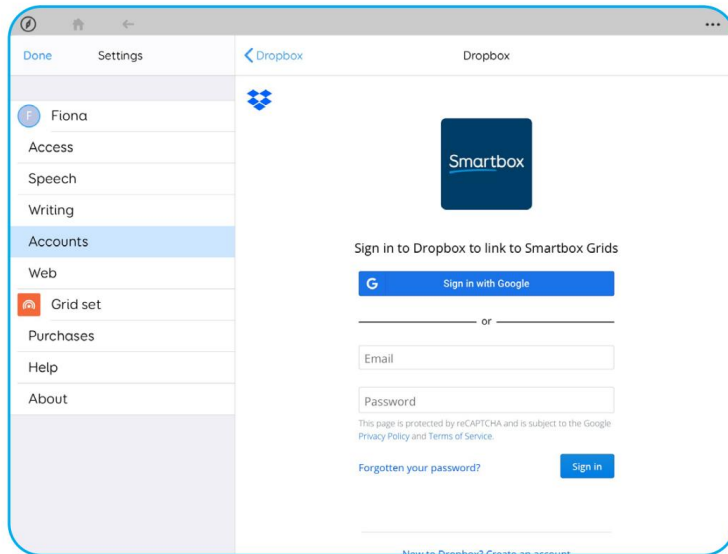

Puedes vincular tu cuenta de Smartbox a una cuenta de Dropbox en Configuración - Cuentas. Selecciona Dropbox y luego inicia sesión para vincular tu cuenta. cuentas.

Cuando su cuenta Smartbox esté vinculada a Dropbox, sus conjuntos de cuadrículas y los archivos almacenados en mensajes se cargarán automáticamente.


Esto también significa que puedes usar Grid 3 en Windows y Grid para iPad y mantener tus conjuntos de cuadrículas sincronizados.

34

Realice una copia de seguridad de su usuario de Grid

Puede realizar una copia de seguridad de su perfil de usuario de cuadrícula completo en Grid para iPad.


En Grid para iPad, abra Configuración.

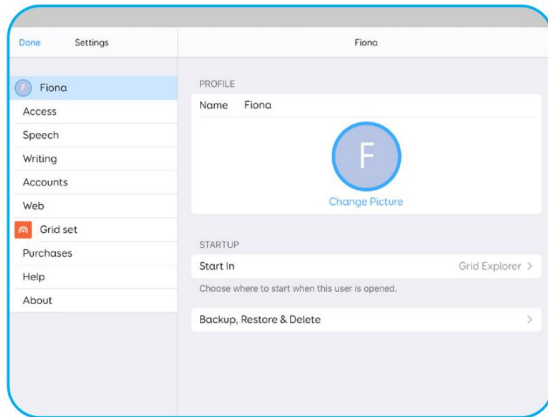


Desde su configuración de usuario, seleccione Copia de seguridad, restaurar y eliminar.

Puedes elegir Copia de seguridad para crear una copia de seguridad. Restaurar borrará su usuario y lo reemplazará con una copia de seguridad anterior.

Al seleccionar Eliminar se eliminarán sus conjuntos de usuarios y cuadrícula.

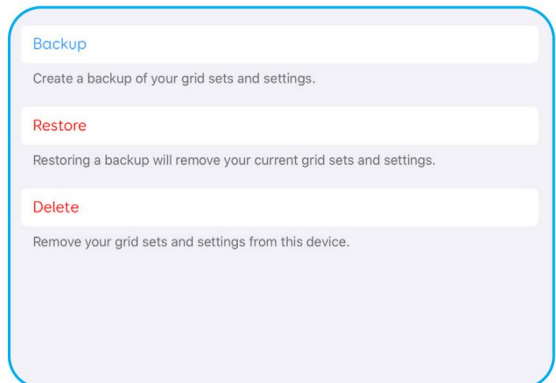

Cuando seleccionas Copia de seguridad, tendrás varias opciones sobre dónde se guardará o enviará tu archivo.

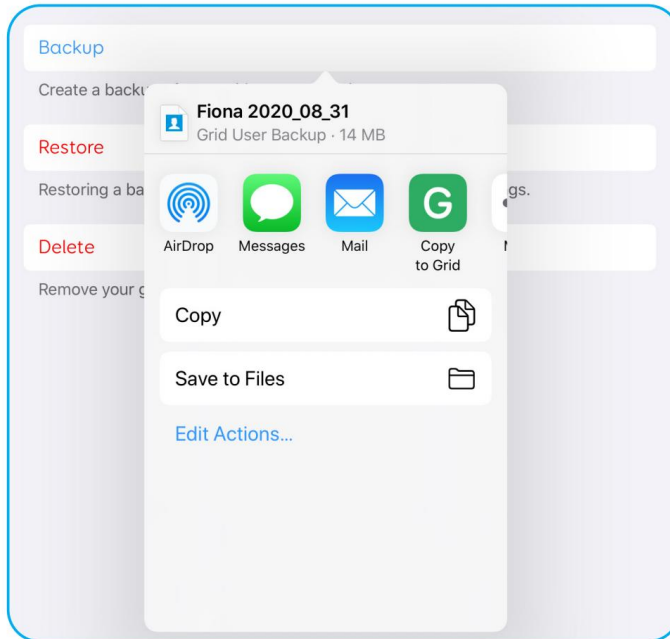

Seleccionar "Guardar en archivos" te permitirá mover la copia de seguridad a una memoria USB externa. También puedes usar la aplicación Correo para enviar la copia de seguridad por correo electrónico a otro dispositivo.

35

Apoyo

Nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarle.



Chat en línea

thinksmartbox.com

Envíe un

correo electrónico a support@thinksmartbox.com




Teléfono

Reino Unido: 01684 578868

EE. UU.: (878) 302-3674

Reparaciones

Nuestro equipo de Reparaciones puede cuidar de su dispositivo en caso de daño.

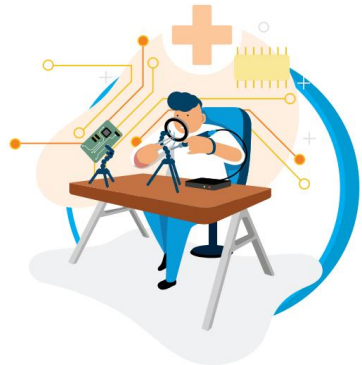

Cómo encontrar su modelo y número de serie

36

Cuando contacte con nuestro equipo de soporte, tenga a mano el modelo y el número de serie de su dispositivo. Esto nos ayudará a identificar el dispositivo con el que tiene el problema.

Puede encontrar el número de modelo y el número de serie en la parte posterior de su Talk Pad.


Así es como se ve un número de modelo:



El número de serie del dispositivo se encuentra debajo del soporte, levante el soporte y el número de serie se encuentra aquí:



37 Cómo retirar el iPad

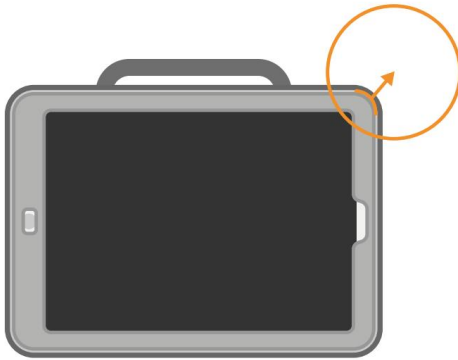

Inserta una moneda u objeto plano similar en la hendidura de la esquina para separar completamente la carcasa delantera y trasera. Busca la unión entre la parte delantera de plástico más duro y la trasera de goma.

Desengancha la parte frontal de la funda de tu iPad y retírala.



Insertar su iPad

38

Encaja la parte frontal de la funda en la parte frontal de tu iPad



Deslice su iPad en la carcasa trasera, primero el borde inferior, luego el superior y por todo el contorno hasta que los bordes estén seguros.

39 Seguridad

Especificación del dispositivo

Talk Pad es una ayuda de comunicación diseñada para personas con discapacidad que no pueden hablar o tienen necesidades de acceso complejas.

El texto completo de la especificación técnica está disponible aquí:
thinksmartbox.com/especificación-del-talk-pad

Modelos

Dispositivo	TalkPad 8	TalkPad 10	Talk Pad 13
Modelo	TP08	TP10	TP13

Entorno operativo

Temperatura	0 - 40 °C
-------------	-----------

Entorno de almacenamiento y transporte

Temperatura:	-20°C - 60°C
--------------	--------------

Explicación del símbolo

Símbolo	Significado
	Puerto para auriculares
HDMI	Puerto de entrada de medios de alta definición
	Puerto de carga
CE	Conformidad Símbolo europeo para declarar la conformidad con la legislación de la UE.
FC	Símbolo de la Comisión Federal de Comunicaciones para declarar la conformidad con la legislación de EE.UU.
	Símbolo de equipo eléctrico y electrónico de desecho que indica que debe desechar este equipo de acuerdo con las regulaciones locales.
	Símbolo del botón de encendido
+	Símbolo de aumento de volumen
-	Símbolo de disminución de volumen
	Lea el símbolo del manual

Avisos de seguridad

Grid para iPad es un dispositivo médico de clase 1. El iPad y la funda son un accesorio de este dispositivo que le permite utilizarse conforme a su propósito previsto.

Las especificaciones y estándares se enumeran en la sección Cumplimiento de este manual.

Tenga en cuenta estas advertencias de seguridad para garantizar el funcionamiento seguro de su Talk Pad.

Solicitud

Uso previsto

- Se utiliza para generar voz sintetizada.

Usuario previsto

Está diseñado para personas con necesidades complejas de comunicación y/o acceso. Estas dificultades pueden surgir como resultado de diversas afecciones, entre ellas:

- Trastornos del desarrollo, por ejemplo, parálisis cerebral, dispraxia verbal del desarrollo, trastorno del espectro autista (TEA), trastorno del desarrollo del lenguaje (TLD), retraso global.
- Trastornos adquiridos, por ejemplo, accidente cardiovascular (ACV/accidente cerebrovascular), demencia, lesión cerebral traumática/adquirida (LCT/LCA)

También puede ser utilizado por personas con requisitos de acceso complejos en ausencia de dificultades de comunicación para el control de la computadora, el control ambiental y la comunicación no cara a cara, por ejemplo, incluyendo, entre otros, personas con:

- Lesión de la médula espinal
- Enfermedad neuromuscular degenerativa (p. ej., muscular distrofia, atrofia muscular espinal)

Entorno previsto

Se puede utilizar en diversos entornos en los que la persona probablemente desee utilizarlo para el fin previsto. Estos entornos pueden incluir, entre otros:

- viviendas particulares
- viviendas con apoyo
- centros de atención de enfermería
- escuelas, colegios, universidades
- en la comunidad, por ejemplo, tiendas, restaurantes

Contraindicaciones, advertencias y precauciones importantes

Aunque está diseñado para ayudar con la comunicación expresiva, debe usarse en combinación con una variedad de métodos de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) y, por lo tanto, no debe confiarse en él de forma aislada para permitir que una persona se comunique de manera expresiva.

Otros métodos de CAA pueden incluir el uso de sistemas basados en papel, lenguaje de señas o el uso de marcos para señalar con la mirada.

A pesar de esto, se reconoce que las personas con dificultades de comunicación y/o acceso dependerán en gran medida de un VOCA (en este caso Talk Pad) para comunicarse dada la mejora significativa en la comunicación expresiva que a menudo aporta un VOCA.

Aunque está diseñado y fabricado para ser extremadamente robusto y confiable, es posible que pierda su funcionalidad debido a cortes de energía u otros problemas técnicos. Por esta razón, no debería:

- utilizarse como dispositivo de soporte vital.
- ser confiable para el bienestar.
- ser considerado como la única forma que tiene el usuario de hacer una llamada de emergencia o una alarma.
- utilizarse para administrar medicamentos.
- ser considerado como el único método de interacción con CE dispositivos.

Tampoco se pretende proporcionar información que se utilice para tomar decisiones con fines diagnósticos o terapéuticos.

Cuando el dispositivo funciona con otros equipos, puede haber interferencias entre el dispositivo y el equipo conectado. Por esta razón, no se debe utilizar Talk Pad:

- en un entorno de resonancia magnética.
- en un entorno de rayos X
- en un entorno militar.
- en un entorno de RF hostil.

Cómo evitar daños auditivos

Usar auriculares y altavoces a un volumen alto puede causar pérdida auditiva permanente. Mantenga siempre el volumen de su dispositivo a un nivel seguro.

Durabilidad

Su Talk Pad es resistente y robusto, pero debe manipularse con cuidado al transportarlo. Ha sido probado contra caídas desde un metro. Tenga en cuenta que esto no incluye accesorios.

Agua y líquidos

Su dispositivo no está protegido contra la entrada de agua. Evite que entre agua u otros líquidos en el dispositivo, especialmente en los puertos y las rejillas de ventilación.

Incidentes

Si ocurre un incidente grave en relación con el dispositivo, informe a Smartbox (repairs@thinksmartbox.com) y a la autoridad competente de su estado miembro.

Contacto con el usuario

Tocar la superficie del dispositivo con la piel lastimada puede agravar la herida.

Los bebés o los grupos de alto riesgo no deben tocar la superficie del dispositivo si existe el riesgo de quemarse la piel.

Fuente de alimentación y baterías

Su Talk Pad contiene una batería recargable de iones de litio. Todas las baterías recargables se degradan con el tiempo. El tiempo de uso de un Grid Pad después de una carga completa puede acortarse con el tiempo.

Para un rendimiento óptimo, su Talk Pad no debe cargarse a temperaturas extremas, inferiores a 0 °C ni superiores a 45 °C. A estas temperaturas, la batería se cargará lentamente o no se cargará.

No exponga su Talk Pad al fuego ni a temperaturas superiores a 90 °C ya que estas condiciones pueden provocar que la batería funcione mal, se incendie o explote.

Cargue su Talk Pad únicamente con el cable de alimentación incluido. Usar fuentes de alimentación no oficiales puede causar daños graves a su Talk Pad e incluso provocar un incendio. Si el cable de alimentación de su Talk Pad se pierde o se daña, contacte con su proveedor.

Cuando la batería de su Talk Pad se agote y el dispositivo no esté conectado a una fuente de alimentación, se apagará automáticamente para evitar dañar la batería y el hardware. El sistema operativo intentará hacerlo de la forma más segura posible; sin embargo, se recomienda conectar el cable de alimentación antes de que su Talk Pad se apague.

La batería de su Talk Pad está sujeta a normativas de envío. Consulte con su servicio postal o mensajería antes del envío para garantizar una entrega segura de su dispositivo.

No coloque el dispositivo en un lugar donde el adaptador de corriente

El enchufe es difícil de desconectar de la toma.

Sólo nuestro personal autorizado podrá reemplazar la batería.

De lo contrario, podrían producirse lesiones personales o daños al equipo.

No realice tareas de mantenimiento ni reparación en el dispositivo mientras esté en funcionamiento. Asegúrese de apagarlo y desconectar todos los cables antes de iniciar cualquier tarea de mantenimiento o reparación.

Cómo transportar su Talk Pad

Cuando esté en tránsito, asegúrese de que su Talk Pad esté suficientemente protegido contra golpes y sacudidas.

Existen regulaciones estrictas para las baterías de iones de litio en los aviones. Las reglas varían según la aerolínea, por lo que se recomienda contactar a su aerolínea antes de viajar.

Temperatura

No bloquee las rejillas de ventilación.

Asegúrese de apagar el dispositivo antes de guardarlo o colocarlo en una bolsa.

Si se utiliza en temperaturas altas o bajo la luz solar directa, el Talk Pad podría alcanzar temperaturas que activen el apagado automático. Esta función de seguridad evita daños permanentes al dispositivo. Si esto ocurre, espere a que se enfríe antes de reiniciarlo.

Montaje

Al montar su Talk Pad, siga las instrucciones del manual del fabricante tanto del Talk Pad como del sistema de montaje. Si bien hemos tomado todas las precauciones para que este proceso sea fácil y seguro, es su responsabilidad garantizar que el dispositivo se monte de forma segura.

Utilice la solución de montaje dual Daessy y Rehadapt (se vende por separado). Asegúrese de que el sistema de montaje seleccionado se ajuste a sus necesidades y realice un análisis de riesgos si es necesario.

Puertos y conexiones

Los accesorios conectados a los puertos para una ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL deben cumplir con la norma IEC 60601-1 o 60950-1/62368-1.

Otra seguridad

Si se daña, podrían desprenderse piezas pequeñas del Talk Pad. Estas pueden representar un peligro de asfixia. Se recomienda supervisar a los niños pequeños y a las personas con discapacidades cognitivas cuando utilicen el dispositivo. También deben ser supervisados al desembalar el dispositivo, ya que el embalaje puede presentar un peligro de asfixia.

Talk Pad no es estéril. No lo utilice con heridas abiertas ni mientras esté sometido a tratamientos médicos invasivos.

El Talk Pad incluye un cable de alimentación y puede utilizarse con accesorios con cable. Estos pueden presentar peligro de estrangulación.

Advertencia sobre la epilepsia

Algunas personas con epilepsia fotosensible son propensas a sufrir convulsiones al exponerse a ciertas luces o patrones de luz. Si siente náuseas o se siente extraño al usar su Talk Pad, especialmente si lo usa con una cámara de mirada, aléjese del dispositivo y consulte a un profesional médico.

Garantía

Su Talk Pad está cubierto por la garantía estándar de 2 años desde el momento de la compra.

Reparaciones y mantenimiento

Su Talk Pad no es un dispositivo que el usuario pueda reparar. Si necesita reparación, póngase en contacto con su distribuidor local.

Interferencia de dispositivos médicos

El iPad contiene imanes que pueden interferir con dispositivos médicos. Consulte a su médico y al fabricante de su dispositivo médico para obtener información específica sobre su dispositivo y si necesita mantener una distancia segura entre su dispositivo y el iPad o alguno de sus accesorios. Si sospecha que el iPad interfiere con su dispositivo médico, deje de usarlo.

Riesgo de estrangulamiento

Su Talk Pad incluye una correa. Si existe riesgo de estrangulamiento, no la use.

Solución de problemas y atención al cliente

En la mayoría de los casos, reiniciar el dispositivo solucionará cualquier problema. Para reiniciarlo, mantén presionado el botón de encendido y selecciona "Apagar". Si el dispositivo se bloquea, mantén presionado el botón de encendido durante más de 30 segundos para apagarlo por completo. Presiónalo de nuevo para volver a encenderlo.

Si esto no soluciona el problema, comuníquese con el soporte técnico en:
thinksmartbox.com/soporte-inteligente

Tenga a mano el número de serie. Lo encontrará debajo del soporte de su dispositivo.

Declaración UE/CE

Por la presente, Smartbox Assistive Technology Ltd. declara que este producto cumple con el Reglamento UE 2017/745 sobre dispositivos médicos, 2014/53/EU RED y 2011/65/EU ROHS.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible aquí:
thinksmartbox.com/talk-pad-DOC

Normas aplicables

Se ha aplicado a Talk Pad la norma ISO 14971:2012 Aplicación de la gestión de riesgos a dispositivos médicos.

Las siguientes normas de "equipos de tecnología de la información" se han aplicado al iPad y a su funda. Esto refleja los riesgos del dispositivo cuando se utiliza según lo previsto y el nivel de controles regulatorios necesarios para garantizar una seguridad y eficacia razonables.

Si su uso, usuario o entorno requieren un mayor nivel de control, la gama Smartbox Grid Pad puede ser una mejor opción para usted.

Los estándares de equipos electromédicos se han aplicado a la gama Grid Pad.

Componente	Altavoz (Lenovo LX001)	iPads de 12,9" (Manzana A1895)	iPads de 7,9" y 10,2" (Apple A2200, A2198, A2199)
Legislación	2014/35/UE LVD 2014/53/CE ROJO 2011/65/UE ROHS	2009/125/CE ECO 2014/53/UE ROJO 2011/65/UE ROHS	2009/125/CE ECO 2014/53/UE ROJO 2011/65/UE ROHS
Normas de seguridad	EN 60950-1:2006+A1: 2010+A11:2009+A12:2 011+A2:2013	EN 60950-1:2006+A1: 2010+A11:2009+A12:2 011+A2:2013 EN 50566:2017 EN 50665:2017	EN 60950-1:2006+A1: 2010+A11:2009+A12:2 011+A2:2013 EN 50566:2017
Estándares EMC	EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 300 328 V2.1.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.0	EN 301 489-1 V2.2.0 EN 303 417 V1.1.1 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.0 EN 301 489-52 V1.1.0 EN 300 328 V2.1.1 EN 301 893 V2.1.1 EN 300 440 V2.1.1 EN 301 511 V12.5.1 EN 301 908-1 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 303 413 V1.1.1	EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-17 V3.2.0 EN 301 489-19 V2.1.1 EN 301 489-52 V1.1.0 EN 301 511 V12.5.1 EN 301 908-1 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1_11.1.9 EN 300 328 V2.1.1 / V2.2.1 EN 300 440 V2.1.1 / V2.2.1 EN 303 413 V1.1.1
Otras normas	RoHS EN 50581:2012 CE 278/2009	RoHS EN 50581:2012 ENERGÍA: Reglamento 1275/2008	RoHS EN 50581:2012

Cumplimiento de la FCC y la ISED de Canadá

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC y las normas RSS exentas de licencia de ISED Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Notas



Saca más partido a tu Talk Pad

Descubra consejos de edición y configuraciones avanzadas en nuestro centro de capacitación en línea

thinksmartbox.com/aprender-en-casa

Talk Pad 8, 10 y 13
Inglés
Septiembre de 2020

Derechos de autor 2020 Smartbox Assistive Technology
thinksmartbox.com 92