


Stealth Products®



Espaldas y
Apoyo

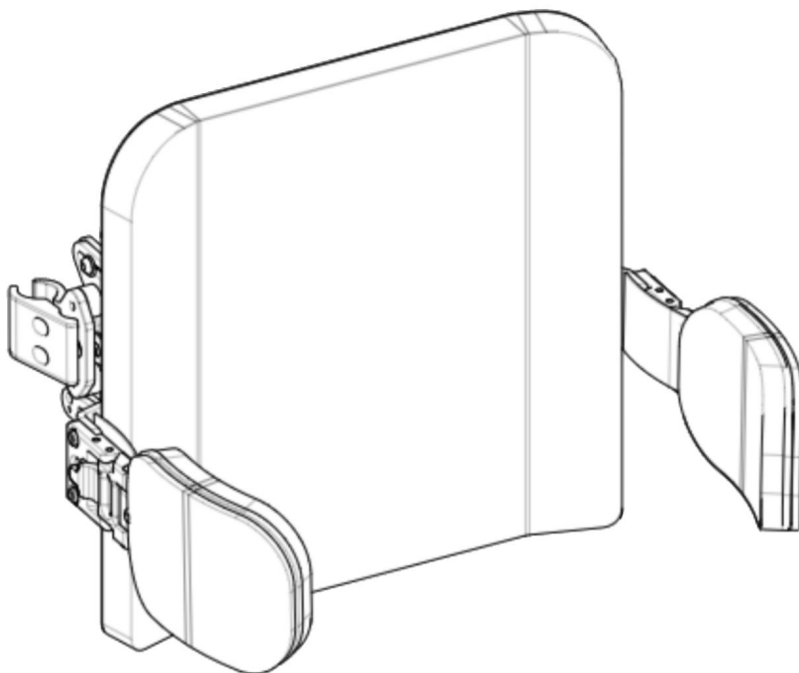

TFB

Verdadera formación de la espalda

Manual del propietario - Guía de mantenimiento

Verdadera formación de la espalda

Tabla de contenido

Satisfacción del cliente	i	Información
importante.....	ii-iii	
Garantía	ii	
Referencia del proveedor.....	ii	Etiquetas
de advertencia.....	iii	Responsabilidad
limitada.....	iii	
Pruebas.....	iii	
Diseño y función.....	1	Uso
previsto.....	1	
Características.....	1	
Montaje.....	1	
Características.....	2-4	
Desglose de piezas y accesorios	2	Dimensiones
de la carcasa	2	
Piezas de hardware.....	3	
Respaldo y laterales TFB	4	
Instrucciones de instalación	5-7	
Preparaciones	5	
Herramientas	5	
Plan de instalación	5	
Herramientas necesarias	5	
Instalación de los laterales	6	
Instalación de los cojines en los laterales	7	Primer
uso	8	Asistencia del
distribuidor	8	Pruebas de
usuario	8	Condiciones
de uso	8	
Mantenimiento	9	
Limpieza	9	
Desinfección	9	
Mantenimiento	9	
Notas	10	

Stealth Products se compromete a garantizar la satisfacción del cliente al 100 %. Su satisfacción total es importante para nosotros. Comuníquese con nosotros para enviarnos comentarios o sugerencias que nos ayuden a mejorar la calidad y la facilidad de uso de nuestros productos.

Puede comunicarse con nosotros en:



Productos Stealth, LLC

104 John Kelly Drive, Burnet, Texas 78611

Teléfono: (512) 715-9995

Teléfono: (512) 715-9954

Línea gratuita: (800) 965-9229

Línea gratuita: (800) 806-1225

info@stealthproducts.com

www.stealthproducts.com



EC REP MDSS GmbH Paso de barco 41 30175 Hanover Alemania	CH REP SODIMED SA Camino Praz Devant 12 1032 Romanel-sur-Lausanne Suiza	Representante autorizado en el Reino Unido MDSS-Reino Unido RP 6 Wilmslow Road, Rusholme Mánchester M14 5TP Reino Unido
---	---	---

General

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar el producto. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias de este documento puede provocar daños materiales, lesiones o la muerte. El uso indebido del producto o el incumplimiento de las instrucciones anularán la garantía.

Interrumpa inmediatamente el uso si alguna función se ve comprometida, si faltan piezas o están sueltas, o si algún componente muestra signos de desgaste excesivo. Consulte con su proveedor para realizar reparaciones, ajustes o reemplazos.

Todas las personas responsables de la instalación, el ajuste y el uso diario de los dispositivos mencionados en estas instrucciones deben conocer y comprender todos los aspectos de seguridad de los dispositivos mencionados. Para que nuestros productos se utilicen correctamente, debe leer y comprender todas las instrucciones y advertencias, y realizar el mantenimiento de nuestros productos de acuerdo con nuestras instrucciones de cuidado y mantenimiento.

Las instrucciones de instalación le guiarán a través de las opciones y posibilidades de este producto.

Las instrucciones están escritas con la intención expresa de utilizarse con configuraciones estándar.

También contienen información importante sobre seguridad y mantenimiento, y describen posibles problemas que pueden surgir durante el uso. Para obtener más ayuda o aplicaciones más avanzadas, comuníquese con su proveedor o con Stealth Products al (512) 715-9995 o al número gratuito (800) 965-9229.

Guarde siempre las instrucciones de funcionamiento en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario.

Toda la información, imágenes, ilustraciones y especificaciones se basan en la información del producto que estaba disponible en el momento de la impresión. Las imágenes e ilustraciones que se muestran en estas instrucciones son ejemplos representativos y no pretenden ser representaciones exactas de las distintas partes del producto.

Información importante



PRECAUCIÓN

Estos productos están diseñados para ser ajustados, aplicados e instalados exclusivamente por un profesional sanitario capacitado para estos fines. La colocación, aplicación e instalación por parte de una persona no calificada podría provocar lesiones graves.

Garantía

Nuestros productos están diseñados, fabricados y producidos según los más altos estándares. Si se encuentra algún defecto en el material o en la mano de obra, Stealth Products reparará o reemplazará el producto a nuestra discreción. Cualquier garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado, no se extenderá más allá de la duración de esta garantía. Stealth Products no garantiza los daños causados por, entre otros, el mal uso, abuso o aplicación incorrecta del producto y/o la modificación del producto sin la aprobación por escrito de Stealth Products, LLC. Cualquier alteración o falta de número de serie, cuando corresponda, anulará automáticamente toda la garantía.

Stealth Products, LLC es responsable únicamente de las piezas de repuesto. Stealth Products, LLC no es responsable de los costos de mano de obra en los que se incurra.

Stealth Products ofrece garantía contra fallas debido a materiales o mano de obra defectuosos:

Cubre: 2 años
Hardware: 5 años
Electrónica: 3 años

En caso de una falla del producto cubierta por nuestra garantía, siga los procedimientos que se detallan a continuación:

Llame a Stealth Products al (512) 715-9995 o al número gratuito (800) 965-9229.

Solicite un formulario de Autorización de Devolución (RA) al Departamento de Devoluciones y siga las instrucciones de la documentación.

Puede descargar copias adicionales de este manual accediendo al sitio web de Stealth (<https://stlpro.site/stealth-docs>) y buscando "True Forming Back" en la barra de búsqueda en la parte superior de la página.

Referencia del proveedor

Proveedor:	
Teléfono:	
DIRECCIÓN:	
Fecha de compra:	
Modelo:	

Etiquetas de advertencia Las

advertencias se incluyen para la seguridad del usuario, el cliente, el operador y la propiedad.

Lea y comprenda lo que significan las palabras de señal PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN, AVISO y SEGURIDAD , y cómo podrían afectar al usuario, a quienes lo rodean y a la propiedad.

 PELIGRO	Identifica una situación inminente que, si no se evita, puede provocar lesiones graves, muerte y daños a la propiedad.
 ADVERTENCIA	Identifica una situación potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones graves, muerte y daños a la propiedad.
 PRECAUCIÓN	Identifica una situación potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones menores a moderadas y daños a la propiedad.
AVISO	Identifica información importante no relacionada con lesiones, sino con posibles daños a la propiedad.
SEGURIDAD	Indica pasos o instrucciones para prácticas seguras, recordatorios de procedimientos seguros o equipos de seguridad importantes que pueden ser necesarios.

Responsabilidad limitada

Stealth Products, LLC no acepta ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad que puedan surgir del incumplimiento por parte del usuario u otras personas de seguir las recomendaciones, advertencias e instrucciones de este manual.

Stealth Products no se hace responsable de la integración final del ensamblaje final del producto para el usuario final. Stealth Products no se hace responsable de la muerte o lesiones del usuario.

La

configuración inicial y la conducción deben realizarse en un área abierta libre de obstáculos hasta que el usuario sea completamente capaz de conducir con seguridad.

Uso previsto

El respaldo True Forming Back, o TFB, se ha creado para brindar una comodidad extrema, opciones de personalización incomparables y una capacidad de ajuste sin problemas. El hardware es duradero, de fácil acceso y está oculto con un cierre de velcro en la parte posterior para lograr un aspecto limpio y elegante.

La carcasa rígida de aluminio, combinada con una doble capa de espuma suave y de apoyo y un material de cubierta flexible, proporciona una superficie óptima que se adapta a los contornos de la espalda y la parte superior del torso del usuario. Esto ayuda a mantener la posición adecuada de la pelvis, la espalda y el torso.

Características

Las características del TFB son:

- Ajustes de profundidad y ancho; • Ajuste de ángulo sin pérdida de profundidad del asiento; • Los laterales abatibles con botón ayudan con las transferencias desde la silla; • Bordes lisos y terminados en todas las partes; y, Capacidad de ajuste total para satisfacer las necesidades de
 - casi cualquier cliente.

Montaje

El hardware de montaje TFB se puede instalar en casi cualquier silla que utilice bastones o tubos. El respaldo del asiento TFB está diseñado para ser desmontable y proporciona ajustes adicionales de ancho, ángulo y profundidad según sea necesario. El TFB puede adaptarse a muchos tipos de sistemas de cinturón de posicionamiento y múltiples reposacabezas, incluidos los de la serie TWB480 y HMO. Funciona con hardware de montaje J&L, de liberación rápida de 2 puntos, con perilla ajustable multiuso o Trouble Free. También se admiten configuraciones laterales de dos y cuatro alas.

SEGURIDAD

Revise siempre todos los accesorios de montaje, asegurándose de que cada sujetador esté correctamente apretado antes de usar el soporte posterior.

AVISO

La alteración de la parte posterior de cualquier manera y/o una instalación incorrecta anulará la garantía.



ADVERTENCIA

Límite de peso del usuario 250 lb (113,40 kg)

Desglose de piezas y accesorios

Un paquete TFB típico contendrá los siguientes elementos:

1. Atrás

Compuesto por una carcasa rígida de aluminio (modelos Linear, Contour o Flex) con una Doble capa de espuma suave y de apoyo y un material de cubierta flexible de neopreno, Airmesh o Coolcore®. También está disponible la opción de espuma in situ.

2. Hardware de montaje

Ya sea J&L, liberación rápida, perilla ajustable para todo uso o sin problemas
Kit de montaje para fijar la espalda a los postes traseros (bastones).

3. Alas laterales

El kit incluye uno o dos pares de aletas laterales. Las aletas se instalan a los lados del caparazón y brindan soporte torácico. Las alas están articuladas, o tipo abatible, que permite transferencias más fáciles hacia y desde la silla.

AVISO

Consulte el Manual de hardware de TFB para conocer las piezas y Sección de accesorios del hardware elegido para tu TFB Back.


Dimensiones de la carcasa

Parte posterior lineal "R"	
Ancho	Altura
10"	10"-14"
12"	12"-16"
14"	14"-18"
16"	16"-20"
18"	16"-20"
20"	16"-20"

"I" lineal atrás	
Ancho	Altura
10"	10"-14"
12"	12"-16"
14"	14"-18"
16"	16"-20"
18"	16"-20"
20"	16"-20"

Contorno y flexión de la espalda	
Ancho	Altura
10"	10"-22"
11"	
12"	
13"	
14"	
15"	
16"	
17"	
18"	
19"	
20"	
21"	
22"	
23"	
24"	



Piezas de hardware

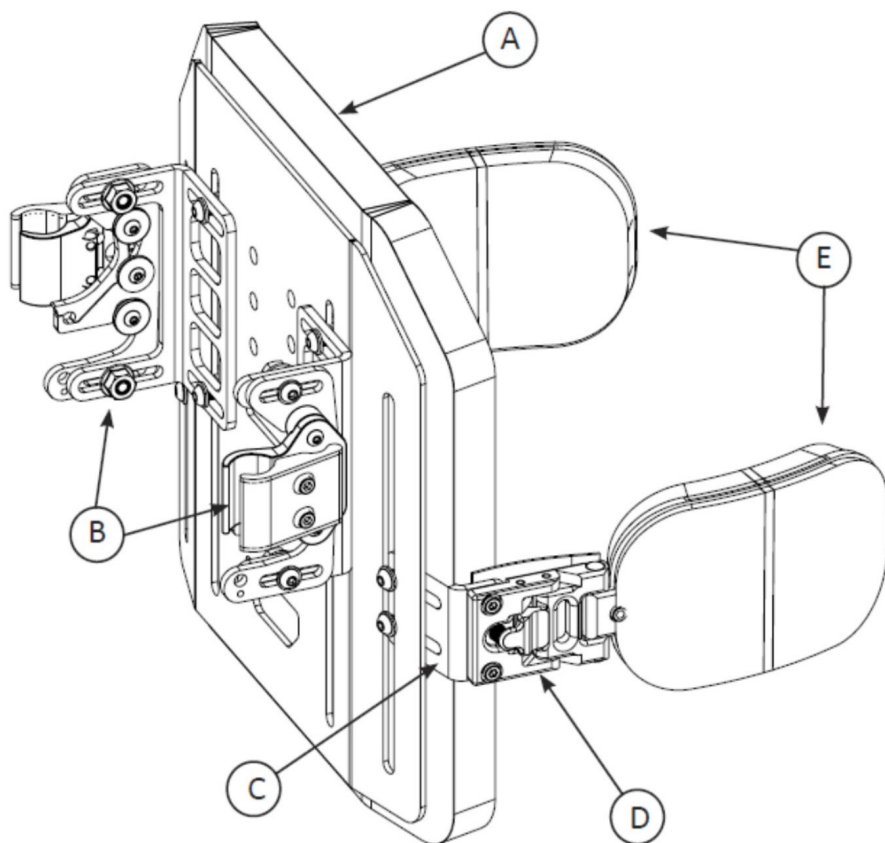

Artículo	Descripción		Cantidad
A	Atrás*	Carcasa trasera y cojín	1
B	Kit de herrajes*	Soporte de montaje	2
do	Soporte lateral*	Soporte lateral	2
D	Lateral*	Ala lateral	2
mi	Cojín de apoyo*	Cojín lateral y funda	2

* Se muestran los herrajes de montaje R-Back, Quick Release y TWBL lateral. El herraje real incluido con su kit Varían según las opciones elegidas. Las instrucciones para el montaje y la instalación de la silla se encuentran en el Manual de hardware de montaje incluido con su kit.

Respaldo y laterales TFB

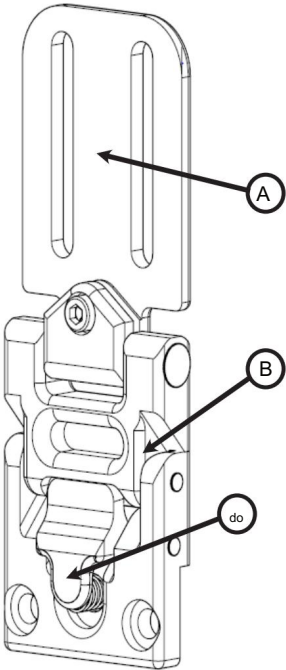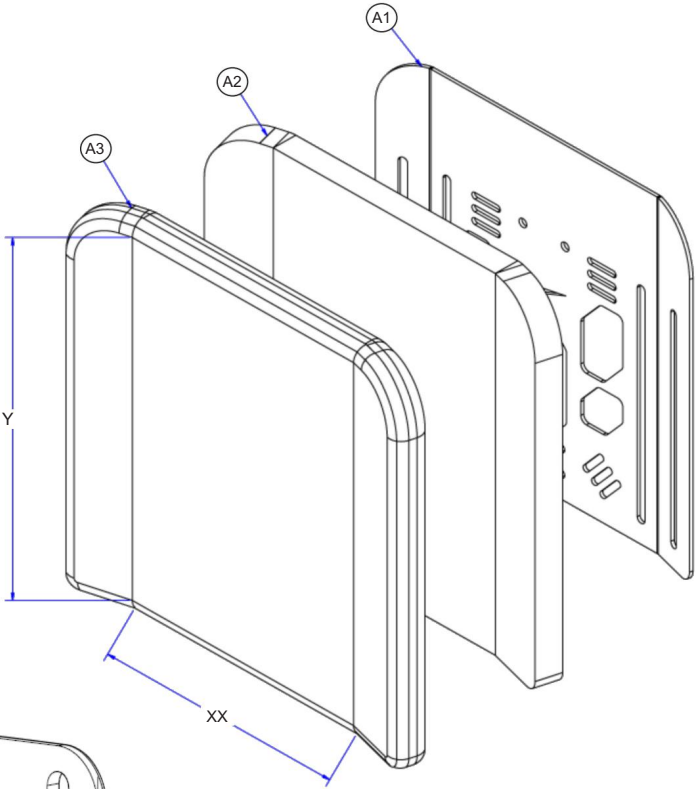

Artículo	Descripción	Cantidad
A1 TFB ~~SH~~ XXYYR*	Carcasa	1
A2 TFBF0XXYYR*	Espuma	1
A3 FBC0XXYYR*	Cubrir	1

* Ancho XX por alto YY. Aquí se muestra la carcasa trasera R. Su carcasa puede ser diferente según el modelo y Opciones elegidas.

Artículo	
A	Montaje de almohadilla
B	Herrajes abatibles
do	Botón de liberación rápida

Nota: El diseño lateral puede ser ligeramente diferente. Dependiendo del modelo elegido, se muestra un TWBL, pero muchos de los laterales tendrán el mismo Componentes.

Instrucciones de instalación

Preparativos

Sólo un técnico de servicio calificado puede instalar la parte posterior del TFB y sus accesorios.



ADVERTENCIA

Una instalación incorrecta del TFB y sus accesorios puede provocar daños al hardware y/o lesiones al usuario.

Herramientas

Utilice las herramientas adecuadas para instalar y ajustar el TFB a la posición deseada. usuario.



PRECAUCIÓN

El uso de herramientas inadecuadas puede provocar daños al dispositivo. Cualquier conexión debe asegurarse siempre con todos los tornillos suministrados. Utilice únicamente los tornillos incluidos en el paquete.

Plan de instalación


Prepare un plan de instalación antes de comenzar la instalación. Este plan debe tener en cuenta lo siguiente:

- Dónde se colocará el TFB, así como los laterales y soportes aplicables. cojines;
- Cómo se operará el TFB: las funciones de liberación rápida para el soporte y laterales; y, •

Dejar suficiente espacio libre para otros accesorios y herrajes.

Herramientas necesarias

Las herramientas necesarias para completar la instalación lateral son las siguientes:

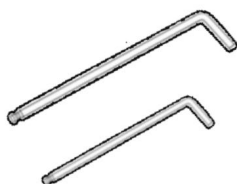

Hardware	Descripción
Llave hexagonal de 5/32"	Montaje lateral
Llave hexagonal de 1/8"	Montaje de cojín lateral; Tornillo de cabeza hueca en el lateral
Llave hexagonal de 4 mm	Tornillos de cabeza abombada en el soporte lateral

No se proporcionan herramientas. Consulte los manuales incluidos con los accesorios adicionales para obtener información sobre las herramientas adicionales necesarias para su instalación.


Instalación de los laterales

Paso uno: Coloque la tuerca del riel lateral (A) en la ranura del soporte lateral de 125° (B).

Paso dos: Deslice el soporte lateral de 125° (B) entre la carcasa de aluminio (C) y el respaldo cubierto de espuma (D). Una vez que el soporte esté en la posición correcta, use los dos tornillos de cabeza redonda M6x1x12mm (E1), cada uno con una arandela de 1/4" (E2), para asegurar el soporte en su lugar. La profundidad a la que se coloca el soporte se puede ajustar para cambiar la colocación horizontal del lateral a la posición adecuada para el usuario. La alineación vertical del soporte se puede ajustar en cualquier lugar a lo largo del riel del respaldo.


Paso tres: use los dos tornillos de cabeza redondeada de 1/4-20 x 3/8" (F) para asegurar el lateral (G) al soporte.

Paso cuatro: repita los pasos 1 a 3 para montar cada lateral adicional.

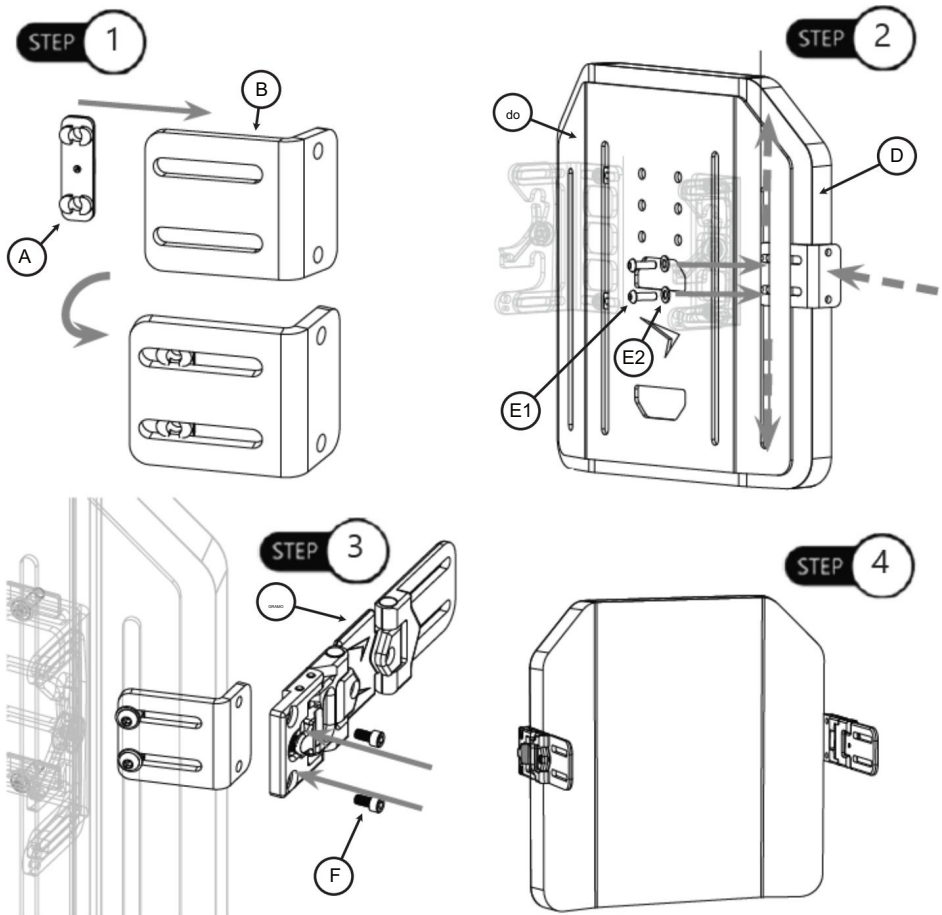


Instalación del cojín en los laterales


Paso uno: Deslice el cojín (A) sobre el lateral (B) usando la solapa en la parte posterior de la funda del cojín. Alinee los orificios en la placa metálica curva del cojín con el riel en el soporte del cojín lateral. La posición del cojín se puede ajustar alineándolo en cualquier lugar del riel lateral.

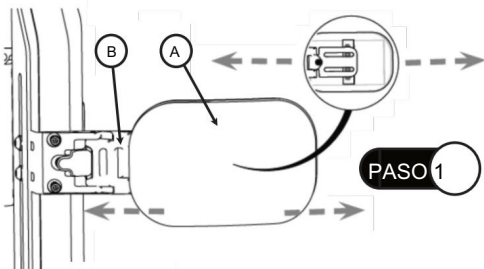

Paso dos: Con el cojín en el lugar correcto, use los dos tornillos de cabeza redondeada n.º 10-32 x 5/8" (C), cada uno con una arandela de seguridad dentada externa n.º 10 (D) para asegurar el cojín en su lugar.


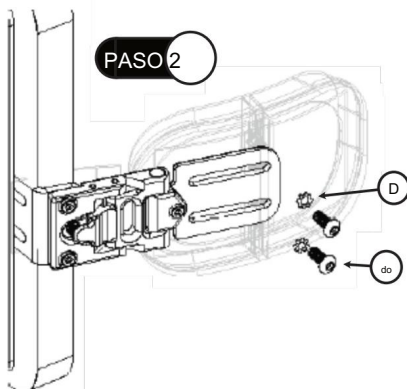


Paso tres: repita los pasos 1 y 2 para montar cada cojín adicional en cada lateral adicional.

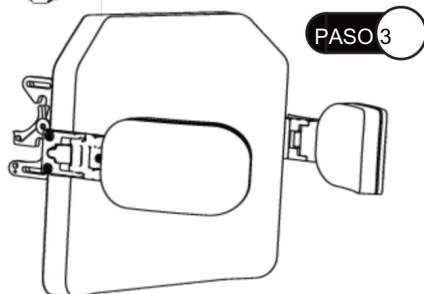

Ajuste lateral

Para ajustar el ángulo del herraje lateral, utilice una manija en T de 1/8" en el tornillo de cabeza hueca de 10-32 x 3/8" (E). Afloje el tornillo, ajústelo a la posición óptima para el usuario y apriételo firmemente para fijarlo en su lugar.

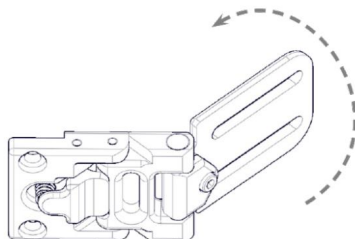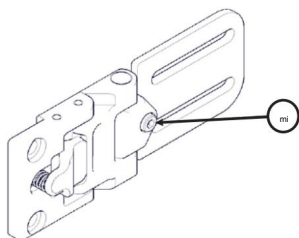

Asistencia del concesionario

Durante el primer uso por parte del cliente, se recomienda que el distribuidor o el técnico de servicio ayude y explique la configuración al cliente (el usuario y/o el asistente). Si es necesario, el distribuidor puede realizar los ajustes finales.

Pruebas de usuario

Es importante que el cliente conozca perfectamente la instalación, cómo utilizarla y qué puede ajustar para conseguir la máxima movilidad posible. Como distribuidor, proceda de la siguiente manera:

- Explicar y mostrar al cliente cómo ha ejecutado la instalación y explicar el funcionamiento.

Haga que el usuario pruebe la posición del TFB:

- ¿Está el hardware en la posición adecuada para el cliente? •
- ¿Puede el usuario operar todos los controles de manera segura con el mínimo esfuerzo?

Si es necesario, realice ajustes en la posición.

Explicar al cliente los posibles problemas y cómo solucionarlos.

Condiciones de uso

El TFB está diseñado para usarse tal como lo instala el distribuidor, de acuerdo con las instrucciones de instalación de este manual.

- Las condiciones de uso previstas son comunicadas por el concesionario o técnico de servicio al usuario y/o asistente durante el primer uso.
- Si las condiciones de uso cambian significativamente, comuníquese con su distribuidor o con un técnico de servicio calificado para evitar un desgaste excesivo o daños no deseados.

Limpieza

- Utilice un paño suave para limpiar la carcasa trasera. •

Asegúrese de que todos los limpiadores estén aprobados para superficies de acero, aluminio, plástico y tapizadas con acabado. • Lave a mano la

cubierta de la almohadilla de espuma con agua jabonosa suave o detergente, enjuague bien y y dejar secar. •

La almohadilla de espuma NO debe mojarse. • Se

puede utilizar un cepillo con agua y jabón para eliminar la suciedad y los residuos que puedan quedar.

Puede quedar atrapado en los dientes de la cremallera.



ADVERTENCIA

NO sumerja la espuma en agua.

NO usar blanqueador. NO secar en secadora. NO planchar.

NO lave a mano con temperaturas de agua superiores a 160 °F (70 °C).

Para lavar las cubiertas de los laterales: • Retire

la almohadilla/cubierta del lateral; y, • Lave a máquina con agua fría en ciclo delicado y seque al aire.

Las instrucciones para el cuidado de la tela se pueden encontrar en las fundas de los cojines y la espalda.



PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al retirar la parte posterior para evitar perforaciones, desgarros u otros daños en la tela o la espuma.

Tenga cuidado de no atrapar cabellos, cables u otros elementos al abrir y cerrar las cremalleras de las fundas.

Desinfección

- Limpie suavemente con un paño humedecido con un desinfectante doméstico. • Deje que la espuma se seque al aire por completo.

Mantenimiento

Estas instrucciones de cuidado y pautas mantendrán el hardware y las cubiertas en buenas condiciones durante un período de tiempo más largo y evitarán daños.

- Revise y ajuste todos los sujetadores periódicamente. No apriete demasiado los tornillos. sujetadores.

- Revise las almohadillas y cubiertas para detectar posibles averías. • Repare o reemplace las piezas según sea

- necesario. • Retire con cuidado el polvo y la suciedad de los herrajes con un paño húmedo según sea necesario.



© 2021, Productos Stealth, LLC

Información de garantía



Página de inicio



Manual de usuario en línea

