



Garantía
2 AÑOS

PESO MÁX.
USUARIO
25 KG.

PESO DE
EQUIPO
17 KG.

BIPEDESTADOR CAT I

Detalle técnico:


Sistema de bipedestación CAT I tipo prono, fabricado en madera multilaminada. Ajuste en plano de apoyo de 25° a 85°. Mesa ajustable en inclinación con acolchado desmontable y cubeta porta objetos. Base con cuatro ruedas de giro libre y freno. Sistema de reclinación en prono asistido con pistón a gas. Cuñas laterales con sujeciones para el tronco y la pelvis regulables. Apoya pies ajustable en altura con straps para control y estabilización de la articulación de tobillo. Realizado con materiales ecológicos.



*Mesa con
Porta objetos*



*Soporte de
Tronco y pelvis*

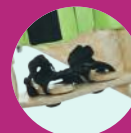

Apoyapies



*Sistema de
Reclinación*

Talles

Altura del paciente

XS

0.70 a 1.00 mts.

