

**Garantía**

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en pistones

**PESO MÁX.
USUARIO**
45 KG.

Talle S

**PESO DE
EQUIPO**
25 KG.

Talle XS

Talles

Altura del paciente



S

0.91 a 1.37 mts.



XS

0.71 a 1.02 mts.

BIPEDESTADOR BANTAM

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación progresivo desde la posición de sentado o acostado. Estructura de acero en caño tubular, con 4 ruedas con banda de goma, 2 de ellas de giro libre, con horquilla plástica y freno. Pistón hidráulico activado desde pedal para variar las posiciones. Dispositivo indicador de ángulo, para medir el rango articular en el momento del parado. Apoya pies independientes regulables en profundidad, altura, flexión dorsal y plantar. Rodilleras regulables en profundidad, altura e inclinación. Respaldo y asiento anatómicos revestidos con fundas de neoprene. Mesa plástica inyectada con portaobjetos, desmontable y regulable en inclinación, altura y profundidad, con pad anterior de apoyo torácico. Posiciones de uso: Sentado (90° cadera / 90° rodilla), posición de supino y posición vertical.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Apoyacabeza



Soporte de Tronco



Tobilleras




Cinturón pélvico



Arnes de piernas



Respaldo plano
d/controles
(incluido en talle S)

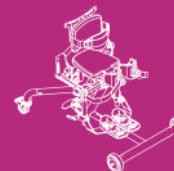

ANCHO

62 CM

PROFUNDIDAD

93 CM