



## RESPALDO MAKI HIGH

### Detalle técnico:


Respaldo extensible envolvente de aluminio modular de contorno suave y personalizable. Alas ajustables en altura, ancho (7,5cm) y ángulo. Estructura posterior preparada para crecer 5 cm de altura en el talle más chico y 10 cm de altura en el resto de los talles, e incorporar apoya cabeza y strap secundarios. Hardware pre-marcado para alineación inicial con desacople rápido, compatible con diferentes dimensiones de tubos (19, 22, 25 mm), ajustable en ángulo, altura y profundidad. Juego de pads laterales rebatibles para estabilización de tronco en la línea media, ajustables en altura y ancho. Sistema de link con eje estriado auto bloqueante.



Rotación de  
controles laterales



Crecimiento de  
10cm

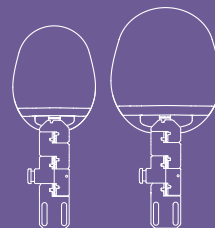

Dos tamaños de control  
lateral acorde al talle

Espacio de anclaje para  
múltiples apoyacabezas

Talles (ancho x alto)

25cm x 30 - 35cm

35cm x 40 - 50cm

30cm x 35 - 45cm

40cm x 45 - 55cm

Anclaje a distintos  
tamaños de tubos

