



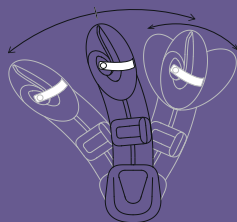


Apoyabrazo DINÁMICO

Detalle técnico:


Soporte ergonómico modular para brazo, cuenta con tres puntos de apoyo (codo, antebrazo y mano). Incorpora un mecanismo de pivote bajo el apoyo del codo que permite una rotación dinámica de 60°, bloqueable en incrementos de 5° para lograr el ángulo de reposo. El bloque de mano flexible permite la flexión natural de los dedos mientras orienta la mano a una posición neutral. Incluye soporte elevado para pulgar y correa acolchada. Los soportes son ajustables en longitud, permitiendo adaptarse con precisión al brazo del usuario.

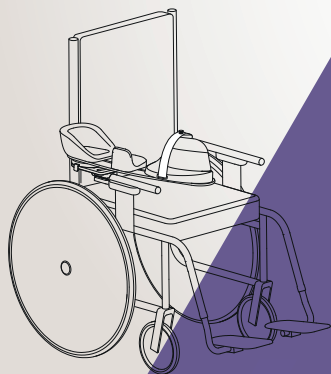

Rotación dinámica de 60°,
bloqueable en incrementos de 5°

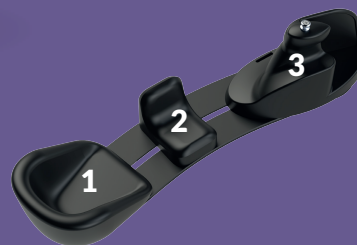

1. Apoyo de codo
2. Apoyo antebrazo
3. Apoyo de mano

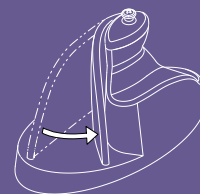

El ángulo de la muñeca se
ajusta para adaptarse a la
posición adecuada.

Talles Longitud del dedo medio

M 10,5 cm - 12 cm

S 8,5 cm - 10,5 cm