




CLASSIC

Respaldo de posicionamiento y confort, con tecnología para ser usada en pacientes con o sin asimetrías incorporadas. Base de aluminio con anclajes de cuatro puntos desmontable, regulable en ángulo y rotación. Block de relleno desmontable con espuma de base y celdas individuales para compensar asimetrías, ajustables a la necesidad del paciente. Funda de tela elástica multidireccional, laterales en tela micro perforada 3D que ayuda a reducir la humedad y la temperatura. **Anchos de respaldo: 25, 30, 35, 40 y 45.**

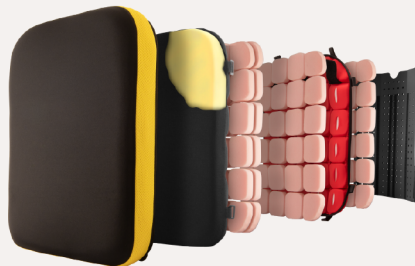

SUPERSHAPE

Respaldo Supershape con sistema de moldeo de 3 capas, colocación de diversas densidades de espumas para generar superficie de contacto y confort, con doble block de relleno desmontable con espuma de base y celdas individuales para compensar asimetrías, ajustable a la necesidad del paciente. Funda de tela elástica en cuatro direcciones y malla transpirable 3D. Base de aluminio con anclajes de cuatro puntos desmontables y regulaciones. **Anchos de respaldo: 25, 30, 35, 40 y 45.**



FORMATO T

Respaldo con celdas independientes de goma espuma personalizable que ofrece mayor soporte en la parte alta de la espalda y hombros. Brinda mayor superficie de contacto y estabilidad en tronco permitiendo mejores movimientos en cabeza y cuello. De fácil acceso y moldeado. Base de aluminio multiperforada con anclajes de cuatro puntos desmontables, regulaciones en ángulo y rotación. Funda de tela elástica multidireccional, laterales en tela micro perforada 3d que ayuda a reducir la humedad y la temperatura. Incluye set de almohadillas y cuñas contorneadas adicionales. **Anchos de respaldo: 25, 30, 35, 40 y 45.**