



PM 2143-1



ORIGEN

Homologación
ISO 13485

Garantía

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en pistones

Garantía

POWER UP 90 días en
baterías, cargadores y
partes eléctricas


Talles

Altura del paciente

M**1.22 a 1.68 mts.**

PESO MÁX. USUARIO
90 KG.

PESO DE EQUIPO
49 KG.

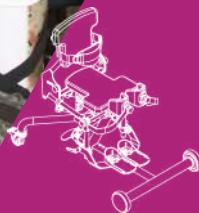

ANCHO

62 CM

PROFUNDIDAD

113 CM

BIPEDESTADOR BANTAM M

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación progresivo desde la posición de sentado o acostado. Estructura de acero de caño tubular, con 4 ruedas y banda de goma, 2 de ellas de giro libre, con horquilla plástica y freno. Dispositivo indicador de ángulo para medir el rango articular en el momento del parado. Caja de comando para la selección de diferentes posiciones. Apoya pies independientes regulables en profundidad, altura, flexión dorsal y plantar. Rodilleras independientes, regulables en altura y profundidad. Ajuste posterior de flexión de cadera. Mesa de plástico inyectada con porta-objetos, regulable en inclinación y profundidad, con pad anterior de apoyo torácico. Pistón hidráulico con palanca para auto bipedestación.

Configurá tu equipo:



Power Up
Lift



Apoyacabeza
izi



Respaldo plano
c/controles



Tobilleras



Arnés de piernas



Apoyacabeza
Ultra QCR



Apoyacabeza



Soporte de
Tronco



Cinturón
pélvico